

3M ESPE

Imprint™ 3 VPS Impression Material

インプリント™ 3 印象材

インプリント™ 3 印象材—ヘビー ボディ/ライト ボディ/レギュラー ボディ


■ヘビー ボディ/ウォッシュによる連合印象—回法



- 1** 既製トレーにトレーアドヒーズを塗布して、5分以上乾燥させます。
アンダーカットがある場合には、通法に従ってブロックアウトします。



- 2** ギラン™ ディispenserカートリッジロック部を上を開き、ヘビー ボディのカートリッジのV字切り込み部を下にして、ギラン™ ディispenserの取り付け部に上からカートリッジを装着します。

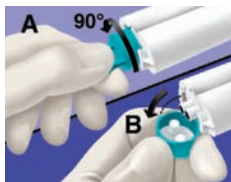


- 3** カートリッジキャップを反時計回りに90°回転させます。これでキャップのロックを外します(図A)。次に図Bのように、下方方向にキャップを外します。



- 4** ベースペーストとキャタリストペーストが均等になるまで、試し出しを行います。




5 ギャラン™-ミキシングチップ(グリーン)のV字型切れ込み部をカートリッジのV字型切れ込み部に合わせます。

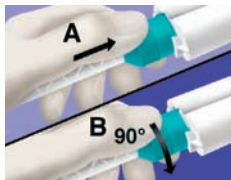


6 ミキシングチップ(グリーン)の色付き部分を持って確実にカートリッジに押し込み(図A)、そのまま時計回りに90°回転させ、ミキシングチップをロックします(図B)。



7 トレーにヘビー ボディを注入します。
操作時間：2分

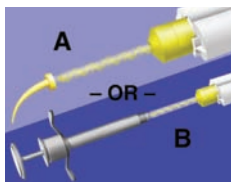


8 同様に口腔内に使用するためのライトボディ(又はレギュラーボディ)印象材を準備します。ギャラン™-口腔内注入チップ(別売)をギャラン™-ミキシングチップ(イエロー)にパチンと音がするまではめ込みます(図A)。既製の印象用シリンジを使用する場合には図Bのようにウォッシュを注入します。

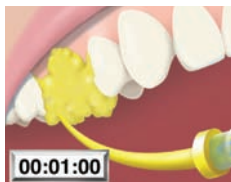

9 ライト ボディ(#10778)又はレギュラーボディ(#10779)を通法に従い形成歯を覆うように流し込みます。
口腔内操作時間：1分



10 形成歯がウォッシュで覆われているのを確認し、トレーを静かに口腔内に入れ、圧接します。

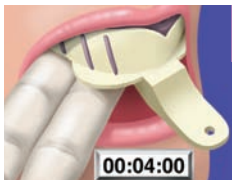

11 トレーを所定の位置に保持します。
口腔内保持時間：4分



12 印象材の硬化を確認して撤去します。水洗乾燥し、消毒します。石こうは、印象採得30分後以降に注入します。

注意

■添付文書の該当箇所を必ず参照してください。

使用上ご留意していただきたい事項

- 1.付加型シリコーン印象材の硬化を阻害する以下の物質との接触を避けてご使用ください。
 - ラテックスグローブ(硫黄化合物を含む)
 - アクリルやメタクリレート残留物(即重レジン、歯面コーティング表面の未重合層)
 - その他
- 2.即重レジンによる印象材の硬化阻害をさけるために、暫間被覆冠を作製する前に、最終印象を行ってください。
- 3.アンダーカットがある場合には、通法に従ってブロックアウトします。

ご使用前に、製品に入っている添付文書を必ずご覧ください。

販売名：インプリント 3 印象材

(3M) (ESPE) (Imprint) (インプリント) (ギャラン) は3M社またはその関連会社の商標です。

スリーエム ヘルスケア株式会社

歯科用製品事業部

本社 〒158-8583 東京都世田谷区玉川台2-33-1

人がいる。夢がある。

3M