



Biologische Indicator 3M™ Attest™ Rapid Read-out.

Oplossingen voor de Monitoring van Waterstofperoxide-sterilisatie

Efficiëntie, betrouwbaarheid en controle.

WORDT VERWACHT!
24 minuten resultaat voor VPH202.*



De snelle-aflezing-technologie resultaten van de biologische

De reeds goed ingeburgerde 3M technologie voor snelle aflezing van biologische indicatoren, werd nu ook aangewend voor de ontwikkeling van een nieuw monitoring systeem voor waterstofperoxide-sterilisatie (ook gekend als Plasma). Het systeem werd goedgekeurd door de FDA voor STERRAD en kan ook worden gebruikt met andere apparaten zoals V-PRO.

De biologische indicatoren 3M™ Attest™ Rapid Read-out maken een makkelijke monitoring van elke lading mogelijk. Zoals ook aangegeven door de norm EN ISO 14161, biedt het systeem de patiënten de beste en de meest consistente zorgkwaliteit - ongeacht de gebruikte sterilisatiemethode.



Plaats de biologische Attest indicator in een gelamineerd zakje of in een speciaal daarvoor voorzien Process Challenge Device (PCD)

Naleving van de normen.

De normen vereisen dat de efficiëntie van het sterilisatieproces wordt aangetoond aan de hand van een biologische indicator wanneer de parameters die bijdragen tot de biologische afdoding niet kunnen worden gemeten. De moderne praktijk vereist een snelle turnover van de ladingen en dit zou de naleving van de normen in het gedrang kunnen brengen. De nieuwe afleestecnologie in slechts vier uur, maakt het voor de gebruiker mogelijk de aanwezigheid van de sterilisatievoorwaarden op de plaats van de test te confirmeren. De resultaten van de biologische indicator kunnen gebruikt worden als onderdeel van het proces voor vrijgave van de lading, voordat deze naar het operatiekwartier wordt verstuurd.

Een kwestie van vertrouwen.

Sinds meer dan 25 jaar stellen sterilisatiediensten hun vertrouwen in de biologische indicatoren van 3M om stoomsterilisatieladingen te monitoren. We hebben uw vertrouwen opgebouwd “test per test”, met méér dan 850 miljoen cycli gemonitord met Attest™ biologische indicatoren wereldwijd.

Nu kan diezelfde vertrouwde ‘rapid readout’ technologie ook worden gebruikt voor waterstofperoxide-sterilisatie.

Hoe sneller het resultaat, hoe sneller de reactie.

Het resultaat na 4 uur met het 3M™ Attest™ Rapid Readout Biological Indicator System voor waterstofperoxide-sterilisatie geeft u de informatie die nodig is om de lading vrij te geven.

Vereenvoudig uw workflow.

Met het snellere resultaat en de gebruiksvriendelijke 3M™ Attest™ Auto-reader 490H interface, kan u de resultaten nog dezelfde dag registreren, tijdens dezelfde shift, mogelijk met dezelfde operator.

Dankzij het resultaat in 4 uur, moeten uw collega's niet langer werken tijdens het weekend of op feestdagen om de resultaten van de biologische indicatoren te documenteren.




Lees hier hoe u de biologische indicator 3M™ Attest™ Rapid Read-Out voor waterstofperoxide-sterilisatie kan integreren in de workflow van uw afdeling.

...ie (Rapid read-out) geeft de ...e indicator in slechts 4 uur.

De biologische indicatoren 3M™ Attest™ Rapid Read-out maken gebruik van dezelfde technologie waar u al jaren uw vertrouwen in stelt en bieden snelle resultaten voor het waterstofperoxide-sterilisatieproces.

Anatomie van de biologische indicator 3M™ Attest™ Rapid Read-out.

Dit kleine flesje bevat meer dan een miljoen sporen die zorgen voor een allesveranderend, snel resultaat in 4 uur door middel van een biologische indicator voor waterstofperoxide-sterilisatie. Zes maal sneller dan de andere BIs voor H2O2.

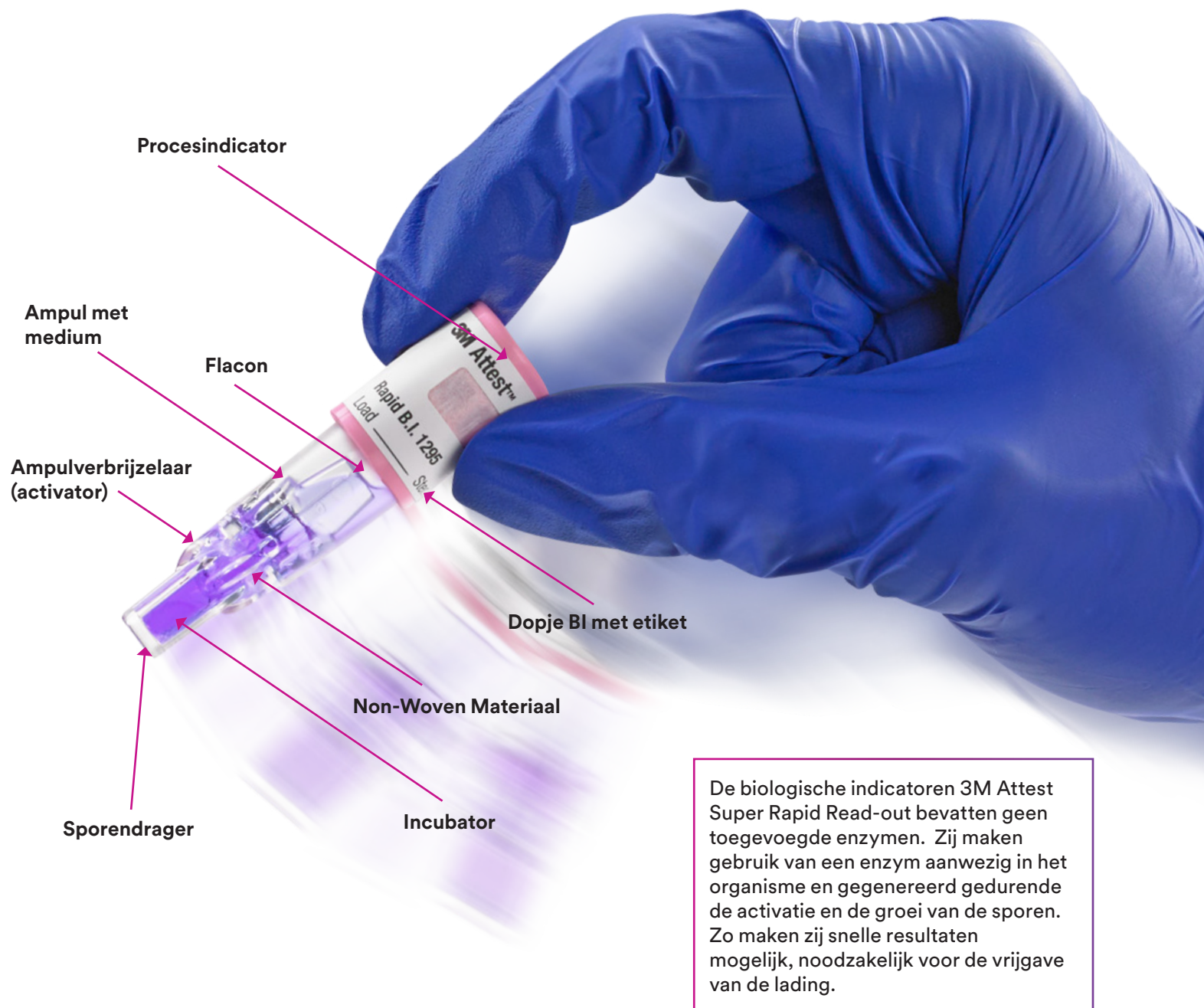



Verbeter de accuraatheid en standaardiseer de registratie van de gegevens.

Vermijd documentatiefouten.

Drukke sterilisatie afdelingen kennen veel afleiding. Dit kan leiden tot foute registratie van de testresultaten. Verhoog de accuraatheid, standaardiseer uw resultaatregistratie aan de hand van de Attest Auto-reader 490H. De resultaten van de indicator test en andere sleutel informatie worden automatisch in uw systeem geladen.**

Sterilisatie afdelingen die niet beschikken over een software voor instrument tracking, kunnen ook gebruik maken van een webapp voor de Attest Auto-reader 490H, met mogelijke toegang via mobiele apparaten en PC.

Waterstofperoxide-sterilisatie. Een geïntegreerde aanpak van monitoring.

Verkrijg de betrouwbare informatie aangaande het sterilisatieproces die u nodig heeft met het gamma monitoring producten van 3M. Dezelfde **verkleuring van de chemische indicator van helblauw naar roze** doet zich voor voor alle producten voor de monitoring van het waterstofperoxide-sterilisatieproces. Makkelijk te gebruiken, makkelijk te interpreteren.


Indicator Tape

De indicator tape 3M™ Comply™ Hydrogen Peroxide 1228 geeft de bevestiging dat het pakket voor het operatiekwartier werd blootgesteld aan een waterstofperoxide-sterilisatie cyclus.




Chemische Indicator

De chemische indicator 3M™ Comply™ Hydrogen Peroxide 1248 bevestigt dat het sterilisatiemiddel doordrong tot op de plaats van de test.

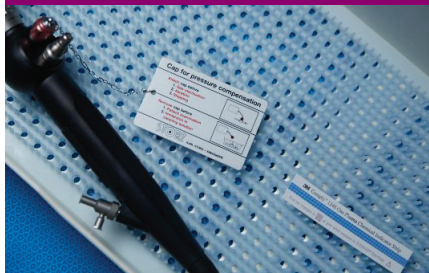

Biologische Indicator

De biologische indicator 3M™ Attest™ Rapid Read-out 1295, in combinatie met de auto-reader 490H, toont de letaliteit van de sterilisatiecyclus aan.

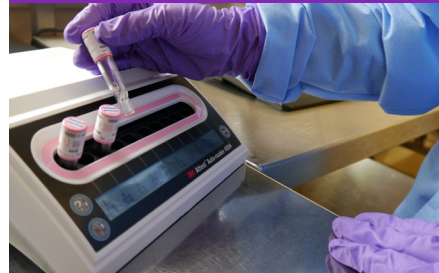


Controleer voor een grotere gemoedsrust en meer zekerheid.

Met een resultaat in 4 uur, weet u de uitkomst vroeger, kan u sneller reageren, en verbetert u de patiëntveiligheid in uw ziekenhuis.



Lees hier hoe u de biologische indicator 3M™ Attest™ Rapid Read-Out voor waterstofperoxide-sterilisatie kan integreren in de workflow van uw afdeling.

Oplossingen van 3M voor de monitoring van waterstofperoxide-sterilisatie.

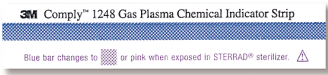	Referentie	Omschrijving	Verpakking	Verzendenheid
	1295	Biologische Indicator 3M™ Attest™ Rapid Read-out voor waterstofperoxide-sterilisatie	30 tests/ zakje	4 zakjes/ doos
	490H	3M™ Attest™ Auto-reader Voor gebruik met de 3M Attest Rapid Readout Biological Indicator 1295 voor waterstofperoxide-sterilisatie Inbegrepen : internet aansluitingskabel voor webapp connectiviteit	1 stuk/doos	1 doos/karton
	1248	3M™ Comply™ Hydrogen Peroxide Chemical Indicator De streep op de chemische indicator verkleurt van blauw naar roze na blootstelling aan waterstofperoxide-sterilisatie. 2.0cm x 10cm (13/16" x 4")	250 tests/ zakje	4 zakjes/doos
	1228	3M™ Comply™ Hydrogen Peroxide Indicator Tape De lijn van de chemische indicator verandert van blauw naar roze na blootstelling aan waterstofperoxide-sterilisatie. Wit met blauwe strepen 1.9cm x 55cm (3/4" x 60yds.)		24 rollen/ doos

Voor gebruik met STERRAD® Sterilisatoren 100NX (Standard, Flex, Express en Duo cycli), NX (Standaard en Advanced cycli), en 100S.

**Contacteer uw 3M vertegenwoordiger
of ga naar go.3M.com/VH202**

WORDT VERWACHT!

Binnenkort zal u een resultaat van biologisch indicator voor plasma waterstof peroxide krijgen na 24 minuten.*

In afwachting van de FDA goedkeuring, zullen alle gebruikers die het 4-uur systeem voor plasma waterstof peroxide gebruiken, probleemloos kunnen upgraden naar het nieuwe systeem.



* 24 minuten resultaat lopende voor 510(k) FDA goedkeuring

**Goedgekeurd door de FDA voor STERRAD Sterilisatoren model 100NX (Standard, Flex, Express en Duo cycles), NX (Standard en Advanced cycles), en 100S en kan ook gebruikt worden in andere toestellen zoals STERIS V-PRO.



3M Belgium bvba/sprl
Hermeslaan 7
1831 Diegem
België

3M Nederland BV
Molengraaffsingel 29
2629 JD Delft
Nederland

3M, Attest en Comply zijn handelsmerken van 3M. Sterrad is een handelsmerk van Advanced Sterilization Products, Division of Ethicon US, LLC. V-Pro is een handelsmerk van STERIS Corporation.

3M 2017. Alle rechten voorbehouden. IPD-ST-H202-6016-2-EU-0716