

3M Science.
Applied to Life.™

リライエックス™ アルティメット レジン セメント

歯科接着用レジンセメント

RelyX™ Ultimate Adhesive Resin Cement



スコッチボンド™ ユニバーサル アドヒーズブとの組合わせで、
高い接着性能と、全ての補綴物に同じ術式が可能に！


高い接着力

3M独自の「VMSテクノロジー」採用のスコッチボンド™ ユニバーサル アドヒーシブを前処理材として使用。


歯質、各種材料に対し高い接着力を有し、CAD/CAM冠やアンレー・ラミネートベニアなど、接着力を必要とする症例でお使いいただけます。

3 M独自のVMSテクノロジー

3種類の接着成分の配合バランスを最適化! 歯質に対して高い安定した接着性能はもちろん、様々な被着体にワンステップで使用可能です。

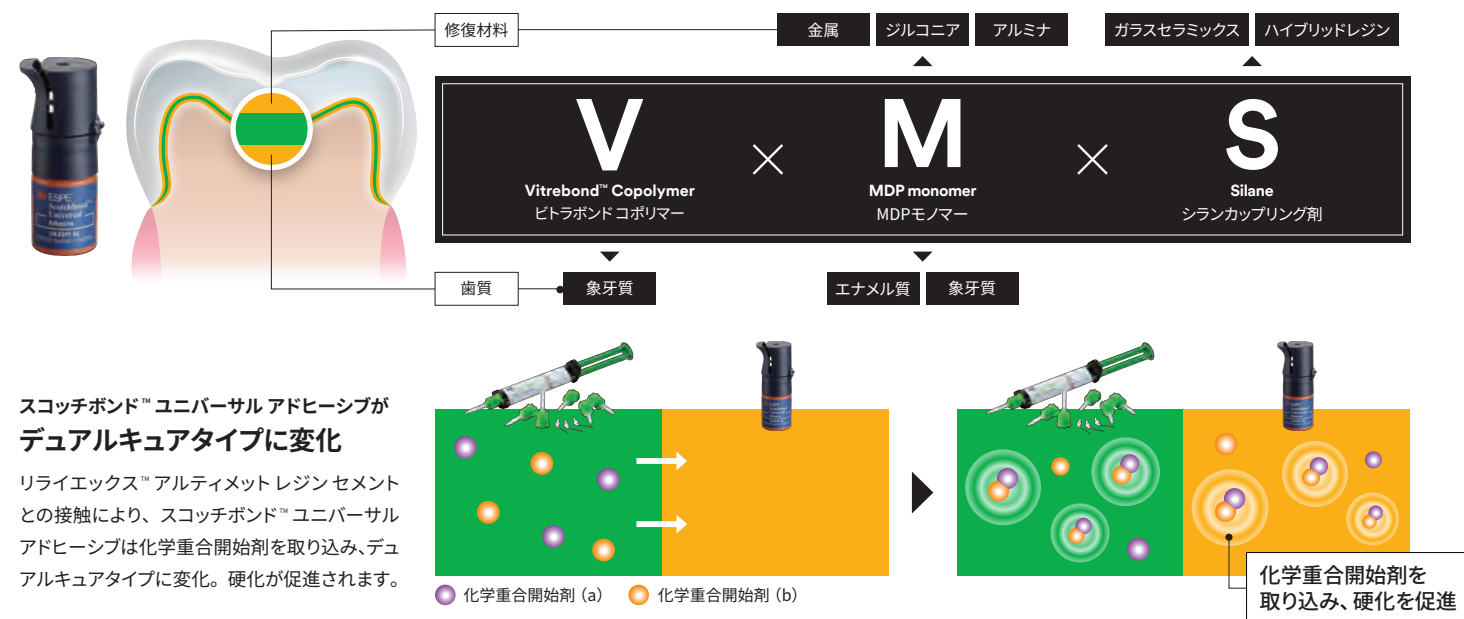

「強力な接着力」と「高い耐久性」を発揮

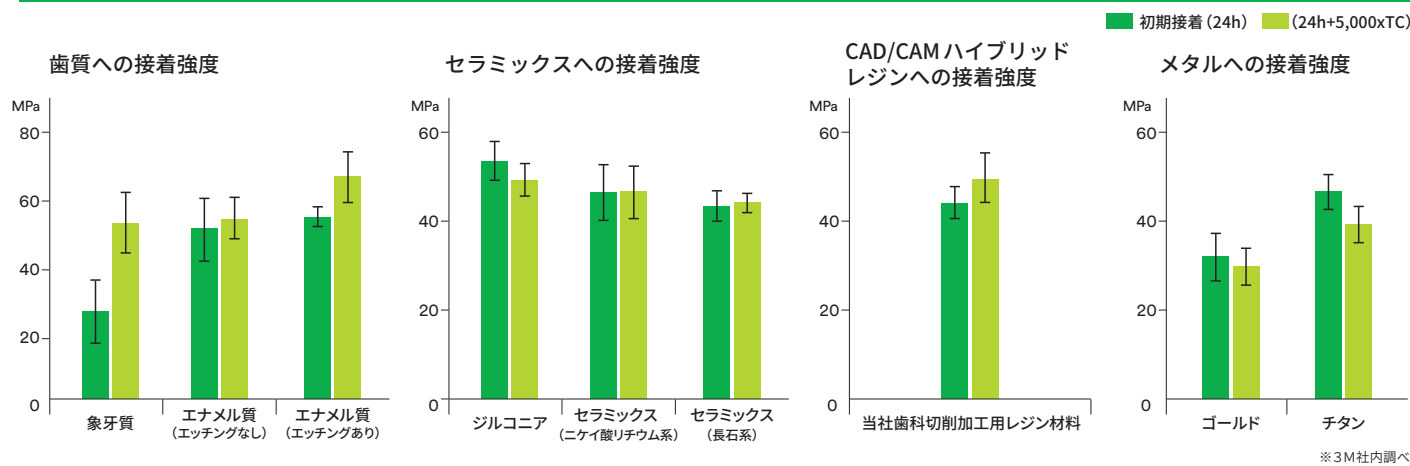

幅広い症例と各種素材に対応

CAD / CAM ハイブリッドレジン	インレー／アンレー／クラウン (CAD / CAM 冠)
ガラスセラミックス	インレー／アンレー／クラウン／ブリッジ ベニア
ハイブリッドレジン	インレー／アンレー／クラウン
ジルコニア・アルミナ	インレー／アンレー／クラウン／ブリッジ

メタル	インレー／アンレー／クラウン／ブリッジ
メタルコア	
直接法レジンコア (メタルポスト／ファイバーポスト)	
間接法レジンコア (メタルポスト／ファイバーポスト)	

シンプルな術式

プライマーの塗り分けが不要

スコッチボンド™ ユニバーサル アドヒーシブは「VMSテクノロジー」採用のため、各種専用のプライマーが不要。前処理は歯質・補綴物共にスコッチボンド™ ユニバーサル アドヒーシブだけ。



写真提供：北海道こ開業 関 俊也 先生



スコッチボンド™ ユニバーサル アドヒーシブを使うと

歯質・補綴物共に1本で対応できます。在庫管理も容易です。

これ1本でOK!

CAD/CAM 冠 (歯科切削加工用レジン材料)

写真提供：日本歯科大学新潟病院 菅原 佳広 先生



技工所で、CAD/CAM冠内面に50μm以下のアルミナにてサンドブラスト処理を行ってください。



注意

余剰セメントの光照射

歯面から離して1秒で

接着力が強いと硬化させすぎると余剰除去が困難になる場合があります。

※詳しくは添付文書およびテクニックガイドをご参照ください。

物性一覧

- 曲げ強度 (MPa) : 98
- 弾性係数 (GPa) : 7.7
- 溶解度 (μg/mm³) : 0
- 圧縮強度 (MPa) : 262
- 皮膜厚さ (μm) : 12

※3M社内調べ

光重合での硬化時間

- 余剰セメント除去：光照射1秒
- 最終硬化：光照射 各面20秒

化学重合での硬化時間

- 余剰セメント除去：注入3分後
- 最終硬化：注入6分後

審美性の高い症例にも対応

変色、着色しにくくクラウン・ブリッジはもとより、ラミネートベニアなど審美性を求める症例にも対応できます。

ガラスセラミックベニアの接着

写真提供：東京都開業 大河 雅之 先生



トライインペスト

接着前に色調確認のための試適を行えます


リライエックス™ トライインペスト

ペストは水溶性のため試適後は速やかに除去でき、清掃も容易です。




トランスルーセントを含む4種類のシェード

シェードは、透明性の高いトランスルーセントから、オパーク効果の高いA3まで、4タイプから選べます。CAD/CAMブロックやポーセレン・ジルコニア等による補綴物の審美性を損ないません。

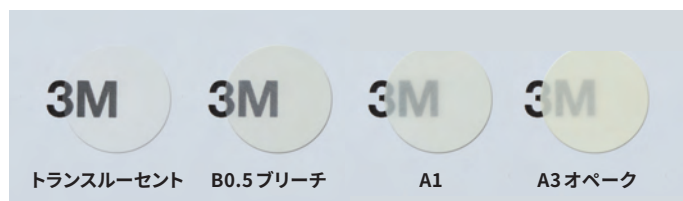

天然歯に近い蛍光性

下図は、天然歯とリライエックス™ アルティメット レジン セメントとの蛍光性を比較した写真です。

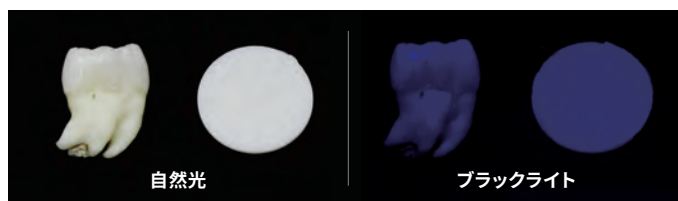

リライエックス™ アルティメット レジン セメント
ダブルパック (同色2本パック)
歯科接着用レジンセメント


内容：
・シリンジ (8.5g) × 2本
・ミキシングチップセメント用グリーン × 20本
・ミキシングチップセメント用ワイド グリーン × 10本
・口腔内注入チップセメント用 × 10本
製品番号：
・56887W (A1 ユニバーサル)
・56888W (A3 オパーク)
・56890W (トランスルーセント)
希望医院価格：各25,200円



リライエックス™ アルティメット レジン セメント
(1本入り)
歯科接着用レジンセメント


内容：
・シリンジ (8.5g) × 1本
・ミキシングチップセメント用グリーン × 10本
・ミキシングチップセメント用ワイド グリーン × 5本
・口腔内注入チップセメント用 × 5本
製品番号：
・56887 (A1 ユニバーサル)
・56888 (A3 オパーク)
・56889 (B0.5 ブリーチ)
・56890 (トランスルーセント)
希望医院価格：各14,000円

リライエックス™ アルティメット レジン セメント用 先端チップ 補充品

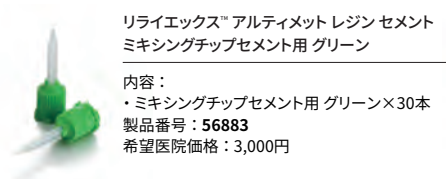


リライエックス™ アルティメット レジン セメント
ミキシングチップセメント用 グリーン

内容：
・ミキシングチップセメント用 グリーン × 30本
製品番号：56883
希望医院価格：3,000円

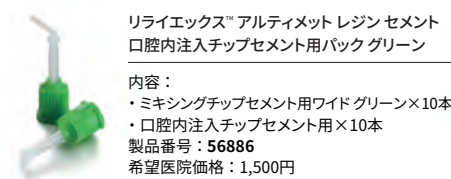

リライエックス™ アルティメット レジン セメント
口腔内注入チップセメント用バック グリーン

内容：
・ミキシングチップセメント用ワイド グリーン × 10本
・口腔内注入チップセメント用 × 10本
製品番号：56886
希望医院価格：1,500円

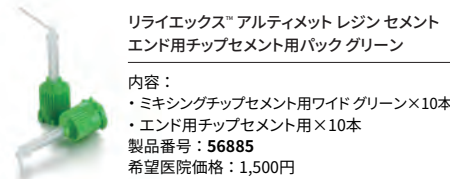

リライエックス™ アルティメット レジン セメント
エンド用チップセメント用バック グリーン

内容：
・ミキシングチップセメント用ワイド グリーン × 10本
・エンド用チップセメント用 × 10本
製品番号：56885
希望医院価格：1,500円

関連製品



スコッチボンド™ ユニバーサル アドヒーズブ
ボトルタイプ 補充品
歯科用象牙質接着材・歯科セラミックス用接着材料・
歯科金属用接着材料・歯科用知覚過敏抑制材料

内容：
・5mL × 1本
製品番号：41258
希望医院価格：12,600円



リライエックス™ トライインペスト
歯科用色調適合確認材料

内容：
・2g × 1本
製品番号：
・7614A1T (A1)
・7614A3T (A3 オパーク)
・7614B0.5T (B0.5 ブリーチ)
・7614TRT (トランスルーセント)
希望医院価格：各3,700円

販売名：リライエックス アルティメット レジン セメント
販売名：リライエックス トライインペスト

認証番号：225AKBZX00136000
認証番号：21500BZY00212000

販売名：スコッチボンド ユニバーサル アドヒーズブ
認証番号：224AKBZX00054000

3M、リライエックス、スコッチボンド、Vitrebond は、3M 社の商標です。

※掲載の内容および希望医院価格は、2019年6月現在のものです。希望医院価格は、すべて税抜き本体価格です。

スリーエム ジャパン株式会社
歯科用製品事業部
<http://go.3M.com/dental-jp>

Web

3M 歯科



Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2019. All Rights Reserved.
DEN-1077-HJ (061950) PN/e.

3M コールセンター

0120-332-329

9:00～17:00 / 月～金 (土日祝年末年始は除く)
フリーダイヤルが繋がらない場合は、
03-6409-3157をご利用ください。