

3M**Cavilon™**

Skin Care Solutions



Bescherm uw huid tijdens het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen voor het gezicht (PBM's).

Het kiezen van een huidbeschermingsproduct.

De belangrijkste overweging bij het bepalen van hoe u uw huid kunt helpen beschermen terwijl u persoonlijke beschermingsmiddelen voor het gezicht draagt, is ervoor te zorgen dat het huidbeschermingsproduct niet interfereert met de persoonlijke beschermingsmiddelen en hun functionaliteit. Dit betekent dat u een huidbeschermingsproduct moet kiezen dat:

- ▶ de afdichting van het ademhalingsmasker en/of de pasvorm van andere persoonlijke beschermingsmiddelen voor het gezicht niet verstoort
- ▶ niet van de huid op de gezichts-PBM wordt overgebracht
- ▶ de huid beschermt tegen wrijving en vocht (waterdicht)
- ▶ ademend is, zodat vocht uit de huid kan verdampen
- ▶ geen verwijdering of afspoeling vereist

Vanwege de mogelijke interferentie met de afdichting en/of de filterfunctie van de 3M ademhalingsmaskers, adviseert 3M geen gebruik te maken van vaseline (ook wel petrolatum genoemd) zalven, dikke barrièrecreme of verbanden zoals polyurethaanschuimverbanden en hydrocolloïden.

**3M™ Cavilon™
Niet-
Prikkende
Barrièrefilm**



**3M™ Cavilon™
Advanced***

Proactive huidbescherming.

3M™ Cavilon™ Niet-Prikkende Barrièrefilm helpt de intacte huid te beschermen tegen vocht en wrijving en bij correct gebruik wordt niet verwacht dat het de pasvorm van 3M ademhalingsmaskers verstoort.

Gebruiksaanwijzingen

- 1 Gebruik de 1 ml wipe of de 1 ml swab.
- 2 Het product moet worden aangebracht op een schone, droge huid op elke plaats waar het ademhalingsmasker wrijving kan veroorzaken en/of waar vocht zich kan ophopen, bijvoorbeeld de neusbrug, wangen, de bovenkant van de oren of het voorhoofd, enz. Het kan worden gebruikt op het gezicht, maar mag niet worden gebruikt in het oog of op het ooglid.



- 3 Het product moet volledig kunnen drogen (minstens 90 seconden wachten) voordat het ademhalingsmasker wordt opgezet. Hierdoor kan de vloeistof op de huid drogen en kunnen dampen worden afgevoerd. **Bij het aanbrengen kan een geur worden waargenomen doordat het oplosmiddel verdampst. De geur zal verdwijnen naarmate het product opdroogt.**
- 4 We raden aan te beginnen met een éénmalige dagelijkse toepassing. Als er zich een ophoping van het product voordoet, verlaag dan de toepassingsfrequentie, bijv. 3 keer per week.
- 5 Cavilon Niet-Prikkende Barrièrefilm kan worden verwijderd met kleefmiddelverwijderaar van medische kwaliteit.



Dragers van een ademhalingsmasker dienen altijd de modelspecifieke gebruiksinstructies te volgen, inclusief het uitvoeren van een dichtingscontrole telkens wanneer een ademhalingsmasker wordt opgezet.

Raadpleeg de bijsluiter van het product (gebruiksaanwijzing) voor volledige aanwijzingen en instructies voor gebruik, contra-indicaties, voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen.

Bescherm beschadigde huid.

3M™ Cavilon™ Advanced kan worden gebruikt om de beschadigde huid te helpen beschermen, bijvoorbeeld tegen wrijving of andere oppervlakkige huidbeschadigingen.



Gebruiksaanwijzingen

- 1 Het is aanbevolen de 0.7 ml applicator* te gebruiken.
- 2 Het product kan worden toegepast op gebieden van roodheid of oppervlakkige huidbeschadiging, bijvoorbeeld de neusbrug, de wangen, de bovenkant van de oren, het voorhoofd, enz. Het product mag niet worden aangebracht in of in de buurt van het oog...
- 3 Het product dient in een dunne laag te worden aangebracht.




- 4 Het product moet volledig kunnen drogen (minstens 90 seconden wachten) voordat het ademhalingsmasker wordt opgezet. Hierdoor kan de vloeistof op de huid drogen en kunnen dampen worden afgevoerd. **Bij het aanbrengen kan een geur worden waargenomen doordat het oplosmiddel verdampst. De geur zal verdwijnen naarmate het product opdroogt.**
- 5 Wij raden u aan te beginnen met een 2–3 keer per week applicatie. Als er zich een ophoping van het product voordoet, verlaag dan de toepassingsfrequentie, bijv. 1–2 keer per week.
- 6 Cavilon Advanced kan worden verwijderd met een medische kleefstofverwijderaar dat hexamethyldisiloxaan of silicone bevat.

Opmerking

Als de 2,7 ml applicator* wordt gebruikt, worden de volgende stappen aanbevolen om het druppelen of samenlopen van de vloeistof tijdens het aanbrengen tot een minimum te beperken:

- 1 Open de verpakking en hou deze bij de hand.
- 2 Activeer de applicator en zorg dat het schuimkussentje verzadigd raakt met de vloeistof.
- 3 Druk de schuimapplicator tegen de witte verpakking om het overschot aan vloeistof uit te drukken.

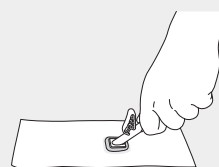

- 4 Breng vervolgens aan zoals aangegeven.



Dragers van een ademhalingsmasker dienen altijd de modelspecifieke gebruikersinstructies te volgen, inclusief het uitvoeren van een afdichtingscontrole elke keer dat een ademhalingsmasker wordt opgezet.

Raadpleeg de bijsluiter van het product (gebruiksaanwijzing) voor volledige aanwijzingen en instructies voorgebruik, contra-indicaties, voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen.

3M Nederland B.V.
Molengraaffsingel 29
2629 JD Delft
Tel. +31 15 782 2435

3M BELGIUM BVBA/SPRL
Hermeslaan 7
1831 Diegem
Tel. +32 2722 5133

Voor meer info: 3M.nl/Covid
3Mbelgie.be/Covid

*Uitsluitend eenmalig gebruik.

3M en Cavilon zijn handelsmerken van 3M Company.
© 3M 2020. All rights reserved. OMG90568.

