

Sistema Di Terapia 3M™ Snap™



Percorso clinico per il sistema 3M™ Snap™

Valutazione completa del paziente e della ferita

Il tipo di ferita è indicato per l'impiego NPWT senza controindicazioni?

Il sistema Snap è indicato per la rimozione di piccole quantità di essudato da:

- Ferite croniche, acute, traumatiche, subacute e deiscienti
- Ulcere (come le ulcere diabetiche, venose o da pressione)
- Incisioni chiuse chirurgicamente
- Lembi e innesti

SÌ

NO

Caratteristiche della ferita che possono essere idonee al sistema Snap

- Durata più lunga del previsto per il tipo di ferita
- Volumi di essudato da bassi a moderati
- Viscosità dell'essudato da bassa a media
- Mancata granulazione del letto della ferita
- Presenza di granulazione, ma non di epitelizzazione del letto della ferita
- Ferite con cavità non profonda (<3cm di profondità).
Per le ferite più profonde - valutare la NPWT tradizionale

SÌ

NO

Caratteristiche della medicazione/dei pazienti che possono essere idonei al sistema Snap

- Dimensione ferita: <13cm x 13cm
- Drenaggio ferita: <180ml di essudato a settimana
- Pazienti attivi, deambulanti o anziani
- Il paziente vuole o è in grado di partecipare alla propria cura o ha una persona che lo può assistere
- Il paziente non presenta allergie agli adesivi idrocolloidali o ai film in poliuretano

SÌ

NO

Avviare la terapia con sistema Snap, cambiando la medicazione almeno una o due volte a settimana, o in base ai livelli di essudato. Rivedere il regime di medicazione ogni settimana.

STOP! VALUTA L'IMPIEGO DI TERAPIE ALTERNATIVE

Controindicazioni:

- Sanguinamento in corso
- Tumore maligno
- Osteomielite non trattata
- Organi, vasi, tendini, nervi, siti di anastomosi esposti
- Fistole
- Infezioni in corso
- Tessuto necrotico
- non adeguatamente drenato

Utilizzo del sistema 3M™ Snap™

Preparare il letto della ferita e la cute perilesionale in base al protocollo istituzionale. Se necessario, applicare un prodotto protettivo sulla cute circostante e lasciarlo asciugare.

PASSAGGIO 1: Ritagliare l'interfaccia di schiuma in base alla dimensione e alla forma della ferita. Rimuovere la parte posteriore e posizionare con cura la medicazione avanzata 3M™ Snap™ sulla ferita, quindi sigillare.



PASSAGGIO 2: Tagliare il tubo della medicazione in base alla lunghezza desiderata, se necessario. Inserire saldamente il raccordo del tubo nel tubo.




PASSAGGIO 3: Collegare la cartuccia 3M™ Snap™ al raccordo del tubo utilizzando entrambe le mani. Attivare la cartuccia Snap premendo la chiave di attivazione/di reset per rilasciare, e rimuovere la chiave dalla cartuccia Snap. Potrebbe essere necessario caricare più volte la cartuccia in base alla dimensione della medicazione.

ATTENZIONE: Conservare la chiave di attivazione/reset. NON gettarla.



PASSAGGIO 4: Controllare il funzionamento della pressione negativa. Il sistema Snap sta funzionando correttamente se:

- L'indicatore verde della capacità visibile attraverso la finestrella d'ispezione è fisso
- La medicazione ha un aspetto "aspirato"
- La medicazione risulta dura al tatto

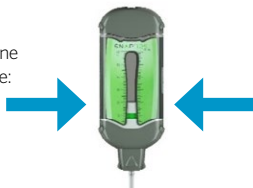


Applicazione della medicazione



Attenzione: Valutare
l'impiego dell'idrocolloide
3M™ SecurRing™ Snap™
per sigillare il sito.

Applicazione della medicazione avanzata 3M™ Snap™ sul tallone

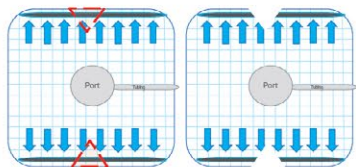


Applicazione
sul tallone




Applicazione della medicazione avanzata 3M™ Snap™ su un'amputazione/resezione a cuneo del dito del piede

OPZIONE 1

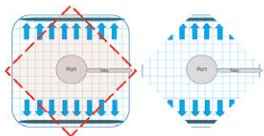


Amputazione/Resezione
del dito del piede
Applicazione su resezione

Opzione 1

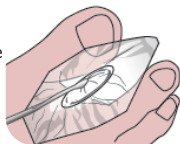

OPZIONE 2

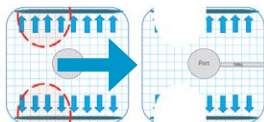


Applicazione su
amputazione/resezione
a cuneo del dito del piede

Opzione 2



Applicazione della medicazione avanzata Snap su un'amputazione transmetatarsale

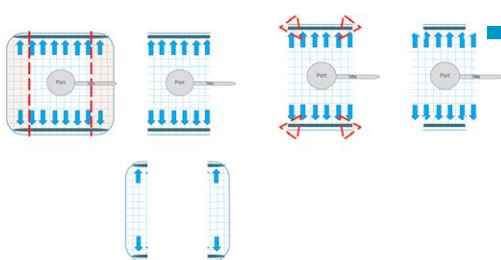

3M™ Snap™ System Overview

Cartuccia per terapia 3M™

Snap™: La cartuccia da 60mL contiene e misura i fluidi e il materiale infetto lontano dal letto della ferita

Idrocolloide 3M™

Snap™ SecurRing™:

Per una sigillatura semplice anche sulle superfici irregolari e le anatomie difficili

Fascetta per terapia 3M™

Medicazione avanzata

SNAP™: La medicazione idrocolloidale adattabile mantiene una tenuta sicura e fornisce protezione a livello perilesionale

Attacco del tubo:

Contiene una valvola di non ritorno che impedisce il reflusso dell'essudato

Tubo ritagliabile

Medicazione a ponte 3M™

Per l'applicazione iniziale, è necessario ordinare:




In base al caso, potranno essere necessari anche i seguenti accessori:



Il sistema di terapia 3M™ Snap™ è un dispositivo dNPWT indossabile che combina la semplicità di una medicazione avanzata con i benefici comprovati della terapia a pressione negativa, in un design discreto che aiuta a preservare la qualità di vita del paziente.¹

- Alimentato meccanicamente e portatile, per contribuire alla mobilità del paziente
- Erega una pressione negativa continua da -125mmHg clinicamente provata
- Indicato per gli stessi tipi di ferite della terapia V.A.C.®
- Discreto, può essere indossato sotto i vestiti
- Il design silenzioso riduce al minimo le interruzioni del sonno

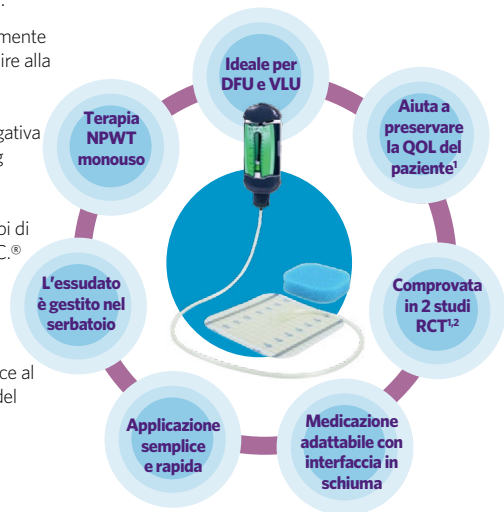

ATTENZIONE: Per i prodotti 3M potrebbero esistere indicazioni, controindicazioni, avvertenze, precauzioni e informazioni di sicurezza specifiche. Si prega di consultare l'operatore sanitario e le istruzioni per l'uso del prodotto prima dell'applicazione. Questo materiale è destinato agli operatori sanitari.

1. Armstrong DG, Marston WA, Reyzelman AM, Kirsner RS. Efficacia comparativa dei dispositivi di terapia a pressione negativa delle ferite alimentati meccanicamente ed elettricamente: uno studio multicentrico randomizzato controllato. *Wound Repair and Regen* 2012;20(3):332-341.
2. Marston WA, Armstrong DG, Reyzelman AM, Kirsner RS. Studio multicentrico randomizzato controllato che confronta il trattamento delle ulcere venose degli arti inferiori usando la terapia a pressione negativa delle ferite ad alimentazione meccanica o elettrica. *Adv Wound Care* 2015;4(2):75-82. doi:10.1089/wound.2014.0575.

3M Science.
Applied to Life.™

© Wounds International 2021
Supported by 3M
www.3mitalia.it