



Tegaderm™

IV Care Solutions

Nowość

3M™ Tegaderm™ Antimicrobial I.V. Advanced zaawansowany bakteriobójczy opatrunek do mocowania wkłuc obwodowych, 9132

Wodoodporna sterylna bariera chroni przed zanieczyszczeniami zewnętrznymi*

Oddychająca, przezroczysta folia.


Działanie bakteriobójcze

Glukonian chlorheksydyny (CHG) zintegrowany z klejem zapewnia ciągłe działanie bakteriobójcze. Do aktywacji nie jest wymagana dodatkowa wilgoć.



Działanie bakteriobójcze

Skutecznie hamuje namnażanie fizjologicznej flory bakteryjnej skóry w porównaniu z innymi opatrunkami bez działania bakteriobójczego.¹

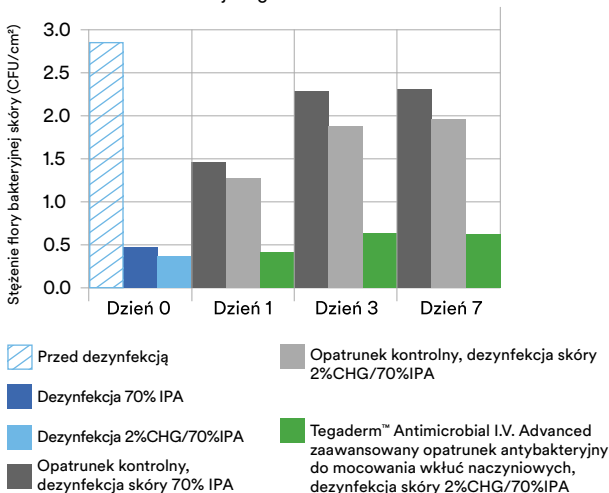

Szeroki pasek mocujący

Zapewnia standardowy sposób mocowania i wysoką stabilizację kaniuli.

Mikronacięcia włókniny na krawędzi opatrunku

Technologia zmniejszająca odklejanie się brzegów opatrunku.

Głębokie wcięcie dopasowane do kształtu cewnika

Wcięcie umożliwia lepsze dopasowanie cewnika i stabilność mocowania.

Działanie bakteriobójcze

Dowodzone zahamowanie rekolonizacji fizjologicznej flory bakteryjnej na przygotowanej skórze przez maksymalnie 7 dni.

Widoczne miejsce wkłucia

Opatrunek przezroczysty umożliwia wczesną identyfikację powikłań w miejscu wkłucia.

Stabilizacja cewnika


Zaprojektowany, aby zminimalizować ruch i przemieszczanie cewnika.

Łatwość aplikacji

Opatrunek z klejem z CHG został zaprojektowany, w taki sposób aby zapewnić standardową prawidłową aplikację.

* Badania *in vitro* wykazały, że przezroczysta folia stanowi barierę przeciwko wirusom o średnicy 27 nm lub większym, jeśli opatrunek jest nienaruszony.
1. 3M dane w aktach. EM-05-305455

9132

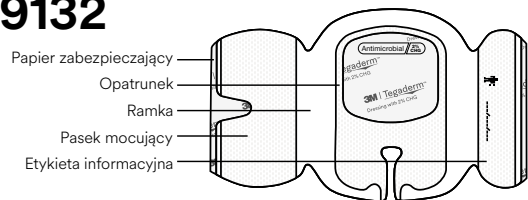

Nowość

Przygotuj



Przygotować miejsce wkłucia zgodnie z protokołem placówki. Należy upewnić się, że miejsce aplikacji jest całkowicie suche.


Aplikuj



Technika aplikacji jedną ręką

Nie rozciągać opatrunku podczas aplikacji. Odkleić papier zabezpieczający od opatrunku i umieścić przezroczyste okienko nad miejscem wkłucia, dopasowując wcięcie opatrunku do kaniuli. Aby zapewnić optymalne przyleganie, zastosować silniejszy docisk na całym opatrunku, jednocześnie odrywając ramkę drugą ręką.

Zabezpiecz

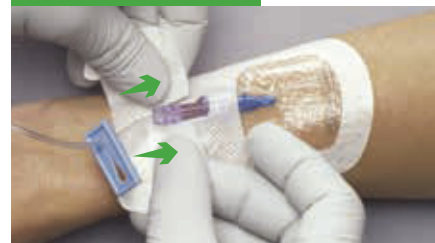

Umieścić pasek mocujący z wycięciem pod końcówką kaniuli i przykleić go do skóry i opatrunku.

Zabezpiecz



Udokumentować informację o zmianie opatrunku na etykiecie. Przykleić etykietę na opatrunek i przewód cewnika dla jego stabilizacji.

Monitoruj



Zmiana opatrunku: co 7 dni lub w przypadku poluzowania, zabrudzenia, zawilgocenia lub zgodnie z obowiązującą procedurą.

Usuń



Odkleić etykietę informacyjną i pasek mocujący. Powolnym ruchem odklejać opatrunek od strony wyjścia cewnika spod opatrunku w kierunku miejsca wkłucia. Unikaj urazów skóry. Odklejaj opatrunek trzymając go płasko nad skórą.

Więcej istotnych informacji podano w instrukcji użytkowania produktu.

Informacje dla zamawiających

Produkt	Numer produktu	Rozmiar całego opatrunku	Opatrunki/opakowanie	Pudełka/op.
	9132	7 cm x 8,5 cm	25	4



Odwiedź stronę [3M.pl/dzial-medyczny](https://3m.pl/dzial-medyczny), aby znaleźć materiały szkoleniowe na temat wszystkich rozwiązań 3M dotyczących pielęgnacji dostępow naczyniowych.

3M Poland Sp. z o.o.
Al. Katowicka 117
Kajetany 05-830
Nadarzyn
+48 22 739 60 00
www.3m.pl

3M i Tegaderm są znakami towarowymi 3M. © 3M 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone. OMG119878
11.2022

