

PREVENA™

INCISION MANAGEMENT SYSTEM

Indicatoren en waarschuwingen van de PREVENA™ 125 unit



Indicator
Let op

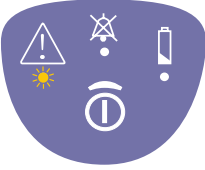
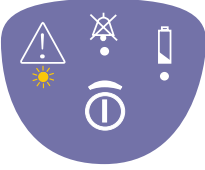
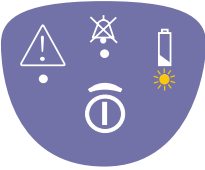
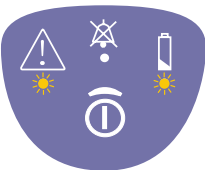
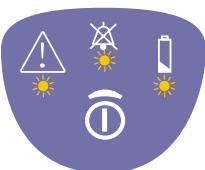


Geluidssignaal
(gedempt)

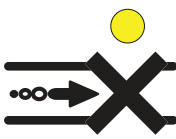
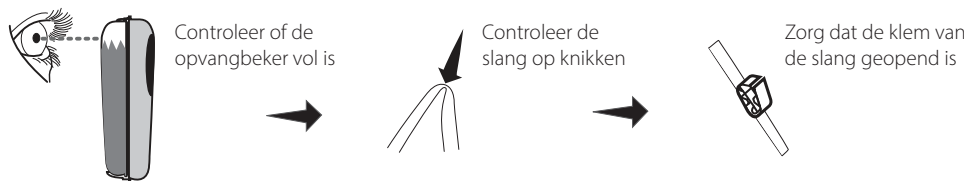
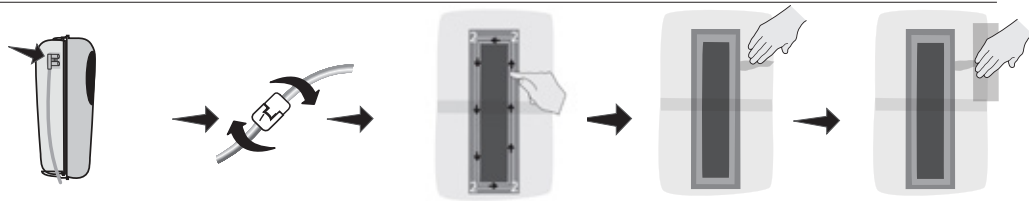
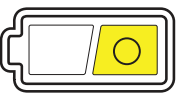
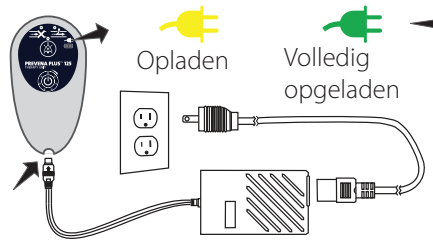
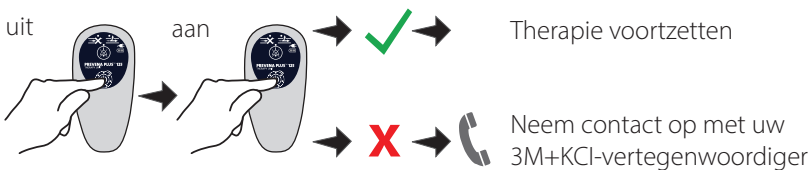


Batterijniveau

Dit is een beknopte handleiding. Meer informatie vindt u in de handleiding voor zorgverleners bij het PREVENA™ systeem

Type waarschuwing	Hoe te verhelpen
Waarschuwing Lekkage Een pieptoon en een continu brandend geel lampje 	Om te waarborgen dat het PREVENA™ incisie-wondverband op de juiste wijze wordt aangebracht, beschikt de PREVENA™ 125 unit over de VISICHECK™ optie. Druk tweemaal op de aan-/uitknop. - Eén lampje: Optimaal - Twee lampjes: Goed - Drie lampjes: Marginaal Volg deze stappen als de VISICHECK™ optie een 'marginale' leksnelheid aangeeft: - Controleer of de opvangbeker in de unit is vergrendeld - Controleer de slangconnectors om er zeker van te zijn dat deze goed zijn aangesloten en vergrendeld - Strijk eventuele plooien in de folie glad met uw vingers - Gebruik PREVENA™ foliestrips (in de verpakking van het wondverband) om lekkages af te dichten - Druk de randen van het wondverband langzaam en stevig aan
Waarschuwing Opvangbeker vol Twee pieptonen en een continu brandend geel lampje 	Controleer het vloeistofniveau in de opvangbeker. 1. En volgt u de stappen in de gebruikershandleiding hoe een opvangbeker te vervangen 2. Als de opvangbeker vol is, schakelt u de unit uit 3. Neem contact op met uw 3M+KCI-vertegenwoordiger
Waarschuwing Batterij bijna leeg Bijna leeg - Een lange pieptoon en een continu brandend geel lampje. Leeg - Een snel herhaalde pieptoon die in volume toeneemt en twee continu brandende gele lampjes 	Deze unit wordt geleverd met drie AA-batterijen. 1. Houd vijf seconden ingedrukt om uit te schakelen 2. Druk tegen het klepje aan de achterkant van de unit om het te openen 3. Plaats drie AA-batterijen (lithiumbatterijen aanbevolen) 4. Druk om het klepje te sluiten 5. Houd twee seconden ingedrukt om in te schakelen
Waarschuwing Systeemfout Een snel herhaalde pieptoon die in volume toeneemt en twee continu brandende gele lampjes 	Reset de unit: 1. Houd vijf seconden ingedrukt om uit te schakelen 2. Houd twee seconden ingedrukt om weer in te schakelen 3. Neem contact op met uw 3M+KCI-vertegenwoordiger als de therapie nog steeds niet opstart
Levensduur van apparaat verstreken Drie lampjes geven aan dat de levenscyclus is verstreken. Er klinkt 15 seconden lang een herhaalde pieptoon waarna het apparaat wordt uitgeschakeld 	Neem contact op met uw 3M+KCI-vertegenwoordiger Levenscyclus = 192 uur (acht dagen)

Indicatoren en waarschuwingen van de PREVENA PLUS™ 125 unit

Type waarschuwing	Hoe te verhelpen
Waarschuwing Blokkering  Er klinken om de 15 seconden twee pieptonen als hoorbare blokkeringswaarschuwing	 Controleer of de opvangbeker vol is Controleer de slang op knikken Zorg dat de klem van de slang geopend is
Waarschuwing Lekkage  Er klinken om de 15 seconden twee pieptonen als hoorbare lekkagewaarschuwing	 Controleer of de opvangbeker goed op de unit is vergrendeld. Wanneer de opvangbeker wordt geplaatst, hoort u een duidelijke klik Controleer de slangconnectors om er zeker van te zijn dat deze goed zijn aangesloten en vergrendeld Druk geheel rondom door de folie op de kleverige afdichting om ervoor te zorgen dat alles goed wordt afgedicht Strijk eventuele plooiën of kreuken glad met uw vingers Gebruik PREVENA™ foliestrips of overtollige folie langs de buitenrand van de folie om lekkages af te dichten
Waarschuwing Batterij bijna leeg  Er klinken twee pieptonen om de vier minuten	 Opladen Volledig opgeladen Aangesloten op lichtnet Volledig opgeladen (circa 9 uur resterend) Gedeeltelijk opgeladen (circa 2-7 uur resterend) Bijna leeg (circa 2 uur therapie resterend). Laad de unit onmiddellijk op om onderbreking van de therapie te voorkomen
Waarschuwing Systeemfout  Alle LED's knipperen en twee piepsignalen worden om de 15 seconden herhaald	Schakel de unit uit en vervolgens weer in  Therapie voortzetten Neem contact op met uw 3M+KCI-vertegenwoordiger
Knop Waarschuwing dempen 	- Houd het midden van de knop 'Waarschuwingen dempen' drie seconden ingedrukt tijdens een waarschuwingstoestand om de waarschuwingston twee minuten te dempen - Wanneer de knop 'Waarschuwingen dempen' is ingedrukt, licht deze op om aan te geven dat dempen is geactiveerd - De waarschuwing klinkt na twee minuten opnieuw tenzij de reden voor de waarschuwing is opgeheven
Therapie beëindigd 	- Er wordt een continu brandend geel lampje ingeschakeld boven de indicator voor de resterende therapieduur - Er klinken acht pieptonen gevolgd door een continue pieptoon van vijf seconden en de unit wordt uitgeschakeld - Wanneer de cyclus van de unit is voltooid en er een poging wordt gedaan om de unit in te schakelen, klinkt er een waarschuwingston van drie seconden en wordt de unit uitgeschakeld - Informeer de behandelend arts of zorgverlener na voltooiing van de therapie

OPMERKING: Voor deze producten en therapieën gelden specifieke indicaties, contra-indicaties, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en veiligheidsinformatie. Raadpleeg een arts en neem de gebruiksaanwijzing door voorafgaand aan het gebruik. Dit materiaal is bedoeld voor zorgprofessionals.

©Copyright 2020 3M. Alle rechten voorbehouden. 3M en de andere weergegeven merken zijn merken of geregistreerde merken. Ongeoorloofd gebruik verboden. PRA-PM-NL-00057 (06/20)

3M + KCI