




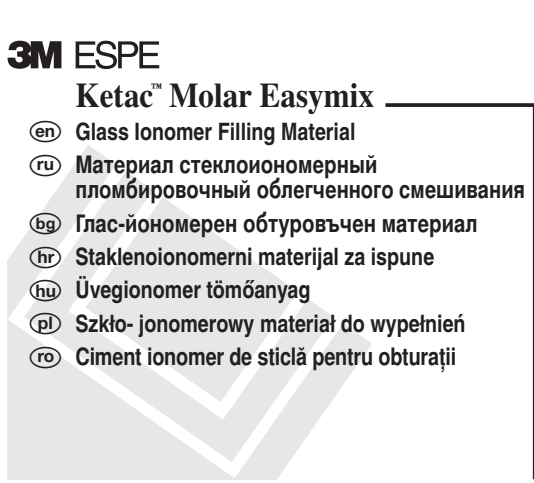

Инструкции по Use
Указания по применению
Указания за употреба
Upute za upotrebu

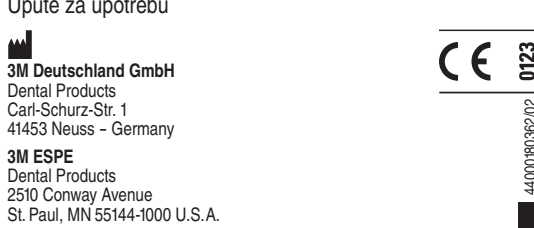

3M, ESPE and Ketac are trademarks of 3M or 3M Deutschland GmbH. Used under license in Canada. © 2012, 3M. All rights reserved.

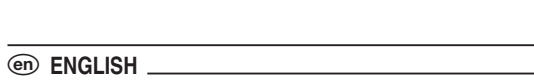

Product Description
Ketac™ Molar Easyxim is a glass ionomer cement for manual mixing that is exceptionally easy to mix. The feature of the material to chemically bond to enamel and dentin provides for ease of preparation and excellent sealing of the margins of fillings. The material can be applied without lining. It releases fluoride ions and is radio-opaque.
Ketac Molar Easyxim is also suitable for use in minimal invasion filling therapy (MI) and for applications involving A.R.T. (atraumatic restorative treatment) technique.
Ketac Molar Easyxim is available in A3 shade.

☞ For details on the below mentioned Ketac® Conditioner and Ketac® Glaze please refer to the pertinent Instructions for Use. Instructions for Use should not be discarded for the duration of product use.

Indications

Conventional filling therapy:

- As lining for single- or multi-surface composite fillings
- Core build ups
- Primary tooth fillings
- Single-surface fillings in areas not involved in occlusion
- Cervical fillings without cosmetic priorities
- Semi-permanent single- and multi-surface fillings

Minimal intervention (MI) filling therapy (A.R.T. technique):

- Primary tooth fillings
- Single-surface fillings in areas not involved in occlusion
- Class V fillings where appearance is not a priority
- Semi-permanent single- and multi-surface fillings
- Semi-permanent class III fillings
- Fissure sealings

Precautionary Measures
3M MSDSs can be obtained from www.mmm.com or contact your local subsidiary.

Precautions During Processing

Only Ketac Molar Easyxim Liquid should be used to process Ketac Molar Easyxim Powder.
Mixing Ketac Molar Easyxim Powder with other liquids of the Ketac product line will alter the concentration of acid in the filling material.
This may result in post-operative sensitivity. In addition, the mechanical properties of the material will be impaired and setting speed altered.

Steps prior to Preparation

Conventional filling therapy and A.R.T. technique:

- Keep handy all required instruments and materials.
- In the case of multi-surface fillings, place a matrix band to protect neighboring teeth and simplify contour shaping.

Especially in the A.R.T. technique:
A minimal set of instruments should include: dental mirror, probe, tweezers, excavator (large, medium, small), modeling instrument, carver (axe-shaped cutting instrument), mixing spatula, mixing pad, a matrix band (if required), cotton rolls, cotton pellets, water cup (sterilizable or disposable). This basic set can be supplemented with additional instruments depending on the available financial resources and local circumstances.

- Prior to commencing preparation, the working area should be thoroughly cleaned and dried. This renders discolored, demineralized enamel easy to recognize and treat.
- If no suction is available during treatment, the working area must be kept dry with repeated changes of cotton rolls.

Preparation

Conventional filling therapy:

- Only remove the carious substance; no undercuts required.
 - Do not prepare thin edges since the material requires a minimal wall thickness of 0.5 mm!
- Clean the cavity with water and dry with air.

A.R.T. Technique:

- Extend the office of small cavities with a dental hatchet or carver to gain better access. As a consequence, any enamel luting out will break off and sufficient space for access of the smallest manual excavator is created.
- Commencing at the enamel-dentin interface, use circular abrasive motions of the smallest manual excavator to completely remove any carious dentin from the cavity. Unsupported enamel should also be removed.
- Subsequently, clear the floor of the cavity.
 - Use the largest suitable excavator to treat large cavities, and exert little pressure in order not to inadvertently expose the pulp due to excessive pressure!
- Clean the cavity with water and dry.

Protection of the Pulp

Conventional filling therapy and A.R.T. technique:
Cover areas in close proximity to the pulp by applying spots of a hard-setting calcium hydroxide material in order to protect the pulp from irritation.

Conditioning

Conventional filling therapy and A.R.T. technique:

- For optimal chemical bonding to the teeth the smear layer produced in the preparation steps must be carefully removed by applying Ketac Conditioner or, for use with the A.R.T. technique, Ketac Molar Easyxim liquid to the prepared surfaces and allowing the substance(s) to react for 10 sec.
- Then rinse with copious amounts of water and blow dry in only 2-3 short intervals with water and oil-free air or dab dry with cotton pellets.
 - The cavity should be just so dry that the surface has a matt shiny appearance.** Excessive drying can result in post-operative sensitivity after filling.
- Avoid further contamination; repeat the procedure, if surfaces become recontaminated.

Dosing

Conventional filling therapy and A.R.T. technique:

- Shake bottle to render the powder free-flowing. Use a mixing ratio (weight ratio) of 4.5 parts of powder (1 spoonful with leveled powder surface) : 1 part of liquid (1 drop).
- Removing the powder, wipe off the spoon level at the plastic insert. Avoid compressing the powder.
- Dose sufficient quantities of powder and liquid in adjacent spots on the same mixing block. Keep liquid bottle vertical for dosing.
 - The drop dosing device must be free of any dried residue of the liquid!
 - Drops must not contain any air bubbles!
- Close bottles of powder and fluid securely after use and ensure that no powder residue remains on the wiper ring of the bottle.

Mixing

Conventional filling therapy and A.R.T. technique:

- Process Ketac Molar Easyxim at room temperature (20-25 °C/68-77 °F).

- Use a metal or plastic cement spatula and a mixing pad or glass slab for mixing.
- Ideally, the powder should be transferred into the liquid in not more than two portions.
- Streak out the paste repeatedly until the consistency is homogeneous.
 - Moisture can have a negative effect on the properties of the glass ionomer cement. If a homogeneous paste is not obtained with the given mixing ratios, discard the material.

Application

Carefully avoid contamination during application!

Conventional filling therapy:

- Apply Ketac Molar Easyxim in several portions using a suitable instrument. Undercuts may need to be treated first.
 - Carefully avoid trapping air bubbles under enamel undercuts.

A.R.T. technique:

- Apply Ketac Molar Easyxim in several portions using a suitable instrument. Undercuts may need to be treated first.
 - Carefully avoid trapping air bubbles under enamel undercuts.
- Slightly over-fill cavities; apply the material to adjacent grooves and fissures.
- Apply a small amount of Vaseline to your forefinger and use this finger to firmly press the glass ionomer cement into cavities, fissures, and grooves.
- Repeatedly move the tip of the forefinger in a mesio-distal and bucco-lingual direction to distribute the material over the entire occlusal surface ("finger press technique").
- Finally remove the finger sideways to prevent the restorative material from lifting out of the cavity.

Fissure sealing with the A.R.T. technique:
The same steps of cleaning, conditioning, application, and processing as in the A.R.T. technique are performed to seal fissures with the only difference being that there is no preparation involved.

Times

At an ambient temperature of 23 °C/73 F and 50% relative humidity the following times apply:

Mixing	min:sec
Processing from start of mixing	00:00
Setting from start of mixing	00:00

At higher temperatures, the time available for processing is shortened, whereas it is prolonged at lower temperatures than indicated (e. g. mixing on a chilled glass slab). The processing time is also shortened, if the amount of powder exceeds the recommendation. Exceeding the indicated processing time leads to reduced bonding to enamel and dentin.

Filling protection

In the first phase of their 2-phase setting process, glass ionomers are sensitive to moisture. Subsequently, there is the possibility of dehydration which may be prevented by applying Ketac Glaze or Vaseline directly after shaping.

Conventional filling therapy and A.R.T. technique:

- Apply Ketac Glaze or Vaseline to all exposed surfaces of the glass ionomer cement.
- Cure Ketac Glaze with light for 10 seconds, if applicable.
 - The inhibition layer produced during polymerization may impede the setting process of addition reaction silicone impression materials. Consequently, such layers must first be removed or a polyether impression material used instead!

Finishing

Conventional filling therapy:

- Beginning no earlier than 5 minutes after the start of mixing, use Arkansas stone, fine-grain diamonds, polishing discs of decreasing grain size or watnyum polishers for finishing.
- If desired, apply Ketac Glaze again to seal the surface and light-cure for 10 sec.

The patients must not expose the filling to any stress for 1 hour!

A.R.T. technique:

- Remove any excess material with a carver or large excavator as soon as possible without pulling the material from the cavity.
- Even before the filling material is completely cured, test the occlusion with some articulation paper.
- Carefully remove any increase in vertical dimension with a carver.
- Especially at the edge of the filling the occlusion should be slightly out-of-contact.
- Apply more Vaseline to the working areas to protect the restoration. The patient must not expose the filling to any stress for 1 hour!

Notes

The material bonds to metal instruments. Therefore, residual quantities of the cement should be removed with water before they set on the instrument.

Storage and Shelf-life

Store the product at 15-25 °C/59-77 °F.
Until the powder is dry, moisture, do not open the powder bag until immediately prior to the first application.
Replace the cap securely after use.
Do not use after the expiration date.

Customer Information

No person is authorized to provide any information which deviates from the information provided in this instruction sheet.


Warranty

3M Deutschland GmbH warrants this product will be free from defects in material and manufacture. 3M Deutschland GmbH MAKES NO OTHER WARRANTIES INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
User is responsible for determining the suitability of the product for user's application. If this product is defective within the warranty period, your exclusive remedy and 3M Deutschland GmbH's sole obligation shall be repair or replacement of the 3M Deutschland GmbH product.

Limitation of Liability

Except where prohibited by law, 3M Deutschland GmbH will not be liable for any loss or damage arising from this product, whether direct, indirect, special, incidental or consequential, regardless of the theory asserted, including warranty, contract, negligence or strict liability.

Information valid as of December 2011

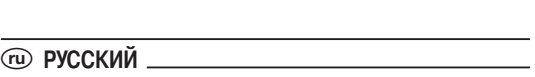

Описание продукта
Ketac™ Molar Easyxim – это стеклокерамический цемент с облицовочным ручным замешиванием. Особенность материала является образование прочной химической связи с эмалью и зубной тканью, что делает возможным щадящее препарирование и обеспечивает великолепное закрепление краев пломбы.
Материал можно применять без прокладок.
Материал выделяет фото и обладает свойством рентгенопрозрачности.
Ketac Molar Easyxim пригоден также для применения при работе минимально инвазивным методом (МИ), а также при лечении зубов по методике А.Р.Т. (Atraumatic Restorative Treatment – Техника Atraumaticной Операции).

Выпускается Ketac Molar Easyxim оттенков А3.

☞ Подробные указания по применению перечисленных ниже продуктов (Ketac® Conditioner и Ketac® Glaze) см. в соответствующих инструкциях по применению. Инструкцию по применению продукта следует хранить в течение всего периода его использования.

Области применения

Традиционное пломбирование:

- Применение в качестве базового слоя при работе по методикам открытого и закрытого сэндвича
- Наращивание культи
- Пломбирование молочных зубов
- Одноповерхностные пломбы в неокклюзионных областях
- Пломбирование полостей V класса (по Блеку) при второстепенном значении эстетического эффекта
- Временные одноповерхностные и многоповерхностные пломбы

Пломбирование зубов при работе по методикам лечения зубов минимально инвазивной терапией (МИ) без бормашины:

- Пломбирование молочных зубов
- Одноповерхностные пломбы в неокклюзионных областях
- Пломбирование полостей V класса (по Блеку) при второстепенном значении эстетического эффекта
- Временные одноповерхностные и многоповерхностные пломбы
- Временное пломбирование полостей III класса (по Блеку)
- Герметизация фиссур

Меры предосторожности

Листы данных безопасности материала 3M можно получить на www.mmm.com, или свяжитесь со своим местным филиалом.

Меры предосторожности во время обработки

Для замешивания порошка Ketac Molar Easyxim необходимо использовать только жидкость Ketac Molar Easyxim.
Смешивание порошка Ketac Molar Easyxim с другими жидкостями серии изделий Ketac приведет к изменению концентрации кислоты в пломбировочном материале.

Это может вызвать послеоперационную чувствительность. Кроме того, это ухудшит механические свойства материала, а также изменит скорость его отверждения.

Подготовительные этапы

Традиционное пломбирование и метод А.Р.Т.:

- Приготовьте необходимые инструменты и материалы.
- При многоточечных пломбах наложите матрицу для защиты смежного зуба и для более удобной отделки кунтура.

Особенности при работе методом А.Р.Т.
Необходимый минимум инструментов и материалов:
Стоматологическое зеркало, зонд, пинцет, экскаваторы (большой, малый и средний), эмалевый нож или заточенная гладилка, инструмент для моделирования, шпатель для смешивания, специальный блокнет для смешивания, при необходимости матрица, ватные валики, ватные шарики и стакан для воды (одноразовый или пригодный для стерилизации).
В зависимости от оборудования кабинета и местных условий этот стартовый набор может быть расширен.

- Перед началом препарирования рабочей области должна быть тщательно промыта и высушена. Благодаря этому будет легко различить обесцвеченную, деминерализованную сухую и целенаправленно ее обработать.
- Во время терапии рабочая область должна оставаться сухой. Если в Вашем распоряжении нет слюноотсоса, следует многократно менять ватные тампоны.

Препарирование

- Удаляйте только зубную ткань, пораженную кариесом. Делать поддурнения не требуется.
 - Не препарируйте слишком тонкие края. Для применения материала необходимо, чтобы минимальная толщина стенок составляла 0,5 мм.
- После препарирования промойте полость водой и просушите воздухом.

Метод А.Р.Т.:

- При небольших полостях расширьте вход в полость стоматологическим долотом или гладилкой. Вследствие этого лишняя опора эмаль проломится и откроет необходимый вход для работы самым маленьким экскаватором.
- Начиная с границы эмали и дентина, круговыми движениями полностью удалите из полости пораженную кариесом зубную ткань при помощи самого маленького экскаватора. При этом также удалите нависающие края эмали, оставшиеся без эмали.
- В завершение очистите дно полости.
 - Для больших полостей используйте самый большой экскаватор; не используйте сильного давления на инструмент, чтобы случайно не вскрыть пульпарную камеру.
- Промойте полость водой и осушите воздухом.

Защита пульпы

Традиционное пломбирование и метод А.Р.Т.:
Для предотвращения раздражения пульпы следует покрыть прилегающие к ней области тонким слоем кальция-гидроксидного препарата с высокой степенью отверждения.

Ограничение использования

Традиционное пломбирование и метод А.Р.Т.:

- Для достижения оптимальной химической адгезии на зубной ткани следует тщательно смыть возникший смазочный слой. Для этого нанесите на препарируемые поверхности Ketac Conditioner или, при работе методом А.Р.Т., Ketac Molar Easyxim liquid (жидкость) и оставьте на 10 сек.
- Затем промойте полость обильным потоком воды и коротко осушите 2-3 раза воздушным потоком, не содержащим масла, или ватными тампонами.
- После просушивания поверхность полости должна приобрести матовый блеск. Пересушивание может привести к возникновению послеоперационной чувствительности.
- Оберегайте подготовленную поверхность от загрязнения. В случае загрязнения – повторите процедуру.

Дозировка

Традиционное пломбирование и метод А.Р.Т.:

- Для разрыхления порошка несколько раз встряхните флакон. Возьмите компоненты в весовом соотношении 4,5 частей порошка (1 ложка без верха) к 1 части жидкости (1 капля).
- Вынимая ложечку из флакона, стряхните избытки порошка, проведя краем ложечки по пластмассовым вкладышам. Не уплотняйте порошок.
- Произведите дозировку требуемого количества порошка и жидкости на блокнете для замешивания. При дозировании жидкости держите флакон вертикально.
 - На пипетке не должно быть засохших остатков жидкости!
 - В отмерянной капле не должно быть пузырьков!
- После использования тщательно закупорьте флаконы с жидкостью и порошком. Проследите за тем, чтобы на дозирочном кольце не оставалось остатков порошка.

Смешивание

Традиционное пломбирование и метод А.Р.Т.:

- Работайте с Ketac Molar Easyxim при комнатной температуре (20-25 °C).
- Используйте металлический или пластмассовый шпатель для цемента и специальный блокнет или стеклянную пластинку для смешивания.
- Рекомендуется смешивать с жидкостью не более двух доз порошка.
- Тщательно перемешайте пасту для достижения однородной консистенции.
 - Погладание влаги может негативно отразиться на свойствах стеклокерамического цемента. Если при соблюдении указанных соотношений достичь однородной консистенции пасты не удается, дальнейшее использование материала не рекомендуется.

Внесение материала в полость

При нанесении избегайте любого загрязнения!
Традиционное пломбирование:

- Внесите Ketac Molar Easyxim в несколько приемов, используя подходящий инструмент. Поддурнения должны быть заполнены в первую очередь.
 - Внимательно следите за тем, чтобы под нависающей эмалью не собиравлись воздушные пузырьки.
- Внесите Ketac Molar Easyxim в несколько приемов, используя подходящий инструмент. Поддурнения должны быть заполнены в первую очередь.
 - Внимательно следите за тем, чтобы под нависающей эмалью не собиравлись воздушные пузырьки.
- Внесите в полость немного больше материала, чем требуется. Загните такие соседние ямки и фиссуры.
- Указательным пальцем, смазанным тонким слоем вазелина, вдавите с силой стеклокерамический цемент в полость, ямки и фиссуры.
- Двигайте указательный палец в переднеокклюзионно – дистальном и щечно-лингвальном направлениях, распределяя материал по всей окклюзионной поверхности (метод «давления пальцем»).
- В завершение уберите палец боковой стороной из полости рта для избежания вынесения материала из зубной полости.

Герметизация фиссур по методу А.Р.Т.:

При герметизации фиссур следует работать так же, как и при пломбировании методом А.Р.Т., и провести изоляцию, кондиционирование, окиснение и шлифование. Единственным различием является препарирование, не требующееся при герметизации фиссур.

- Перед тем, как приступить кьм препарированию, рабочего поле трябва грижливо да се почисти и подсуши. Така цветният деминерализиран емайл лесно се разпознава и обработа.
- Ако няма слюнооткач, работното поле трябва да се поддържа сухо с помощта смяна на памучните ролици.

Рабочее время

При комнатной температуре 23 °C и влажности воздуха 50% требуется следующее время для работы:

Смешивание	min:sec
Рабочее время начная с момента смешивания	00:00
Отверждение начиная с момента смешивания	00:00

Более высокая температура воздуха укорачивает рабочее время, а более низкая (например, при смешивании на охлажденной стеклянной пластинке) увеличивает рабочее время. Увеличение долей порошка также укорачивает рабочее время. Превышение указанного рабочего времени ведет к утрате материалом бондирующих свойств на эмали и зубной ткани.

Защита пломбы

Стеклоиономерные имеют две фазы отверждения. Во время первой фазы они чувствительны к влаге. Не исключено, что может начаться дегидратация, которую предотвратит нанесение Ketac Glaze или вазелина непосредственно после моделирования.

Традиционное пломбирование и метод А.Р.Т.:

- Нанесите лак Ketac Glaze или вазелин на все открытые поверхности стеклокерамического цемента.
- При использовании лака Ketac Glaze его следует фотополимеризовать в течение 10 с.
 - Оставшийся после полимеризации ингибированный слой может помешать процессу отверждения аддитивно реагирующих силиконовых оттичных масс. Поэтому перед тем как снять слепок, удалите этот слой или используйте полиэфирный материал для оттисков!

Шлифование

Традиционное пломбирование:

- Начните шлифование не ранее чем через 5 минут после начала обработки материала, используя акриловые, алмазные, частички, мелкозернистые алмазы, шлифовальные круги с уменьшающейся зернистостью или силиконовые полировальные материалы.
- При желании еще раз нанести Ketac Glaze и полимеризуйте его светом в течение 10 секунд.

Пациенту нельзя надкусывать на запломбированный зуб в течение 1 часа!

Метод А.Р.Т.:

- Удалите излишки материала гладилкой или большим экскаватором, по возможности не отрывая материал от полости.
- Еще до завершения полимеризации материала проверьте окклюзию при помощи артикуляционных бумага.
- Подходящим инструментом удалите избытки материала, завышающие прикус.
- Особенно по краям пломбы немного выведите ее из окклюзии.
- Для защиты пломбы снова нанесите на рабочие поверхности вазелин. Пациенту нельзя надкусывать на запломбированный зуб в течение не менее 1 часа!

Примечание

Материал приклеивается к металлическим инструментам. Поэтому остающиеся на них остатки цемента следует еще до отверждения удалить водой.

Условия и срок хранения
Хранить при температуре 15-25 °C/59-77 °F.
Для предохранения порошка от влаги вскрытые пакетики, в который упакован флакон с порошком, непосредственно перед первым применением.

После применения тщательно закройте крышку флакона с порошком.

Не используйте продукт после истечения срока годности.

Информация для покупателя
Запрещается предоставлять информацию, которая отличается от информации, содержащейся в данной инструкции.


Гарантичные обязательства

Компания 3M Deutschland GmbH гарантирует отсутствие в своей продукции дефектов, связанных с исходными материалами и производственным процессом. КОМПАНИЯ 3M Deutschland GmbH НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ. ВКЛЮЧАЯ ЛЮБЫЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЛИБО ТОВАРНОЕ СОСТОЯНИЕ ИЗДЕЛИЙ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ, ЛИБО ИХ ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ ПОКУПАТЕЛЯ. Пользователь несет полную ответственность за определение пригодности данного продукта своим конкретным целям. Если в продукте будут обнаружены дефекты в период действия гарантии, Вашим исключительным правом и единственной обязанностью производителя является устранение дефекта или замена дефектной продукции марки 3M Deutschland GmbH.

Ограничение ответственности

За исключением ситуаций, прямо предусмотренных Законом, компания 3M Deutschland GmbH не несет никакой ответственности за любые отрицательные последствия или ущерб, связанные с использованием данной продукции: прямые, косвенные, умалшенные, случайные или опосредованные, независимо от выдвинутых объяснений, включая гарантии, контракты, небрежность или объективную ответственность.

Информационные данные на декабрь 2011

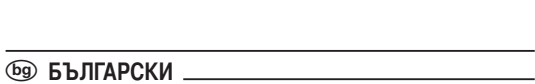

Описание на продукта
Ketac™ Molar Easyxim е глас-иономерен цимент за ръчно разбъркване, който се бърка изключително лесно. Свойството на материала да се свързва химически с емайла и дентина дава възможност за лесно препариране и отлично херметизиране по кривичата на обтурацията.
Материалът може да се нанася без подложка. Той отделя флуорни йони и е рентгенопрозрачен.
Ketac Molar Easyxim е подходящ за използване при минимално инвазивна обтураторна терапия (МИ) и за приложения с атрауматична възстановителна техника (АВТ).

☞ За подробности относно упоменатите по-долу продукти "Ketac" Conditioner и Ketac" Glaze моля отнасяте се към съответните указания за употреба. Инструкциите за употреба не бива да се нарушават за периода на употреба на продукта.

Области на приложение

Конвенционална обтураторна терапия

- Като подложка за композитни обтурации с една или повече повърхности.
- За изграждане на пълната
- Обтурации на временни зъби
- Обтурации с една повърхност на неучастващи в оклузията участъци
- Щемци обтурации без косметични изисквания
- Полупостоянни обтурации с една или повече повърхности

Минимално инвазивна (МИ) обтураторна терапия (АВТ техника):

- Обтурации на временни зъби
- Обтурации с една повърхност на неучастващи в оклузията участъци
- Обтурации от V клас, когато естетичният вид ни е приоритет
- Полупостоянни обтурации с една или повече повърхности
- Полупостоянни обтурации от III клас
- Запечатване на фисури

Предпазни мерки

Може да получите листовките с данните за безопасност на материалите на 3M от www.mmm.com или да се свържете с вашия местен филиал.

Предпазни мерки при обработка

За обработка на Ketac Molar Easyxim Powder трябва да бъде използван само Ketac Molar Easyxim Liquid.
Смесването на Ketac Molar Easyxim Powder с други течности от продуктова линия Ketac ще промени киселинната концентрация в обтурационния материал.
Това може да доведе до постоперативна чувствителност. Освен това ще се влошат механичните свойства на материала, а също и времето за втвърдяване ще бъде различно.


Етапи преди препарироване

Конвенционална обтураторна терапия и АВТ техника:

- Дръжте под ръководство необходимите инструменти и материали.
- При обтурации с няколко повърхности, се поставя матрица за предпазване на съседните зъби и улесняване на оформянето на контурите.

Конкретно при АВТ техниката:
Минималният набор инструменти трябва да включва: стоматологично огледалце, сонда, пинсети, экскаватор (голям, среден, малък), моделажен инструмент, скапч (режещ инструмент с пума на секира), шпатула за разбъркване, блокче за разбъркване, памучни ролици, памучни туфери, чаша за вода (подлежаща на стерилизация или еднократна). Този основен набор може да се допълни с добавяени инструменти в зависимост от наличните финансови средства и местните обстоятелства.

- Преди да се пристъпи към препарирането, работното поле трябва грижливо

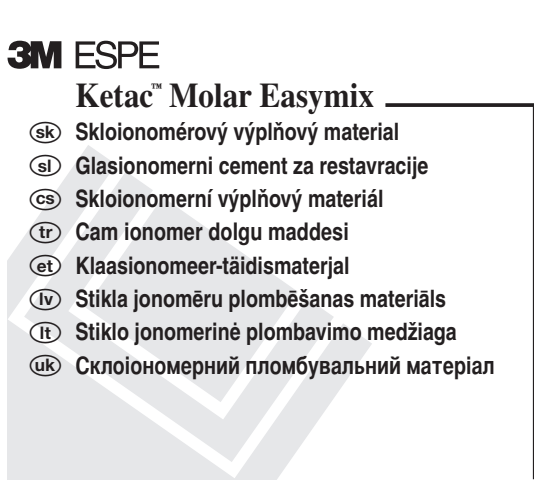

Návod na použitie
Navodila za uporabo
Návod k použití
Kullanna Talimatları

3M Deutschland GmbH
Dental Products
Carl-Schurz-Str. 1
41453 Neuss - Germany

3M ESPE
Dental Products
2510 Conway Avenue
St. Paul, MN 55144-1000 U.S.A.

3M, ESPE and Ketac are trademarks of 3M or 3M Deutschland GmbH. Used under license in Canada.
© 2012, 3M. All rights reserved.

SLOVENSKY

Popis výrobku
Ketac™ Molar Easymix je mimoriadne ľahko ručne miešateľný skloionomerný cement. Vďaka svojej dobrej chemickej väzbe na sklovinu a dentín umožňuje jednoduchú prípravu a výborné estetické uskry okrajov výplne. Materiál sa dá použiť bez podložky. Uvoľňuje fluoridové ióny a je radiopaktrný.
Ketac Molar Easymix je vhodný pre minimálne invazívnu konzervačnú liečbu (MI) a pre aplikáciu v rámci A.R.T. (atraumatická konzervačná technika).

Ketac Molar Easymix je možné obďažť vo farbe A3.

☞ Detailné informácie o nižšie uvádzaných produktoch Ketac™ Conditioner a Ketac™ Glaze sa uvádzajú v príslušných návodoch na použitie.

Po celú dobu používania tohto výrobku sa musí uchovávať návod na jeho použitie.

Oblasť použitia	
Konvenčná konzervatívna liečba: • Ako podložka pre jednoploškové a viacploškové kompozitné výplne • Nadstavby • Primárne dentálne výplne • Jednoploškové výplne v miestach bez oklúzneho zafarbenia • Krčkové výplne, pri ktorých nie je kozmetický efekt priortiu • Polodôčasné jednoploškové a viacploškové výplne Minimálne invazívna konzervačná liečba (MI) (A.R.T. technika) • Primárne dentálne výplne • Jednoploškové výplne v miestach bez oklúzneho zafarbenia • Trieda V výplní, pri ktorých nie je vzhľad prioritou • Polodôčasné jednoploškové a viacploškové výplne • Polodôčasné výplne III.triedy • Pečatenie fisúr	
Predbežné opatrenia	
3M Bezpečnostné listy (MSDS) nájdete na www.mmm.com, alebo kontaktujte miestne zastúpenie 3M.	
Predbežné opatrenia počas spracovania	
Na spracovanie prášku Ketac Molar Easymix možno použiť iba Ketac Molar Easymix tekutinu. Zmiešavanie prášku Ketac Molar Easymix s inými tekutinami produktovej rady Ketac spôsobí zmenu koncentrácie kyseliny vo výplňovom materiáli. Toto môže viesť k precitlivlosti po výplni. Navyac, dôjde k zhoršeniu mechanických vlastností materiálu a zмене rýchlosti tuhnutia.	
Kroky pred preparáciou	
Konvenčná konzervatívna liečba a A.R.T. technika: ► Náležite sa pripravte všetky potrebné nástroje a materiály. ► V prípade viacploškových výplní sa umiestni matricová páska, chrániaca susedné zuby a tvoriaca jednoduchú kontúru. Špeciálne pri A.R.T. technike: Minimálna sada nástrojov má obsahovať: Dentálne zrkadielko, pinzetu, sondu, exkavator (veľký, stredný, malý), modelovací nástroj, karver (rezací nástroj tvoru sekery) miešajúcu špachtľu, miešaciu podložku (ak je potrebná) vatové vaty, vatové tablety, misky na vodu (sterilizovateľné alebo jednorazové) Základná sada sa dá doplniť ďalšími nástrojmi v závislosti na dostupných finančných zdrojoch a miestnych podmienkach.	
Pripava	
Konvenčná konzervatívna liečba: ► Odstráni sa iba karizénne hmoty; nevytvárajú sa pomdminované miesta. ► Nemajú sa preparovať tenké okraje, pretože materiál vyžaduje minimálnu hrúbku steny 0,5 mm! ► Kavita sa vyčistí vodou a vysuší vzduchom. A.R.T. technika: ► Otvor do diaľších kavit sa zväčší dentálnym hečcom alebo karverom tak, aby sa dosiahol pevný prístup. Tým sa odľomia všetky úseky s prarievajúcou sklovinou a získa dostatočný priestor na prístup najmenšími ručnými exkavátormi. ► Cirkulárnymi brúsnymi pohybmi sa začína na sklovinno-dentínovom rozhraní najmenším manuálnym exkavátorom kompletne odstraňovať z kavity akýkoľvek karizénny dentín. Podmínovaná sklovina sa má tiež odstrániť. ► Následne sa vyčistí základná kavit. ► Pri ošetroaní týchto kavit sa má použiť najväčší možný exkavátor s malým tlakom tak, aby sa nevrátila neovtvia pulpová dŕtina, čo by sa mohlo stať následkom prievého tlaku. ► Kavita sa vyčistí vodou a vysuší.	
Ochrana pulp	
Konvenčná konzervatívna liečba a A.R.T. technika: Časť kavit, kde je v blízkosti pulpy, sa bdoovo kryť tuhnutím hydroxidom kalcia, aby sa pulpa chránila pred dráždením.	
Kondicionovanie	
Konvenčná konzervatívna liečba a A.R.T. technika: Pre optimálnu chemickú väzbu je dôležité, aby sa znečistený povrch po prípravnej fáze očistil, všetky nečistoty sa musia starostlivo odstrániť pomocou Ketac Conditioner, alebo pri použití A.R.T. techniky pomocou Ketac Molar Easymix tekutinou, ktoré sa nanesú na preparované plochy a nechajú sa pôsobiť 10 sek. Potom sa sprví vplyach s hnojným množstvom vody a vysuší v 2-3 krátkych intervaloch s vodou alebo stlačeným vzduchom neobsahujúcim ok veľkého vplyvu dotyk vodotvyní tanpónmi. ► Kavita nesmie byť presušená. Povrch kavity ma mať matný lesk. Presušenie kavity môže mať za následok pooperačnú citlivosť po zhotovení výplne. Treba zabrániť novej kontaminácii; ak sa povrch rekontaminuje, postup treba zopakovať.	
Dávkovanie	
Konvenčná konzervatívna liečba a A.R.T. technika: Flaška sa zatrasie tak, aby sa prášok pri otvorení nevysypal von. Mieša sa v pomere (výchovný) 4:5 dielu prášku (1 lyžička so zarovnaným práškom) : 1 diel tekutiny (1 kvapka). Pri vyberaní prášku sa prebytočný zhrmie na úrovni lyžičky o stierací krúžok. Treba sa vyhnúť stlačeniu prášku. Dostatočné množstvo prášku a tekutiny sa dá vedľa seba na miešaciu podložku. Pri dávkovaní sa drží flaška s tekutinou vo vertikálnej polohe. ► Dávkovacie kvapkadko musí byť použité bez zaschnutého rezídua tekutiny! ► Kavky nesmú mať bubliny! Po použití treba fliašku s tekutinou poriadne utvoriť a utrieť sa, že na stieracom krúžku nezostali žiadne zvyšky prášku.	

Miešanie
Konvenčná konzervatívna liečba a A.R.T. technika:
► Ketac Molar Easymix sa spracováva pri izbovej teplote (20-25 °C /68-77 °F).
Na miešanie sa používa kovová alebo plastová špachtľa ako na cement a miešacia podložka alebo sklenená dosička.
► V ideálnom prípade sa má prášok prmiešať do tekutiny v nie viac ako dvoch častiach.
► Pasta sa opakovane rozotiera, kým nemá homogénnu konzistenciu. – Vlhkosť môže mať negatívny vplyv na vlastnosti skloionomerného cementu. Ak sa pri danom pomere zložiek nedosiahne homogenita pasty, materiál sa znehodnotí.

Návod na použitie
Pri aplikácii sa treba starostlivo vyhnúť znečisteniu.
Konvenčná konzervatívna liečba:
► Ketac Molar Easymix sa aplikuje v niekoľkých častiach vhodným nástrojom. Ako prvé by sa mali zaplniť podmínované miesta. – Minimálna debelina zobne stene, ki je zahteva materiál je 0,5 mm!
► Kaviteľo očistíte z vodnim sprejem in posušíte z zrakom.

A.R.T. technika:
► Ketac Molar Easymix sa aplikuje v niekoľkých častiach vhodným nástrojom. Ako prvé by sa mali zaplniť podmínované miesta. – Treba sa pozorne vyhnúť vytvoreniu bublín na podmínovaných miestach pod sklovinou.
► Kavity sa mierne prepĺňa; materiál sa nanesie do susedných rýh a fisúr. Málo množstvo vazelíny sa nanesie na ukazováč, ktorým sa pevne skloionomér zatlačí do kavit, fisúr a rýh.
► Špička ukazováka sa opakovane pohybuje v mesio-distálnom a buko-linguálnom smere tak, aby materiál pokryl celú oklúzánu plochu (technika tlačenia prstom).
► Nakoniec sa prst odťiahne bočným smerom, aby sa zabránilo nadvihnutiu materiálu vztlakom.

Pečatenie fisúr A.R.T. technikou:
Rovnaké postupy ako pri A.R.T. technike, čistenie, kondicionovanie, aplikácia a spracovanie, sa robia pri pečatení fisúr, s tým rozdielom, že nie je potrebná preparácia.

Časy	
Pri okolitej teplote 23 °C a 50% relatívnej vlhkosti sú platné nasledovné časy:	
	min:sek
Miešanie	00:30
Spracovanie od začiatku miešania	03:00
Tuhnutie od začiatku miešania	05:00

Výššou teplotou sa uvedené časy skracujú, pri nižších sa naopak predlžujú grotul uvedeným (napr. miešáním na schladenej sklenenej miešacej doske). Čas spracovania sa tiež skracuje ak je množstvo prášku väčšie, než sa doporučuje. Predĺženie spracovania vedie k redukcii sily väzby na dentín a sklovinu.

Ochrana výplne
V prvej fáze tuhnutia sú skloionoméry, tuhnuce v dvoch fázach, citlivé na vlhkosť. Okrem toho výplni robí vysychanie, ktorému sa dá zabrániť aplikáciou Ketac Glaze alebo vazelíny ihneď po dotvorení.

Konvenčná konzervatívna liečba a A.R.T. technika:
► Ketac Glaze alebo vazelína sa nanesie na všetky voľné plochy skloionomerného cementu.

► Ketac Glaze sa expozuje svetlom počas 10 sekúnd, ak je to vhodné. – Inhibičná vrstva vznikajúca v priebehu polymerizácie môže zabrániť správne mu tuhnutiu následne použitých silikónových odtlačkových materiálov. Preto sa má táto vrstva najskôr odstrániť, alebo použiť namiesto nich polyéterové odtlačkové hmoty.

Povrchová úprava	
Konvenčná konzervatívna liečba: Na povrchovú úpravu sa používajú najskôr 5 minút po začatí miešania arkansaský kameň, jemnozrnné diamanty, leštiace disky so zmešňujúcou sa zrnitosťou alebo silikónové leštiace disky. Ak je to vhodné, Ketac Glaze sa opät expozuje svetlom počas 10 sekúnd, aby sa chránil jeho povrch. Pacient nesmie vystaviť výplň žiadnemu tlaku počas 1 hodiny.	
A.R.T. technika:	
Odstráni sa akýkoľvek prebytok karverom alebo veľkým exkavátorom tak, ako aj to možné, bez vytrhnutia výplne z kavity. Esťe pred úplným vytvrdnutím materiálu sa odskúša oklúzia artikuláčnym papierom. Starostlivo sa karverom odstráni akýkoľvek prebytok vo vertikálnom smere. Predovšetkým okraj výplne sa má vyridiť z oklúzneho kontaktu. Nanáša sa viac vazelíny na pracovné miesta s cieľom chrániť výplň. Pacient nesmie vystaviť výplň žiadnemu tlaku počas 1 hodiny.	
Poznámky	
Materiál sa lepi na kovové nástroje. Preto sa zvyšky cementu majú zmyť vodou ešte predtým, než stuhnú na nástroji. Skladovanie a doba skladovania Skladujte pri teplote 15-25 °C /59-77 °F. Prášok sa má chrániť pred vlhkosťou, balíček s ním sa nemá otvárať skôr, než sa ide prvý krát použiť. Po použití sa musí vrchnák poriadne zatvoriť. Výrobok nepoužívajte po uplynutí expiračnej doby.	
Informácie pre zákazníka	
Žiadna osoba nie je oprávnená poskytovať informácie, ktoré by sa odlišovali od informácií uvedených v tomto návode.	

Zárúka	
3M Deutschland GmbH zaručuje, že tento výrobok nemá materiálové ani výrobné chyby. 3M Deutschland GmbH NEPOSKYTUJE ŽIADNE ĎALŠIE ZÁRUKY VRAŤANIE ŽIADNEJ IMPLIKOVANEJ ZÁRUKY ALEBO PREDJUDICHTI ČI VYHODNOSTI NA KONKRETNÝ ÚČEL. Užívateľ zodpovedá za vhodný spôsob použitia výrobku. Ak sa na výrobku objaví v záručnej dobe chyba, má užívaťel právo na jej odstránenie a jednotu povinnosťou 3M Deutschland GmbH bude oprava alebo výmena výrobku.	
Ozmedzenie zodpovednosti	
Ak zákon nestanovuje inak, spoločnosť 3M Deutschland GmbH nezodpovedá za žiadnu priamu, nepriamu, mimoriadnu, náhodnú ani následnú stratu vzniknutú použitím z tohto výrobku, bez ohľadu na teoretický nárok, zárukú, zmluvu, nedbalosť alebo presne vymedzenú zodpovednosť.	
Platnosť uvedených informácií od decembra 2011	

SLOVENŠČINA

Opis produkta
Ketac™ Molar Easymix je glasionomerní cement, katerega mešenje je ročno in zelo enostavno. Spodobnost materiala, da se kemíno vne na sklenino in dentín olajša izdelavo restavracije in omogoča odlično obrabno zaporo. Ne zahteva predhodnega podlaganja kavite. Sprošča fluoridne íone in je radiopacén.
Ketac Molar Easymix je ravno tako primeren za moderno terapijo z minimalno invazijo ter tudi za tehniko A.R.T. (atravmatski restavracijski poseg).
Ketac Molar Easymix je na razpolago v bavi A3.
☞ Za vse podrobnosti o materialih Ketac™ Conditioner in Ketac™ Glaze, o katerih bomo govorili kasneje, preberite navodila za uporabo priložena tem materialom. Navodila za uporabo v času uporabe proizvoda ne zavrzite.

Področja uporabe	
Konvencionalni restavracijski posegi: • Kot podloga za eno- ali večploškovne zalivke iz kompozitov • Nadgradnje • Zalivke na mlačnih zobeh • Enoploškovne zalivke na ploskvah, ki niso grizne (npr. V razrez) • Zalivke v področju zobnega vrata, pri katerih estetika ni prioriteta • Semipermanentne eno- ali večploškovne zalivke Posegi pri modernih preparacijah z minimalno invazijo (A.R.T. tehnika): • Zalivke na mlačnih zobeh • Enoploškovne zalivke na ploskvah, ki niso grizne (npr. V razrez) • Zalivke V razreza, pri katerih izgled ni najpomembnejši • Semipermanentne eno- ali večploškovne zalivke • Semipermanentne zalivke III razreda • Zalivanje fisur	
Previdnostni ukrepi	
3M MSDS liste lahko dobite na spletni strani www.mmm.com ali kontaktirate lokalno podružnico.	
Nasveti pred obdelavo	
Prah Ketac Molar Easymix mešajte izključno in samo s tekočino Ketac Molar Easymix. Če boste prah Ketac Molar Easymix mešali z drugo tekočino proizvodne linije Ketac, se bo spremenila koncentracija kisline v materialu. To lahko povzroči postoperno občutljivost. In ne samo to, spremenile se bodo tudi mehanske lastnosti materiala in hitrost strjevanja se bo zmanjšala.	
Prilaprjavljani postopki	
Konvencionalni restavracijski posegi in tehnika A.R.T.: ► Pripravile vse potreben material in instrumentarij. ► Pripravile vse potreben material in instrumentarij. Ta lahko povzroči postoperno občutljivost. In ne samo to, spremenile se bodo tudi mehanske lastnosti materiala in hitrost strjevanja se bo zmanjšala.	

Posebnosti pri tehniki A.R.T.:
Minimálni set instrumentarja vključuje: Ogledalec, sondo, pinceto, exkavator (velik, srednji, majhen), modelirni instrument, ukrijven rezilni instrument, mešalno lopatko, mešalni bob, matrico (če je potrebna), vatne kroglice, zobne rolce, kozarec.
Osnovnemu setu lahko dodate druge instrumente glede na finančno zmoglost in ostale okoliščine v ordinaciji.
► Pred začetkom dela mora biti odobno področje očistoeno in posušeno.
To vam bo pomagalo prepoznati zabavane in demineralizirane predele sklenine.
► Če pri delu nimate sesalne enote oz. sesalca, pogosto menjajte zobne rolce z namenom, da delovno področje ostane suho.

Priprava
Konvencionalni restavracijski posegi:
► Odstranite le karizozne predele zobne substance; izdelava podvisov ni potrebna.
► Minimalna debelina zobne stene, ki jo zahteva material je 0,5 mm!
► Kaviteľo očistite z vodnim sprejem in posušíte z zrakom.

Tehnika A.R.T.
► Vhod v majhne kavite nekoliko razširite s svedrom ali nožkom in si olajšate dostop ter preglednost kavite. Vso spodrozno sklenino boste z lahkojo odstranili ter si na ta način ustvarili boljši dostop do karizozih mas z exkavatorjem.
► Ves karizozen dentin boste iz kavitee najlaže odstranili s majhnim ročnim exkavatorjem, s krožnimi strugačnimi kiji začneviš na dentinsko skleninski meji. Nepodprto sklenino je tudi potrebno odstraniti.
► Nalo še temeljito očistite dno kavitee.
► Za obdelavo večjih kavite uporabite najprej možen exkavator in delajte z majhnim pritiskom, da ne boste eksplodirali pulpe!
► Kaviteľo očistite z vodnim sprejem in jo posušite.

Zaščita pulpe
Konvencionalni restavracijski posegi in tehnika A.R.T.:
Področja neposredno od pulpi prekritje s plastjo materiala, ki vsebuje kalcioid hidroksid. Na ta način boste pulpo zaščitili pred iritacijo.

Kondicioniranje
Konvencionalni restavracijski posegi in tehnika A.R.T.:
► Za optimálno kemíno vezavo materiala na zob je potrebno vse opilke s površine odstraniti. To boste najlaže dosegli z uporabo Ketac Conditioner ali s tekočino Ketac Molar Easymix, tako da jo boste nanesli na površino in pustili učinkovati 10 sekund.
► Kaviteľo posušite s pusterjem, tako da le 2-3 krat spihate z zrakom brez prsmisi vode ali olj ali pa jo enostavno vsesajte v zlatno krčlico.
► **Kavitea naj bo toliko suha, da bo površina videti matirana.**
Prekremeno sušenje se lahko kaže kot postopovalna preobčutljivost.
► Poskušajte se izogniti ponovni kontaminaciji; če je površina kavitee ponovno kaminirana je celoten postopek potrebno ponoviti.

Doziranje
Konvencionalni restavracijski posegi in tehnika A.R.T.:
► Stenkléniko pred uporabo pretrese. Razmerje (težnostno) prah: tekočina je 4,5 delov praha (polna zravnana žlička) : 1 del tekočine (1 kapljica).
► Ko jemljete prah iz stenklénike, površino žlice obrišite ob plastični vstavek na stenkléniki. Praha ne kompresirajte.
► Prímerno količino praha in tekočino dajte na različna mesta na mešalnem lističu. Pri doziranjú tekočine držite stenkléniko navpično.
– Na iztočnem delu stenklénike s tekočino naj ne bo nobenih posušenih ostanokv tekočine!
– Kapljice ne smejo vsebovati zračnih mehurčkov!
► Po uporabi tesno zaprite stenkléniki s prahom in tekočino in se prepričajte, da ni ostalo nič prahu na zamašku stenklénike s tekočino.

Mešanje
Konvencionalni restavracijski posegi in tehnika A.R.T.:
► Ketac Molar Easymix mešajte pri sobni temperaturi (20–25 °C).
► Prah in tekočino mešajte s plastično lopatko za cement na mešalnem lističu. Pri doziranjú tekočine držite stenkléniko navpično.
– Na iztočnem delu stenklénike s tekočino naj ne bo nobenih posušenih ostanokv tekočine!
– Kapljice ne smejo vsebovati zračnih mehurčkov!
► Po uporabi tesno zaprite stenkléniki s prahom in tekočino in se prepričajte, da ni ostalo nič prahu na zamašku stenklénike s tekočino.

Návod na použitie
Med nanávaním pazite, da ne pridete do kontaminácie materiala ali kavitee.

Konvencionalni restavracijski posegi:	
Ketac Molar Easymix vnašajte v kavite v nekaj porciách s primerim instrumentom. Najprej bo potrebno z materiálom naplniti podvisna mesta. – Pazite, da se pod skleninska podvisna mesta ne bodo užili zračni mehurčki. Ketaka A.R.T. Ketac Molar Easymix vnašajte v kavite v nekaj porciách s primerim instrumentom. Najprej bo potrebno z materiálom naplniti podvisna mesta. – Pazite, da se pod skleninska podvisna mesta ne bodo užili zračni mehurčki.	
Kaviteľo naplnite z materiálom rahlo v višku; z materiálom naplnite tudi okolné jamice in fisure. Na konco prsta nanesite malý vzalec in s prstom potegnite ter rahlo pritisnite materiál v kaviteľo, jamice in fisure. Večkrat zaporedoma materiál s konico prsta poklopite v mezo-distálnu rúhu v buko-lingválnej smeri in ga rozprešedte po celotni oklúzánej površini (=tehniku pískania s prstom=).	
Ko končate, prst premaknite vstran in pazite, da materiál ne potegnete ven iz kavitee.	

Zalivanje fisur s tehniko A.R.T.:
Pri zalivanju fisur boste na enak način kot pri tehniki A.R.T. očistili površino in jo kondicionirali, nanasali material ter izdelali restavracijo. Edina razlika bo ta, da pri zalivanju fisur ne boste pripravili kavite.

Časi	
Naslednji časi veljajo pri sobni temperaturi (23 °C) in 50% relativni vlažnosti:	
	min:sekunde
Mešanje	00:30
Delovni čas od začatka mešanja	03:00
Čas strjevanja od začatka mešanja	05:00

Pri višjih temperaturah je delovni čas nekoliko skrajšaj, pri nižjih temperaturah pa nekoliko podaljšaj (zaradi npr. kajenja na hladni stenki ploščici).

Delovni čas se skrajša tudi, če uporabite večjo količino prahu od priporočene. Spreminjanje indiciranege delovnega časa ima za posledico zmanjšano moč vezave materiala na dentin in sklenino.

Zaščite zivote
V prvi fazi dostopenjakega strjevanja so glasionomerni cementi občutljivi na vlago. Nato pa se (v drugi fazi) pojavi navarnost dehidracije, ki pa jo lahko preprečimo z nanasanjem Ketac Glaze-a ali vazeline direktno na že oblikovano zalivko.
Konvencionalni restavracijski posegi in tehnika A.R.T.:
► Ketac Glaze ali vazelino nanesite na vse izpostavljene površine glasionomernega cementa.
► Nato ga 10 sekund presvetlite s polymerizacijsko lučko.
– Inhibicijska plast, ki nastane med polymerizacijo lahko vpliva na proces strjevanja adicjskih siliknov. Zato je pred odtiskovanjem z adicjskim silikonom to plast potrebno odstraniti ali pa za odtiskovanje uporabiti polietersko odtisno maso.

Končna obdelava
Konvencionalni restavracijski posegi:
► S končno obdelavo lahko začnete šele po 5 minutah od začatka mešanja materiala. Uporabite kame, fine diamante in polime diske z vedno manjšo grobostjo ali silikonske polime gumice.

► Po potrebi lahko ponovno nanesete plast Ketac Glaze, s katero boste površino zalivke ponovno zalili. Material nato presvetlite 10 sekund.

Pacient na zalivko 1 uro ne sme izvajati nobenega pritiska (zvečenje, stiskanje)!
Tehnika A.R.T.
► Ne da bi vsega materiala potegnili ven iz kavitee, s sondo ali exkavatorjem čim prej odnesite viške materiala.
► Okluzijo lahko preverite z artiklacijskim papirjem še preden se je material dokončno strdil.
► Vse viške v vertikalni dimenziji previdno odstranite s sondó.
► Bodite posebno pozorni na rob zalivke, ki naj bi bil rahlo izven okluzije.
► Za zaščito zalivke delovno področje namazite z vazelino.
Pacient na zalivko 1 uro ne sme izvajati nobenega pritiska (zvečenje, stiskanje)!

Opombe
Material se lepi na kovinske instrumente. Zato je potrebno vse odvečni material, ki ostane na instrumentih čim prej odstraniti, še preden se strdi.
Shranjevanje in rok trajanja
Proizvod shranjujte pri temperaturah 15–25 °C /59–77 °F. Stenkléniko s prahom odložite neposredno pred uporabo; le tako se boste izognili nepotrebnem izpostavljenju prahu vlagi.
Takoj po uporabi stenkléniko zaprite s pokrovom.
Ne uporabljate po poteku roka uporabe.

Informácie za kupca
Nobena osoba nima pooblastia za posredovanje kakršnihkoli informacij, ki odstopajo od informací v tem navodilu.

Garancija
3M Deutschland GmbH jamá, da bo ta izdelek brez napak v materialu in izdelavi. 3M Deutschland GmbH NE DAJE NOBENIH DRUGIH JAMSTEV.

VKLJUČNO Z NAZNAČENIMI JAMSTVI ALI JAMSTVI ZA PRODAJO ALI PRIMERNOST ZA DOLGOČEN NÁMEN. Uporabnik mora sam presoditi, ali je proizvod primeren za določeno uporabo. Če se la izdelek pokvari v garancijskem obdobju, bo vašá izključna odškodnina in izveznost družbe 3M Deutschland GmbH, da popravi ali zamenja svoj izdelek.

Omejitve odgovornosti
Če to ni prepovedano z zakonom, družba 3M Deutschland GmbH ne bo odgovorna za kakršnokoli izgubo ali škodo, izhajajočo iz tega izdelka, ne glede na to, ali je posledna, neposredna, posebna, naključna ali posledična, ne glede na pravno podlago zahtevka, vključno z garancijo, pogodbo, malomarnostjo ali striktno odgovornostjo.

Posodobitev decembra 2011

ČESKY

Popis výrobku
Ketac™ Molar Easymix je skloionomerní cement pro ruční míchání, který se mimořádně snadno míchá. Díky své chemické vazbě na sklovinu a dentín umožňuje snadnou přípravu a výborné estetické uskry okrajů výplně. Materiál je možné aplikovat bez podložky. Uvolňuje fluoridové ionty a je radiopaktní.
Ketac Molar Easymix je tedy vhodný pro použití v minimální invazivní výplňové terapii (MI) a pro použití v technice A.R.T. (Atraumatic Restorative Treatment).
Ketac Molar Easymix se vyrábí v odstínu A3.

☞ Podrobnosti k dále uvedeným výrobkům Ketac™ Conditioner a Ketac™ Glaze naleznete v příslušných informacích o použití. Návod k použití nevyhazujte během používání výrobku.

Oblasť použiti	
Běžná výplňová terapie: • jako podložka pro jedno- a víceploškové kompozitní výplně • dostavby pilířů • výplně mléčných zubů • jednoploškové výplně v oblasti nezažehávaný skus • výplně zubního krčku bez estetické priority • dlouhodobé provizorní jedno- a víceploškové výplně Minimální invazivní výplňová terapie (technika A.R.T.): • výplně mléčných zubů • jednoploškové výplně v oblasti nezažehávaný skus • výplně V, třídy, pokud estetika není prioritou • dlouhodobé provizorní jedno- a víceploškové výplně • dlouhodobé provizorní výplně III. třídy • pečetení fisur	
Bezpečnostní opatření	
3M MSDS lze získat na webu pod www.mmm.com nebo kontaktujte místní pobočku 3M.	

Opatření během zpracování
Ketac Molar Easymix Powder smí být míchán pouze s Ketac Molar Easymix Liquid.
Míchání Ketac Molar Easymix Powder s jinými tekutinami řady výrobků Ketac by změnilo koncentraci kyseliny výplňového materiálu.
To by mohlo vést k pooperační citlivosti. Navíc by byly ovlivněny mechanické vlastnosti materiálu a změnila by se rychlost tvrdnutí.

Před přípravou
Běžná výplňová terapie a technika A.R.T.:
► Připravte si všechny potřebné nástroje a materiály.
► U víceploškových výplní použijte na ochranu sousedního zubu a pro lehké konturování výplně matricovou pásku.

Speciálně pro techniku A.R.T.:
Minimální sada nástrojů má obsahovat: zubní zrcátko, sondu, pinzetu, velký, střední a malý exkavátor, carver (zešklivovač dásňového okraje), modelovací nástroj, míchací lopatku, míchací podložku, případně matrice, smoly vaty, vatové smotky, pohárěk na vodu (sterilizovatelný nebo jednorázový).
Podle vybavení praxe a místních podmínek může být tato základní vybavení rozšířeno.
► Pracovní pole před preparací důkladně vyčistěte a vysušte. Díky tomu je možné zbarvenou, demineralizovanou

