


3M™ Coheban™ Self-Adherent Wrap Nexcare™ Athletic Wrap

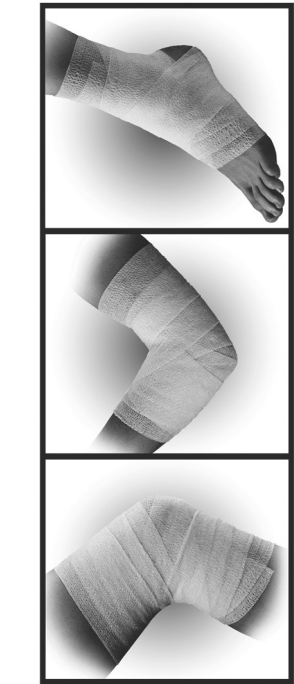

Made in Germany
3M Deutschland GmbH
Health Care Business
 Carl-Schurz-Str. 1
 41453 Neuss, Germany

© 2022, 3M. All rights reserved. Unauthorized use prohibited.
 3M, Coheban and Nexcare are trademarks of 3M.
 3M.com

Date of issue 2022-10
 DV-0163-0381-5/1022 3100041857/1022

3M™ Coheban™ Nexcare™ Self-Adherent Wrap Athletic Wrap

Product Description:

3M™ Coheban™ Self-Adherent Wrap and Nexcare™ Athletic Wrap is a laminate of nonwoven material and elastic fibers placed lengthwise to provide elasticity. The elastic wrap contains a cohesive material that makes it stick to itself but not to other materials or skin.

Intended Use:

3M™ Coheban™ Self-Adherent Wrap / Nexcare™ Athletic Wrap is intended for use as an elastic wrap to provide compression or support, or to secure dressings or devices. This product is not designed, sold or intended for use except as indicated.

Intended User:

Intended users are health care professionals and lay persons following the directions of the professional and the instruction for use.

Warnings:


- Wrap will not slip or loosen after application. DO NOT wrap too tightly to avoid impairing circulation and causing serious injury. The risk of impaired circulation is higher for children.
- Monitor area frequently (no less than every 24 hours) for signs of swelling, discoloration, pain, numbness, tingling, or other changes in sensation. If these symptoms occur, remove wrap immediately and contact your health care provider.
- DO NOT place the Wrap in direct contact with an open wound because it may lead to infection.
- This product contains natural rubber latex which may cause allergic reactions.

Precautions:

- 3M™ Coheban™ Self-Adherent Wrap / Nexcare™ Athletic Wrap does not slip or loosen after application. It should be applied with only the appropriate amount of compression.
- When used as a component in a compression wrap system, it is important to ensure adequate arterial blood flow to avoid injury secondary to decreased circulation. 3M™ Coheban™ Self-Adherent Wrap / Nexcare™ Athletic Wrap should be used as a component of a compression wrap system only under the supervision of a wound care specialist.
- Do Not Reuse. Reuse may result in compromising product integrity and / or lead to device failure.

Directions for Use:

- Unwind approximately 12 inches (30 cm) of 3M™ Coheban™ Self-Adherent Wrap / Nexcare™ Athletic Wrap from the roll and allow the wrap to relax.
- Without stretching, apply one full wrap and overlap. Press overlapped area lightly to keep the end in place. See Figure 1.
- Proceed with wrapping, applying tension to the wrap only to obtain desired compression. Always unwind more 3M™ Coheban™ Self-Adherent Wrap / Nexcare™ Athletic Wrap from the roll before making a wrap so that the product is not applied with too much tension. See Figure 2.
- When application is complete, cut off excess 3M™ Coheban™ Self-Adherent Wrap / Nexcare™ Athletic Wrap. Secure the end of the application by gently pressing.

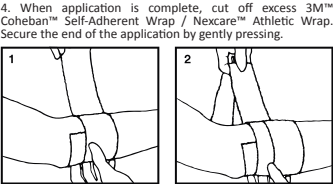

Storage/ Shelf Life/Disposal:

This product should be stored at room temperature. Avoid excessive heat and humidity. For shelf life, refer to the date printed on each package. After the shelf life has expired, the device shall not be used but disposed as indicated.

How supplied / Ordering information:

3M™ Coheban™ Self-Adherent Wrap / Nexcare™ Athletic Wrap are available in multiple sizes and packaging sizes with a variety of different designs . Please contact your local 3M subsidiary for details about offerings in your country.

Note: Please report a serious incident occurring in relation to the device to 3M and the local competent authority (EU) or local regulatory authority.

3M™ Coheban™ Nexcare™ Bande cohésive Athletic Wrap

Description du produit:

La bande cohésive 3M™ Coheban™ / Nexcare™ Athletic Wrap est constituée d'un support non tissé et de fibres élastiques longitudinales qui assurent l'élasticité de la bande. Cette bande élastique est cohésive et n'adhère qu'à elle-même.

Indications:

La bande cohésive 3M™ Coheban™ / Nexcare™ Athletic

Wrap est indiquée pour la réalisation de compressions, de contentions ainsi que pour le maintien de pansements et d'attelles. Ce produit n'est pas indiqué pour d'autres usages que ceux indiqués.

Utilisateurs:


Les utilisateurs sont des professionnels de santé ainsi que les patients qui suivront les indications des professionnels de santé.

Mises en garde:

- La bande cohésive 3M™ Coheban™ / Nexcare™ Athletic Wrap ne glisse pas et ne se détend pas après application. NE PAS serrer la bande trop fort pour ne pas couper la circulation sanguine et ne pas entraîner de lésions graves. Le risque de mauvaise circulation sanguine est plus élevé chez les enfants.
- Surveiller régulièrement la zone où la bande est appliquée (au moins une fois toutes les 24 heures) afin de détecter tout signe de gonflement, de décoloration, de douleur, d'engourdissement, de picotement ou toute autre sensation anormale. Si ces symptômes apparaissent, retirer immédiatement la bande et contacter votre médecin.
- NE PAS utiliser la bande cohésive 3M™ Coheban™ / Nexcare™ Athletic Wrap directement sur une plaie ouverte, au risque d'entraîner une infection.
- Ce produit contient du latex de caoutchouc naturel susceptible de provoquer des réactions allergiques

Précautions:

- La bande cohésive 3M™ Coheban™ / Nexcare™ Athletic Wrap ne glisse pas et ne se détend pas après l'application. Elle doit être appliquée avec une compression appropriée.
- Lorsque la bande est utilisée dans un bandage compressif, il est important de vérifier l'IPS (des Press Systolique) afin d'éviter tout risque lié à une mauvaise circulation. L'utilisation d'une bande cohésive 3M™ Coheban™ / Nexcare™ Athletic Wrap au sein d'un système de compression nécessite une surveillance médicale par un professionnel de santé.
- Ne pas réutiliser. Une réutilisation des bandes peut compromettre leur intégrité et/ou leur efficacité thérapeutique.
- Mode d'emploi:**
 - Dérouler environ 30 cm de la bande cohésive 3M™ Coheban™ / Nexcare™ Athletic Wrap et la laisser se détendre.
 - Sans l'étirer, appliquer la bande en circulaires autour du membre en recouvrant chaque spire des 2/3. Appuyer légèrement sur la zone de chevauchement pour maintenir l'extrémité de la bande. Se référer à la figure 1.
 - Appliquer une tension appropriée lorsque vous faites le bandage pour obtenir la compression souhaitée. Dérouler toujours une longueur suffisante de bande cohésive 3M™ Coheban™ / Nexcare™ Athletic Wrap avant utilisation pour ne pas appliquer une tension excessive. Se référer à la figure 2.
 - Une fois la pose terminée, couper l'excès de bande cohésive 3M™ Coheban™ / Nexcare™ Athletic Wrap. Maintenir l'extrémité de la bande en exerçant une légère pression.

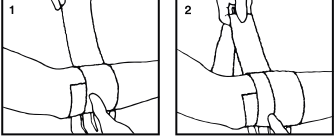

Stockage / Durée de conservation / Élimination:

Ce produit doit être stocké à température ambiante. Ne pas exposer à la chaleur ou à l'humidité. Pour la date limite d'utilisation, se référer à la date imprimée sur chaque conditionnement. Une fois la date de péremption passée, la bande ne doit plus être utilisée mais remis à votre pharmacien.

Conditionnement:

La bande cohésive 3M™ Coheban™ / Nexcare™ Athletic Wrap est disponible en plusieurs tailles et en différentes couleurs. Veuillez contacter votre filiale locale afin de connaître les produits disponibles dans votre pays.

Remarque: Veuillez signaler tout incident grave lié au dispositif à 3M et à l'autorité compétente locale (UE) ou à l'autorité réglementaire locale.

3M™ Coheban™ Nexcare™ Selbsthaftendes Bandage Athletic Wrap

Produktbeschreibung:

3M™ Coheban™ Selbsthaftendes Bandage / Nexcare™ Athletic Wrap besteht aus ungewebtem Material mit in Längsrichtung integrierten Elastikfäden. Das Material ist kohäsiv, d.h. es haftet nur auf sich selbst und nicht auf anderen Materialien oder der Haut.

Indikationen:

3M™ Coheban™ Selbsthaftendes Bandage / Nexcare™ Athletic Wrap kann als Kompressions- oder Stützverband eingesetzt werden. Zusätzlich eignet es sich auch zur Fixierung von Verbänden. Das Produkt ist nicht zum Verkauf oder Gebrauch für andere Anwendungen als oben angegebene bestimmt.

Vorgesehener Anwender:

Vorgesehene Anwender sind medizinisches Fachpersonal und Laien nach Einweisung durch behandelndes Fachpersonal.

Warnhinweise:


- Das 3M™ Coheban™ Selbsthaftendes Bandage / Nexcare™ Athletic Wrap verrutscht oder lockert sich nach der Applikation nicht. Wickeln Sie das Vlies NICHT zu eng, um für eine ausreichende Durchblutung zu sorgen und ernsthafte Verletzungen zu vermeiden. Das Risiko einer eingeschränkten Durchblutung ist bei Kindern höher.
- Beobachten Sie das Applikationsgebiet regelmäßig (spätestens alle 24 Stunden) in Bezug auf Schwellungen, Verfärbungen, Schmerzen, Taubheitsgefühl, Kribbeln oder Änderungen der Sensitivität. Entfernen Sie das Vlies sofort bei Auftreten o. g. Symptome und informieren Sie die zuständige Pflegekraft bzw. den zuständigen Arzt.
- Das 3M™ Coheban™ Selbsthaftendes Bandage / Nexcare™ Athletic Wrap darf wegen Infektionsgefahr NICHT in direkten Kontakt mit einer Wunde kommen.
- Dieses Produkt enthält Naturaltex und kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Vorsichtsaussagen:

- 3M™ Coheban™ Selbsthaftendes Bandage / Nexcare™ Athletic Wrap lockert sich nach Anbringen nicht und rutscht nicht ab. Es sollte nur mit angenehmer Kompression angebracht werden.
- Bei Einsatz als Teil eines Kompressionsverbandes ist für eine ausreichende arterielle Durchblutung zu sorgen, da es andernfalls zu Verletzungen infolge von mangelnder Durchblutung kommen kann. Die Verwendung eines 3M™ Coheban™ Selbsthaftendes Bandage / Nexcare™ Athletic Wrap als Teil eines Kompressionsverbandes sollte immer unter Aufsicht eines Wundspezialisten erfolgen.
- Nicht wiederverwenden. Die Wiederverwendung kann die Intaktheit und/oder Funktionsfähigkeit des Produkts gefährden.

Gebrauchsanweisung:

- Rollen Sie ca. 12 Zoll (30 cm) des 3M™ Coheban™ Selbsthaftendes Bandage / Nexcare™ Athletic Wrap ab und halten Sie das Vliesende locker.
- Wickeln Sie ohne Zug eine Tour des Vlies überlappend an. Drücken Sie das Vlies an der Überlappung leicht an, um ein Verrutschen zu verhindern. Siehe Abbildung 1.
- Wickeln Sie weiter an und üben Sie nur den Zug auf das Vlies aus, der für die gewünschte Kompression notwendig ist. Wickeln Sie dafür immer mehr 3M™ Coheban™ Selbsthaftendes Bandage / Nexcare™ Athletic Wrap, als eigentlich notwendig ist, sodass das Produkt nicht mit zu viel Spannung angebracht wird. Siehe Abbildung 2.
- Schneiden Sie nach Ende der Applikation den Rest des 3M™ Coheban™ Selbsthaftendes Bandage / Nexcare™ Athletic Wrap ab. Fixieren Sie das Vliesende durch sanften Druck.

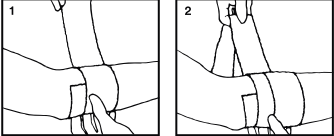

Lagerung/Haltbarkeit/Entsorgung:
 Dieses Produkt ist bei Raumtemperatur zu lagern. Vor übermäßiger Hitze und Feuchtigkeit schützen. Haltbarkeit siehe Datum auf der Packung. Nach Ablauf der Haltbarkeit darf das Produkt nicht mehr verwendet werden, sondern muss wie angegeben entsorgt werden.

Liefer- und Bestellinformation:

3M™ Coheban™ Selbsthaftendes Bandage / Nexcare™ Athletic Wrap sind in verschiedenen Größen und Packungen mit einer Vielzahl von verschiedenen Designs erhältlich. Bitte melden Sie schwerwiegende Vorfälle in Bezug auf das Produkt an 3M und die örtlich zuständige Behörde (EU) oder lokale Aufsichtsbehörde.

Hinweis: Bitte melden Sie einen schwerwiegenden Vorfall im Zusammenhang mit dem Produkt an 3M und die zuständige Behörde (EU) oder die lokale Regulierungsbehörde.

3M™ Coheban™ Nexcare™ Benda Autoadesiva Benda Autoaderente

Descrizione del prodotto:

3M™ Coheban™ Benda Autoadesiva / Nexcare™ Benda Autoaderente è realizzata in materiale non tessuto e fibre elastiche per garantire elasticità. La banda elastica contiene un materiale coesivo che consente alla banda di aderire su sé stessa ma non su altri materiali o sulla pelle.

Indicazioni d'uso:

3M™ Coheban™ Benda Autoadesiva / Nexcare™ Athletic Wrap può essere utilizzata come bendaggio compressivo o contenitivo o per fissare medicazioni o altri dispositivi. Questo prodotto non è stato progettato, venduto o destinato ad usi diversi da quelli indicati.

Utilizzatore previsto:

Gli utenti sono operatori sanitari e persone inesperte che seguono le istruzioni degli operatori sanitari.

Avvertenze:

- 3M™ Coheban™ Benda Autoadesiva / Nexcare™ Benda Autoaderente non scivola e non si allenta dopo la applicazione. NON eseguire un bendaggio troppo stretto, che potrebbe causare un'alterazione della circolazione e gravi lesioni. Il rischio di alterazione della circolazione è maggiore nei bambini.
- Controllare frequentemente l'area interessata (almeno ogni 24 ore) per individuare eventuali segni di gonfiore, scolorimento, dolore, intorpidimento, formicolio o altre alterazioni delle sensazioni. Se questi sintomi sono rilevati, rimuovere immediatamente la banda e contattare il medico.
- NON applicare 3M™ Coheban™ Benda Autoadesiva / Nexcare™ Benda Autoaderente a contatto diretto con ferite aperte perché potrebbe causare infezioni.

4. Questo prodotto contiene lattice di gomma naturale che può causare reazioni allergiche.

Precauzioni:


3M™ Coheban™ Benda Autoadesiva / Nexcare™ Benda Autoaderente non scivola e non si allenta dopo la sua applicazione; deve quindi essere applicata con l'adeguato livello di compressione.

5. Se utilizzata come componente in un bendaggio elastico compressivo, è importante garantire un adeguato flusso sanguigno arterioso per evitare danni derivanti da una riduzione della circolazione. 3M™ Coheban™ Benda Autoadesiva / Nexcare™ Benda Autoaderente deve essere usata come componente di bendaggi compressivi solo sotto la supervisione di uno specialista.

6. Prodotto monouso. Il riutilizzo potrebbe comportare la compromissione dell'integrità del prodotto e/o un cedimento dello steso.

Modalità d'uso:

- Svolgere circa 12 pollici (30 cm) di 3M™ Coheban™ Benda Autoadesiva / Nexcare™ Benda Autoaderente dal rotolo e lasciarla a riposo.
- Evitando eccessiva tensione, applicare un primo giro di banda e continuare con il secondo, sovrapponendolo. Premere leggermente l'area sovrapposta per far aderire la banda su se stessa. Vedere Figura 1.
- Procedere con la fasciatura, applicando tensione solo sulla banda per ottenere la compressione desiderata. Svolgere sempre 3M™ Coheban™ Benda Autoadesiva / Nexcare™ Benda Autoaderente dal rotolo prima di continuare la fasciatura in modo da non applicarla con eccessiva tensione. Vedere Figura 2.
- Ad applicazione terminata, tagliare la parte di 3M™ Coheban™ Benda Autoadesiva / Nexcare™ Benda Autoaderente in eccesso. Far aderire l'estremità del bendaggio con una leggera pressione della mano.

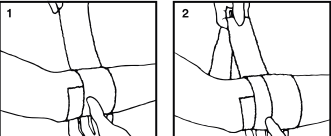

Conservazione/Scadenza/Smaltimento:

Questo prodotto deve essere conservato a temperatura ambiente. Evitare l'esposizione a calore e umidità eccessivi. Scadenza: vedere la data impressa sulla confezione. Il dispositivo scaduto non deve essere utilizzato ma smaltito come indicato.

Fornitura/Ordini:

1 3M™ Coheban™ Benda Autoadesiva / Nexcare™ Benda Autoaderente sono disponibili con una varietà di design differenti, in diversi misur. Segnalare eventuali incidenti seri in relazione al dispositivo 3M all'ente competente locale (UE) oppure all'ente normativo locale.

Nota: Si prega di segnalare qualsiasi incidente grave riscontrato in relazione al dispositivo a 3M e all'autorità locale competente (UE) o all'autorità regolatoria locale.

3M™ Coheban™ Nexcare™ Venda cohesiva Venda Deportiva

Descripción del producto:

3M™ Coheban™ Venda cohesiva / Nexcare™ Venda Deportiva es un laminado de material no tejido con fibras elásticas dispuestas longitudinalmente para mejorar la elasticidad. La venda elástica contiene un material adherente que le permite adherirse a sí misma pero no a la piel u otros materiales.

Indicaciones:

3M™ Coheban™ Venda cohesiva / Nexcare™ Venda Deportiva están indicadas para la compresión, sostén o sujeción de apósitos o dispositivos. Este producto no ha sido diseñado, vendido o previsto para otras aplicaciones.

Utilizador:

Os utilizadores são profissionais de saúde e pessoas sem experiência profissional que sigam as instruções de profissionais de saúde.

Advertencias:

- 3M™ Coheban™ Venda cohesiva / Nexcare™ Venda Deportiva no se deslizará ni se aflojará después de su colocación. NO coloque la venda demasiado ajustada para evitar que se vea afectada la circulación y que se produzcan lesiones graves. El riesgo de daño en la circulación es mayor en los niños.
- Controle el área frecuentemente (al menos diariamente) para detectar señales de inflamación, decoloración, dolor, entumecimiento, hormigueo u otros cambios en la sensibilidad. En caso de que aparezca alguno de estos síntomas, retire la venda inmediatamente y comuníquese con su proveedor de atención médica.
- NO coloque 3M™ Coheban™ Venda cohesiva / Nexcare™ Venda Deportiva en contacto directo con una herida abierta porque puede producir una infección.
- Este producto contiene látex de caucho natural, el cual puede causar reacciones alérgicas.

Precauciones:

- 3M™ Coheban™ Venda cohesiva / Nexcare™ Venda Deportiva no podrá deslizarse o aflojarse tras la aplicación. Debe aplicarse, por tanto, con la compresión apropiada.
- Cuando se utilice como componente de un sistema de vendaje de compresión, es importante asegurarse de que haya un flujo sanguíneo arterial adecuado, a fin de evitar que se produzca una lesión como consecuencia de una disminución de la circulación. La utilización de 3M™ Coheban™ Venda cohesiva / Nexcare™ Venda Deportiva como parte de un sistema de vendaje de compresión debe hacerse solo bajo la supervisión de un especialista en atención de heridas.
- NO reutilice. Esto podría comprometer la integridad del producto u ocasionar una falla del dispositivo.

Instrucciones de uso:

- Desenrolle aproximadamente 12 in (30 cm) de 3M™ Coheban™ Venda cohesiva / Nexcare™ Venda Deportiva y manténgala sin tensión.
- Sin extenderla, aplique una vuelta completa de venda y superpóngala. Presione ligeramente el área superpuesta para mantener el extremo de la venda en su lugar. Consulte la figura 1.
- Al continuar con el vendaje, aplique tensión sobre la venda únicamente para obtener la compresión deseada. Siempre desenrolle más 3M™ Coheban™ Venda cohesiva / Nexcare™ Venda Deportiva antes de dar la siguiente vuelta para que el producto no se aplique con demasiada tensión. Consulte la figura 2.
- Al terminar la aplicación, corte el resto sobrante de 3M™ Coheban™ Venda cohesiva / Nexcare™ Venda Deportiva. Fije el extremo de la venda presionando suavemente.



Conservación, vida útil y desecho:

Este producto debe almacenarse a temperatura ambiente. Para el exceso de calor, humedad, Para conocer su fecha de caducidad, consulte la impresión del envase. Una vez que la vida útil haya caducado, el dispositivo no debe usarse, sino desecharse como se indica.

Información de pedido:

3M™ Coheban™ Venda cohesiva / Nexcare™ Venda Deportiva está disponible en varios tamaños y paquetes con una variedad de diseños diferentes. Si se produce un incidente grave relacionado con el dispositivo, comuníquelo a 3M y a la autoridad local competente (UE) o la autoridad reguladora local.

Nota: Si ocurre un incidente grave relacionado con el dispositivo, informe a 3M y a la autoridad local competente o a la autoridad local regulatoria.

3M™ Coheban™ Nexcare™ Zelfklevende wikkel Athletic Wrap

Productbeschrijving:

3M™ Coheban™ Zelfklevende wikkel / Nexcare™ Athletic Wrap is een zwachtel, gemaakt van non-woven materiaal en in de lengte geplaatste elastische vezels voor optimale rekbaarheid. Het bevat een speciale kleefstof, waardoor het wel op zichzelf kleeft, maar niet op andere materialen of op de huid.

Productvoordelen:

Hecht op zichzelf: verschuift niet en tape, spelden of verbandklemmen zijn niet nodig. Kleeft niet op de huid: scheren is niet nodig en verwijderen is pijnloos en niet irriterend. Comfortabel en rekbaar: geeft alle bewegingsvrijheid. Waterbestendig. Ook ideaal voor rackets en hockeysticks ter verbetering van de grip.

Beoogde Gebruiker:

Beoogde gebruikers zijn zorgprofessionals en leken die de aanwijzingen van de professional volgen.

Waarschuwingen:

- De 3M™ Coheban™ Zelfklevende wikkel / Nexcare™

Athletic Wrap zelfklevende wikkel schuift niet en komt na het aanbrengen niet los te zitten. Breng de wikkel NIET te strak aan om belemmering van de bloedcirculatie en letsel te voorkomen. Het risico op een verminderde bloedcirculatie is hoger bij kinderen.

2. Controleer het gebied regelmatig (minstens elke 24 uur) op tekenen van zwelling, verkleuring, pijn, gevoelloosheid, tinteling of andere veranderingen in sensaties. Verwijder onmiddellijk de wikkel en neem contact op met een zorgverlener als deze symptomen optreden.

3. Breng de 3M™ Coheban™ Zelfklevende wikkel / Nexcare™ Athletic Wrap zelfklevende wikkel NIET op een open wond aan; dit kan infecties veroorzaken.

4. Dit product bevat latex van natuurlijk rubber en kan allergische reacties veroorzaken.

Waarschuwingen:


1. 3M™ Coheban™ Zelfklevende wikkel / Nexcare™ Athletic Wrap verschuift niet en komt niet los, ook niet op moeilijke plaatsen. Breng de zwachtel nooit te strak aan.

2. Als de wikkel ter bevestiging van drukverband wordt gebruikt, is het belangrijk te zorgen voor een adequate bloedstroom om letsel ten gevolge van een verminderde bloedcirculatie te voorkomen. 3M™ Coheban™ Zelfklevende wikkel / Nexcare™ Athletic Wrap zelfklevende wikkel mag uitsluitend onder toezicht van een wondzorgspecialist als onderdeel van een drukverband worden gebruikt.

3. Niet hergebruiken. Hergebruik kan de integriteit van het product aantasten en/of een verminderde werking van het hulpmiddel tot gevolg hebben.

Gebruiksaanwijzing:

- Rol ongeveer 12 inches (30 cm) 3M™ Coheban™ Zelfklevende wikkel / Nexcare™ Athletic Wrap zelfklevende wikkel af en laat het verband even rusten.
- Breng de wikkel aan zonder deze uit te rekken en zorg ervoor dat de wikkel overlapt. Druk de overlappende gebieden licht aan om het uiteinde op zijn plaats te houden. Zie afbeelding 1.
- Ga door met wikkel en oefen een lichte druk op de wikkel uit om de gewenste compressie toe te passen. Rol altijd voldoende 3M™ Coheban™ Zelfklevende wikkel / Nexcare™ Athletic Wrap zelfklevende wikkel af alvorens te beginnen met wikkel en, zodat het product niet te strak wordt aangebracht. Zie afbeelding 2.
- Als het aanbrengen is voltooid, knipt u de restanten van de 3M™ Coheban™ Zelfklevende wikkel / Nexcare™ Athletic Wrap zelfklevende wikkel af. Bevestig het uiteinde door licht te drukken.

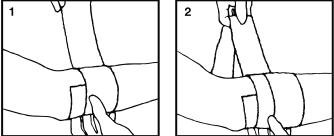

Opslag/houdbaarheid/wegwerpen:

Dit product dient op kamertemperatuur te worden opgeslagen. Vermijd blootstelling aan overmatige hitte en vochtigheid. Uiterste verkoopdatum: zie de datum op de verpakking. Nadat de houdbaarheidstermijn is verstreken, mag het product niet worden gebruikt, maar moet het worden verwijderd zoals aangegeven.

Bestelinformatie / Levering:

3M™ Coheban™ Zelfklevende wikkel / Nexcare™ Athletic Wrap zijn verkrijgbaar in verschillende maten en verpakkingen met een verscheidenheid aan diverse ontwerpen. We zoeken u ernstige incidenten met betrekking tot het hulpmiddel te melden bij 3M en de lokale bevoegde autoriteit (EU) of lokale regelgevende instantie.

Opmerking: Meld eventuele ernstige incidenten verband houdend met het hulpmiddel aan 3M en aan de lokale bevoegde instantie (EU) of de lokale regelgevende instantie.

3M™ Coheban™ Nexcare™ Kohesiv elastisk binda Självhäftande Elastisk Linda

Produktbeskrivning:

3M™ Coheban™ Kohesiv elastisk binda / Nexcare™ Självhäftande elastisk linda består av flera lager öväd olysterfibrer med längsgående inbäddade gummitrådar för att ge elasticitet. Sporttejpen fäster enbart mot sig själv inte mot hud eller andra material.

Användningsområden:

3M™ Coheban™ Kohesiv elastisk binda / Nexcare™ Självhäftande elastisk linda är avsedd att användas för kompression eller stöd. Den kan också användas till att fästa förband eller andra föremål. Denna produkt är inte tillverkad, såld eller avsedd att användas på annat sätt än beskrivet.

Avsedd användare:

Avsedda användare är hälso- och sjukvårdspersonal samt personer som följer denna grupps instruktioner.

Varningar:

- 3M™ Coheban™ Kohesiv elastisk binda / Nexcare™ Självhäftande elastisk linda kommer inte att glida eller lossna efter appliceringen. Linda INTE för hårt, annars kan cirkulationen hindras och leda till allvariga personskador. Risken för försämrad blodcirkulation är högre för barn.
- Övervakna området ofta (minst en gång var 24:e timme) med avseende på tecken på svullnad, misfärgning, smärta, ökänslighet, kittlingar eller andra förändrade sinnesförmågor. Om dessa symptom inträffar, ta omedelbart bort banden och kontakta sjukvårdspersonalen.
- Placera INTE 3M™ Coheban™ Kohesiv elastisk binda / Nexcare™ Självhäftande elastisk linda i direkt kontakt med ett öppet sår eftersom det kan leda till infektion.

4. Den här produkten innehåller naturgummilátex, som kan orsaka allergiska reaktioner.

Försiktighetsåtgärder:

1. 3M™ Coheban™ Kohesiv elastisk binda / Nexcare™ Självhäftande elastisk linda glider eller lossnar inte efter applicering. Det är därför viktigt att den appliceras med rätt ursprungstryck.

2. När den används som en komponent i ett system med kompressionsbinda är det viktigt att säkerställa ett adekvat arteriellt blodflöde för att undvika skador på grund av en reducerad blodcirkulation. 3M™ Coheban™ Kohesiv elastisk binda / Nexcare™ Självhäftande elastisk linda bör användas som en komponent i ett system med kompressionsbinda endast under övervakning av en såravårdsspecialist.

3. Återanvänd inte produkten. Återanvändning kan sätta produktens integritet på spel och/eller leda till att produkten inte fungerar.

Bruksanvisning:

- Veckla ut cirka 12 tum (30 cm) av 3M™ Coheban™ Kohesiv elastisk binda / Nexcare™ Självhäftande elastisk linda från rullen och låt bindan vara lös.
- Applicera en full lindning och överlappa utan att sträcka ut enheten. Tryck lätt på det överlappande området för att

