

Tecnologia de leitura rápida que lhe dá resultados em apenas 4 horas.

A reconhecida tecnologia 3M desenvolvida em Indicadores Biológicos de leitura rápida, apresenta-se agora num novo sistema para a monitorização em processos de peróxido de hidrogénio vaporizado (também conhecido por Plasma). Está aprovado pela FDA para STERRAD® e também pode ser utilizado em outros sistemas tal como o V-PRO® da STERIS®.

Os Indicadores Biológicos de leitura rápida 3M™ Attest™ torna mais fácil a monitorização de cada carga. Em destaque na EN ISO 14161, este sistema providencia uma maior e mais consistente qualidade de cuidados de saúde aos pacientes em geral - não importa o método de esterilização utilizado.



Coloque o Indicador Biológico numa bolsa de abertura fácil.

Estandarize a forma como trabalha.

Atualmente o preconizado é que se retanha as cargas até saber o resultado final do indicador biológico, mas e as cargas de peróxido de hidrogénio? Também atua da mesma maneira? Para além da sua segurança e do paciente e com os resultados agora mais rápidos deste novo indicador biológico é possível estandardizar as práticas de libertação das cargas em qualquer modalidade de esterilização que tenha na sua central.

Segurança e confiança.

Desde sempre que os departamentos de processamento de material estéril confiam nos indicadores biológicos 3M para controlar as cargas de esterilização por vapor. Ganhámos a sua confiança e neste momento são mais de 850 milhões de ciclos controlados pelos nossos Indicadores Biológicos 3M™ Attest™ em todo o mundo.

Antecipe e conheça o resultado para responder mais rápido.

Os resultados em apenas 4 horas dos novos Indicadores Biológicos 3M™ Attest™ de Leitura Rápida para Peróxido de Hidrogénio Vaporizado proporcionam-lhe a informação que necessita enquanto tem a possibilidade de atuar. A rapidez do resultado dá-lhe o tempo necessário para avisar o pessoal médico enquanto o paciente está no bloco operatório, o inclusive antes que um set de instrumentos seja utilizado.

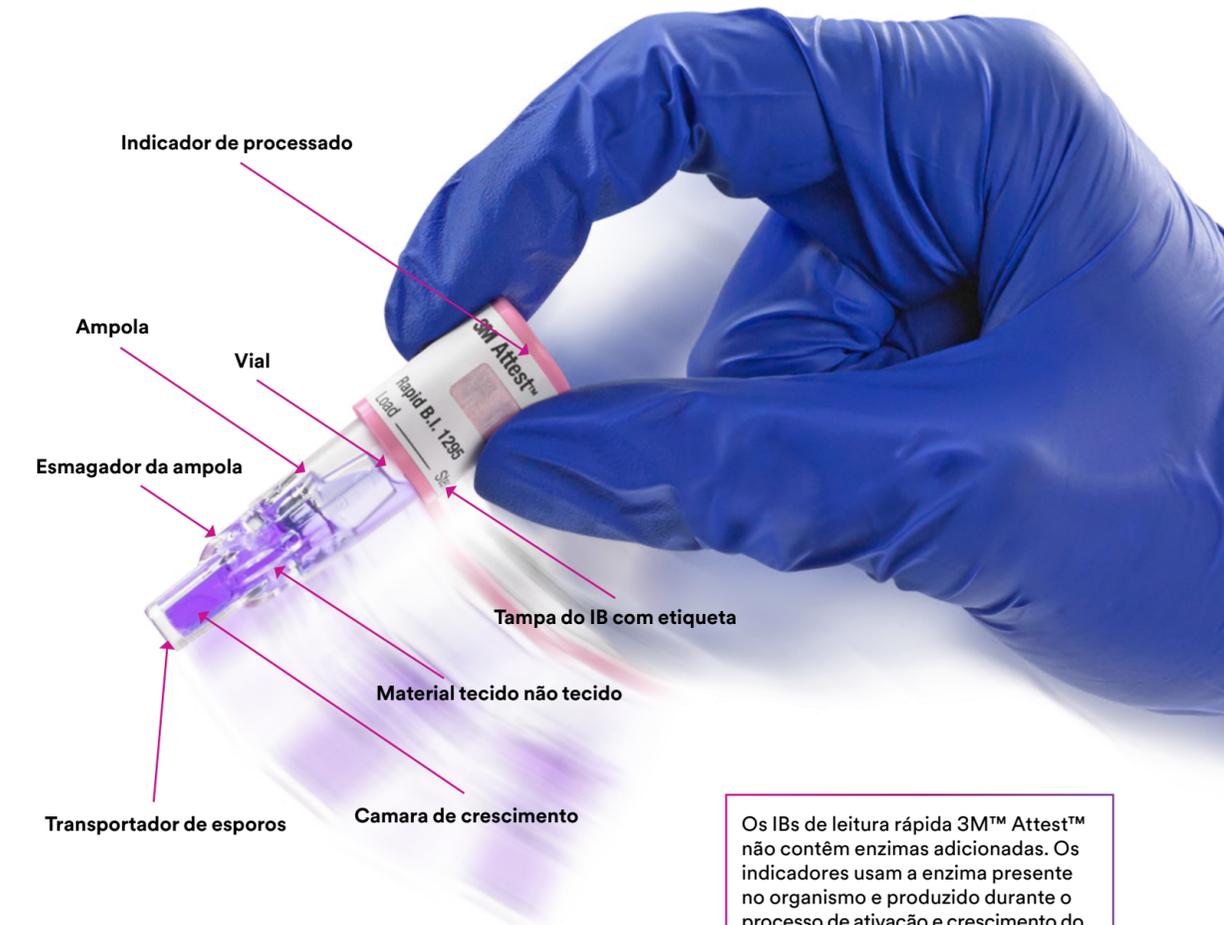
Simplifique o fluxo de trabalho.

Com resultados mais rápidos e um interface de fácil utilização da incubadora 3M™ Attest™ modelo 490H pode documentar os resultados no mesmo dia, durante o mesmo turno e até pelo mesmo operador. Os resultados em apenas 4 horas simplifica o seu dia-a-dia facilitando o seu trabalho e a recolha dos resultados, inclusive nos feriados ou fins-de-semana.

Os indicadores Biológicos de leitura rápida 3M™ Attest™ usam a mesma tecnologia confiável que já conhece e agora com resultados rápidos também para processos de esterilização por peróxido de hidrogénio vaporizado.

Anatomia do indicador biológico de leitura rápida 3M™ Attest™

Neste pequeno frasco existem mais de um milhão de esporas que de forma inovadora proporcionam uma leitura 6 vezes mais rápida que antes. O novo Indicador Biológico 3M™ Attest™ de Leitura Rápida para Peróxido de hidrogénio vaporizado com resultados finais em apenas 4 horas, torna mais fácil a monitorização de cada carga com mais consistência e qualidade para a segurança do paciente.



Os IBs de leitura rápida 3M™ Attest™ não contêm enzimas adicionadas. Os indicadores usam a enzima presente no organismo e produzido durante o processo de ativação e crescimento do esporo, para providenciar resultados "Rápidos" antes que liberte a carga.



Descubra como incorporar ao seu fluxo de trabalho e no seu departamento o novo sistema de Indicadores Biológicos de leitura rápida 3M™ Attest™ para esterilização por peróxido de hidrogénio vaporizado.

Melhore a precisão e simplifique a sua manutenção de registros.

Evite erros na sua documentação.

As centrais de reprocessamento de material estéril pelo alto fluxo de trabalho podem por vezes dar aso a distrações que podem representar falhas na manutenção dos registos. Queremos que melhore a precisão e simplifique a manutenção de registos mediante a conexão da incubadora 3M™ Attest™ 490H ao seu sistema de rastreabilidade.**

Se não dispõe de um sistema global de rastreabilidade pode utilizar a aplicação web de forma gratuita para a incubadora 3M™ Attest™ 490H através de uma conexão móvel ou acesso remoto através do seu PC ou outro dispositivo.

Confie num sistema de rastreabilidade global.

Confie num completo sistema de monitorização para Peróxido de Hidrogénio Vaporizado com toda a família de produtos 3M. Terá a mesma mudança de cor, de azul a rosa, não só nos indicadores biológicos como também nos nossos indicadores químicos. Fácil de usar, fácil de interpretar.

Fita Indicadora

A fita indicadora 3M™ Comply™ 1228 confirma que o pacote foi exposto a um ciclo de esterilização de Peróxi-do de Hidrogénio Vaporizado.



Indicadores Químicos

O Indicador Químico interno 3M™ Comply™ 1248 de Peróxido de Hidro-génio confirma que o agente esterilizante penetrou até ao ponto de colocação do instrumental cirúrgico.



Indicadores Biológicos

O Indicador Biológico 3M™ Attest™ de Peróxido de Hidrogénio 1295 quando é utilizado em conjunto com a incubadora modelo 490H demonstra a letalidade d ciclo de esterilização.

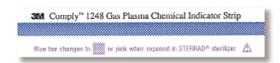
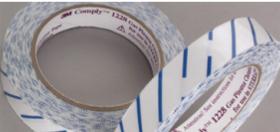


Esteja em controlo e tenha mais tranquilidade.

Com os resultados rápidos em apenas 4 horas pode saber antes e responder mais rápido para a segurança na sua atividade e dos pacientes. Saiba como incorporar o novo Indicador Biológico 3M™ Attest™ de Leitura Rápida de Peróxido de Hidrogénio Vaporizado ao fluxo de trabalho do serviço de esterilização.

i Descubra como incorporar ao seu fluxo de trabalho e no seu departamento o novo sistema de Indicadores Biológicos de leitura rápida 3M™ Attest™ para esterilização por peróxido de hidrogénio vaporizado.

3M™ Attest™ Indicador Biológico de Leitura Rápida para Peróxido de Hidrógeno Vaporizado.

Número de catálogo	Descrição	Unidades	Envio mínimo
 1295	3M™ Attest™ Indicador Biológico de Leitura Rápida para Peróxido de Hidrogénio Vaporizado Para Esterilizadores STERRAD® 100NX (Standard, Flex, Express y Duo cycles), NX (Standard and Advanced cycles), e 100S Resultados em quatro horas Deve ser utilizado em conjunto com a Incubadora 3M™ Attest™ 490H	30 uds. / bolsa	4 bolsas / embalagem
 490H	Incubadora 3M™ Attest™ Para ser usado com o Indicador Biológico 3M™ Attest™ de Leitura Rápida de Peróxido de Hidrogénio Vaporizado cód.1295 Inclui um cabo Ethernet para a conectividade de aplicações Web	1 ud. / caixa	1 caixa / embalagem
 1248	Indicador Químico 3M™ Comply™ para Peróxido de Hidrogénio Um indicador químico interno para ser utilizado num esterilizador STERRAD® modelos 100NX (Standard, Flex, Express y Duo Cycles), NX (Standard and Advanced cycles), 100S y 100 A barra indicadora química muda de azul a rosa quando exposta ao peróxido de hidrogénio vaporizado 2.0cm x 10cm (13/16" x 4")	250 uds. / caixa	4 caixas / embalagem
 1228	Cinta Indicadora 3M™ Comply™ de Processo para Peróxido de Hidrogénio Para ser utilizado com esterilizador STERRAD® modelos 100NX (Standard, Flex, Express y Duo cycles) e NX (Standard and Advanced cycles), 100S y 100		24 rolos / caixa

Contacte o seu representante de vendas 3M ou visite www.3m.com/medical

NOVIDADES!

Em breve poderá adquirir um novo indicador biológico para esterilização por peróxido de hidrogénio vaporizado com resultados em apenas 24 minutos.*

Após aprovação da FDA, todos os clientes que utilizam o nosso sistema de 4 horas para VH2O2 vão poder passar ao novo sistema sem qualquer custo adicional.



*Resultados em 24 minutos pendente 510(k) de aprovação.

**Aprovado pela FDA para esterilizadores STERRAD® modelos 100NX (Standard, Flex, Express e Duo Cycles), NX (Standard e Advanced Cycles), e 100S. Também pode ser utilizado em sistemas como STERIS® V-PRO MAX®.

3M

Prevenção da Infecção
3M Portugal, Lda
Edifício Office Center
Rua Mar da China N°3 - Piso 3A, 1990 - 138
Lisboa
www.3m.com/medical

3M, Attest, e Comply™ são marcas registradas da 3M. Sterrad é uma marca registrada de Advanced Sterilization Products, División de Ethicon US, LLC.

© 3M 2016. Todos os direitos reservados. IPD-ST-H202-6016-2-EU-0716

3M Science.
Applied to Life.™



Indicadores Biológicos de leitura Rápida 3M™ Attest™

Soluções de monitorização para esterilização por peróxido de hidrogeno.

Eficácia, confiança e controlo.

NOVIDADES! Indicador Biológico con resultados em 24 minutos para VH2O2.*