

Fixation sans compromis

Dispositif de fixation pour CCIVP/CVC + Pansement évolué pour intraveineuses Tegaderm^{MC} 3M^{MC}

Avec le nouveau système de fixation pour CCIVP/CVC 3M^{MC}, vous n'avez pas à compromettre le confort du patient pour obtenir une fixation fiable. Le pansement évolué pour intraveineuses Tegaderm^{MC} a été spécialement conçu pour améliorer la fixation du dispositif, ce qui aide à assurer les meilleures expériences et résultats possibles. Le système est conçu pour rester en place au plus 7 jours, et se retire en douceur pour offrir la fixation et le confort que vos patients méritent.



Dispositif de fixation pour CCIVP/CVC 3M^{MC} et pansement évolué pour intraveineuses Tegaderm^{MC}

Fixation sans compromis


- La fixation sans sutures permet d'offrir une adhérence fiable tout en étant douce pour la peau
- Conçu pour être porté au plus 7 jours
- S'enlève proprement sans causer de douleur et de stress excessifs aux patients
- Offre un équilibre entre adhérence fiable et douceur pour la peau

Contribue à rendre votre vie plus facile

- Rapide et facile à appliquer et à retirer
- Convient à la plupart des CCIVP et des CVC à court-terme à une, deux ou trois lumières, y compris ceux d'un diamètre d'au plus 12 French
- Peut être repositionné après l'application initiale sans perdre de son adhérence
- Un emballage comprenant un dispositif et un pansement simplifie la sélection des produits
- Les directives du CDC pour la fixation sans suture et les normes de l'INS recommandent l'utilisation d'un dispositif de fixation du cathéter

Aider à réduire le coût global des soins

- Élimine les risques et les coûts des blessures par piqûre liées aux sutures

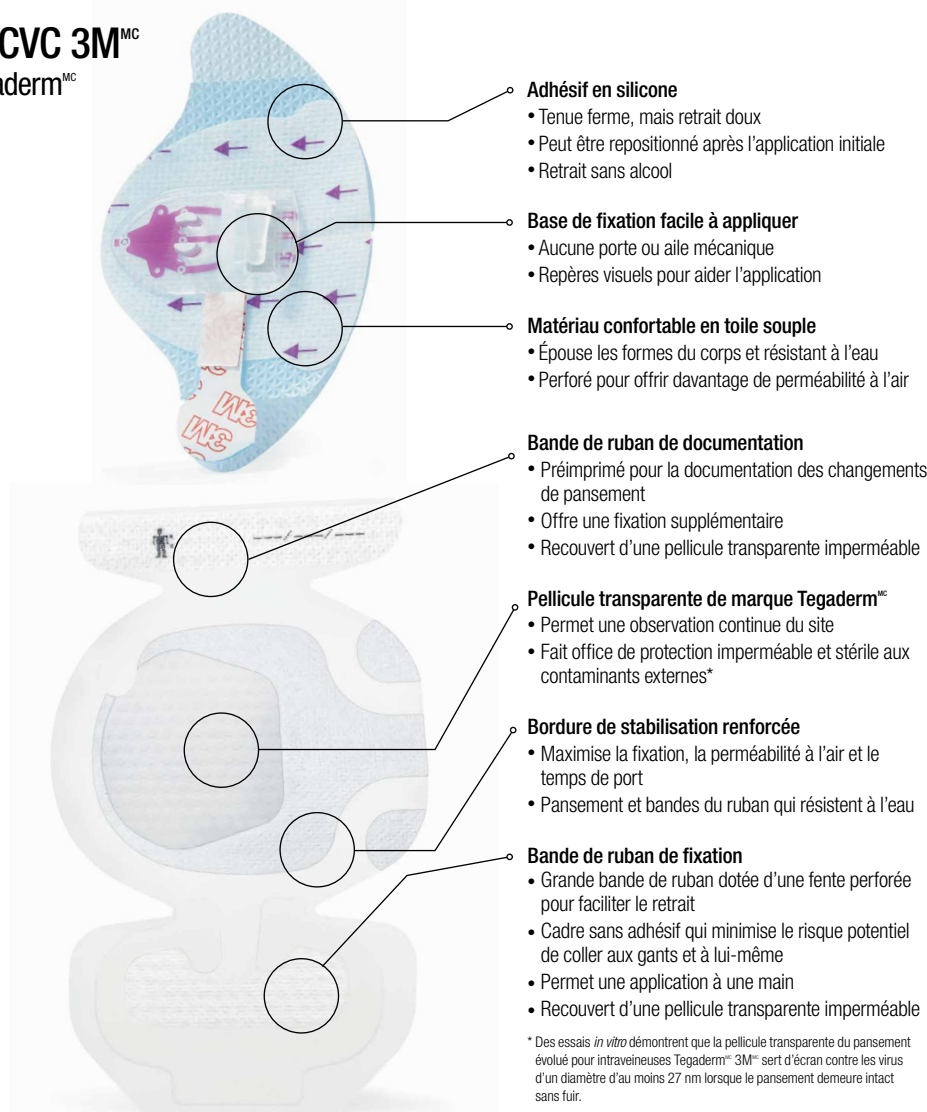

Adhésif en silicone

- Tenue ferme, mais retrait doux
- Peut être repositionné après l'application initiale
- Retrait sans alcool

Base de fixation facile à appliquer

- Aucune porte ou aile mécanique
- Repères visuels pour aider l'application

Matériau confortable en toile souple

- Épouse les formes du corps et résistant à l'eau
- Perforé pour offrir davantage de perméabilité à l'air

Bande de ruban de documentation

- Préimprimé pour la documentation des changements de pansement
- Offre une fixation supplémentaire
- Recouvert d'une pellicule transparente imperméable

Pellicule transparente de marque Tegaderm^{MC}

- Permet une observation continue du site
- Fait office de protection imperméable et stérile aux contaminants externes*

Bordure de stabilisation renforcée

- Maximise la fixation, la perméabilité à l'air et le temps de port
- Pansement et bandes du ruban qui résistent à l'eau

Bande de ruban de fixation

- Grande bande de ruban dotée d'une fente perforée pour faciliter le retrait
- Cadre sans adhésif qui minimise le risque potentiel de coller aux gants et à lui-même
- Permet une application à une main
- Recouvert d'une pellicule transparente imperméable

* Des essais *in vitro* démontrent que la pellicule transparente du pansement évolué pour intraveineuses Tegaderm^{MC} 3M^{MC} sert d'écran contre les virus d'un diamètre d'au moins 27 nm lorsque le pansement demeure intact sans fuir.

Renseignements pour commander

Code du produit	N° d'identification du matériau	Dimensions du dispositif	Dimensions du pansement	Dispositifs + pansements/boîte	Boîtes/caisse
1837-2100	7100033117	2 po x 2 1/8 po 5,1 cm x 5,4 cm	3 1/2 po x 4 1/2 po 8,5 cm x 11,5 cm	20	4
1839-2100	7100054100	2 po x 2 1/8 po 5,1 cm x 5,4 cm	4 po x 6 1/8 po 10 cm x 15,5 cm	20	4

Pour en apprendre davantage sur le système de fixation pour CCIVP/CVC et le pansement évolué pour intraveineuses Tegaderm^{MC} 3M^{MC}, consulter le site 3M.com/3MSecurement, communiquer avec votre représentant de la Division des solutions pour soins aigus et continus de 3M ou communiquer avec le Centre de renseignements des soins de santé de 3M au 1 800 364-3577.

La Division des solutions pour soins aigus et continus de 3M collabore pour offrir des solutions novatrices et éprouvées pour aider à prévenir et traiter les conditions aiguës et continues dans le continuum de soins.



Offert au Canada par la :

Division des solutions pour soins aigus et continus
Compagnie 3M Canada
C.P. 5757
London (Ontario) N6A 4T1
Canada
1 800 563-2921
www.3M.ca/skinwound

Soins de santé 3M
2510 Conway Avenue
St. Paul, MN 55144-1000
É.-U.
1 800 228-3957
www.3M.com/C3SD

Veillez recycler. Imprimé au Canada
© 2015, 3M. Tous droits réservés.
3M et Tegaderm sont des marques de commerce de 3M, utilisées sous licence au Canada. 1502-00339 F