


Pansement d'alginate aux ions d'argent Tegaderm^{MC} 3M^{MC}

Pansement **d'alginate** aux ions d'argent
Tegaderm^{MC} 3M^{MC}

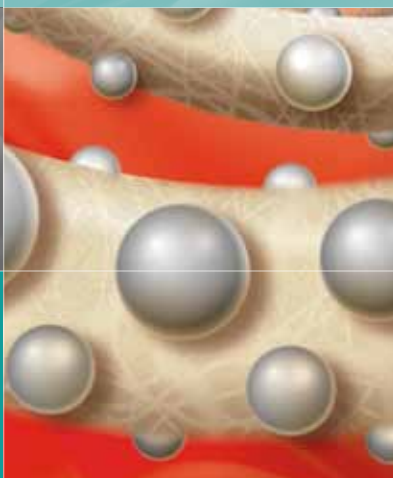

Pour mettre à profit le
pouvoir de l'argent

Nouveau pansement de la gamme réputée
de pansements de marque Tegaderm^{MC}



3M



Polyvalent, puissant, facile à utiliser

Pansement d'alginate aux ions d'argent Tegaderm^{MC} 3M^{MC}

Le nouveau pansement d'alginate aux ions d'argent Tegaderm^{MC} 3M^{MC} fournit la protection antimicrobienne (grâce au composé d'argent), la capacité d'absorption (grâce au gel doux) et la résistance (grâce aux fibres) dont les professionnels ont besoin pour traiter les plaies dont le niveau de colonisation est critique et les plaies qui présentent un risque accru d'infection. Outre un composé d'argent puissant, le pansement renferme des fibres de carboxyméthylcellulose (CMC) et un alginate qui lui permettent de se mouler à la surface de la plaie, et qui lui procurent une résistance élevée à l'état humide pour assurer un retrait facile. Offert sous forme de compresses et de cordons, ce pansement souple et facile à utiliser vient compléter notre vaste gamme de pansements fiables et réputés de marque Tegaderm^{MC}.

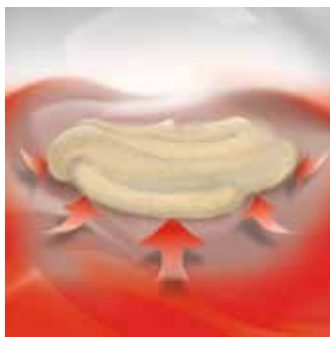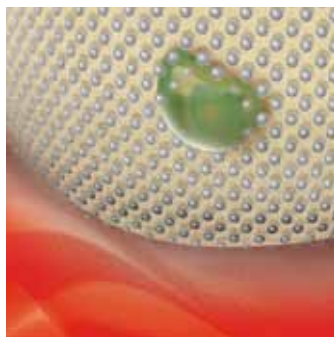

Efficacité antimicrobienne

Le pansement comporte un composé d'argent très soluble qui :

- élimine un large éventail de pathogènes, dont le SARM et l'ERV;
- élimine l'odeur dégagée par la plaie;
- procure une protection antimicrobienne soutenue pour une période pouvant aller jusqu'à 14 jours.

Capacité d'absorption du gel doux

La combinaison unique de fibres de carboxyméthylcellulose (CMC) et de fibres d'alginate forme un gel doux qui :


- se moule à la forme de la plaie et se révèle souple;
- aide à contrôler les saignements mineurs;
- assure une excellente maîtrise de l'exsudat grâce à sa capacité d'absorption supérieure à celle du pansement pour les plaies aux ions d'argent Aquacel® Ag avec technologie Hydrofiber®.

Retrait d'une seule pièce

Le gel composé de fibres de carboxyméthylcellulose (CMC) et de fibres d'alginate procure au pansement une résistance élevée à l'état humide, ce qui :

- permet de l'utiliser sur des plaies avec décollement ou tunnellation;
- permet de l'enlever facilement lorsqu'il est humide;
- assure le maintien d'un milieu humide et favorise ainsi une meilleure cicatrisation.

Capacité d'absorption des pansements*

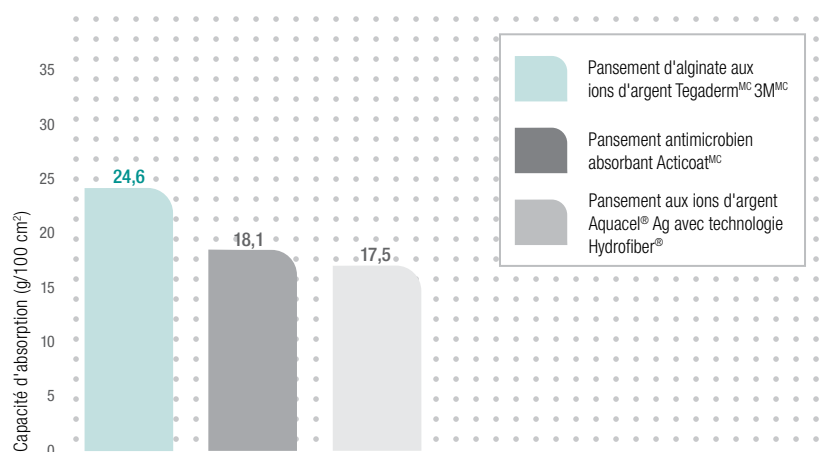




Différences statistiques significatives (P<0,001)

*Capacité d'absorption des pansements « plats » seulement. Données sur fichier chez 3M.

Pansement d'alginate aux ions d'argent Tegaderm^{MC} 3M^{MC}

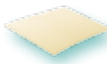Renseignements pour commander

	N° de référence	Description	Pansements/ boîte	Boîtes/ caisse
	90301	Pansement d'alginate aux ions d'argent 5,08 x 5,08 cm (2 x 2 po)	10	4
	90303	Pansement d'alginate aux ions d'argent 10,16 x 12,7 cm (4 x 5 po)	10	4
	90307	Pansement d'alginate aux ions d'argent en forme de cordon 2,54 x 30,48 cm (1 x 12 po)	5	4

Compatible avec

Protecteur cutané non irritant Cavilon^{MC} 3M^{MC}

Pansement d'interface non adhérent
Tegaderm^{MC} 3M^{MC}

Pansements hydrocolloïdes Tegaderm^{MC} 3M^{MC}

Pansement absorbant en acrylique transparent
Tegaderm^{MC} 3M^{MC}

Pansements de mousse Tegaderm^{MC} 3M^{MC}

Système de bandage compressif à deux
couches Coban^{MC} 3M^{MC}

Pansements
Tegaderm^{MC} 3M^{MC} SIMPLÉS. FIABLES. RÉPUTÉS.

Pour en savoir plus sur les pansements d'alginate aux ions d'argent Tegaderm^{MC}, visitez le site www.3m.com/Tegaderm-AlginateAg. Pour obtenir de plus amples renseignements sur notre gamme de produits de soins de la peau et des plaies, visitez le site www.3M.com/skinhealth ou communiquez avec le représentant de la Division des soins de la peau et des plaies de 3M de votre région ou le Centre de renseignements des Soins de santé de 3M au 1 800 364-3577.



**Division des soins de la peau
et des plaies**
Compagnie 3M Canada
C.P. 5757
London (Ontario) N6A 4T1
Canada
1 800 364-3577
www.3m.com/HealthCare

**3M Health Care/
3M Soins de santé**
3M Center Building
275-4W-02
St. Paul, MN 55144-1000
É.-U.
1 800 228-3957

Veuillez recycler. Imprimé au Canada.
© 3M, 2009. Tous droits réservés.

3M, Tegaderm, Cavilon et Coban sont des marques de commerce de 3M, Aquacel Ag une marque de commerce de Convatec, et Acticoat, une marque de commerce de Smith & Nephew, utilisées sous licence au Canada.
0910-07478F