



Science.
Applied to Life.™



NEU:
Jetzt noch kleiner!
3,8 × 4,5 cm
(Abb. in Originalgröße)



NEU: Jetzt mit
drei Fixierstreifen!
5,1 × 5,7 cm
(Abb. in Originalgröße)



3M™ Tegaderm™ I.V. Advanced – Fixierverbände für die Pädiatrie

Manchmal sind es die kleinen Dinge, die Großes bewirken!

I.V. Advanced Fixierverbände für Kinder im neuen Mini-Format!

3M Tegaderm I.V. Advanced – Fixierverbände für die Pädiatrie eignen sich besonders für Kinder und Neugeborene. Die optimale Passform und das innovative Design tragen zu einer verbesserten Katheterversorgung in dieser sensiblen Patientengruppe bei.

- Höhere Sicherheit bei der Katheterfixierung und längere Tragezeit im Vergleich zu herkömmlichen transparenten Verbänden*
- Zwei verschiedene Kindergrößen erhältlich
- Minimiert die Dislokationsrate*
- Sanft zur Kinderhaut

Entwickelt vom Spezialisten für Hautschutz
und Wundversorgung in der Pädiatrie.

*Interne Daten

3M™ Tegaderm™ I.V. Advanced 1680 & 1682 – Fixierverbände für die Pädiatrie

Maximierte Sicherheit
dank spezieller Kindergrößen
und Advanced Technologie

Hautfreundlich
durch verträglichen Klebstoff
und leichte Entfernbarkeit

Weniger Verbandwechsel
als bei herkömmlichen
Transparentverbänden


Vereinfachte Handhabung
durch neue, kleinere Größe
und "Ein-Hand-Applikation"



1680



1682

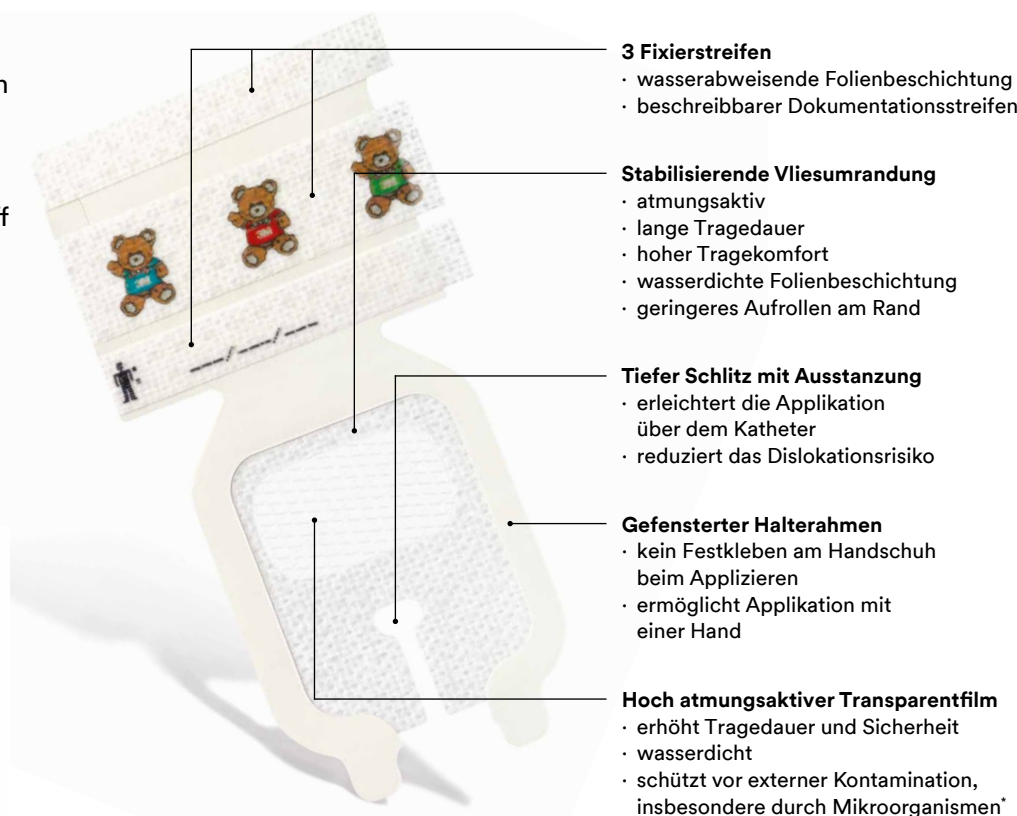

3 Fixierstreifen
· wasserabweisende Folienbeschichtung
· beschreibbarer Dokumentationsstreifen

Stabilisierende Vliesumrandung
· atmungsaktiv
· lange Tragedauer
· hoher Tragekomfort
· wasserdichte Folienbeschichtung
· geringeres Aufrollen am Rand

Tiefer Schlitz mit Ausstattung
· erleichtert die Applikation
über dem Katheter
· reduziert das Dislokationsrisiko

Gefensterter Halterahmen
· kein Festkleben am Handschuh
beim Applizieren
· ermöglicht Applikation mit
einer Hand

Hoch atmungsaktiver Transparentfilm
· erhöht Tragedauer und Sicherheit
· wasserdicht
· schützt vor externer Kontamination,
insbesondere durch Mikroorganismen*

Bestellinformation 3M™ Tegaderm™ I.V. Advanced


Bestell-Nr.	Abmessungen	Stück/Packung	PZN
1680	3,8 cm x 4,5 cm	100	10329586
1682	5,1 cm x 5,7 cm	100	10329592

Wenn Sie mehr über 3M™ Tegaderm™ I.V. Advanced Fixierverbände erfahren wollen, besuchen Sie uns auf der Homepage www.tegaderm.de oder rufen Sie uns an unter 0 21 31 / 14-48 18.


Applikationsempfehlung



Verband von Schutzfolie lösen

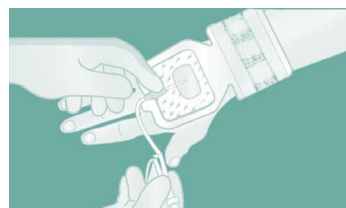

Applikation des Verbands

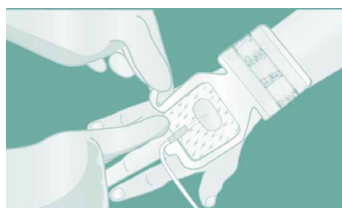

Halterahmen flach entfernen



Katheter mit Fixierstreifen befestigen

3M

3M Medica
Zweigniederlassung der
3M Deutschland GmbH
Hammfelddamm 11
41460 Neuss
Tel.: 0 21 31 / 14-48 18
Fax: 0 81 52 / 700 24 68
www.3Mmedica.de
www.tegaderm.de

3M und Tegaderm sind eingetragene
Warenzeichen der 3M.
© 3M 2015. Alle Rechte vorbehalten.
4315417 10/15

* In-vitro-Tests zeigen, dass der transparente Film von 3M Tegaderm I.V. Advanced gegenüber Viren mit einem Durchmesser von 27 nm oder größer eine Barriere bildet, sofern er ohne Leck und intakt ist.