

Cementeringsløsninger

RelyX™ Ultimate

Adhæsiv resincement



Glaskeramisk
cementerings
- en stærk løsning

Ultimativ bindingsstyrke til glaskeramik

RelyX™ Ultimate er en dualhærdende adhæsiv resincement fra 3M™ Oral Care udviklet specielt til cementering af glaskeramiske restaureringer. RelyX™ Ultimate sikrer kompromisløse resultater med særdeles høj bindingsstyrke og høj, langvarig æstetik.

Indikationer

RelyX™ Ultimate kan anvendes i kombination med Scotchbond™ Universal til permanent cementering af:

- Indlæg, onlay, kroner og broer, ætsbroer (2 - 3 led) og indlæg/onlay broer (2 - 3 led)* af keramik, komposit eller metal
- Facader af keramik eller komposit
- Restaureringer af keramik, komposit eller metal til implantatabutments
- Stifter eller skruer

* Kontraindiceret til patienter med bruxisme eller paradentose.



RelyX™ Ultimate dækker hele spektret af indirekte indikationer til permanent cementering af fuldkeramik-, komposit- og metalrestaureringer.

RelyX™ Ultimate er specielt velegnet til CAD/CAM restaureringer


“Den intraorale spids er fremragende til chairside CAD/CAM restaureringer, når jeg applicerer cementen direkte på overfladen af præparationen.” Dr. S. Efstratiou, UK




En ægte vinder i bindingsstyrke

Den ultimative bindingsstyrke og nemme håndtering gør RelyX™ Ultimate ideel til cementering af glaskeramiske restaureringer. Interne samt eksterne adhæsionstest viser fremragende adhæsion til både dentin og emalje.

Bindingsstyrke for resincement til emalje

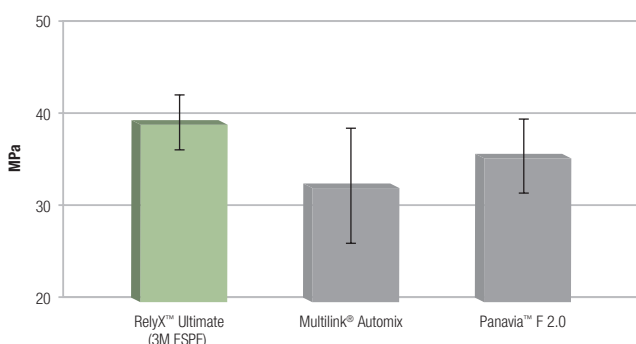

Bindingsstyrke til glaskeramik

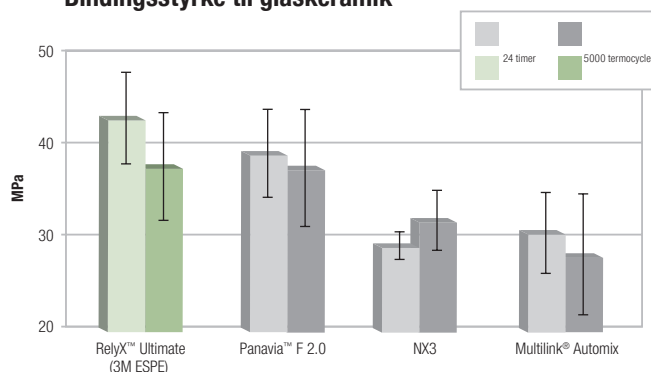

Shear bond strength til emalje efter 24 timer. Alle cementer blev lyspolymeriseret.

Kilde: C. Decoteau, M. Oględzki, G. Kugel, and R.D. Perry; Tufts University, Boston, USA, IADR/AADR 2011, # 375

Adhæsion for resincement til leucitforstærket ætsbar glaskeramisk (Paradigm™ C, 3M ESPE). RelyX™ Ultimate blev anvendt med Scotchbond™ Universal som silan erstatning, de andre cementer blev anvendt iht. producentens brugsanvisning. Alle cementer blev lyspolymeriseret. Artificial ældning: 5.000 termocycler (5 - 55 °C). Kilde: 3M ESPE internal data

Færre komponenter - nemmere anvendelse

RelyX™ Ultimate giver optimal bindingsstyrke, når cementen kombineres med Scotchbond™ Universal adhæsiv, som ikke kun fungerer som adhæsiv, men også som primer. RelyX™ Ultimate kemien indeholder en kemisk hærdende aktivator, der virker sammen med Scotchbond™ Universal adhæsivet, hvilket eliminerer brugen af separat aktivator.

Færre komponenter, færre arbejdsstrin: Betyder ikke kun nemmere behandling men også mindre risiko for fejl. Sidst men ikke mindst reducerer det din lagerbeholdning.

Fordele ved Scotchbond™ Universal adhæsiv:


- Samme adhæsiv til total-etch, selektiv ætsning af emalje eller som selvætsende
- Primer til restaureringer af zirkonia, alumina, metal eller glaskeramik
- Konsistent bindingsstyrke på såvel fugtig som tør ætset dentin
- Praktisk talt ingen postoperativ sensitivitet ved total-etch og selvætsende teknik

Fordele ved RelyX™ Ultimate Adhæsiv Resin cement:

- Dualhærdende cement med ultimativ bindingsstyrke
- Meget nem at anvende (integreret kemisk hærdende aktivator når Scotchbond™ Universal anvendes som adhæsiv)
- Høj slidstyrke og tandlignende fluorescens
- Matchende indprøvningspastaer



"Grundet et lille antal af komponenter er denne adhæsivcement nemmere, hurtigere og mere sikker at bruge" Dr. M. Buff, Tyskland

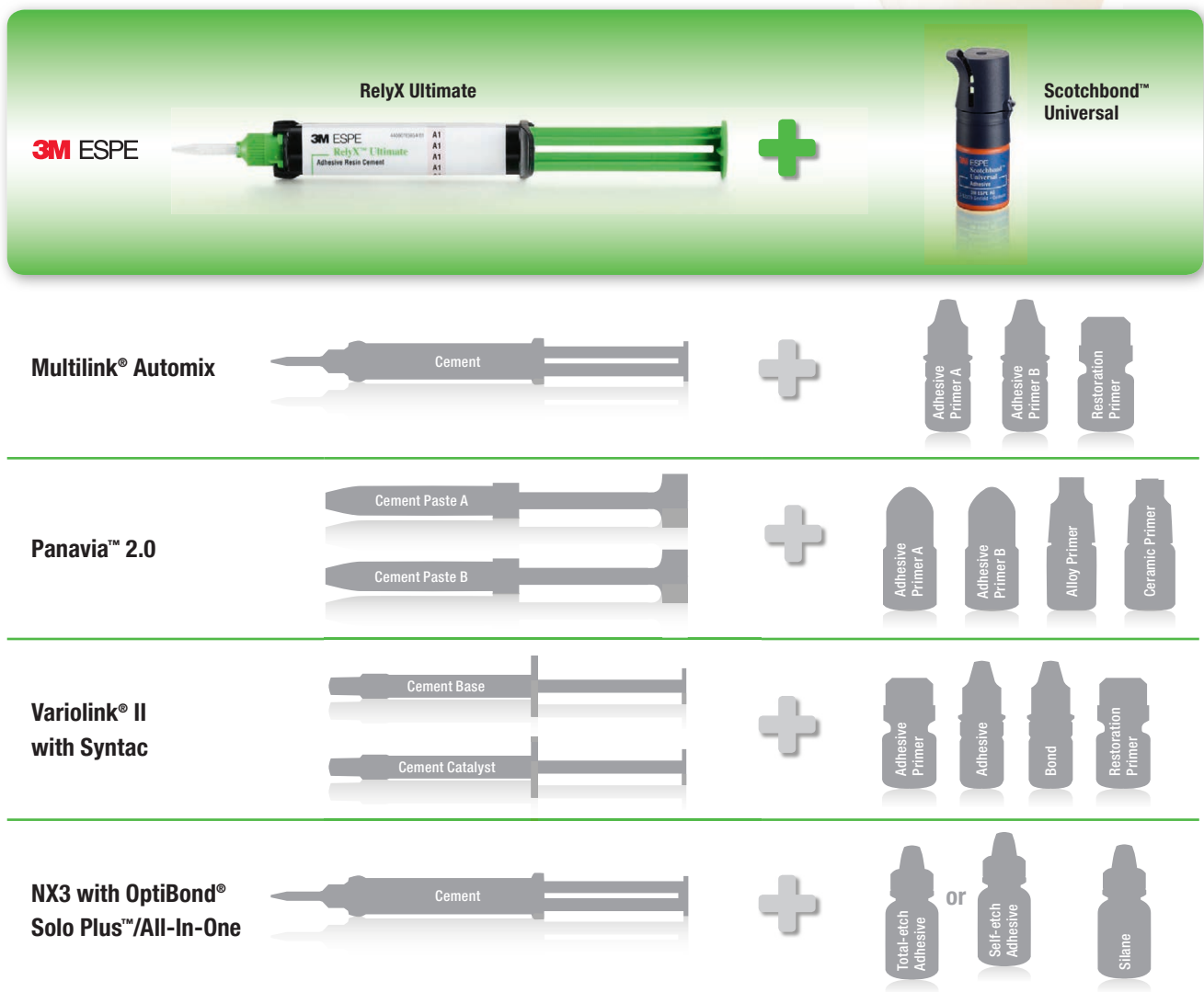

Bestillingsinformation

Varenr.	Beskrivelse
RelyX™ Ultimate	
56891	RelyX™ Ultimate introduktionssæt (inkl. 4 farver): 1 stk. Scotchbond™ Universal adhæsiv a 5 ml, 1 stk. fosforsyre regel i sprøjte a 3 ml, 25 stk. appliceringsspidser til fosforsyre, 50 stk. engangsblandeskåle, 50 stk. engangsapplikatorer, 1 stk. automix sprøjte i farve A3 Opak a 8,5 g, 1 stk. automix sprøjte i farve B0.5 a 8,5 g, 1 stk. automix sprøjte i farve Translucent a 8,5 g, 30 stk. blandespidser (almindelige), 10 stk. blandespidser (brede) og 10 stk. endo spidser, 10 stk. blandespidser (brede) og 10 stk. intraorale spidser, visuelle brugsanvisninger
56892	RelyX™ Ultimate prøvesæt - translucent: 1 stk. Scotchbond™ Universal adhæsiv a 1,5 ml, 1 stk. fosforsyre regel i sprøjte a 3 ml, 25 stk. appliceringsspidser til fosforsyre, 50 stk. engangsapplikatorer, 1 stk. automix sprøjte i farve Translucent a 8,5 g, 10 stk. blandespidser (almindelige), 5 stk. blandespidser (brede) og 5 stk. intraorale spidser, visuelle brugsanvisninger
56894	RelyX™ Ultimate prøvesæt - A1: 1 stk. Scotchbond™ Universal adhæsiv a 1,5 ml, 1 stk. fosforsyre regel i sprøjte a 3 ml, 25 stk. appliceringsspidser til fosforsyre, 50 stk. engangsapplikatorer, 1 stk. automix sprøjte i farve A1 a 8,5 g, 10 stk. blandespidser (almindelige), 5 stk. blandespidser (brede) og 5 stk. intraorale spidser, visuel brugsanvisning
RelyX™ Ultimate refiller	
56887	Farve A1: 1 stk. automix sprøjte i farve A1 a 8,5 g, 10 stk. blandespidser (almindelige), 5 stk. blandespidser (brede) og 5 stk. intraorale spidser
56888	Farve A3 Opak: 1 stk. automix sprøjte i farve A3 Opak a 8,5 g, 10 stk. blandespidser (almindelige), 5 stk. blandespidser (brede) og 5 stk. intraorale spidser
56889	Farve B0.5: 1 stk. automix sprøjte i farve B0.5 a 8,5 g, 10 stk. blandespidser (almindelige), 5 stk. blandespidser (brede) og 5 stk. intraorale spidser
56890	Farve Translucent: 1 stk. automix sprøjte i farve Translucent a 8,5 g, 10 stk. blandespidser (almindelige), 5 stk. blandespidser (brede) og 5 stk. intraorale spidser

"Dette produkt er stærkt, holder hvor andre fejler og er særdeles nemt at håndtere. Jeg var mest imponeret over, hvor nemt det er at anvende." Dr. W. McLaughlin, UK

"Jeg værdsætter muligheden for at anvende enten total-etch eller selvætsende adhæsivløsning." Dr. P. Claassen, UK

3M

3M a/s
3M Oral Care
Hannemanns Allé 53
2300 København S
Tlf.: 43 48 01 00
e-mail: dkdental@mmm.com
www.3mespe.dk



Varenr.	Beskrivelse
RelyX™ Ultimate blandespidser	
56883	30 stk. blandespidser (almindelige)
56885	10 stk. blandespidser (brede) og 10 stk. endo spidser
56886	10 stk. blandespidser (brede) og 10 stk. intraorale spidser
RelyX™ Try-in Pasta	
7614A1T	Farve A1: 1 stk. Try-in pasta refill a 2 g
7614A3T	Farve A3 Opak: 1 stk. Try-in pasta refill a 2 g
7614B0.5T	Farve B0.5: 1 stk. Try-in pasta refill a 2 g
7614TRT	Farve Translucent: 1 stk. Try-in pasta refill a 2 g
7614WOT	Farve WO (hvid opak): 1 stk. Try-in pasta refill a 2 g
Scotchbond™ Universal adhæsiv	
41258	Scotchbond™ Universal adhæsiv refill: : 1 flaske Scotchbond Universal a 5 ml
41263	Scotchbond™ Universal Etchant: 2 stk. fosforsyre regel i sprøjte a 3 ml, 50 stk. appliceringsspidser til fosforsyre



RelyX™ Ultimate prøvesæt - A1 (56894)



RelyX™ Ultimate introduktionssæt (56891)

3M, ESPE, Filtek, L-Pop, Paradigm, RelyX og Scotchbond er alle varemærker hos 3M Company eller 3M Deutschland GmbH. Anvendes under licens i Canada.

Alle andre varemærker ejes af andre firmaer. © 3M 2016. Alle rettigheder forbeholdes. 02 (01.2016)