### 3M<sup>™</sup>リットマン®ステソスコープ 総合カタログ 3M<sup>™</sup> Littmann® Stethoscope







# 3M<sup>™</sup>Littmann<sup>®</sup> Stethoscope

3M<sup>\*</sup>リットマン\*聴診器は聴診器技術及び性能により、 日本をはじめとした世界中の医療従事者に選ばれ、 広く愛用されています。

3M\*リットマン\*ブランドは、50年を超える歴史を持ち、 多様なモデルやカラーバリエーションを 継続的に開発してまいりました。 ダイアフラムとベル部を両面で使い分ける コンビネーション・タイプと、低・高周波音が連続聴診できる サスペンデッド・ダイアフラムによるシングルサイドの チェストピースがあり、それぞれハイグレード器種から 一般器種までの広い製品ラインが揃っています。









#### シングル・チューブ

3M リットマン  $^*$  クラシック III ステソスコープ、クラシック II ステソスコープ (小児用/新生児用)、ライトウェイト II S.E. ステソスコープには、軽量で扱いやすいシングル・チューブを使用しています。



#### サスペンデッド・ダイアフラム

チェストピースを皮膚にあてたまま、 抑える力の強弱で高周波音と 低周波音のモード切り替えができます。

#### 低周波音聴診時

軽くあてるとダイアフラムは機能せず、 ベルタイプの働きをします。

#### 高周波音聴診時

強くあてるとダイアフラムがリングに 接触し、高周波音が聴診できます。





### 高感度ツーインワン・チューブ

3M<sup>™</sup>リットマン<sup>®</sup>マスターカーディオロジー<sup>™</sup>ステソスコープ、カーディオロジー IV<sup>™</sup>ステソスコープには、2本のチューブを一体型にし、音響特性に優れたツーインワン・チューブを使用しています。





## 3M<sup>™</sup> Littmann<sup>®</sup> Master Cardiology<sup>™</sup> Stethoscope

3M™リットマン®

## マスターカーディオロジー™

ステソスコープ

## 優れた音響性能を持つ 3M<sup>™</sup>リットマン<sup>®</sup>聴診器の最上位器種

他のモデルより一回り大きいダイアフラムと、握りやすくしっかりとしたチェストピースを備えています。 チューブとチェストピースとの接続部を斜めにすることにより ダイアフラムからの音をストレートにチューブに伝えます。











チェストピース:シングルサイド・チェストピース (ステンレス) ダイアフラム : サスペンデッド・ダイアフラム (直径:約51mm) : 市感度ツーインワン・チューブ バイノーラル 全長/重さ : 約68cm/約180g

大/里ピー・約68cm/約180g ※1 約68cm/約190g



## チェストピース表面仕上げ 製品番号 チューブカラー ステムカラー チェストピース表面仕上げ 製品番号 チューブカラー

## 3M<sup>™</sup>リットマン<sup>®</sup> カーディオロジー IV<sup>™</sup> ステソスコープ

### 進化した医師向け聴診器の定番

成人用と小児用ダイアフラムを両面に搭載した伝統的なデザインと、


新しい曲線的なフォルムのチェストピースをあわせ持つ医師向けの聴診器です。

成人から小児までこれ一器で診察が可能です。

ダイアフラムとリムの段差が少ない"一体成型ダイアフラム"を採用し、 お手入れも簡単に行えます。



小児用面は付属の ノンチルスリーブに 交換すればベル部 として使用できます。

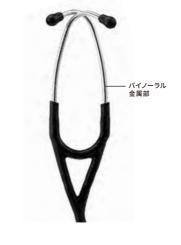





**Mirror Edition** 

希望本体価格(税込)









チェストピース:成人・小児両用型チェストピース (ステンレス) ダイアフラム : サスペンデッド・ダイアフラム (直径:成人用 約45mm 小児用 約35mm)

 (直径:成人用 約45mm 小児用 約35mm)

 チューブ
 :高感度ツーインワン・チューブ パイノーラル

 全長/重さ
 :約69cm/約177g

※1 約56cm/約167g (ショートレングス) ※2 約69cm/約180g (エディションモデル)



3M™リットマン° クラシック Ⅲ™ ステソスコープ

成人・小児2つのサスペンデッド・ダイアフラムを 搭載したクラシックラインの次世代モデル

成人用と小児用ダイアフラムを両面に搭載し、

これ一器で幅広い患者様の診察が可能な一般診察用聴診器です。 カラーバリエーションのあるチューブとチェストピースをラインナップしています。 ダイアフラムとリムの段差が少ない"一体成型ダイアフラム"を採用し、 お手入れも簡単に行えます。



交換すればベル部 として使用できます。















チェストピース:成人・小児両用型チェストピース (ステンレス) ダイアフラム : サスペンデッド・ダイアフラム (直径:成人用 約45mm 小児用 約35mm) チューブ :シングルチューブ バイノーラル

全長/重さ :約69cm/約150g

## 3M<sup>™</sup>リットマン・**クラシック II** ステソスコープ

(小児用/新生児用)

3M™ Littmann° Classic II Stethoscope (Pediatric & Infant)

#### 小さな身体にフィットする小児/新生児専用モデル

小児用と新生児用を独立したモデルとすることで身体の小さなスペースでの聴診を可能としました。 ダイアフラムとベル部を切り替えて、低・高周波音を聴診できます。







嚥下音および嚥下前後の 呼吸音聴診にも適しています。 \*写真は「新生児用」を使用しています。

#### (小児用) Pediatric チェストピース表面仕上げ 製品番号 チューブカラー

Standard	バイノーラル	金属部表面仕上げ	シルバー
	2113	ブラック	シルバー
	2113R	レッド	シルバー
シルバー	2119	カリビアンブルー	シルバー
	2122	ラズベリー	シルバー
	2122	ラズベリー	シルバ-

## Rainbow Edition



ステムカラー

真鍮色

真鍮色

希望本体価格(税込) ¥17,380

#### (新生児用) Infant



#### **Rainbow Edition**



希望本体価格(税込) ¥17,380



#### 小児用

**チェストピース**:小児用2ウェイ・チェストピース(ステンレス) **ダイアフラム** :ダイアフラム (直径:約37mm) **チューブ** :シングル・チューブ バイノーラル 全長/重さ :約71cm/約104g

販売名: リットマン ステソスコープ 一般医療機器 届出番号: 13B1X10109000218

#### 新生児用

**チェストピース**:新生児用 2 ウェイ・チェストピース (ステンレス)

ダイアフラム : ダイアフラム (直径:約30mm) チューブ : シングル・チューブ パイノーラル 全長/重さ :約71cm/約96g

販売名:リットマン ステソスコープ 一般医療機器 届出番号:13B1X10109000218

## 3M™リットマン・ライトウェイト II S.E. ステソスコープ

3M™ Littmann° Lightweight II S.E. Stethoscope

### 軽くて使いやすい卵型の両面チェストピース

コンビネーションチェストピースでありながら 硬質プラスチックを使用することで、軽量化を実現しました。 つや消しタイプのチューブを採用したモデルです。







¥ 12.650





チェストピース: 卵型・2 ウェイ・チェストピース (硬質プラスチック) ダイアフラム : サスペンデッド・ダイアフラム (最長サイズ: 約55 mm) :シングル・チューブ バイノーラル

:約71cm/約119g

## アクセサリーのご案内

#### 3M<sup>™</sup>リットマン<sup>®</sup>ステソスコープ スペアパーツキット

**3M**<sup>™</sup>Littmann Stethoscope Spare Parts Kit



		_		
л	n	n	1	٩

製品番号	対応器種	色	キット内容	希望価格(税込)
40011	   3M™ リットマン*   マスターカーディオロジー <sup>™</sup>	ブラック	ソフトシーリング イアーチップ (小) リム: 89919、ダイアフラム: 00186	¥2,970
40018	ステソスコープ 用	グレー	ソフトシーリング イアーチップ (小) リム:89901、ダイアフラム:00202	¥2,970
40016	3M <sup>™</sup> リットマン' カーディオロジー IV <sup>™</sup> ステソスコープ 用	ブラック	ソフトシーリング イアーチップ (小) ダイアフラム小児用面: 33472 ダイアフラム成人用面: 33474 ノンチルスリーブ: 37972	¥3,762
40017	3M <sup>™</sup> リットマン' クラシックⅢ <sup>™</sup> ステソスコープ 用	グレー	ソフトシーリング イアーチップ (小) ダイアフラム小児用面: 33473 ダイアフラム成人用面: 33475 ノンチルスリーブ: 37980	¥3,762
40020	3M™ リットマン'ライトウェイトⅡ S.E.	ブラック	ソフトシーリング イアーチップ (大) リム:98628、ダイアフラム:00400 ノンチルスリーブ	¥2,530
40021	ステソスコープ用	ライト ブラウン	ソフトシーリング イアーチップ (大) リム:95285、ダイアフラム:00392 ノンチルスリーブ:95293	¥2,530
40001	- 3M <sup>™</sup> リットマン ステソスコープ全機種	ブラック	ソフトシーリングイアーチップ(小) ソフトシーリングイアーチップ(大)	¥1,650
40002	- JM - ソットマン ステンスコーノ主候性	グレー	ソフトシーリングイアーチップ(小) ソフトシーリングイアーチップ(大)	¥1,650

管理区分: 医薬品医療機器等法規制対象外

#### 3M™リットマン°ネームタグ

3M"リットマン\*ステソスコープのバイノーラルに装着できるネームタグです。

製品	番号	対象製品ライン	色	入れ目 (個/袋)	希望本体価格 (税込)
21	70	全製品	ブラック	1	¥1,397
21	71	全製品	グレー	1	¥1,397





推奨聴診器一覧 ②:推奨	循環器系	呼吸器系	小児科	その他診療科	看護師	救急救命士	埋 学療法士	医 学 生	看 護学生
3M™リットマン®マスターカーディオロジー™ステソスコープ	0	0				0			
3M™リットマン® カーディオロジー IV™ ステソスコープ		0	0	0	0	0		0	
3M™リットマン® クラシック III™ ステソスコープ			0	0	0	0	0	0	0
3M <sup>™</sup> リットマン <sup>®</sup> クラシック II ステソスコープ (小児用/新生児用)			0		0				
3M™リットマン® ライトウェイト II S.E. ステソスコープ					0				0

#### ●本カタログに掲載した全製品のカラー写真につきましては、色が異なる場合があります。

- るM<sup>™</sup>リットマン・ステリスコーブには天然ゴムラテックスを使用しておりません。 各製品には「添付文書」「取扱説明書(日本語)」「保証書(取扱説明書最終ページ)」が同封されております。
- ●3M リットマン・ステンスコープは、取扱説明書による正常なご使用状態で破損した場合には、お買い上げ日より1年間は無償で修理または交換させていただきます。
- ◆ 本カタログに記載されている全製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。◆ 本カタログに掲載した全製品の価格は、諸般の事情により変更することがありますので、ご了承ください。◆ 本カタログに掲載した全製品は、諸般の事情により発売中止になることがあります。
- 価格は全てメーカー希望小売価格です。

詳細は取扱店までお問合せください。

3M、Cardiology IV、Classic III、Master Cardiology、Littmann、 カーディオロジー IV、クラシック III、マスターカーディオロジー、リットマンは3M社の商標です。

2022年9月発行

**3M** 

スリーエム ジャパン株式会社 http://www.littmann.jp/

Please Recycle. Printed in Japan Copyright © 2022 3M. All Rights Reserved. HPM-483-U(0922)IT

カスタマーコールセンター 製品のお問い合わせはナビダイヤルで **2**.0570-011-321 9:00~17:00 /月~金 (土日祝年末年始は除く)