

3M Oral Care

RelyX™ Unicem 2 Automix

Nem at anvende
Overbevisende resultater

Baseret på succes og en lang klinisk historie

Gennem mange år har tandlæger haft tillid til RelyX™ Unicem selvadhærende resincement fra 3M. RelyX™ Unicem 2 Automix resincement - den næste generation af et stærkt og prisvindende førsteklasses produkt - leveres i automix sprøjte, der er nem at anvende. Du får en fremragende kvalitet af din cementering.

Automix sprøjten er nem at anvende

Automix systemet giver:

- Nem håndtering
- Optimal konsistens
- Tidsbesparende procedure
- Fleksibel dosering

Indikationer

Permanent cementering af

- Indlæg, onlays, kroner og broer af fuldkeramik, komposit eller metal
- Stifter og skruer
- 2- eller 3-leds ætsbroer
- 3-leds indlægs-/onlay broer
- Restaureringer af fuldkeramik, komposit eller metal på implantat abutments



Enkel procedure


Spar tid og eliminer kilder til potentielle fejl fordi denne selvadhærende cement ikke kræver forbehandling. Applicer cementen, placer restaureringen, fjern overskud, lyshærd og finiser.

Fordele

- Nem håndtering og dosering
- Enkel og tidsbesparende et-trins løsning
- Selvadhærende resincement med topkvalitet

Fremragende bindingsstyrke giver langtidsholdbare restaureringer

Sammenlignet med andre førende selvadhærende resincement, viser RelyX™ Unicem 2 Automix cement den bedste bindingsstyrke - på både dentin og emalje.

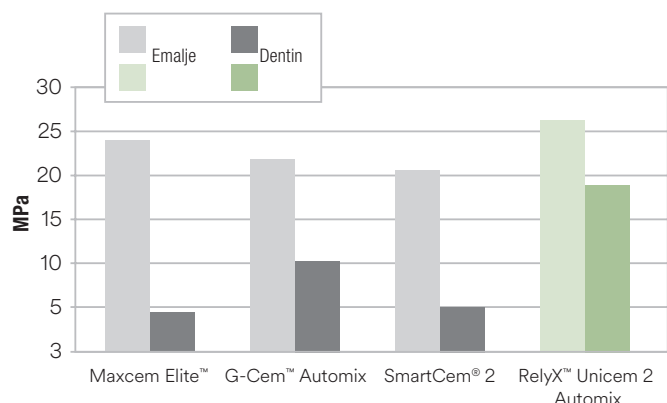

Shear bond strength efter 24 timer, materialer er lyshærdet.

Kilde: 3M ESPE interne data

RelyX™ Unicem 2 Automix resincement og RelyX™ Fiber Post - en stærk kombination til endodontisk behandling

RelyX Fiber Post kombineret med RelyX Unicem 2 Automix er det perfekte system med mange fordele. Automixsprøjten og de perfekt afpassede endo spidser gør det nemmere og hurtigere at applicere cementen fra bunden af rodkanalen.

Under applicering holdes spidsen nede i cementen, hvilket i høj grad reducerer risikoen for at inkorporere luftlommer og porøsiteter, og som følge af dette en forringet bindingsstyrke. Desuden skal RelyX Fiber Post ikke forbehandles, når den anvendes sammen med RelyX Unicem 2 Automix, ligesom retentionen er meget højere end med andre selvadhærende resincement.

Med andre ord - du får komfort og pålidelighed, uden at gå på kompromis med kvaliteten.



3M

3M a/s
3M Oral Care
Hannemanns Allé 53
2300 København S
Tlf.: 43 48 01 00
e-mail: dkdental@mmm.com
www.3mespe.dk

De unikke materialeegenskaber giver en dokumenteret langtidsholdbarhed

RelyX™ Unicem 2 Automix forbliver intakt efter termocycling stresstest, hvor andre lignende cementer viser tydelige revner. Den unikke kemi øger pH værdien til et neutralt niveau på 7 hurtigt efter afbinding - dette gør materialet hydrofobt og dermed mere stabilt over tid.



Resultat af stresstest med selvadhærende resincement. Alle prøver hærdede kemisk og blev udsat for termocycling 10.000 gange.

Kilde: 3M ESPE interne data

Bestillingsinformation

Varenr.	Produktinformation
Startsæt	
56850	RelyX™ Unicem 2 Automix cement/RelyX™ Fiber Post startsæt: 1 stk. automix sprøjte a 8,5 g i farve A2 7 stk. blandespidser (almindelige), 15 stk. blandespidser (brede) 15 stk. endo spidser, 5 stk. intraorale spidser 5 stk. RelyX™ Fiber Post str. 0 (1,1 mm diameter) 5 stk. RelyX™ Fiber Post str. 1 (1,3 mm diameter) 5 stk. RelyX™ Fiber Post str. 2 (1,6 mm diameter) 5 stk. RelyX™ Fiber Post str. 3 (1,9 mm diameter) 5 stk. bor str. 0, 1, 2, 3, Universal.
Refiller	
56848	Farve Translucent: 1 stk. sprøjte a 8,5 g, 10 stk. blandespidser (almindelige), 5 stk. blandespidser (brede), 5 stk. endo spidser
56846	Farve A2 Universal: 1 stk. sprøjte a 8,5 g, 10 stk. blandespidser (almindelige), 5 stk. blandespidser (brede), 5 stk. endo spidser
56847	Farve A3 Opak: 1 stk. sprøjte a 8,5 g, 10 stk. blandespidser (almindelige), 5 stk. blandespidser (brede), 5 stk. endo spidser
Value pakninger	
56858	Farve Translucent: 3 stk. sprøjter a 8,5 g, 30 stk. blandespidser (almindelige), 15 stk. blandespidser (brede), 15 stk. endo spidser, 5 stk. blandespidser (brede), 5 stk. intraorale spidser
56849	Farve A2 Universal: 3 stk. sprøjter a 8,5 g, 30 stk. blandespidser (almindelige), 15 stk. blandespidser (brede), 15 stk. endo spidser, 5 stk. blandespidser (brede), 5 stk. intraorale spidser
56857	Farve A3 Opak: 3 stk. sprøjter a 8,5 g, 30 stk. blandespidser (almindelige), 15 stk. blandespidser (brede), 15 stk. endo spidser, 5 stk. blandespidser (brede), 5 stk. intraorale spidser
Blandespids refiller	
56851	30 stk. blandespidser (almindelige)
56918	15 stk. blandespidser (brede) og 15 stk. intraorale spidser
56919	15 stk. blandespidser (brede) og 15 stk. endo spidser

3M, ESPE og RelyX er varemærker fra 3M eller 3M ESPE AG. G-Cem, Maxcem Elite og SmartCem er ikke varemærker fra 3M eller 3M ESPE AG. © 3M 2016. All rights reserved. PB610019-2DK160610 - 02