

3M

Filtek™

**One
Bulk Fill Restorative**



**Snabbt
och enkelt,
nu också
estetiskt**



Du väljer en bulk fill för enkelhet. Nu blir den snygg också.

3M™ Filtek™ One Bulk Fill Restorative



Äntligen en bulk fill med estetik.

Att göra posteriora fyllningar kan vara utmanande - det är därför som bulk fill kompositer blivit så populära.

Fram till nu så har de snabba lättapplicerade bulk fill materialen saknat den estetik som patienten vill ha. 3M, som en global ledare inom innovation av estetisk fyllningsteknologi, har nu funnit en lösning på detta som du kommer att älska.

3M™ Filtek™ One Bulk Fill Restorative.

Utvecklad för posteriora fyllningar. De unika optiska egenskaperna och den förbättrade opaciteten ger dig möjligheten att enkelt applicera i ett lager - upp till 5 mm -utan att kompromissa med det estetiska resultatet.

Nu har du och din patient något att glädjas åt.

- Snabb och enkel applicering i ett steg
- Förhöjd opacitet ger bättre estetik
- Stressavlastning möjliggör upp till 5 mm härdningsdjup
- Goda hanteringsegenskaper och lätt att forma
- Inga behov av applicering i flera lager
- 3M's äkta nanofillerteknologi ger styrka och mycket goda poleringsegenskaper till höglans
- Hög röntgenkontrast
- Unik spets på kapseln gör det lättare att komma åt i djupa kaviteter
- Finns i 5 färger



3M:s forskning har tagit fram ett bulk fill material med förbättrad estetik.

Teknologin bakom 3M™ Filtek™ One Bulk Fill Restorative

NYTT!

Smart Contrast Ratio teknologi

Förhöjd opacitet utan bekostnad på härdningsdjupet


Vidareutveckling av 3M's nanoteknologi ger oss möjlighet att påverka opacitet och härdningsdjup på ett smart sätt. Med vår Smart Contrast Ratio teknologi, så har vi kunnat öka opaciteten utan att reducera härdningsdjupet.

I härdat tillstånd, har 3M™ Filtek™ One Bulk Fill Restorative en högre opacitet än 3M™ Filtek™ Bulk Fill Posterior, vilket resulterar i förbättrad estetik.

Visste du?

Contrast Ratio är uppskattningen av materialets translucens eller opacitet


Contrast Ratio

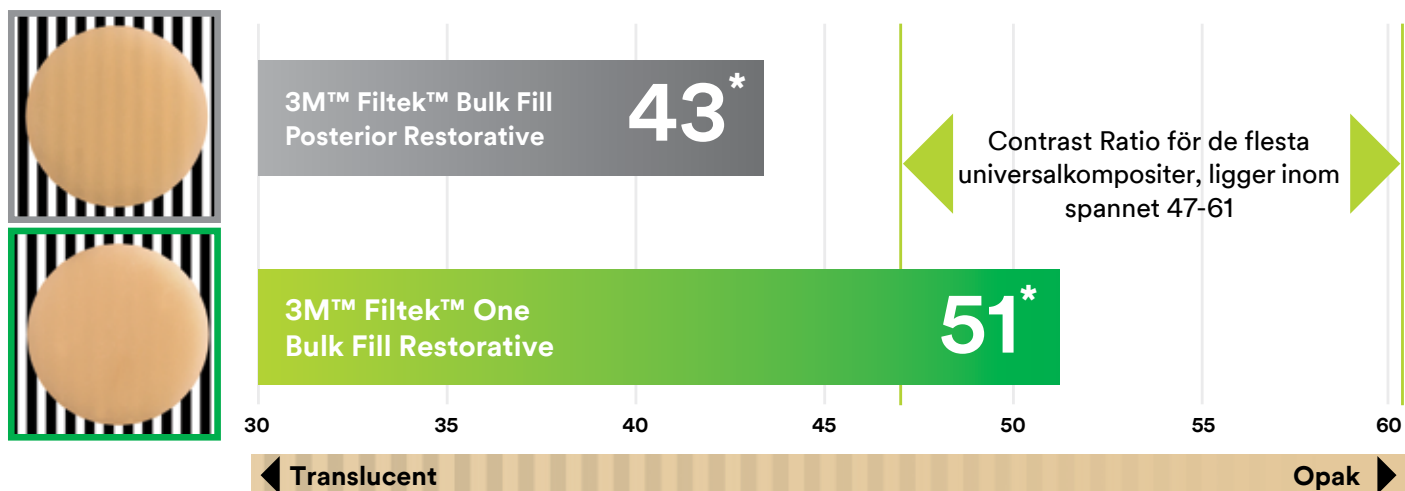

Contrast Ratio är ett medeltal av alla färger

Innovativa monomerer minskar stress


- Innovativ resin-komponent-addition-fragmentation monomer (AFM)
- AFM monomeren minskar polymerisationsstressen genom att dela sig.
- AFM fragmentet återpolymeriseras sen vid lägre stress

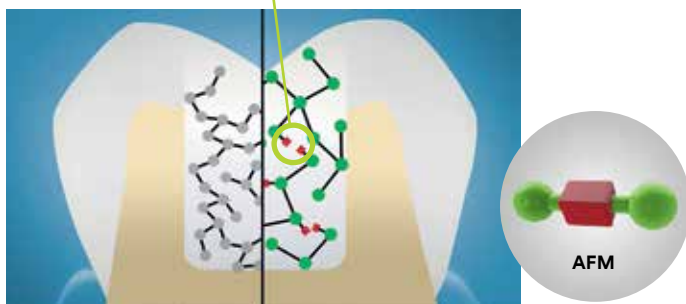


3M's äkta nanoteknologi

Är stark och ger en polering till högglans

5K x förstoring av nanokluster

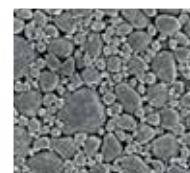

50K x förstoring av nanokluster

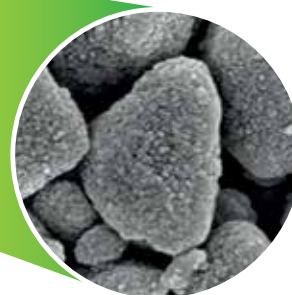

Snabbt och enkelt från start till mål



3M™ Scotchbond™ Universal Adhesive

Allsidig. Hög bindningsstyrka. En enkel och snabb teknik med 35 sekunders applicering. Ingen postoperativ känslighet.



3M™ Filtek™ One Bulk Fill Restorative

Enkelt att applicera i ett lager-bulk fill-opp till 5 mm:s djup. Starkt, beständigt och avsaknad av stress i kaviteten. Optimal opacitet för bättre estetik.



3M™ Elipar™ DeepCure-S LED härdningslampa

Förutsägbar, tillförlitlig härdning. Ljusledaren är vridbar 360 grader, vilket gör det lätt att komma åt i posteriora områden och gör det bekvämare för patienten.



3M™ Sof-Lex™ Diamond Polishing System

Polerhjulen kommer lätt åt på oregelbundna, konvexa och konkava tandtytor, det rosa hjulet innehåller diamantpartiklar och uppnår samma höggloss som med diamantpasta. Snabbt och enkelt att använda.



Beställningsinformation



3M™ Filtek™ One Bulk Fill Restorative

Refill	Artikelnummer	Artikelnummer
Färg	Sprutor	Kapslar
A1	4866A1	4867A1
A2	4866A2	4867A2
A3	4866A3	4867A3
B1	4866B1	4867B1
C2	4866C2	4867C2

Refill,sprutor innehåller: 1st -a'4g sprutor; Pictorial guide, IFU bruksanvisning

Refill,kapslar innehåller 20st -a'0,2 g; Pictorial guide, IFU bruksanvisning

<http://www.3m.se/FiltekOne>



3M Svenska AB
3M Oral Care
Bollstanäsvägen 3
191 89 Sollentuna
tel. 08-922100

3M, ESPE, 3M Science Applied to Life, Filtek och Sof-Lex är varumärken från 3M eller 3M Tyskland GmbH. Används under licens i Canada. © 3M 2017. Alla rättigheter. ISV170310 / PB611126-1-1SE170310.