

3M

Filtek™

**One
Bulk Fill Restauratiemateriaal**



**U kiest voor
snelheid.
U krijgt snelheid
én esthetiek.**



Gemak voor u en een mooi resultaat voor uw patiënt.



3M™ Filtek™ One Bulk Fill Restauratiemateriaal

Het is echt waar. Esthetische Bulk Fill restauraties zijn nu mogelijk.

Posterior restauraties kunnen uitdagend zijn. Bulk Fill composieten zijn door de eenvoud en snelheid daarom steeds populairder.

Snelle en eenvoudige bulk fill plaatsing gaat alleen vaak ten koste van de esthetiek.


Daarom heeft 3M als marktleider in esthetische, restauratieve technologieën de oplossing voor u ontwikkeld:

3M™ Filtek™ One Bulk Fill Restauratiemateriaal

Ontwikkeld voor posterior restauraties. Dankzij de unieke optische eigenschappen en verbeterde opaciteit, plaatst u eenvoudig in één stap een bulkvulling tot 5 mm, *mét behoud van de esthetiek*.

Laat u en uw patiënten lachen.

- Snel en eenvoudig in één stap te plaatsen
- Verhoogde opaciteit voor verbeterde esthetiek
- Lage krimpspanning maakt uitharding tot 5 mm mogelijk
- Uitstekende adaptatie
- Meerdere lagen aanbrengen en dure dispensers zijn niet langer nodig
- Eenvoudig te verwerken en modelleren
- Unieke 3M nanotechnologie zorgt voor een ongeëvenaarde slijtageweerstand en hoge glansretentie
- Hoge radiopaciteit
- Uniek ontwerp van de capsuletip voor eenvoudige toegang tot diepe caviteiten
- Verkrijgbaar in 5 kleuren

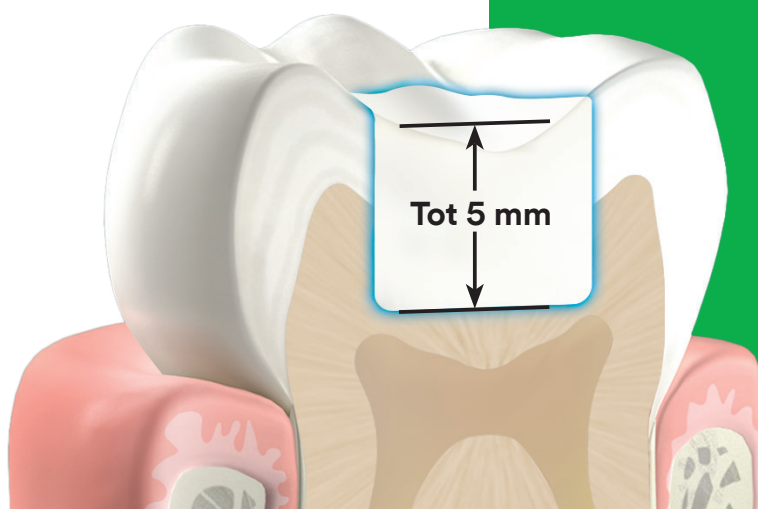

Hoe 3M technologie zorgt voor eenvoudige 1-staps bulkrestauraties met verbeterde esthetiek.

De technologie achter 3M™ Filtek™ One Bulk Fill Restauratiemateriaal.

NIEUW! Slim Contrast Ratio Management

Verhoogde opaciteit met behoud van uithardingsdiepte


Door verdere ontwikkeling van 3M-nanotechnologie kunnen we de opaciteit en uithardingsdiepte beter en slimmer beheren. Dankzij onze unieke Smart Contrast Ratio Management technologie, is de opaciteit vergroot met behoud van dezelfde uithardingsdiepte.

3M™ Filtek™ One Bulk Fill restauratiemateriaal heeft een hogere opaciteit dan 3M™ Filtek™ Bulk Fill Posterior restauratiemateriaal. Dit zorgt voor een verbeterde esthetiek.

Wist u dat?

Contrast Ratio is het meten van de transluentie of opaciteit van het materiaal.


Contrast Ratio

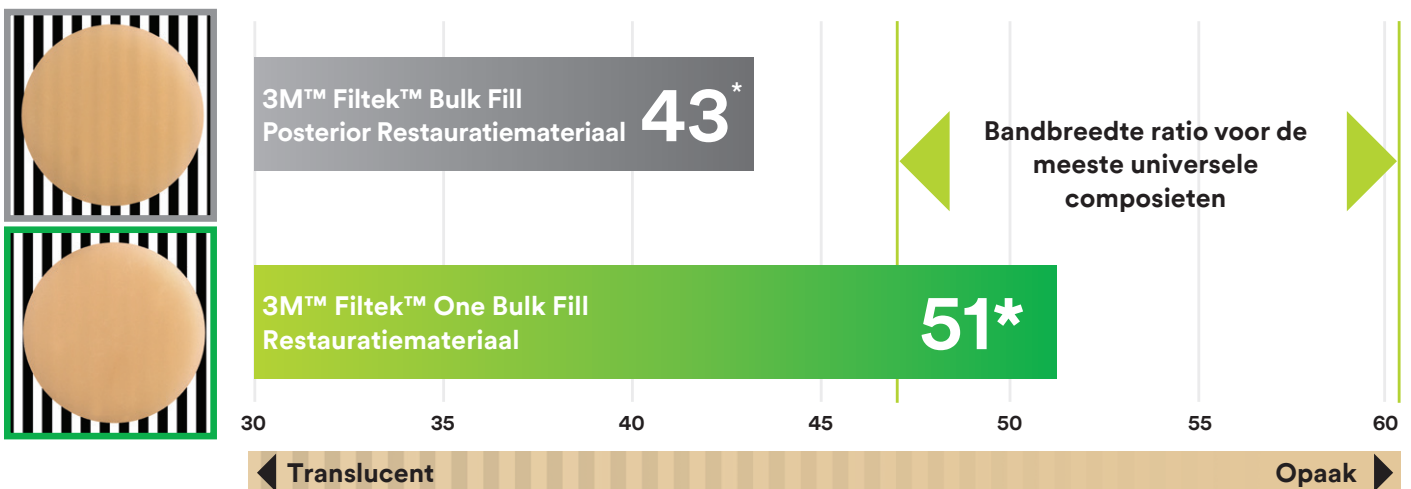

*The contrast ratio is the average of all shades.

Innovatieve AUDMA en AFM monomeren

Vermindert krimp en neemt krimpspanning weg, waardoor het plaatsen van een bulkvulling mogelijk is tot 5 mm.

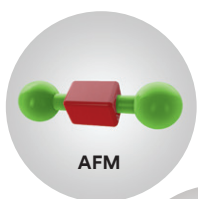

Aanvullende fragmentatie monomeer (AFM) neemt spanning weg tijdens polymerisatie.




Aromatische Urethaan Dimethacrylaat (AUDMA) helpt de hoeveelheid krimp en krimpspanning te verminderen tijdens de polymerisatie.


3M's ECHTE nanotechnologie

Biedt ongeëvenaarde slijtageweerstand en uitstekende glansretentie.

5K uitvergroting van nanocluster

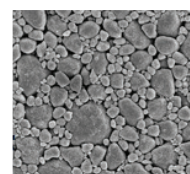

50K uitvergroting van nanocluster

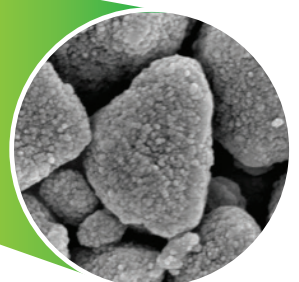

Blijf op schema. Omdat uw tijd telt.

Eenvoud en gemak voor uw hele behandelprocedure.

Uw tijd en die van de patiënt is kostbaar. Om u te helpen op schema te blijven, heeft 3M de procedure voor de meest voorkomende behandeling vereenvoudigd. Door 3M™ Filtek™ One Bulk Fill restauratiemateriaal te combineren met een aantal producten in een efficiënte procedure, bereikt u nu eenvoudig en snel een optimaal resultaat mét behoud van esthetiek.



+



+



+



Scotchbond™ Universal adhesief

Een universeel adhesief met hoge hechtwaarden geschikt voor iedere indicatie. Eenvoudig aan te brengen in 35 seconden. Vrijwel geen post-operatieve gevoeligheid.

3M™ Filtek™ One Bulk Fill Restauratiemateriaal

Eenvoudig restauratiemateriaal tot 5 mm. Uitstekende slijtvastheid en polymerisatie voor een duurzaam herstel. Geoptimaliseerd voor een esthetischer resultaat.

3M™ Elipar™ DeepCure-S LED Curing Light

Voorspelbare en betrouwbare uitharding zelfs bij diepe (posterior) caviteiten. De vernieuwde lichtgeleider is comfortabeler voor uw patiënt.

3M™ Sof-Lex™ Diamond polijstsysteem

Past zich eenvoudig aan onregelmatige, convexe en concave oppervlakken aan. U bereikt een diamanten hoogglans, zonder pasta en met het gemak van een polijstwieltje. Snel en eenvoudig in gebruik.

Bestelinformatie



3M™ Filtek™ One Bulk Fill restauratiemateriaal

Refill	Artikelnummer	Artikelnummer
Kleur	Spuitje	Capsule
A1	4866A1	4867A1
A2	4866A2	4867A2
A3	4866A3	4867A3
B1	4866B1	4867B1
C2	4866C2	4867C2

Refill spuitje bevat: 1- 4gr. spuitje; technisch productprofiel; gebruiksaanwijzing.

Refill capsule bevat: 20 -0,2 gr. capsules, technisch productprofiel, gebruiksaanwijzing



3M Nederland B.V.
Oral Care Solutions Division
3M.nl/OralCare

3M Belgium bvba/sprl
Oral Care Solutions Division
3M.be/OralCare