

Evaluaciones clínicas

[POR PRODUCTO](#)
[POR CATEGORÍA](#)
[POR COMPAÑÍA](#)
[OPINIONES FAVORABLES](#)
[LARGO PLAZO](#)
[ELECCIÓN DE LOS EDITORES](#)
[TABLAS COMPARATIVAS](#)

Vista de página de opiniones favorables de 3M

3M™ RelyX™ Unicem Cemento Autoadhesivo de de Resina (15 años)

3M

www.3M.com/dental

COMENTARIOS DE LOS ESPECIALISTAS:

- *"RelyX Unicem* sigue siendo mi primera elección de cemento de resina autoadhesiva".
- "Durante los 15 años que lo he usado ha presentado pocos desprendimientos y muy buena retención".
- "En general, tiene una excelente estética y en muy pocos casos he notado una cierta decoloración marginal debido a la microfiltración".
- "Después de todos estos años, *RelyX Unicem* se ha probado a sí mismo en mi práctica odontológica con buena resistencia, buena estética y casi ninguna decoloración marginal".

Descripción


RelyX Unicem Cemento de Resina Autoadhesiva es de curado dual y no requiere grabado adicional, *primer* o adhesivo.. El cemento está relleno al 72% por peso y contiene fluoruro.

RelyX Unicem está disponible en cápsulas en tonos A1, A2, A3 opaco, blanco opaco y translúcido.

RelyX U200 está disponible en una fórmula pasta/pasta que se puede aplicar través del dispensador Clicker o de una jeringa automezcla. El fabricante afirma que *RelyX Unicem* proporciona un excelente sellado marginal. Ambos productos se indican para la cementación de coronas de resina, puentes, inlays y onlays; porcelana fundida sobre metal (PFM) y restauraciones metálicas, pilares de implantes y postes endodónticos.

Protocolo de Evaluación Clínica

Durante los últimos 15 años se han cementado más de 6,000 restauraciones con *RelyX Unicem* y *RelyX U200* y y cerca de 3400 fueron analizadas. Dichas restauraciones incluyen inlays, onlays, coronas y puentes de cerámica, así como de zirconia, y postes endodónticos (Figura 1). Aproximadamente dos tercios (2,226) de las restauraciones analizadas se cementaron con *RelyX Unicem*, mientras que un tercio (1,166) se cementaron con *RelyX U200*. La edad de las restauraciones analizadas varió de 5 a 15 años (Figura 2). El 27% de estas restauraciones se cementó con *RelyX U200* y el 73% con *RelyX Unicem*.

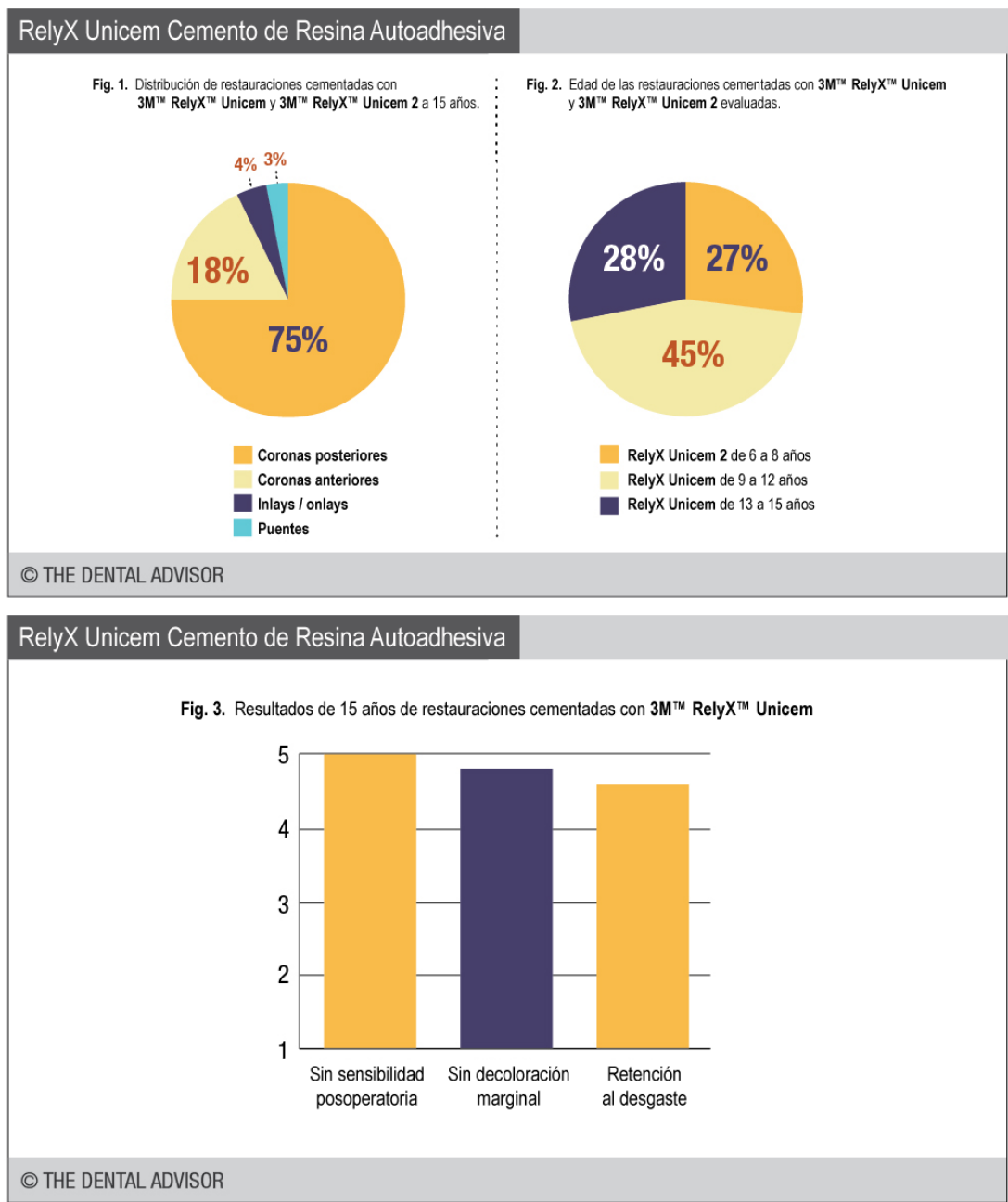

Resultados en 15 años:

Las categorías que se evaluaron incluyeron: sin sensibilidad postoperatoria, sin decoloración marginal y retención. Cada categoría se clasificó en una escala del 1 al 5: 1 = mala, 2 = aceptable, 3 = buena, 4 = muy buena, 5 = excelente.

Sin sensibilidad postoperatoria



Desde sus inicios, *RelyX Unicem* ha tenido muy pocos reportes y casos documentados de sensibilidad postoperatoria (Figura 3). Ésta fue inferior al 1% de las restauraciones colocadas e incluso menor para las restauraciones cementadas con *RelyX U200*. La sensibilidad se presentaba normalmente poco después de colocar las restauraciones y desaparecía a menudo un par de semanas después de la cementación.

Sin decoloración marginal

El 95% de las restauraciones recuperadas cementadas con *RelyX Unicem* no mostró ninguna decoloración marginal, mientras que el 98% de las restauraciones cementadas con *RelyX U200* no presentaba ninguna decoloración en los márgenes (Figura 3). La decoloración se presentó por envejecimiento en el margen de las restauraciones de cerámica. Dicho envejecimiento se observó en 5% de las restauraciones. En la mitad de éstas el envejecimiento fue mínimo, en el 1% fue moderado y en el 1.5% restante fue más severo y se requirió el reemplazo de alrededor de 35 restauraciones. Es importante señalar que la decoloración pareció empeorar con el tiempo, sin embargo, fue menos notable cuando las restauraciones se cementaron con *RelyX U200*.

Resumen

RelyX Unicem Cemento de Resina Autoadhesiva ha probado ser más confiable durante el periodo de 15 años. Este producto recibió una calificación del 96% por desempeño clínico. Retención de 108 (4.8%) de las restauraciones que se desprendieron durante el periodo de evaluación de 15 años (Figura 3). En el 90% de estos desprendimientos, el cemento se encontraba en la restauración y no en el diente preparado. No fue raro encontrar manchas grises o negras en muchas de las restauraciones desprendidas.

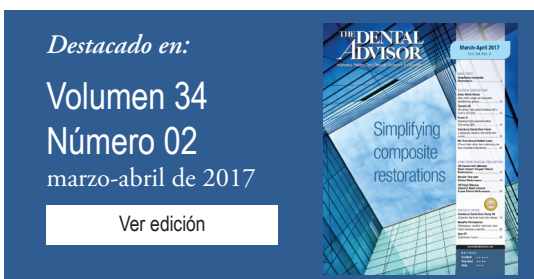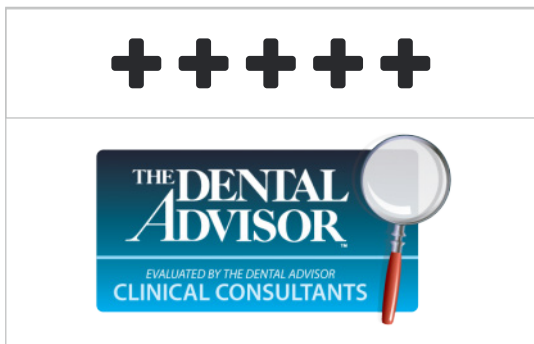

Subscriber Toolbox

SHARE

Add to My Archive

Print Page