

A photograph of two female healthcare professionals, likely nurses, wearing blue scrubs. They are sitting at a desk and looking at a laptop screen. The woman on the right is smiling and has her arms crossed, while the woman on the left is looking at the screen with a slight smile. The image is framed by a large, light blue triangle pointing towards the top right corner.



Τοποθετήστε τον Βιολογικό Δείκτη Attest™ σε ένα σακουλάκι Αποστείρωσης ή ιδανικά σε ένα PCD (Process Challenge Device).

Οι 3M™ Attest™ Βιολογικοί Δείκτες Ταχείας Ερμηνείας δεν περιέχουν πρόσθετα ένζυμα. Οι Δείκτες χρησιμοποιούν ένα ήδη υπάρχον στον οργανισμό ένζυμο που παράγεται κατά την ενεργοποίηση και επώαση των σπόρων, ώστε να σας παρέχει «γρήγορα» αποτελέσματα πριν αποθεμερώσετε το φορτίο.



Βελτιώστε την ακρίβεια και απλοποιήστε την αρχειοθέτησή σας.

Αποφύγετε λάθη καταγραφής.

Στα Τμήματα Αποστείρωσης, με τους γρήγορους, απαιτητικούς ρυθμούς και με τον επιβαρυνμένο φόρτο εργασίας, ενέχει ο κίνδυνος της απόσπασης της προσοχής, που μπορεί να σας οδηγήσει σε λάθη στη διαδικασία αρχειοθέτησης. Εξασφαλίστε την ακρίβεια των αποτελεσμάτων σας και απλοποιήστε την αρχειοθέτησή τους συνδένοντας τον Επωαστήρα 3M™ Attest™ 490H στο σύστημα ανίχνευσης εργαλείων. Τα αποτελέσματα των Βιολογικών Δεικτών καθώς και άλλες βασικές πληροφορίες μπορούν αυτόματα να αποθηκευτούν στο σύστημά σας.** Για τα τμήματα που δεν χρησιμοποιούν λογισμικό για το σύστημα ανίχνευσης εργαλείων, ειδικά για τον Επωαστήρα Attest™ 490H, σας δίνεται η δυνατότητα εξ' αποστάσεως πρόσβασης από κινητή συσκευή ή ηλεκτρονικό υπολογιστή σε μια μοναδική ειδική ιστοσελίδα (web based user interface).

Αποστείρωση με Υπεροξειδίο του Υδρογόνου. Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στον Έλεγχο.

Αποκτήστε τις πληροφορίες που χρειάζεστε για τη διασφάλιση της Αποστείρωσης με την οικογένεια των Προϊόντων Ελέγχου της 3M. Η ίδια **χρωματική αλλαγή έντονου μπλε σε ροζ** συμβαίνει σε όλους τους Δείκτες ελέγχου για το Υπεροξειδίο του Υδρογόνου. Εύκολοι στη χρήση, εύκολοι στην ανάγνωση.

Ταινία / Δείκτης

Ο 3M™ Comply™ Ταινία / Δείκτης Υπεροξειδίου του Υδρογόνου 1228 επιβεβαιώνει πως το πακέτο που προορίζεται για το Χειρουργείο έχει εκτεθεί σε κύκλο Αποστείρωσης με Υπεροξειδίο του Υδρογόνου.

Χημικοί Δείκτες

Οι 3M™ Comply™ Χημικοί Δείκτες Υπεροξειδίου του Υδρογόνου 1248 επιβεβαιώνουν στο προσωπικό του Χειρουργείου πως το αποστειρωτικό μέσο έχει διεισδύσει στο σημείο τοποθέτησής τους.

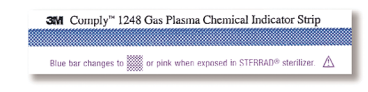
Βιολογικοί Δείκτες

Οι 3M™ Attest™ Βιολογικοί Δείκτες Ταχείας Ερμηνείας 1295, όταν χρησιμοποιούνται με τον Attest™ Επωαστήρα 490H, καταδεικνύουν τη θανάτωση του κύκλου της αποστείρωσης.

Πάρτε τον έλεγχο στα χέρια σας για μεγαλύτερη ασφάλεια. Με γρήγορα αποτελέσματα εντός τεσσάρων ωρών, θα γνωρίζετε τα αποτελέσματα των ΒΔ προτού απελευθερώσετε το φορτίο, συνεισφέροντας ακόμα περισσότερο στη βελτίωση της ασφάλειας του ασθενή στο νοσοκομείο σας.

**Μάθετε πώς να ενσωματώσετε το 3M™ Attest™ Σύστημα Ταχείας Ερμηνείας Βιολογικών Δεικτών Υπεροξειδίου του Υδρογόνου στη διαδικασία του τμήματός σας.**

Λύσεις για τον Έλεγχο της Αποστείρωσης με Υπεροξειδίο του Υδρογόνου από την 3M.

	Κωδικός	Περιγραφή	Συσκευασία	Ελάχιστη Ποσότητα Παραγγελίας
	1295	3M™ Attest™ Βιολογικός Δείκτης Ταχείας Ερμηνείας για Αποστείρωση με Υπεροξειδίο του Υδρογόνου	30 τμχ / σακούλα	4 σακούλες / κιβώτιο
	490H	3M™ Attest™ Επωαστήρας Για χρήση με τον 3M™ Attest™ Βιολογικό Δείκτη Ταχείας Ερμηνείας για Αποστείρωση με Υπεροξειδίο του Υδρογόνου 1295 Περιλαμβάνει καλώδιο Ethernet για σύνδεση διεπαφής με το διαδίκτυο	1 μονάδα / κουτί	1 κουτί / κιβώτιο
	1248	3M™ Comply™ Χημικός Δείκτης Υπεροξειδίου του Υδρογόνου Η χρωματική ένδειξη του Χημικού Δείκτη αλλάζει χρώμα από μπλε σε ροζ μετά την έκθεσή του σε Υπεροξειδίο του Υδρογόνου 2,0 cm x 10 cm (13/16" x 4")	250 / σακούλα	4 σακούλες / κιβώτιο
	1228	3M™ Comply™ Ταινία / Δείκτης Υπεροξειδίου του Υδρογόνου Οι γραμμές του Χημικού Δείκτη αλλάζουν από μπλε σε ροζ όταν αυτός εκτεθεί σε Υπεροξειδίο του Υδρογόνου Λευκός με μπλε ρίγες 1,9 cm x 55 m (3/4" x 60 yds)		24 ρολά / κιβώτιο

Για χρήση με τους Κλιβάνους STERRAD®, μοντέλα 100 NX (Standard, Flex, Express & Duo cycles), NX (Standard & Advanced cycles) και 100S

Καλέστε τον Υπεύθυνο Πωλήσεων ή επισκεφθείτε το www.3M.gr

ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΥΝΤΟΜΑ...

Σύντομα θα μπορείτε να έχετε αποτελέσματα βιολογικού δείκτη για κύκλους αποστείρωσης με υπεροξειδίο του υδρογόνου μόλις σε 24 λεπτά.*

Μετά την έγκριση του FDA, οι πελάτες που χρησιμοποιούν το 4ωρο σύστημα Βιολογικού Δείκτη θα μπορούν εύκολα και αξιόπιστα να αναβαθμίσουν το σύστημά τους.

*Σε διαδικασία έγκρισης αποτελεσμάτων σε 24 λεπτά στο πλαίσιο του συστήματος των ΗΠΑ, εκθέσεων αξιολόγησης προϊόντων πριν την εμπορική διάθεση (FDA 510(k) clearance).
**Εγκεκριμένο από το FDA για τους Κλιβάνους STERRAD®, μοντέλα 100 NX (Standard, Flex, Express & Duo cycles), NX (Standard & Advanced cycles) και 100S και μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και σε άλλους, όπως ο V-PRO® της STERIS.



3M Hellas ΜΕΠΕ
Τμήμα Ιατρικών Προϊόντων
Λ. Κηφισίας 20
Μαρούσι
15125
Ελλάδα
τηλ: 210 6885300
innovation.gr@mmm.com

3M, Attest, and Comply are trademarks of 3M. Sterrad is a trademark of Advanced Sterilization Products, Division of Ethicon US, LLC. V-Pro is a trademark of STERIS Corporation.

© 3M 2016. All rights reserved. IPD-ST-H202-6016-1-EU-0716



3M Επιστήμη.
Εφαρμοσμένη στη ζωή μας.™

3M™ Attest™ Βιολογικός Δείκτης Ταχείας Ερμηνείας.

Λύσεις για τον Έλεγχο της Αποστείρωσης με Υπεροξειδίο του Υδρογόνου.

Αποτελεσματικότητα, Αξιοπιστία και Έλεγχος.

ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΥΝΤΟΜΑ... Αποτελέσματα Βιολογικού Δείκτη Υπεροξειδίου του Υδρογόνου μόλις σε 24 λεπτά*