

Filtek[™] Supreme XTE Universel

Composite universel de restauration

Basé sur la nano-technologie brevetée de 3M ESPE, Filtek Supreme XTE vous offre un système de teintes aux possibilités infinies, tout en introduisant la simplicité dans votre technique de restauration.

Indications

- Restaurations de toute classe, antéro-postérieures et en technique directe ou indirecte.
- Reconstitution de moignons
- Contention

Avantages

Simple

- Une manipulation exceptionnelle
- Un plus grand nombre de teintes Body pour la technique mono-opacité
- Des étiquettes couleurs plus faciles à lire

Esthétique naturelle des dents

- Excellence et pérennité du poli
- Large choix de teintes et d'opacités
- Fluorescence améliorée

Technologie unique des nano-charges

- Meilleure rétention du poli qu'un composite microchargé
- Meilleure résistance à l'usure que les autres composites
- Incroyable résistance à l'usure à la fois sur les dents antérieures et postérieures

Mode d'emploi

• Appliquer le matériau en couches successives en respectant les temps de polymérisation de ce tableau

Opacité	Epaisseur de la couche	Temps de photo- po lymérisation
Body (B)	2.0 mm	20 sec.
Email (E)	2.0 mm	20 sec.
Translucide (T)	2.0 mm	20 sec.
Dentine (D)	1.5 mm	40 sec.
A6B et B5B	1.5 mm	40 sec.



Réassorts Filtek Supreme XTE en seringues et en capsules

Référence	Descriptif
4911S	Filtek** Supreme XTE universel Kit d'introduction mono-opacité – capsules 40 capsules de 0,2 g : 20 Body A2 et 20 Body A3, guide technique, mode d'emploi
4910S	Filtek [™] Supreme XTE universel Kit d'introduction mono-opacité –seringues 4 seringues de 3 g : 2 Body A2 et 2 Body A3, guide technique, mode d'emploi
4911D	Filtek [™] Supreme XTE universel Kit d'introduction duo-opacité – capsules 40 capsules de 0,2 g : 10 Dentine A3, 10 Dentine A4, 10 Email A2, 10 Email A3, 1 teintier roue, guide technique, mode d'emploi
4910D	Filtek™ Supreme XTE universel Kit d'introduction duo-opacité – seringues 4 seringues de 3 g : 1 Dentine A3, 1 Dentine A4, 1 Email A2, 1 Email A3, 1 teintier roue, quide technique, mode d'emploi

Filtek™ Supreme XTE universel

4911P Kit professionnel multi-opacité - capsules

160 capsules de 0,2 g en plateau réutilisable : 10 Dentine A2, 10 Dentine A3, 10 Dentine A4, 20 Body A2, 20 Body A3, 20 Body A3.5, 20 Body A4, 10 Email A1, 10 Email A2, 10 Email A3, 10 Email W, 10 Translucide AT, 1 teintier roue, guide technique, mode d'emploi

4910P Filtek™ Supreme XTE universel Kit professionnel multi-opacité – seringues

12 seringues de 3 g : 1 Dentine A2, 1 Dentine A3, 1 Dentine A4, 1 Body A2, 1 Body A3, 1 Body A3.5, 1 Body A4, 1 Email A1, 1 Email A2, 1 Email A3, 1 Email W, 1 Translucide AT, 1 teintier roue, guide technique, mode d'emploi

Filtek Supreme XTE est un dispositif médical de classe lla selon la Directive 93/42 CEE. Marquage CE0123. 3M Deutschland GmbH, Allemagne. Lire attentivement les informations figurant sur la notice avant toute utilisation. Distribué par 3M France, 95006 Cergy Pontoise Cedex.






Des restaurations pour la beauté naturelle des dents avec le teintier roue 3M ESPE.

L'efficacité est essentielle dans votre cabinet dentaire. Notre teintier roue simplifie le choix des teintes et vous guide pour le choix des teintes et des opacités. Afin de répondre aux besoins de vos patients, un teintier roue est inclut dans chacun de nos kits de stratification.



Les seringues et les flacons de capsules sont codifiés par couleur afin de faciliter la sélection.

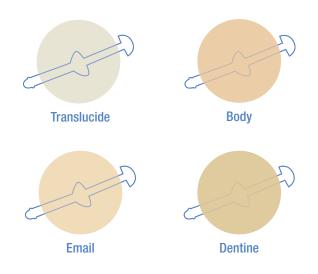

Opacités : les désignations Dentine, Body, Email et Translucide font référence aux différentes opacités.

Réassorts

Reassorts		
Opacité Dentine	Seringue	Capsules
A1D	4910A1D	4911A1D
A2D	4910A2D	4911A2D
A3D	4910A3D	4911A3D
A4D	4910A4D	4911A4D
B3D	4910B3D	4911B3D
C4D	4910C4D	4911C4D
Blanc (W)	4910WD	4911WD
Opacité Body	Seringue	Capsules
A1B	4910A1B	4911A1B
A2B	4910A2B	4911A2B
АЗВ	4910A3B	4911A3B
A3.5B	4910A3.5B	4911A3.5B
A4B	4910A4B	4911A4B
A6B	4910A6B	4911A6B
B1B	4910B1B	4911B1B
B2B	4910B2B	4911B2B
ВЗВ	4910B3B	4911B3B
B5B	4910B5B	4911B5B
C1B	4910C1B	4911C1B
C2B	4910C2B	4911C2B
СЗВ	4910C3B	4911C3B
D2B	4910D2B	4911D2B
D3B	4910D3B	4911D3B
Blanc (WB)	4910WB	4911WB
Extra blanc (XWB)	4910XWB	4911XWB
Opacité Email	Seringue	Capsules
A1E	4910A1E	4911A1E
A2E	4910A2E	4911A2E
A3E	4910A3E	4911A3E
B1E	4910B1E	4911B1E
B2E	4910B2E	4911B2E
D2E	4910D2E	4911D2E
Blanc (WE)	4910WE	4911WE
Extra Blanc (XWE)	4910XWE	4911XWE
Opacité Translucide	Seringue	VEAU / Capsules
Transparent (CT)	4910CT	4911CT
Bleu (BT)	4910BT	4911BT
Gris (GT)	4910GT	4911GT
Ambre (AT)	4910AT	4911AT

Les réassorts de seringues contiennent des seringues de 3 g.
Les réassorts de capsules contiennent 10 capsules de 0,2 g pour les opacités Dentine,
Email et Translucide. Pour l'opacité Body, 20 capsules de 0,2 g.
Un mode d'emploi est joint à tous les réassorts.

;_\V₁

Filtek Supreme XTE est un dispositif médical de classe lla selon la Directive 93/42 CEE. Marquage CE0123. 3M Deutschland GmbH, Allemagne. Lire attentivement les informations figurant sur la notice avant toute utilisation. Distribué par 3M France, 95006 Cergy Pontoise Cedex.

