


RelyX Fiber Post

Postes de Fibra de Vidrio

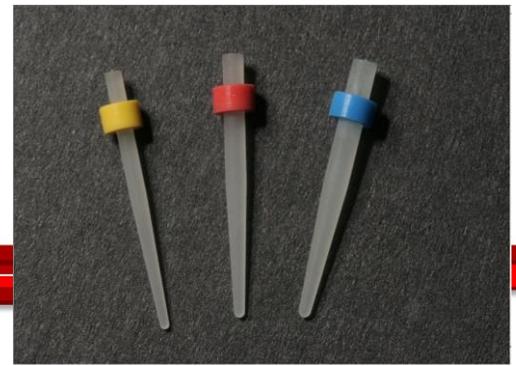

Descripción

RelyX™ Fiber Post es un poste radicular de fibra de vidrio reforzado con resina, radiopaco, traslúcido, disponible en tres tamaños codificados con colores.

Ventajas

- RelyX Fiber Post son postes de fibra de vidrio de forma cilindro cónico, forma similar a la raíz que permiten una preparación del canal radicular más conservadora, con menor remoción de tejido dentinario radicular.
- Módulo de elasticidad similar a la dentina, disminuyendo las fuerzas en la porción coronal, minimizando con ello el riesgo de fracturas.
- Translucido, provee estética y facilita la polimerización.
- Excelente resistencia a la fatiga, otorgándole durabilidad al tratamiento.
- Tiene una superficie microporosa que le entrega una mayor superficie a la adhesión y retención al cemento.
- No requiere tratamiento previo cuando es cementado con RelyXU200, por ello hay menor tiempo de trabajo.

Indicaciones de Uso

Para el tratamiento de dientes endodóticamente tratados, con significativa pérdida de la estructura dental, para incrementar la estabilidad y la retención de las restauraciones coroneales.

Instrucciones de Uso

Fiber Post	Tamaño 1 Amarillo	Tamaño 2 Rojo	Tamaño 3 Azul
Diámetro Apical (mm)	0,70	0,80	0,90
Diámetro Coronal (mm)	1,30	1,60	1,90
Conicidad	3,44° (6%)	4,58° (8%)	5,72°(10%)
Largo (mm)	20	20	20

Presentación

Reposiciones

- Caja 10 postes 0,7 mm. apical
- Caja 10 postes 0,8 mm. apical
- Caja 10 postes 0,9 mm. apical