

Adper Single Bond 2

Adhesivo con nanotecnología



Descripción

El Adhesivo Adper Single Bond 2 es un agente adhesivo a esmalte y dentina, de técnica adhesiva de grabado total. Presenta un copolímero funcional que ayuda a la resistencia contra el efecto deteriorante de la humedad del ambiente con una elevada humedad relativa. Es rápido, fácil y práctico para el procedimiento adhesivo de rutina en la consulta dental. Indicado para restauraciones directas e indirectas.


Ventajas

- Tecnología de nanorelleno patentada que evita que el relleno se sedimente; no necesita agitar antes de usar.
- Su solvente de etanol/agua es menos volátil que el de los adhesivos con base de acetona, menos desperdicio y un desempeño más homogéneo.
- Contiene copolímero Vitrebond permitiendo una buena adhesión en dentina húmeda.
- Botella anaranjada translúcida que permite ver la cantidad de producto remanente.
- Versátil, indicado para restauraciones directas e indirectas
- Su tapa abatible (Flip-top) se cierra herméticamente minimizando la evaporación: menos desperdicio y un desempeño más homogéneo.

Indicaciones de Uso

- Restauraciones directas adhesión de resinas compuestas foto polimerizables
 - Reparación de porcelana/resina
 - Desensibilización de superficies radiculares
- Adhesión de restauraciones indirectas en combinación con cemento de resina.

Instrucciones de Uso

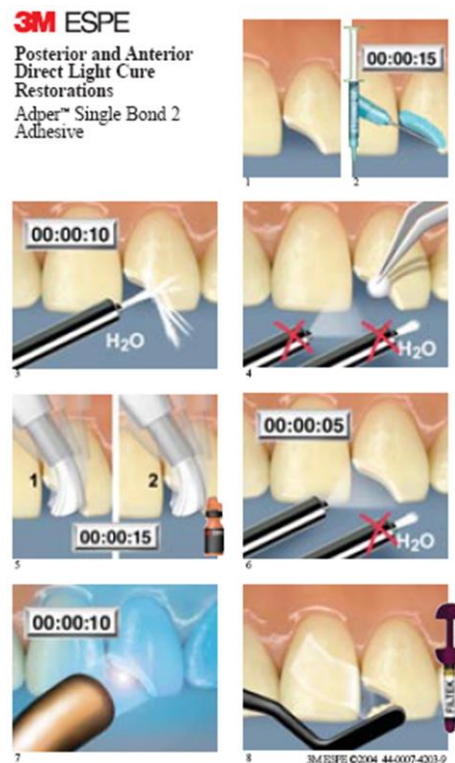

Presentación

Adper Single Bond 2, botella 6 g.
Instructivos

Actualizado Diciembre 2017