

3M™ ベアーハガー™ ペーシエントウォーミング Model 675



世界で2億人以上の患者に用いられてきた
3M™ ベアーハガー™ ペーシエントウォーミング
安全・効果的な加温性能に加え、医療現場の求める機能を追加した最新モデル



3M™ ベアーハガー™ ペーシエントウォーミング

Model 675

加温性能と使いやすさを両立した最新モデル。
各種3M™ ベアーハガー™ ウォーミングブランケットに
使用できます。

安全で効果的な加温機能


- ホース先端の温度をソフトウェアによって計算し、
正確な温度の温風を供給します。
- 設定温度への到達が早く、迅速に加温を開始できます。
- 温度上昇、下降を検知するアラームを備えており、
安全に加温を行うことが可能です。

軽量で動かしやすい

- 従来のモデル775に比べ、
約半分の重量まで軽量化しました。


ブランケットへの装着が簡単なホースデザイン

- 人間工学に基づいたホース先端部のデザインにより、
簡単に確実なブランケットへの接続が可能です。
- ホースは本体から簡単に取り外すことができ、ローリングカートへの収納が可能です。

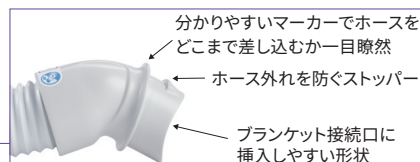

- ローリングカートへの取り付けは、はめ込み式で非常に簡単。
取り付けに工具は不要です。

シンプルで直感的な操作が可能なコントロールパネル

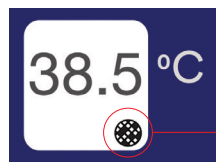

エアーフィルタの交換時期をお知らせする、
フィルタインジケータを搭載



温度上昇、下降を検知するアラームによって、安全に配慮した設計となっています。

温度設定	室温 低温：32℃ 中温：38℃ 高温：43℃
風量設定	44CFM
動作音量	50 dB
異常検出温度	温度上昇アラーム ・送風温度が53℃±3℃になったとき ・送風温度47℃が30秒以上続いたとき ・各設定温度よりも3℃以上上回った送風温度が3分以上続いたとき 温度下降アラーム ・各設定温度よりも3℃以下下回った送風温度が3分以上続いたとき 上記現象の発生時に、それぞれの警報マークを液晶画面に表示し加温が停止します
電氣的低格	AC100V、50/60Hz、12A
消費電力	平均：650W、ピーク：1255W
安全性	クラスⅠ、BF形装着部
寸法 (本体)	36cm (高さ) × 28cm (幅) × 27cm (奥行)
重量	4.5kg (ホース重量含む)

販売名：3M ベアーハガー ペーシエントウォーミング モデル675
認証番号：229ADBZX00130000

温風の対流によって患者全体を包み込み、広い面積を均一に加温する、
3M™ ベアーハガー™ ペーシエントウォーミング ブランケットシリーズ
豊富なブランケットバリエーションで、様々な症例・体位に対応が可能です。

3M™ ベアーハガー™ ペーシエントウォーミング ブランケット マルチポジションアッパー用

Model 622



「曲がる」「変形する」という新デザインに進化したブランケットです。様々な症例・体位に対応できます。

3M™ ベアーハガー™ アンダーボディブランケット シリーズ



Model 635 「フルアクセス用」


胸腹部、脊椎部加温用。腕を広げた状態にも対応でき、側臥位、仰臥位、腹臥位などの体位にも使用できます。ホース挿入口は足下と頭部に配置されています。

Model 585 「砕石位用」

体温低下が大きくなりやすい砕石位において、頭部から下腿部まで加温できます。泌尿器科、産婦人科、下部消化器手術などに対応します。

Model 575 「脊椎手術用」

脊椎手術台のオープンフレームのために体位固定具の調整が邪魔にならず、患者の全体が可視化されます。

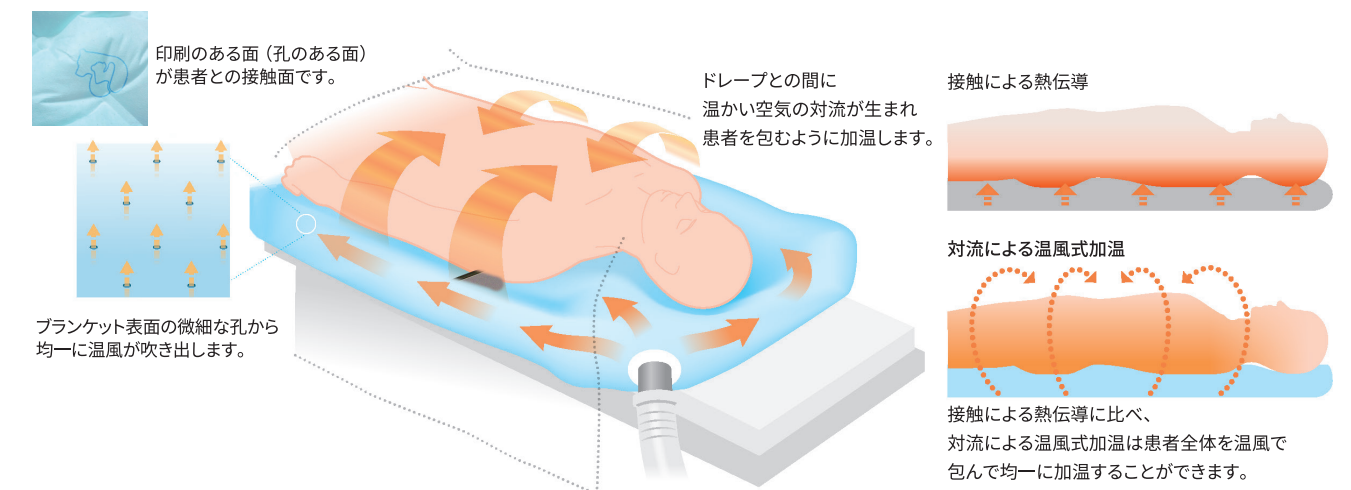

イメージ図

3M™ ベアーハガー™ ペーシェントウォーミング メンテナンスサービスのご案内

装置の機能と安全性の維持のため、使用時間 500 時間経過ごと、もしくは 12 ヶ月ごとの点検を推奨しております。

点検料金

ユーザー様向け希望料金 ¥30,000 (税抜) 部品代込み※

※複数部品の交換が必要となった場合は、以下の料金となります。

ユーザー様向け希望料金 ¥60,000 (税抜) 部品代込み

上記「複数部品の交換が必要な場合」とは、次のような場合が該当します。

- ・制御ボードと同時にヒーターあるいはブロワを交換する必要がある場合
- ・上下筐体を交換する必要がある場合

点検・修理の電話受付窓口

カスタマーコールセンター（ナビダイヤル） 0570-011-321

市内通話料金でご利用いただけます。

受付時間 8:45～17:15 月～金（土・日・祝・年末年始は除く）

オプション

3M™ ベアーハガー™ ローリングカート（Model675 用）

96750



定期交換品

3M™ ベアーハガー™ エアフィルター（Model675 用）

96753

エアフィルターは定期交換品です。500 時間使用する毎、または使用開始から 12 ヶ月経過した場合は交換してください。



3M™ ベアーハガー™ 体温管理製品の詳しい情報は
<http://www.mmm.co.jp/hc/pw/index.html/>

3M、Bair Hugger、ベアーハガーは、3M社の商標です。



スリーエム ジャパン株式会社
ヘルスケアカンパニー

感染管理製品事業部

<http://www.mmm.co.jp/hc/medical/>

Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2018. All Rights Reserved.
HPM-801-A(031805)DN

2018年3月発行

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

 **0570-011-321**

8:45～17:15 / 月～金（土日祝年末年始は除く）
全国どこからでも市内料金でご利用いただけます