



Disinfecting Port
Protectors

Curoso™ Stopper

Dezinfekční uzávěr pro otevřené konusy/spojky
typu Luer

Bezpečně uzavřete katétr.

Podle CDC guidelines a Joint Commission představují Ventily Stopcock, které se používají k podávání léčiv, intravenózním infuzím a odběru krve, možné riziko kontaminace cévních katétrů a intravenózních tekutin nežádoucími mikroorganismy.^{1,2}

Dezinfikujte a chraňte otevřené konusy/spojky typu Luer pomocí dezinfekčních uzávěrů 3M™ Curoso™ Stopper. Stejně jako 3M™ Curoso™ dezinfekční uzávěry bezjehlových konektorů, splňují 3M™ Curoso™ Stopper uzávěry pro otevřené konusy/spojky typu Luer vysoké standardy z hlediska účinnosti. Pomocí 70% isopropylalkoholu (IPA) dezinfikují rizikové povrchy otevřených konusů typu Luer, které jsou přístupovým bodem. 3M™ Curoso™ Stopper dezinfekční uzávěry pro otevřené konusy/spojky typu Luer zabraňují kontaminaci po dobu až 7 dní a celou tuto dobu zůstanou bezpečné pro použití, pokud nejsou sundány.

Stačí sloupnout fólii z 3M™ Curoso™ Stopper uzávěru a našroubovat.



Používejte 70% IPA
k dezinfekci rizikových
povrchů.



Dezinfikujte
do **1 minuty**. Chraňte
otevřené konusy/
spojky typu Luer
po dobu až **7 dní**.

Efektivní konstrukce

Dezinfekční uzávěry Curoso Stopper se zajišťovacím systémem typu Luer lze použít na různé kohoutové ventily a hrdla katétrů. Jedinečná konstrukce uzávěru je odolná tlaku a neprodyšně uzavře systém.

Praktické balení

Uzávěry Curoso Stopper jsou baleny samostatně nebo na praktických stripech s pěti kusy; stripy lze zavěsit na intravenózní stojany, kde budou vždy po ruce.


Výrazné barvy pro přehlednou dezinfekci

Uzávěry Curoso Stopper mají výrazné barvy, takže zdravotník pouhým pohledem zjistí, zda jsou vstupy kryté.

Dodržování dezinfekčních postupů lze snadno a spolehlivě hodnotit.

3M™ Curob™ Stopper dezinfekční uzávěry snižují o 99,99 % výskyt 6 mikroorganismů, které jsou nejčastěji spojeny s CLABSI (Central line – Associated Bloodstream Infection).^{3,4}


Účinnost dezinfekčních ochranných uzávěrů Curob Stopper byla testována *in vitro* na tyto mikroorganismy:⁴

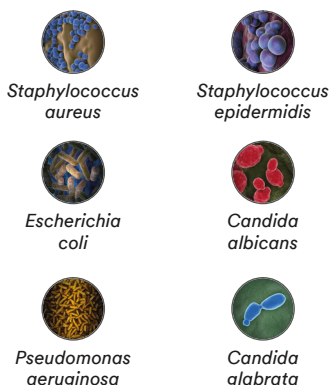

ZÁVĚR STUDIE:

Všechny testované vzorky překročily minimální 4-log redukci po jedné minutě.

Údaje evidované společností 3M.

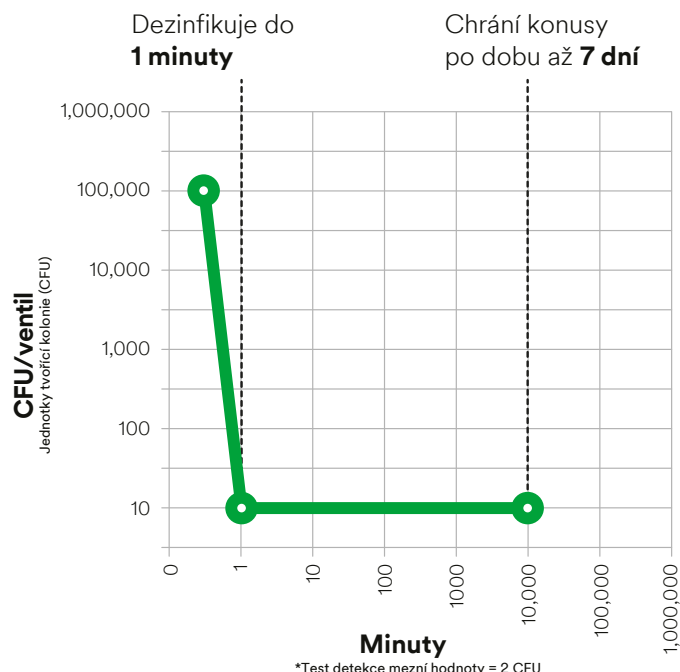

1. CDC: Guidelines for the Prevention of Intravascular Catheter-Related Infection
2. The Joint Commission. Preventing Central Line-Associated Bloodstream Infections: A Global Challenge, a Global Perspective. Oak Brook, IL: Joint Commission Resources, May 2012. <http://www.PreventingCLABSIs.pdf>
3. Více informací o mikroorganismech spojených s infekcí krevního řečiště související s centrálním katétre: Sievert, D. M., Ricks, P., Edwards, J. R., Schneider, A., Patel, J., Srinivasan, A., ... Fridkin, S. (2013). Antimicrobial-Resistant Pathogens Associated with Healthcare-Associated Infections: Summary of Data Reported to the National Healthcare Safety Network at the Centers for Disease Control and Prevention, 2009–2010. Infection Control & Hospital Epidemiology, 34(01), 1-14. doi:10.1086/668770.
4. Údaje odpovídají nálezům *in vitro* s 3M™ Curob™ Stopper dezinfekčními ochrannými uzávěry.

Výrobek	Jednotkové balení	Objednávací č. výrobku společnosti 3M	Krabiček v balení	Jednotek v krabičce	Celkový počet uzávěrů v kartonu
3M™ Curob™ Stopper dezinfekční uzávěr pro otevřené konusy/spojky typu Luer	Samostatně, modrozelená	CSV1-270R	8	270	2160
	Stripy (po 5 kusech), modrozelená	CSV5-250R	8	50 stripů	2000



3M Česko, spol. s r.o.

V Parku 2343/24 148 00 Praha
Tel: +420 261 380 111
Fax: +420 261 380 110
www.3M.cz/zdravotnictvi

Vytisknuto v ČR. Po použití zrecykluje.
© 3M 2018. Všechna práva vyhrazena. 3M a Curob jsou ochranné známky společnosti 3M. OMG5090

