

3M

Tegaderm™

Lösningar för sårbehandling

3M™ Tegaderm™ Silicone Foam förband med tunn kant

**Imponerande starkt,
förvånansvärt
skonsamt.**



Sårbehandling börjar med hudvård.


Huden är kroppens största organ vilket också gör den extra utsatt för krafter från tryck, friktion och skjuv. Din uppgift som sårbehandlande kliniker är att skydda och hålla patientens hud intakt. Det kan ofta vara ett komplicerat arbete som påverkas av många faktorer.

En faktor är förband för sårbehandling. Många kliniker väljer att använda skumförband med silikon då de är mer skonsamma mot huden än vanliga förband. Därmed minskar risken för MARSI (Medical Adhesive-Related Skin Injury, hudskador relaterade till tejp).¹


Banbrytande inom styrka och skonsamhet.

3M började ta fram medicinska tejper som var skonsamma mot huden för över 50 år sedan. Vi håller fortfarande på att uppfinna produkter som både fäster bra och enkelt kan tas bort för att minska risken för MARSI.¹ Ta reda på mer om hur du skyddar dina patienter från MARSI på [3M.com/MARSI](https://www.3m.com/MARSI).

En kolorimetrisk proteinstudie utfördes där man mätte hudcellsprotein som fastnat på en tejp efter att den lossnats från huden. Där påvisades att silikontejp från 3M tog bort signifikant färre hudceller än vanliga akrylattejper – vilket innebär mindre risk för hudtrauma.^{2,3}

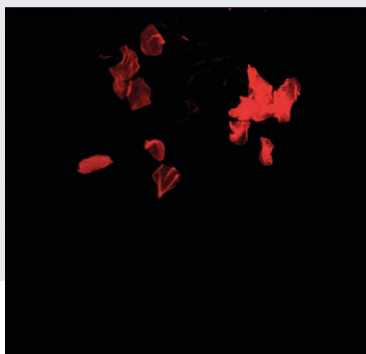

Hudcellsprotein på en skonsam silikontejp från 3M

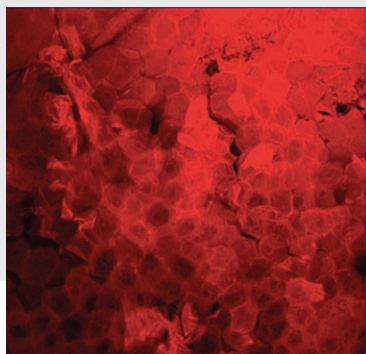

Hudcellsprotein på en vanlig akrylattejp

3M™ Tegaderm™ Silicone Foam förband har en mycket avancerad konstruktion av olika lager

Genom ett patenterat appliceringssystem


möjliggörs en enkel aseptisk applicering med en hand, även med handskar på, så att den andra handen är ledig att positionera patienten.⁴

Unikt ryggmaterial av 3M™ Tegaderm™ Film

kombinerat med ett innovativt häftämne från 3M bildar ett genomsläppligt skydd över förbandet.⁵

Fuktighetsreglerande lager

hjälp till att säkerställa optimal fuktbalans genom att underlätta för avdunstningen genom filmlagret.⁵

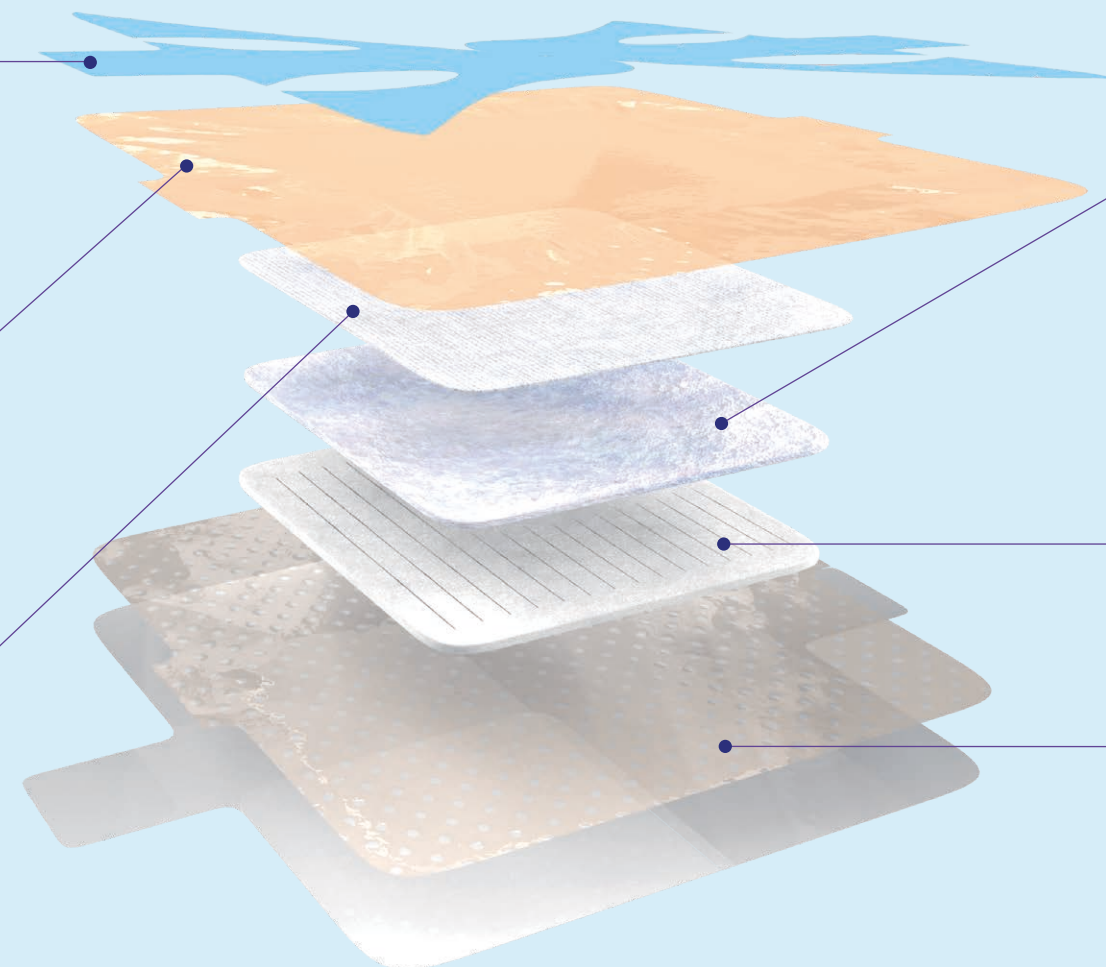

Superabsorberande lager


suger upp sårvätska och håller den kvar för att minimera risken att den orsakar maceration runt såret.^{4,5}

Perforerat skumlager

ger bättre formbarhet och fuktabsorbering.⁵

Vårt eget silikonhäftämne

håller förbandet på plats utan att skada sårytan och släpper samtidigt igenom exsudat.^{4,5}

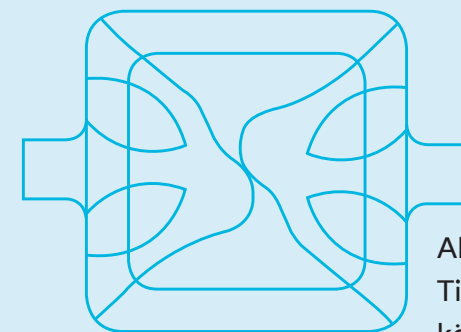

Alla silikonskumförband är inte lika. Till skillnad från våra konkurrenter som köper andras häftämnesteknologi på licens utvecklar forskarna på 3M egna unika silikonhäftämnen på laboratoriet – och använder sin mångåriga expertis till att skapa innovationer som svar på utmaningarna inom förbandsbranschen.

Din utmaning:

Skumförband med silikon som inte klarar längre användning.



Lösningen från 3M:

Signifikant längre hållbarhet plus skonsam vidhäftning^{6,7}

3M™ Tegaderm™ Silicone Foam förband kan användas under signifikant längre tid än vidhäftning från den globalt ledande konkurrenten⁶, samtidigt som det är skonsamt mot huden. Detta sparar både tid och pengar åt kliniken genom att man slipper onödiga förbandsbyten.

2X

längre användnings-tid

Jämförelse i användningstid



3M™ Tegaderm™
Silicone Foam förband



Jämförande förband

3M™ Tegaderm™ Silicone Foam förband höll dubbelt så länge som den globalt ledande konkurrentens silikon-skumförband när det användes under sju dagar och lyftes dagligen.^{2,7}

Din utmaning:

Skumförband med silikon som släpper taget och rullar upp på ställen med mycket skjuv.



Lösningen från 3M:


Tunn kant med låg profil

3M™ Tegaderm™ Silicone Foam förband är mycket formbara. De har en tunn kant med låg profil som hindrar att förbandet lossnar och rullar upp, vilket ger bättre vidhäftning och användningstid.^{6,7}


40%

tunnare kant⁸

Jämförelse mellan förbandskanter

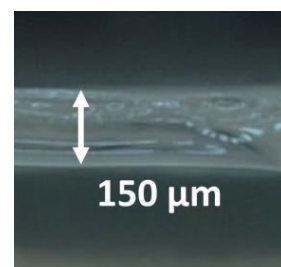

3M™ Tegaderm™
Silicone Foam förband

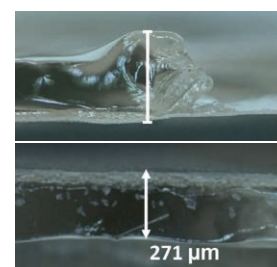

Jämförande förband



Din utmaning:

Hudområden där det är svårt att applicera förband.



Lösningen från 3M:

Enkel applicering

Patenterat appliceringssystem som gör förbanden lätta att applicera på svåra platser, såsom sakrum – en positivare upplevelse.

94%

nöjda

Sakrumapplicering



De flesta utvärderare (31 av 33) var **“mycket nöjda”** eller **“nöjda”** med hur enkelt det var att applicera 3M™ Tegaderm™ Silicone Foam sakrumförband.⁴

Din utmaning:

Sårvätska som ansamlas under förbandet och orsakar maceration runt såret.




Lösningen från 3M:

Unik konstruktion med flera lager


I vår innovativa flerlagersteknologi finns en superabsorbent som hjälper till att minimera den fuktvandring som kan leda till maceration.

Mindre
vätskan-
samling⁹

Jämförelse mellan förbands uppsugningsförmåga

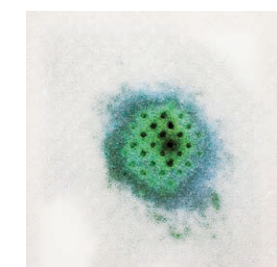

3M™ Tegaderm™
Silicone Foam förband

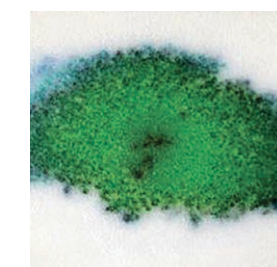

Jämförande förband

I en simulerad in vitro-studie av ett mycket exsuderande sår under kompression hade 3M™ Tegaderm™ Silicone Foam förband utan kant signifikant mindre vätskeansamling på förbandets sår sida jämfört med silikonförband från den ledande konkurrenten.⁹

Smart skydd för prevention av trycksår/tryckskador.

Trycksår/tryckskador som uppstår på kliniken är ett växande sjukvårdsproblem.¹⁰ Det kan inte bara leda till längre sjukhusvistelser och fler återinskrivningar, utan också orsaka mer patientsmärta och lidande – och i vissa fall för tidig dödlighet.¹¹

I övergripande planer för prevention av trycksår/tryckskador bör man överväga att använda förband av polyuretanskum för att skydda benutskott från friktion och skjuv och minska risken för utveckling av trycksår/tryckskada.¹²



11 miljarder
dollar är den uppskattade årliga kostnaden för vård av trycksår/tryckskador.¹²

En kostnad på upp till
70 tusen
dollar per individuellt trycksår/tryckskada.¹²

För att hitta det idealiska förbandet för prevention av trycksår/tryckskada finns det flera viktiga egenskaper – följande infallsvinklar är hämtade från dokumentet av EPUAP (European Pressure Ulcer Advisory Panel) *Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Clinical Practice Guidelines document*¹²:

- ✓ **Möjlighet att komma åt och undersöka huden**
Kroppsytor med hög risk för trycksår/skada bör inspekteras ofta för att upptäcka tidiga tecken på tryckskada.

Använd ett förband som tål att ofta lossas och fästas igen för att kunna göra undersökningar utan att skada huden.

- ✓ **Enkel applicering och borttagning**
Det kan vara utmanande att applicera och ta bort förband från platser som hälen och sakrum. För att patienten ska få rätt position krävs ofta assistans.

Använd ett förband som är specialgjort för att enkelt kunna appliceras, vilket i sin tur leder till att förbanden inte lika lätt går sönder och ofta måste bytas.

- ✓ **Förmåga att hantera mikroklimat**
Varm, fuktig hud är mer känslig för skadliga effekter från tryck och skjuv, vilka är kända riskfaktorer för bildande av trycksår/tryckskada.¹³

Använd ett förband med egenskaper som minskar mängden ansamlad fukt vid hudytan.

- ✓ **Rätt förbandsstorlek för områden med hög risk**
Områden som ligger över ett benutskott som hälen och sakrum, drabbas av mer än hälften av alla trycksår/tryckskador¹² eftersom de är så känsliga för tryck, friktion och skjuv.

Använd ett förband som är specialutformat för dessa högriskområden och finns i storlekar som passar flera olika kroppstyper.



Här möts sår och behandling på nytt!

3M science. Applied to life: Hos 3M stödjer vi ditt expertkunnande och beslutsamhet att ge bästa möjliga vård med ett omfattande utbud av kliniskt prövade lösningar. Strävan inom vår forskning är att varje dag förbättra ditt och patienternas liv.

Upptäck varför 3M™ Tegaderm™ Silicone Foam förband är ett utmärkt val för behandling av sår och för att förhindra trycksår/tryckskador.

	Information	3M Art.nr	Storlek	Förband/ låda	Lådor/ kartong
	Förband utan häftande kant	90631	10 × 11 cm	10	4
	Förband utan häftande kant	90632	15 × 15 cm	10	4
	Förband med häftande kant	90643	5 × 5 cm	10	6
	Förband med häftande kant	90640	7,5 × 7,5 cm	10	6
	Förband med häftande kant	90641	10 × 10 cm	10	6
	Förband med häftande kant	90642	15 × 15 cm	10	4
	Häl och kontur med häftande kant	90646	16,5 × 16,5 cm	5	4
	Sakrumformat, litet, med häftande kant	90647	15 × 17 cm	10	4
	Sakrumformat, stort, med häftande kant	90648	18,5 × 22 cm	5	4

På 3M.com/SiliconeFoam kan du läsa mer om produkten.

¹McNichol L., Lund C., Rosen T., et al., Medical adhesives and patient safety: state of the science: consensus statements for the assessment, prevention, and treatment of adhesive-related skin injuries, J Wound Ostomy Continence Nurs, 40 (4) (2013), sid. 365–380 ²Hej K., et al., Evaluation of the Wear Time and Re-stick Performance of a New Silicone Foam Dressing, Poster presentation at EWMA conference, Amsterdam 2017 ³3M-data på fil (05-014109), n = 48 ⁴3M-data på fil (05-285599) ⁵3M-data på fil (05-310615, 05-310668, 05-310670, 05-310255) ⁶3M-data på fil (4 × 4 och 6 × 6 förband, 05-013978), n = 48 ⁷3M-data på fil (4 × 4 och 6 × 6 förband, 05-013977), n = 48 ⁸3M-data på fil (05-310252), n = 10 ⁹Sieracki J., et al., Silicone Foam Dressings: Evaluating Absorption Under Compression, Poster presentation at EWMA conference, Amsterdam 2017 ¹⁰Zaratkiewicz S., Whitney J. D., Lowe J. R., et al., Development and Implementation of a Hospital- Acquired Pressure Ulcer Incidence Tracking System and Algorithm. Journal for Healthcare Quality, 32(6), (2010), sid. 44–51 ¹¹Health Research & Educational Trust (januari 2016). Hospital Acquired Pressure Ulcers (HAPU) Change Package: Uppdatering 2016. Chicago, IL: Health Research & Educational Trust. Hämtat från www.hret-hen.org. ¹²National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Clinical Practice Guideline. Emily Haesler (Ed.). Cambridge Media: Osborne Park, Western Australia; 2014. ¹³World Union of Wound Healing Societies (WUWHS) Consensus Document. Role of dressings in pressure ulcer prevention. Wounds International, 2016.



3M Svenska AB
Bollstanäsvägen 3
191 78 Sollentuna
Telefon 08-92 21 00
E-post kundservice@mmm.com
Webb www.3M.se

3M och Tegaderm
är varumärken som tillhör 3M.
För återvinning.
© 3M 2017. Med ensamrätt.
10/17