


3M Ciencia.
Aplicada a la vida.™

Placa 3M™ Petrifilm™ para recuento de Hongos y
Levaduras Express

**Maximiza tu
productividad
en solo
3 pasos.**

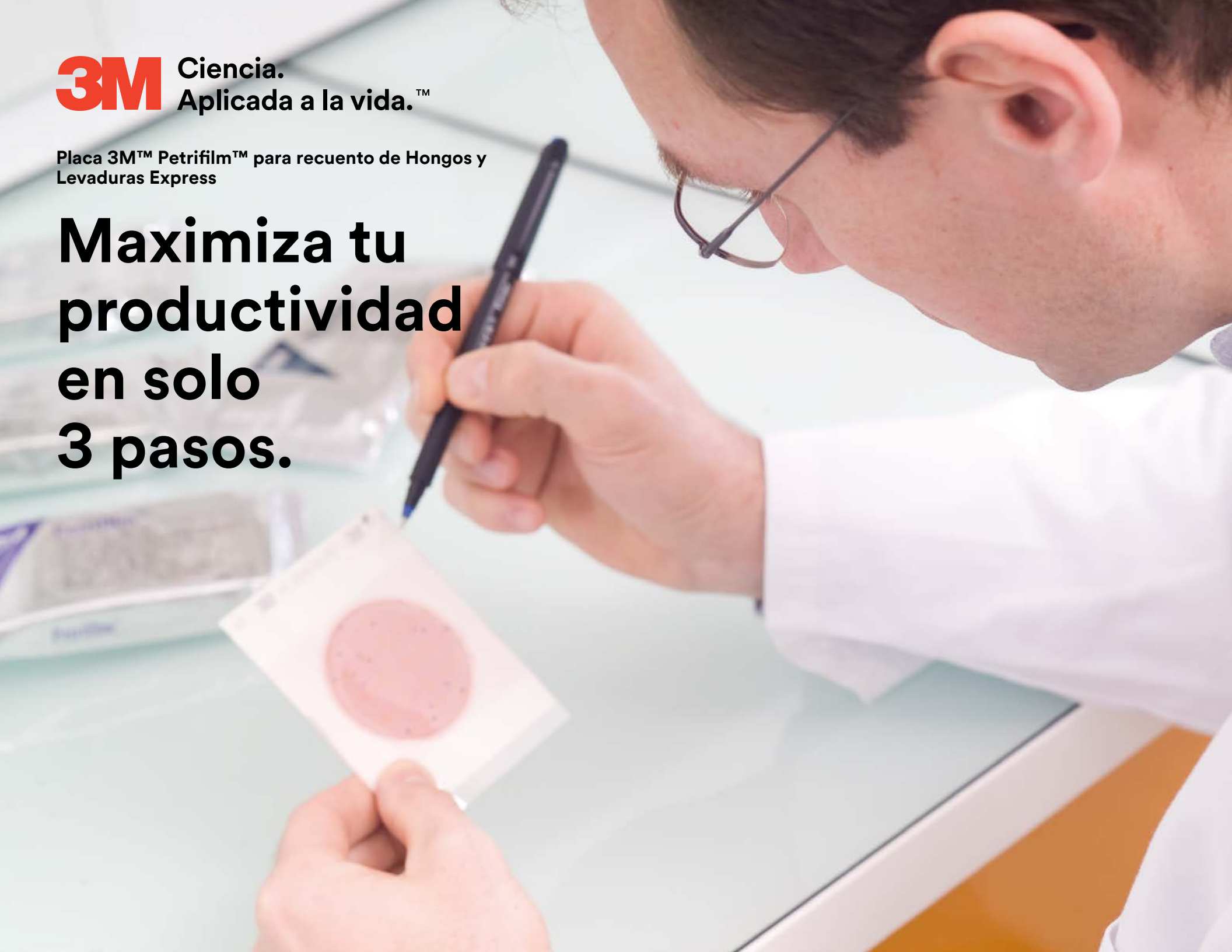

¡Resultados más rápidos en sólo 48 horas!

Los hongos y levaduras pueden crecer en una amplia gama de condiciones, en el entorno de producción, en materias primas y producto terminado, haciendo que sean difíciles de controlar. Lo más complicado del proceso es el período de incubación del método tradicional que toma cinco días. La placa 3M Petrifilm.


Recuento de Hongos y Levaduras Express es un método más rápido y fácil que cuenta con una nueva tecnología de indicador, que hace la interpretación de las colonias más sencilla. Nuestras placas rápidas, listas para usar, proporcionan los resultados en tan sólo 48 horas.

Pruebas rápidas y precisas

Fáciles de usar

Sólo tres sencillos pasos se necesitan para la rapidez y precisión de la prueba:

1. Inocular 1 ml de la muestra en el centro de la placa y aplicar el difusor.
2. Incubar a 25° C o 28° C.
3. Contar colonias.

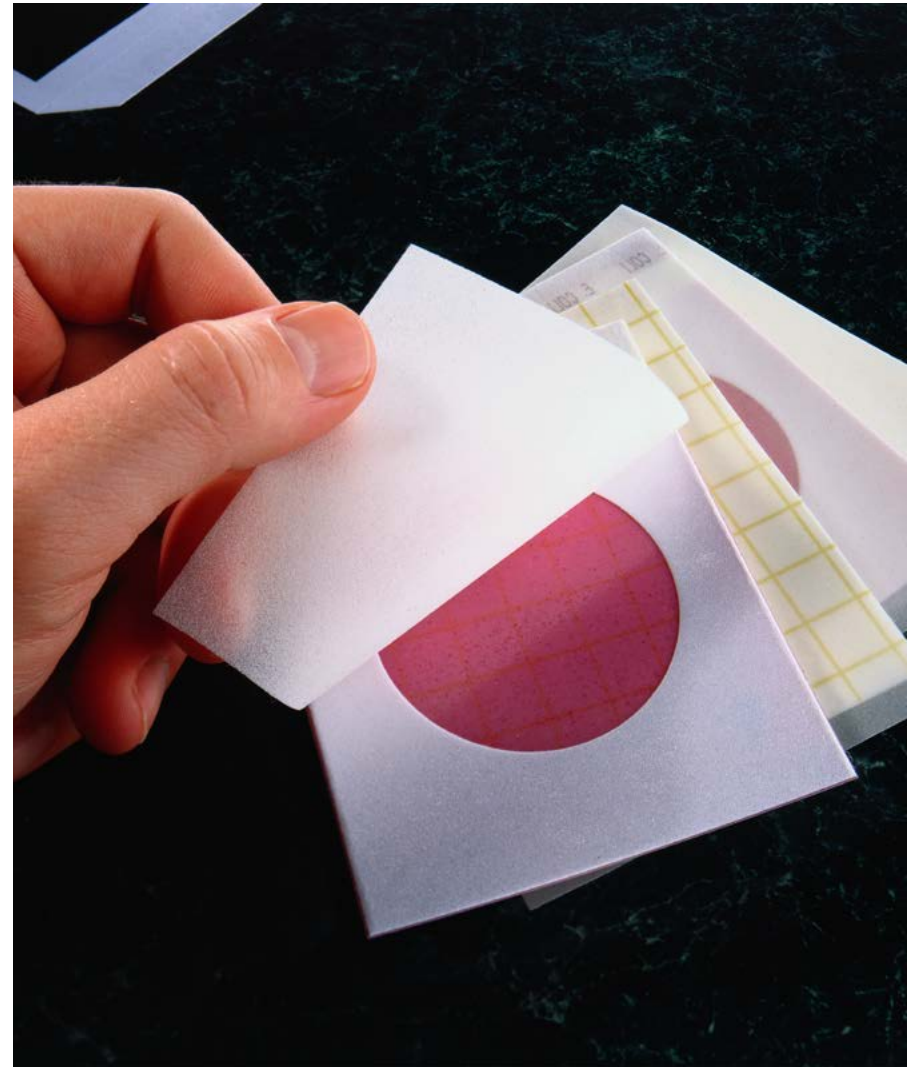


Características y Beneficios de las Placas 3M™ Petrifilm™ Express para recuento de Hongos y Levaduras:



Fácil de usar

Contiene una barrera de hule espuma alrededor del área de inoculación haciendo más fácil la siembra de la muestra.

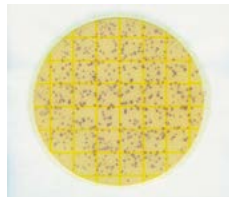

Fácil de interpretar

La tecnología permite que las colonias de Mohos no se extiendan o superpongan.




Amplio desempeño en alimentos

Puede utilizarse con alimentos de alta o baja actividad acuosa (Aw).



Confiablez aprobada

vs Método tradicional con agar DRBC, DG-18, YGC y PDC acidificado.

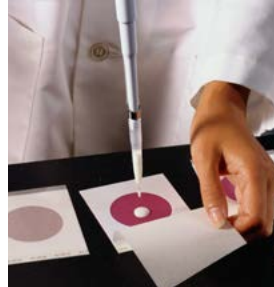

Ahorro en mano de obra

Reduce la necesidad de mano de obra intensiva vs la técnica de vertido en placa



Versátil

Puede utilizarse para análisis de aire, hisopado en muestras de superficie de contacto ambientales



Resultados rápidos

La nueva tecnología tiene un indicador que provee resultados en 48 horas de incubación



3M Health Care
3M Food Safety
Av. Sta. Fe No. 190,
Col. Santa Fe, Del. Álvaro Obregón
01210, México D.F.
Tel. 5270 0400
www.3m.com.mx/foodsafety



3Mmexico

3M® es una marca registrada
de 3M Company. ©2014 Todos los derechos reservados.