



Clarity™

Esthetic Orthodontic Solutions

Attacchi estetici self-ligating 3M™ Clarity™ Ultra

Una soluzione chiara che ispira sorrisi.



Successo assicurato per il tuo studio e i tuoi pazienti.

Il campo dell'ortodonzia e i modelli di trattamento stanno cambiando. I pazienti hanno più scelte e svolgono un ruolo attivo nelle decisioni relative alla scelta del trattamento ortodontico. Contemporaneamente, le tecnologie emergenti stanno introducendo innovazioni e nuovi livelli di efficienza in ortodonzia.

In tutti questi cambiamenti, l'obiettivo fondamentale rimane sempre lo stesso: creare un bel sorriso, nella certezza che duri per tutta la vita dei pazienti.

Raggiungi risultati eccellenti.

Gli attacchi self-ligating 3M™ Clarity™ Ultra offrono migliore controllo rotazionale, maggiore versatilità e presentano nella base l'esclusiva linea di concentrazione dello stress, per un debonding predicibile e uniforme.

L'attacco autolegante passivo può, se necessario, diventare attivo aggiungendo legature metalliche o elastomeriche.

L'esclusivo design ovale dell'area sotto le alette consente una doppia legatura per una maggiore versatilità del trattamento.

Un ampio sportellino in ceramica migliora il controllo rotazionale grazie a un'ampia estensione mesio-distale.

Ceramica traslucida, resistente alle macchie per un'estetica eccezionale. Nessun elemento metallico visibile.

La ceramica stampata a iniezione presenta superfici lisce e angoli arrotondati per un maggior comfort del paziente.

Realizzato con esclusiva silice microcristallina a grana fine, per una maggiore resistenza.

Gli sportellini resistono più del doppio del necessario utilizzo in un tipico trattamento ortodontico.

2x

Gli affidabili sportellini degli attacchi Clarity™ Ultra resistono a più del doppio dei cicli di apertura e chiusura di un tipico trattamento.

Trattamento tipico di 2 anni

2x

Affidabilità degli sportellini degli attacchi 3M™ Clarity™ Ultra

Migliora l'efficienza e i risultati.

Tu e i tuoi pazienti desiderate la stessa cosa: scelte di trattamento efficaci che assicurino risultati evidenti. Per ottenerli sono necessari controllo e predicibilità dall'inizio alla fine del trattamento. Gli attacchi Clarity™ Ultra offrono tutto ciò, consentendo di pianificare un trattamento in grado di produrre risultati precisi.



Sostituzione più semplice degli archi in assenza di legature.




Un ampio sportellino in ceramica migliora il controllo rotazionale grazie a un'ampia estensione mesio-distale.



Attacco passivo o attivo, se necessario.



Controllo della rotazione senza l'aggiunta di accessori.

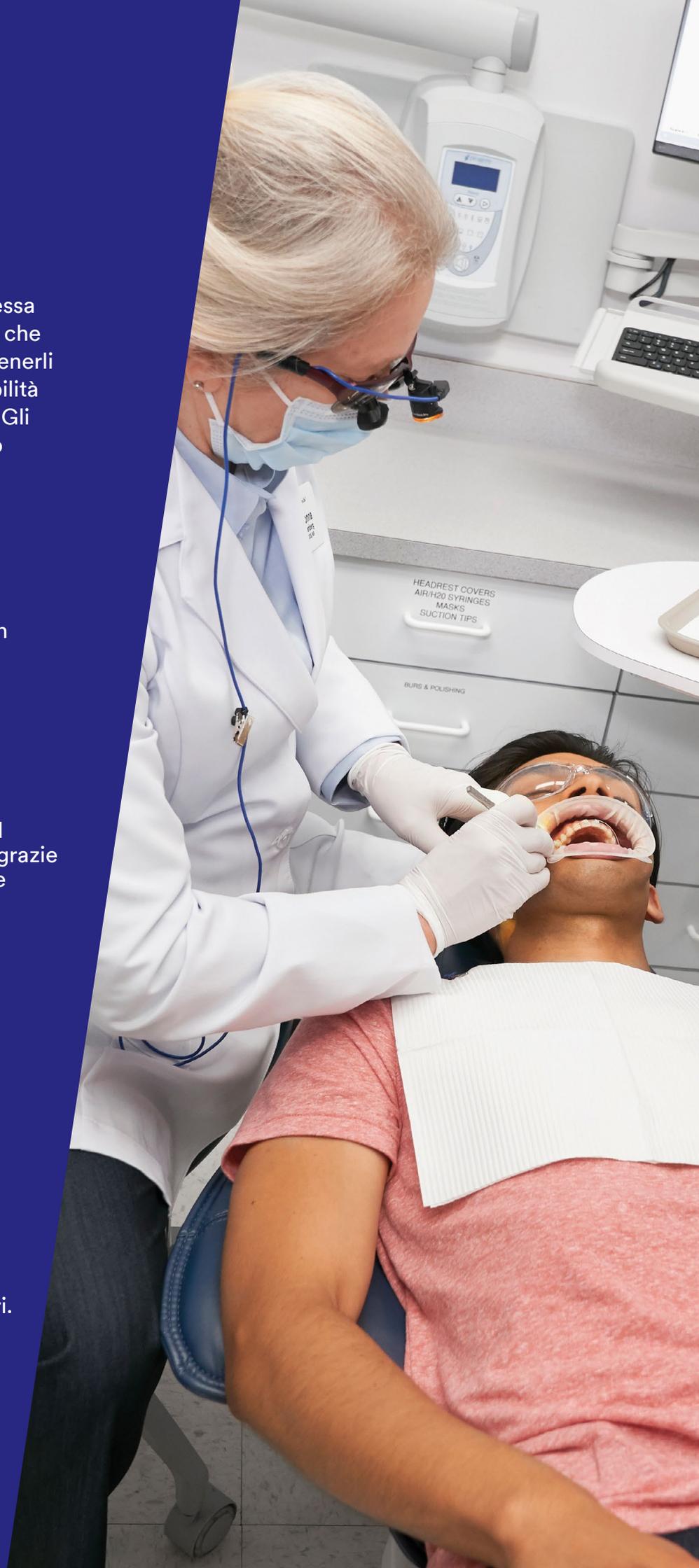

Processo di bonding semplice ed efficiente.

L'esclusivo adesivo predosato 3M™ APC™ Flash-Free è il più efficiente sistema di bonding in ortodonzia. L'innovativo design brevettato crea un substrato per il bonding alla base dell'attacco che consente di risparmiare tempo e aumentare la soddisfazione del paziente.




Disponibile con adesivo predosato 3M™ APC™ Flash-Free per un bonding sicuro e affidabile.



Risparmia tempo e costi

- ✓ Bonding più rapido ed efficiente rispetto agli attacchi senza adesivo predosato.
- ✓ Elimina la fase di rimozione degli eccessi di adesivo.
- ✓ Pulizia più semplice e veloce nella fase di debonding.

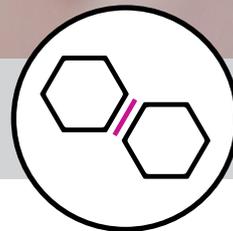

Efficienza superiore nel processo di bonding

- ✓ Tempo di bonding ridotto fino al 40% per attacco.
- ✓ Nessun eccesso di adesivo da rimuovere significa riduzione dei movimenti accidentali dopo il posizionamento, riducendo così il bisogno di dover riposizionare gli attacchi.
- ✓ Protegge lo smalto dei denti sotto l'adesivo.

Basati su un'innovazione di cui ti puoi fidare.

Scegliendo il sistema di attacchi Clarity™ Ultra, hai accesso ad una tecnologia all'avanguardia, risultati predicibili e un supporto clienti di cui ti puoi fidare. Ma, soprattutto, hai a disposizione una soluzione estetica che offre le massime prestazioni durante tutte le fasi del trattamento e può contribuire alla crescita del tuo studio.



Massimizza l'efficienza

- ✓ Sistema di identificazione con codice colore per una facile selezione dell'attacco.
- ✓ Marcatura orizzontale e verticale per un facile posizionamento dell'attacco sul dente.
- ✓ Gli attacchi sono confezionati con gli sportellini già aperti, eliminando la fase di apertura, necessaria prima dell'inserimento dell'arco.
- ✓ Esclusiva area di concentrazione dello stress per una sicura procedura di debonding.



Affidabilità delle prestazioni

- ✓ Meccanismo dello sportellino progettato per resistere alle aperture e chiusure indesiderate.
- ✓ Progettato in modo da produrre un "clic" udibile quando lo sportellino viene aperto o chiuso.
- ✓ Gli sportellini resistono a più del doppio dei cicli di apertura e chiusura di un tipico trattamento.



Sistema di attacchi self-ligating
3M™ Clarity™ Ultra



Correttori di Classe II
3M™ Forsus™



Tubi buccali 3M™ Victory
Series™ Superior Fit




Un unico sistema per una maggiore efficienza dello studio.

Basati sulla scienza 3M™, gli attacchi autoleganti Clarity™ Ultra e gli altri prodotti 3M™ - incluso l'adesivo predosato APC™ Flash-Free, i correttori di Classe II 3M™ Forsus™ e il sistema MBT™ - sono progettati per lavorare insieme in modo efficiente e per fornire i risultati desiderati dagli ortodontisti e dai loro pazienti.

**Una combinazione
perfetta per un'estetica
eccezionale.**

Insieme con gli attacchi Clarity™ Ultra, gli archi ortodontici estetici sono un complemento perfetto per aiutare i pazienti a sorridere con sicurezza durante il trattamento.

Attacchi self-ligating 3M™ Clarity™ Ultra

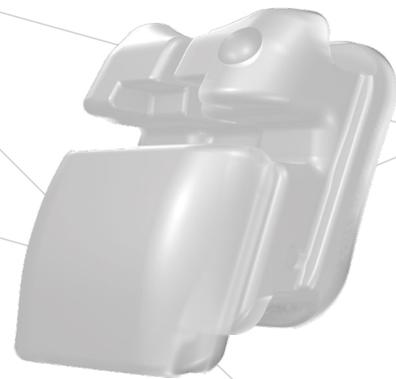

Sistema 3M™ MBT™

Superiore			In/Out		Codice - slot .022 in.	
Dente	Torque	Angolazione	in.	mm	Sin	Dx
Centrale	+17°	4°	0.026	0.66	003-301	003-302
Laterale	+10°	8°	0.035	0.89	003-303	003-304
Canino c/g	0°	8°	0.021	0.53	003-307	003-308
Premolare c/g	-7°	0°	0.029	0.74	003-310	003-311

Inferiore			In/Out		Codice - slot .022 in.	
Dente	Torque	Angolazione	in.	mm	Sin	Dx
Anteriore	-6°	0°	0.045	1.14	003-350	
Canino c/g	0°	3°	0.020	0.51	003-353	003-354
1° Premolare c/g	-12°	2°	0.030	0.76	003-357	003-358
2° Premolare c/g	-17°	2°	0.034	0.86	003-361	003-362

Aggiungere il prefisso "4" per il sistema di adesivo 3M™ APC™ Flash-Free.
Esempio: 4003-301

Kit paziente

	Codice - slot .022 in.
Sup/Inf 5×5 c/g	003-111
Sup 5×5 c/g	003-116

Aggiungere il prefisso "4" per il sistema di adesivo 3M™ APC™ Flash-Free.



804-155

Strumenti per il sistema self-ligating Ultra

	Codice
Strumento di debonding 3M™ Unitek™	804-175
Strumento di apertura-chiusura 3M™ Unitek™	804-155



804-175



3M Italia srl
Via N. Bobbio, 21
20096 Pioltello (MI)
Tel. 800-825001
www.3mitalia.it

I prodotti della linea 3M™ Clarity™ Ultra sono Dispositivi Medici Marcati CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso. Materiale tecnico-scientifico riservato al personale sanitario.

3M, APC, Clarity, Forsus, MBT, Victory Series e Unitek sono marchi commerciali di 3M. Utilizzati sotto licenza in Canada.
© 3M 2018. Tutti i diritti riservati.
70-2013-0965-8 1809