



Clarity™

Soluciones estéticas para ortodoncia

3M™ Clarity™ Ultra *Brackets* Autoligantes

**Práctica confiable.  
Sonrisas hermosas.**



# Éxito para sus pacientes y su práctica.

Como usted sabe, el negocio y los modelos de tratamiento de ortodoncia están cambiando. Los pacientes tienen más opciones que nunca, y están jugando un papel activo en la toma de decisiones cuando se trata de los productos que compran. Al mismo tiempo, la tecnología emergente está impulsando la innovación y las nuevas eficiencias en la práctica de la ortodoncia.

En medio de este cambio, su objetivo sigue siendo el mismo: crear sonrisas hermosas y seguras que durarán toda la vida de sus pacientes.

# Muestre su experiencia. Logre resultados precisos.

3M™ Clarity™ Ultra *Brackets* Autoligantes ofrecen control rotacional, versatilidad mejorada y el concentrador de estrés exclusivo de 3M, diseñado para una remoción predecible y consistente.

El *bracket* autoligante pasivo se activa bajo demanda con adición de ligaduras de metal o elastoméricas.

El espacio patentado de 3M bajo el área de las aletas permite la doble ligadura para la versatilidad del tratamiento.

Amplia puerta de cerámica que ayuda al control de rotación con una dimensión mesial-distal considerable.

Cerámica translúcida, resistente a las manchas para lograr una estética brillante. No se ven partes de metal.

La cerámica moldeada por inyección proporciona superficies lisas y esquinas redondeadas, diseñadas para la comodidad del paciente.

Hecho de un grano fino de sílice microcristalino patentado.

Las puertas soportan más que el uso típico del tratamiento\* **2x**

Puertas autoligantes confiables que soportan más de dos veces los ciclos de apertura y cierre de un tratamiento típico.

Tratamiento típico de 2 años

**2x**

Brackets 3M™ Clarity™ Ultra puerta confiable

\*En pruebas de laboratorio, las puertas de 3M™ Clarity™ Ultra *Brackets* autoligantes resistieron un mínimo de dos veces los ciclos de apertura y cierre típicos de un tratamiento, lo que las hace confiables.

# Empoderamos su eficiencia y resultados.

Usted y sus pacientes quieren lo mismo: opciones de tratamiento efectivos con resultados positivos. Para lograr esto, usted necesita control y previsibilidad de principio a fin. Los *Brackets 3M™ Clarity™ Ultra* le dan ese poder que le permite planear tratamientos exitosos para resultados precisos.



Cambios de arcos más fáciles y sin ligaduras.




Amplia puerta de cerámica que ayuda a controlar la rotación.



Pasivo o activo bajo demanda.



Control de rotación sin accesorios adicionales.

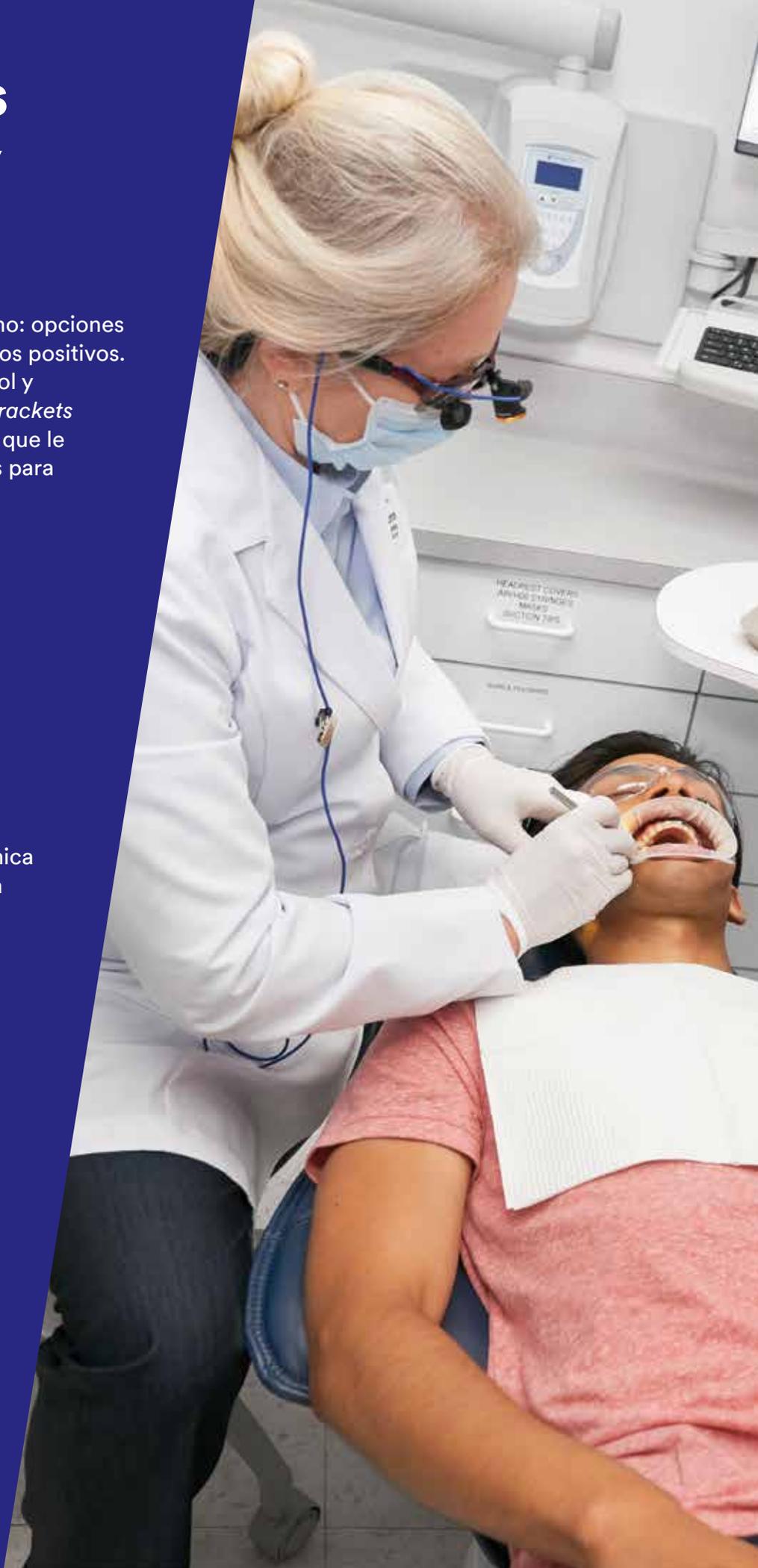

# Proceso de adhesión simple y eficiente.

Potenciado por la tecnología, el Sistema de Aparatología Revestida con Adhesivos 3M™ APC™ Flash-Free es el sistema de unión más eficiente en ortodoncia. Nuestro diseño innovador crea un sustrato de adhesivo único en la base del *bracket* que le ahorra tiempo e impacta positivamente en la satisfacción del paciente.




Disponibles en prerrevestimiento adhesivo con 3M™ APC™ Flash-Free, para una mayor confianza en la adhesión.



## Ahorra tiempo y costos

- ✓ Adhesión más rápida y eficiente que los *brackets* no prerrevestidos.
- ✓ Elimina el paso de remoción de excesos del adhesivo.
- ✓ Limpieza simple y fácil al remover.

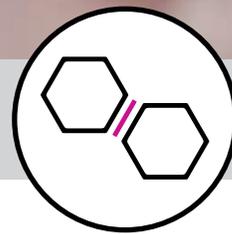

## Eficacia superior de adhesión

- ✓ El tiempo de adhesión se reduce hasta un 40 % por *bracket*.
- ✓ Dado que no se eliminan los excesos, se reduce el movimiento accidental del *bracket* después del posicionamiento, lo que disminuye la posibilidad de reposicionamiento.
- ✓ Protege el esmalte de los dientes debajo del adhesivo.

# Impulsados por innovación en la que puede confiar.

Al elegir 3M™ Clarity™ Ultra *Brackets* Autoligables, usted elige la tecnología de vanguardia, la previsibilidad y el servicio al cliente de 3M en los que usted confía. Aun más importante, usted tiene el control de una solución estéticamente agradable que funciona durante todo el proceso de tratamiento y ayuda a promover el crecimiento de su práctica profesional.



## Maximizamos la eficiencia

- ✓ Puntos de identificación codificados por colores para simplificar la selección del *bracket*.
- ✓ Marcas de referencia verticales y horizontales, para una colocación fácil del *bracket* en el diente.
- ✓ Los *brackets* se entregan con las puertas abiertas, lo que elimina este paso antes de la colocación del arco.
- ✓ Concentrador de estrés único, diseñado para una remoción predecible.



## Fiabilidad de rendimiento

- ✓ El mecanismo de las puertas está diseñado para resistir aperturas y cierres no planificados.
- ✓ El mecanismo emite un clic al abrir o cerrar las puertas.
- ✓ Las puertas duran dos veces más que los ciclos de apertura y cierre típicos de un tratamiento.\*

\*En pruebas de laboratorio, las puertas de 3M™ Clarity™ Ultra *Brackets* autoligantes resistieron un mínimo de dos veces los ciclos de apertura y cierre típicos de un tratamiento, lo que las hace confiables.



3M™ Clarity™ Ultra  
Brackets Autoligantes



3M™ Victory Series™  
Tubos Bucales de Ajuste  
Superior



3M™ Forsus™  
Correctores de Clase II

## Una metodología. Eficiencia de práctica optimizada.

Desarrollados por la ciencia de 3M, los *brackets* Autoligantes Clarity Ultra y otros productos de 3M, incluido el Adhesivo 3M™ APC™ Flash-Free, los correctores 3M Forsus de Clase II y el Sistema de Aparatología Versátil 3M™ MBT™, están diseñados para trabajar juntos, con el fin de brindar a los ortodoncistas un control eficiente y personalizado que permite lograr resultados con una sola metodología de tratamiento.



# Una clara solución para inspirar sonrisas.

Diseñados para integrarse con el color natural del diente, los *Brackets* Autoligantes 3M™ Clarity™ Ultra, brindan una solución completamente estética. Translúcido y resistente a las manchas, el *bracket* no tiene partes metálicas visibles, por lo que ofrece una apariencia atractiva.

La ausencia de ligaduras elastoméricas que se pudieran manchar durante el tratamiento también mejora el atractivo estético. Igualmente, las superficies y bordes lisos, cerámicos y redondeados, están diseñados para brindar una comodidad durante el tratamiento que usted y sus pacientes apreciarán.



# 3M™ Clarity™ Ultra Brackets Autoligantes



## Prescripción 3M™ MBT™ Sistema de Aparatos

Maxilar			Adentro / Fuera		Número de pieza: – .022 in	
Diente	Torsión	Angulación	in	mm	Izq.	Der.
Central	+17°	4°	0.026	0.66	003-301	003-302
Lateral	+10°	8°	0.035	0.89	003-303	003-304
Canino con gancho	0°	8°	0.021	0.53	003-307	003-308
Premolar con gancho	-7°	0°	0.029	0.74	003-310	003-311

Mandibular			Adentro / Fuera		Número de pieza: – .022 in	
Diente	Torsión	Angulación	in	mm	Izq.	Der.
Anterior	-6°	0°	0.045	1.14	003-350	
Canino con gancho	0°	3°	0.020	0.51	003-353	003-354
Primer premolar con gancho	-12°	2°	0.030	0.76	003-357	003-358
Segundo premolar con gancho	-17°	2°	0.034	0.86	003-361	003-362

Agregue el Prefijo "4" para el Sistema adhesivo Flash-Free 3M™ APC™. Ejemplo: 4003-301

## Kits de pacientes

	Número de pieza: – .022 in.
Gancho Sup./Inf. Der./Izq. 5×5	003-111
Gancho Sup. Der./Izq. 5×5	003-116

Agregue el Prefijo "4" para el Sistema Adhesivo Flash-Free 3M™ APC™.

## Instrumentos para el Sistema Ultra SL

	Numero de pieza
3M™ Unitek™ Instrumento de Remoción	804-175
3M™ Unitek™ Instrumento de Apertura y Cierre	804-155

## Para más información...

Visite [3M.com/ClarityUltra](http://3M.com/ClarityUltra) o contacte a su representante de 3M Cuidado Oral.



REF 804-175



REF 804-155



Clarity™

Soluciones estéticas para ortodoncia

## Ejerza con claridad.

Nuestro portafolio completo de opciones estéticas está basado en la ciencia de 3M e impulsado por la creatividad. La innovación dirige nuestra tecnología de punta y ofrece la elección y el control que usted busca.

Nuestro compromiso es colaborar con los ortodoncistas para proporcionar soluciones de tratamiento estético flexibles y personalizadas que muestren su experiencia y garanticen resultados precisos. Juntos, podemos cambiar vidas creando sonrisas sanas y hermosas.



**Visite [3M.com/ClarityUltra](http://3M.com/ClarityUltra) o solicite más información a su representante de 3M Cuidado Oral.**



3M Cuidado Oral  
2510 Conway Avenue  
St. Paul, MN  
55144-1000 EUA

Por favor recicle.

3M, APC, Clarity, Forsus, MBT, Victory Series y Unitek son marcas registradas de 3M.  
© 3M 2018. Todos los derechos reservados.  
70-2013-0965-8 1809