



**Une solution efficace pour vos procédures
de restauration postérieure.
Restaurer & protéger.**



**Vous n'aimez pas être en retard.
Eux non plus !**

Menu >

Votre temps est aussi précieux que le leur.

Lorsque votre planning dérape, vos patients ne cachent pas leur mécontentement et votre journée paraît interminable. Aussi, pour vous aider à rester à l'heure, nous avons simplifié la procédure que vous réalisez le plus souvent : la restauration postérieure.

3M™ Filtek™ One est le matériau-clé de cette procédure : simple et rapide à mettre en œuvre en un seul incrément allant jusqu'à 5 mm, il améliore l'esthétique de vos restaurations grâce à son opacité optimisée.

Utilisé avec les autres matériaux 3M, il vous permettra de réaliser vos restaurations postérieures en un tour de main.

Vos patients seront satisfaits et pour vous, finies les longues journées.



Précédent



Retour au menu



Suivant



Menu

Introduction	3
Adhésif	4
Composite	8
Photopolymérisation	16
Finition et polissage	19
Ressources	21
Références catalogue	22

Introduction

Procédure de restauration postérieure

Simple et rapide du début à la fin.

En associant ces technologies innovantes, vous réaliserez vos restaurations postérieures rapidement.



Adhésif 3M™ Scotchbond™ Universal

Polyvalent. Haute adhésion. Une seule technique simple, une application rapide en 35 secondes. Peu de sensibilités postopératoires.



3



3M™ Filtek™ One

Simplicité de la mise en masse jusqu'à 5 mm. Excellente résistance à l'usure et au stress de polymérisation pour une restauration pérenne. Opacité optimisée pour un résultat plus esthétique.



Lampe à photopolymériser LED 3M™ Elipar™ DeepCure-S

Photopolymérisation fiable. Guide-faisceau optimisé plus confortable pour le patient et facilitant l'accès aux dents postérieures.



Système de polissage diamant 3M™ Sof-Lex™

S'adapte aisément aux surfaces dentaires irrégulières, convexes ou concaves. Un brillant comparable aux systèmes avec pâte à polir, avec la facilité et la rapidité des disques en élastomère.



Adhésif 3M™ Scotchbond™ Universal

Adhésif 3M™ Scotchbond™ Universal

Une application rapide en 1 seule étape et 1 seule couche

Faites le bon choix. Pour votre adhésif, faites le choix de la confiance.

L'étape de collage est difficile à simplifier. C'est pourquoi 3M a mis au point un adhésif auquel vous pouvez faire confiance, qui peut être appliqué sur toutes les surfaces dentaires, avec toutes les techniques de mordançage, pour les restaurations directes et indirectes.

Vous serez convaincus par son extrême polyvalence.


Temps d'application rapide : 35 secondes



Appliquer l'adhésif sur toute la surface dentaire à l'aide de la microbrosse jetable. Masser pendant 20 secondes.



Sécher délicatement à l'air pendant 5 secondes, jusqu'à ce que le solvant s'évapore complètement et que l'adhésif se fige.

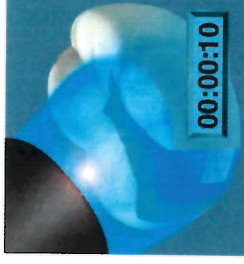

Photopolymériser pendant 10 secondes. Appliquer le matériau de restauration photopolymérisable.



Pratiquement aucune sensibilité postopératoire en technique total-etch ou automordançant

Pourcentage de restaurations en technique total-etch collées avec l'adhésif 3M™ Scotchbond™ Universal présentant une sensibilité postopératoire.




Source : données internes 3M

Avant l'application de l'adhésif, la dentine et/ou l'émail peuvent être mordancés à l'acide phosphorique, selon les préférences du chirurgien-dentiste.


Adhésif 3M™ Scotchbond™ Universal

Utilisez votre technique préférée sans compromettre l'adhésion, la fiabilité et la pérennité de vos collages.

- Grande adhésion en cisaillement sur la dentine et l'émail préparés, aussi bien en technique de total-etch qu'en automordançant.
- Adhésion similaire sur la dentine mordancée humide ou sèche.
- Excellente intégrité marginale, pour des restaurations à l'esthétique parfaite.

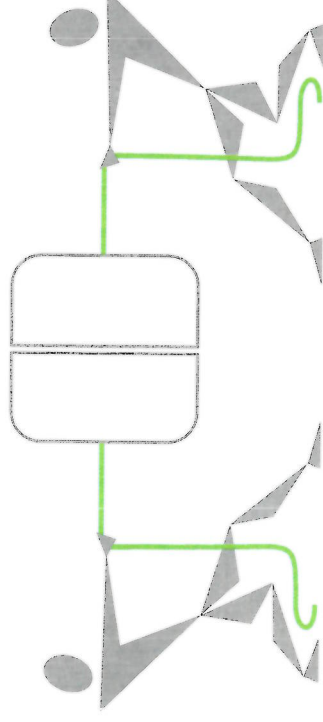


Adhésion en automordançant Adhésif 3M™ Scotchbond™ Universal vs. autres systèmes adhésifs

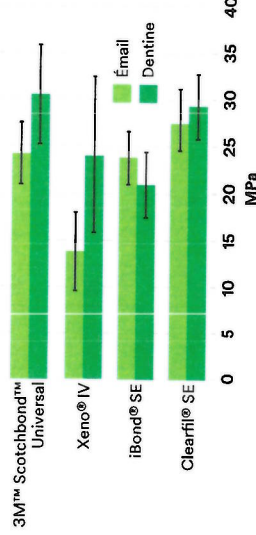

Source : données internes 3M

Adhésion après mordantage total (amélobentinaire)


Adhésif 3M™ Scotchbond™ Universal vs. autres systèmes adhésifs

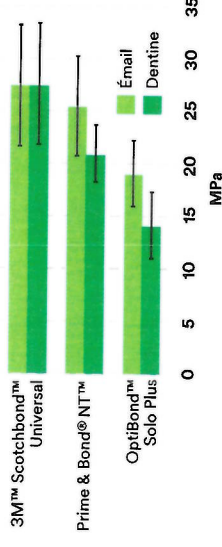


Source : données internes 3M

Adhère à toutes les surfaces.

L'adhésif 3M™ Scotchbond™ Universal adhère à toutes les surfaces, notamment l'émail, la dentine, la vitrocéramique, la zircone, les alliages de métaux nobles et non précieux, ainsi que les composites, sans primer supplémentaire. Associé à l'activateur de polymérisation 3M™ Scotchbond™ Universal DCA, l'adhésif 3M™ Scotchbond™ Universal est compatible avec tous les ciments résine, les matériaux pour la reconstitution du moignon et même les composites duals ou chémapolymérisables.

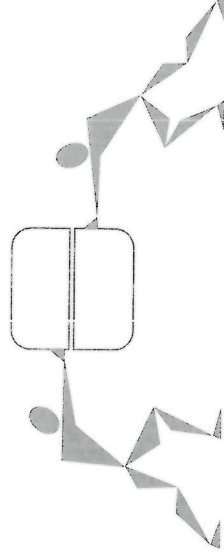

Vidéos

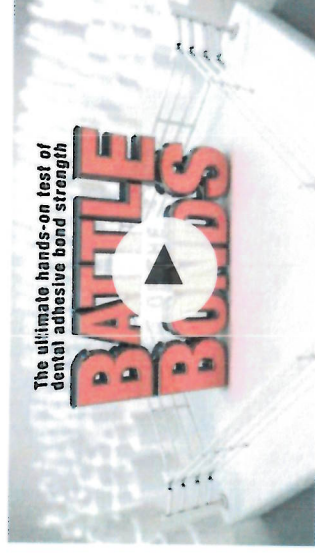

Bataille de l'adhésion

Les statistiques relatives à l'adhésif 3M™ Scotchbond™ Universal sont éloquentes, encore plus en les comparant à d'autres systèmes adhésifs.



Pourquoi un seul adhésif ?

Vous voulez vous faciliter la vie au quotidien et optimiser votre cabinet ? Cette vidéo vous donne la solution.



Changez d'adhésif en toute confiance

Vous envisagez de passer à l'adhésif universel, mais avez besoin d'informations complémentaires pour valider votre décision ? Cette vidéo balayera vos derniers doutes.



Précédent



Retour au menu



Suivant