

3M™ 導電接着性対極板

3M™ Electrosurgical Patient Plates

多様な術式に適応する導電接着性対極板

3M™ 導電接着性対極板は、さまざまな電気メス（電気手術器※¹）の機能に適合し、多様な術式に適応するように設計されています。

ポリエチレンフォームと粘着剤により、外部からの薬液等の浸入を防ぎます。

柔らかい粘着剤を採用した対極板

肌にピッタリと密着します。

皮膚にやさしく、手術中も剥がれにくく安心です。



剥がれを最小限に抑える ストレスフラップ

コードを接続するタブの両側の“耳”ストレスフラップは、対極板が皮膚から剥がれようとする力を分散します。手術中に不用意にケーブルやコードを引っ張った場合でも、対極板の剥がれを最小限に抑えます。

製品概要

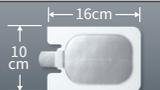
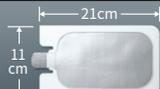
- 導電面積は65cm²のスマールタイプと129cm²の一般用タイプがあります。
- コード付とコードレスの2種類があります。コード付は使い捨てコードが取り付けられており、取り扱いがとても簡単です。コードレスは、再使用できるクランプコードと接続して使用できるので経済的です。
- スタンダードタイプとCQMS※² 適合のスプリットタイプがあります。

※¹ 処置用電気手術器に限る

※² CQMSとは、Contact Quality Monitoring System の略で、対極板接触状態監視システムを意味します。

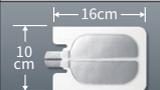
3M™ 導電接着性対極板は、さまざまな電気メスに対応しています。

3M™ 導電接着性対極板 (スタンダード)

スタンダードタイプ				
製品番号	摘要	導電面積	入れ目	
			枚/箱	箱/ケース
 1146	スモール (小児用) コードレス 対極板サイズ: 10cm×16cm	65cm ²	25	4
 1149	一般用 コードレス 対極板サイズ: 11cm×21cm	129cm ²	25	4
 1149C-LP	一般用 コード付き (約3m) 対極板サイズ: 11cm×21cm		10	4

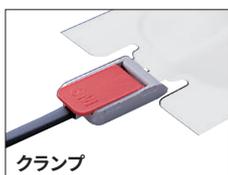
管理医療機器 認証番号: 20500BZY00395000 販売名: 3M 導電接着性対極板

3M™ 導電接着性対極板 (スプリット)

スプリットタイプ (CQMS適合)				
製品番号	摘要	導電面積	入れ目	
			枚/箱	箱/ケース
 1182	スモール (小児用) コードレス 対極板サイズ: 10cm×16cm	65cm ²	25	4
 1181	スモール (小児用) コード付き (約3m) 対極板サイズ: 10cm×16cm		10	4
 1180	一般用 コードレス 対極板サイズ: 11cm×21cm	129cm ²	25	4
 1179	一般用 コード付き (約3m) 対極板サイズ: 11cm×21cm		10	4

管理医療機器 認証番号: 20500BZY00395000 販売名: 3M 導電接着性対極板

クランプおよびアダプタ



各病院でお持ちの電気メスに対応できるように、安心してお使いいただける経済的なクランプとアダプタをご用意しています。

3M™ エレクトロサージカル クランプ

製品番号	対応する電気メス機種 (代表例)	入れ目
		本/袋
21158J	パーチャー、アスペン、コンメド® 製品、ネオメッド	1
21172J	バリーラプ™ 製品 (スタンダードタイプ)	
21174J	バリーラプ™ 製品、エルベ、アスペン、コンメド® 製品 (CQMS 適合)	

管理医療機器 認証番号: 221AKBZX00008000 販売名: 対極板アダプタ

3M™ エレクトロサージカル アダプタ

製品番号	対応する電気メス機種 (代表例)	入れ目
		本/袋
1178CJ	一部のエルベ製品	1
3181DJ	パーチャー、アスペン、コンメド® 製品、ネオメッド	
3192LJ	オリンパス製品 (PSD20、UES20)	

管理医療機器 認証番号: 221AKBZX00008000 販売名: 対極板アダプタ

安全にご使用いただくために、当社は皆様をサポートいたします。

PAES※3 インサーブプログラム (院内勉強会・説明会) 電気メス手術における安全

補償書による安全と安心の保証

電気メスを安全にお使いいただくために、高周波電流の安全な使い方および貼付部位の選択についてのセミナーを実施しております。患者さんとスタッフの皆様を医療事故(熱傷等)から守り、安全な医療の提供に、また、皆様の疑問、問題点の解決にお役立てください。詳しくは、当社販売員にお問い合わせください。

当社が販売している対極板全製品について補償書を用意しております。尚、ご使用前に契約の必要があります。詳しくは、補償書をよくご覧の上、当社販売員にお問い合わせください。



※3 Partnership for the Advancement of Electrosurgical Safety

3Mは、3M社の商標です。
コンメドは、コンメド社の登録商標です。バリーラプは、コヴィディエン社またはその関連会社の商標です。
オリンパスは、オリンパス株式会社の商標または登録商標です。



スリーエム ジャパン株式会社
ヘルスケアカンパニー

医療用製品事業部

<http://www.mmm.co.jp/hc/medical/>

Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2016. All Rights Reserved.
HPM-294-F(061610)

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

 0570-011-321

8:45~17:15 / 月~金 (土日祝年末年始は除く)
全国どこからでも市内料金でご利用いただけます

2016年6月発行