

3M Science.
Applied to Life.™

**Vos restaurations.
Votre composite.
Votre journée.**

**La simplicité
totale.**



**3M™ Filtek™
Universal Restorative**

Développé pour les passionnés qui relèvent les défis d'une pratique clinique quotidienne trépidante.



3M™ Filtek™ Universal Restorative – Principales propriétés

- **Choix de nuances simplifié**
Seules 8 teintes similaires à celles des dents couvrent la plupart des cas
- **Opacité universelle**
Pour une intégration optique naturelle
- **Extra White (XW)**
- **Pigments fluorescents**
Ils confèrent aux restaurations un rendu naturel
- **Pink Opaquer**
Pour couvrir simplement les zones sombres
- **Nanotechnologie 3M**
Permet un polissage facile et un éclat longue durée
- **Monomères brevetés**
Avec un stress de polymérisation réduit pour une résistance élevée à la fracture
- **Opacité supérieure aux rayons X**
Permettant une délimitation plus facile en cas de recall
- **Chauffage des capsules**
Les capsules du matériau de restauration universel Filtek se réchauffent en toute sécurité*

*Voir le mode d'emploi

Une teinte. Une opacité universelle. Difficile de faire plus simple.

Seulement huit teintes

La technologie 3M NaturalMatch vous assure de choisir, parmi seulement huit teintes, celle des dents de la plupart des patients, pour vous faire gagner du temps.

L'efficacité est essentielle pour respecter l'emploi du temps chargé du cabinet dentaire. C'est pourquoi les dentistes choisissent la technique en monotéinte* pour environ 80 % de leurs restaurations en composite. Pour leur faciliter encore le traitement d'obturation, nous avons développé le matériau de restauration universel 3M™ Filtek™.

Tout commence avec le choix simplifié des teintes

Seules huit teintes similaires à celles des dents et un Extra White (XW) supplémentaire couvrent les 19 nuances du teintier VITA classical A1-D4® y compris les teintes Bleach.* Elles disposent toutes d'une opacité universelle, qui convient parfaitement à la plupart des cas.

- **La technologie NaturalMatch**

(comprenant des nano-clusters, des pigments et des monomères brevetés, qui permettent une faible rétraction) garantit que les restaurations en monotéinte s'intègrent de façon plus naturelle dans la substance dentaire environnante (effet caméléon).


- **Les pigments fluorescents**

améliorent l'apparence naturelle.

- **La technologie des clusters 3M**

augmente l'opacité aux rayons X.

* Données internes 3M

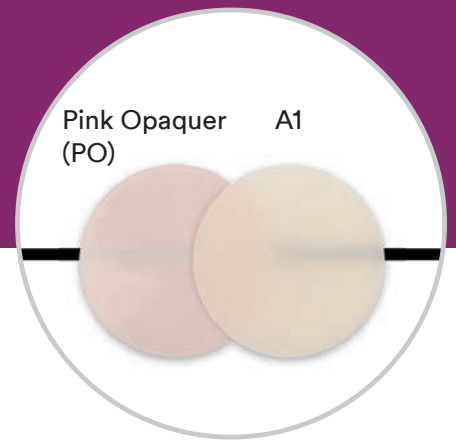

On peut désormais empêcher qu'un support sombre entraîne des limitations esthétiques : le premier Pink Opaquer 3M recouvre avec succès le métal et la substance dentaire décolorée.




A1

A2




A3

A3.5

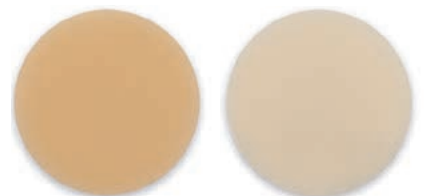

A4

B1

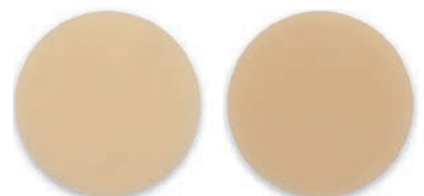

B2

D3

PLUS



XW
Extra White

PO
Pink Opaquer

Développé pour des patients fiers de leur superbe sourire ...



Pour des accents clairs


L'opacité aux rayons X joue un rôle important dans le cadre des examens de contrôle. Elle permet aux dentistes de distinguer clairement les restaurations présentes de la substance dentaire environnante en cas de recalls cliniques. Le matériau de restauration universel Filtek a été pourvu de clusters en ytterbium trifluoré (YbF₃) de 100 nm, qui confèrent à Filtek Universal une opacité aux rayons X accrue par rapport aux autres composites universels disponibles.



Avec l'aimable autorisation du Prof. Claus-Peter Ernst

Même les amis sont bluffés par cette ajustement de la teinte

Grâce à l'ajustement unique de la teinte permis par la technologie 3M NaturalMatch, même les amis les plus proches ont des difficultés à faire la différence entre une restauration des dents antérieures et les dents naturelles. **L'opacité universelle** du matériau soutient en outre une intégration discrète dans la substance dentaire environnante.

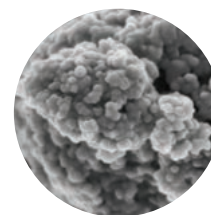

Grossissement 100.000 d'un nano-cluster. Photo au MEB avec l'aimable autorisation du Dr J. Perdigão, Université du Minnesota.


Un lustre pérenne

L'éclat initial d'un matériau de restauration peut être convaincant, mais s'atténuer au fil du temps. Grâce à l'authentique technologie brevetée des nano-clusters de 3M, les restaurations avec le matériau Filtek peuvent être polies rapidement pour obtenir une brillance élevée. L'excellente durabilité polissage est due à la rétention exceptionnelle de la brillance.

...et pour les téméraires qui disent « oui » à la vie.

Le duo endurance et résistance

Mâcher, brosser, broyer, grincer ... Les restaurations sont fortement sollicitées. En matière d'endurance, nous avons fixé la barre très haut, en associant deux technologies de pointe de 3M. Les monomères innovants AUDMA et AFM, déjà éprouvés dans nos composites Bulk-Fill, réduisent la rétraction et le stress de polymérisation. La vraie nanotechnologie de 3M assure une solidité élevée et une excellente résistance à l'usure.

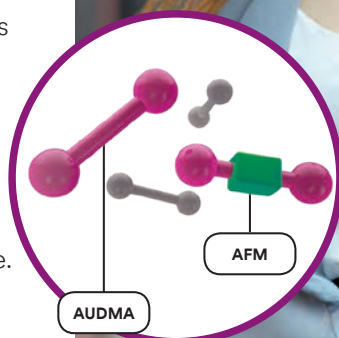

Idéal pour tous ceux qui veulent organiser plus facilement leurs restaurations, leur composite, leur journée.



Indications

- Restaurations antérieures et postérieures directes (y compris les surfaces occlusales)
- Reconstitutions de moignons
- Contention
- Restaurations antérieures et postérieures indirectes telles qu'inlays, onlays et facettes

Informations de commande


3M™ Filtek™ Universal Restorative

N° d'art.

Informations produit

6550CK	Kit d'introduction 3M™ Filtek™ Universal Restorative, capsules Le kit contient: 80 capsules de 0,2 g: respectivement 20 par teinte A1, A2, A3, A3.5; 10 capsules de PO de 0,2 g; guide technique.
6555SK	Kit d'introduction 3M™ Filtek™ Universal Restorative, seringues Le kit contient: 5 seringues de 4 g: respectivement 1 par teinte A1, A2, A3, A3.5 et PO; guide technique; mode d'emploi.

Réassort	N° d'art.	N° d'art.
TEINTES	SERINGUE	CAPSULE
A1	6555A1	6550A1
A2	6555A2	6550A2
A3	6555A3	6550A3
A3.5	6555A3.5	6550A3.5
A4	6555A4	6550A4
B1	6555B1	6550B1
B2	6555B2	6550B2
D3	6555D3	6550D3
XW – Extra White Bleach	6555XW	6550XW
PO – Pink Opaquer	6555PO	6550PO
RÉASSORT TEINTES	CAPSULES – contient 20 capsules de 0,2 g	SERINGUES – contient 1 seringue, 4 g
RÉASSORT PINK OPAQUER (PO)	CAPSULES – contient 10 capsules de 0,2 g	SERINGUES – contient 1 seringue, 4 g

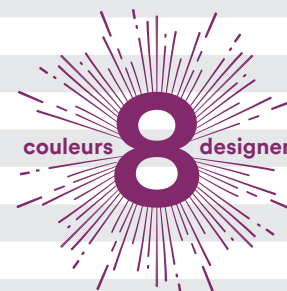

Toutes les boîtes de réassort contiennent un guide technique et un mode d'emploi.



3M (Suisse) S.à r.l.

Eggstr. 93

CH-8803 Rüschlikon

Téléphone : (044) 724 90 90

Téléfax : (044) 724 94 80

3mespech@mmm.com

3mschweiz.ch/oralcare

3M, 3M Science. Applied to Life. et Filtek sont des marques déposées de 3M Company. © 3M 2019. Tous droits réservés.