

Universalmente más simple.

3M™ Filtek™ Universal Restorative



8 tonos. 1 opacidad universal. No puede ser más sencillo.


La eficiencia es clave para cumplir un horario apretado. Este es uno de los motivos por los que los dentistas realizan restauraciones de un solo tono en aprox. el 80 % de los casos. * 3M™ Filtek™ Universal Restorative ha sido creado para lograr de forma sencilla restauraciones estéticas y de gran durabilidad.

El primer paso es simplificar la elección del color.

Solo 8 tonos más un extrablanco (XW) cubren los 19 tonos VITA classical y los de blanqueamiento.* Además, su opacidad universal satisface la mayoría de requisitos clínicos.

- **La tecnología NaturalMatch** (basada en nanorrellenos, exclusivos monómeros de bajo estrés y pigmentos) mejora la integración de la estética monocolor en el diente.
- **Los pigmentos fluorescentes** intensifican la apariencia natural.
- **La tecnología de relleno 3M** aumenta la radiopacidad.

Sus 8 tonos de diseño:

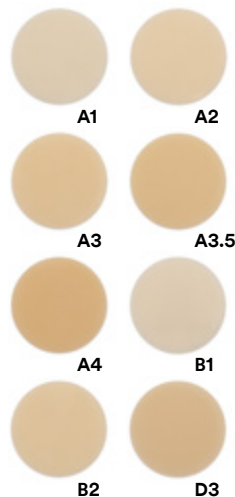

Los tonos especiales extrablanco (XW) y Pink Opaquer (Opaquer Rosa) le permiten lograr una estética excelente en situaciones especiales.

Cree restauraciones extrablancas para satisfacer las expectativas de pacientes con dientes blanqueados.



XW

Evite que las áreas oscuras menoscaben sus resultados estéticos. Un opáquer rosa enmascara eficazmente el metal y los dientes con tinciones.

Pink Opaquer (Opaquer Rosa)





Tono A1

Una nueva categoría de composite universal

Desde el momento de la polimerización, las restauraciones deben soportar la masticación, el cepillado y la trituración. Hemos elevado el listón de la durabilidad, combinando *por primera vez* dos acreditadas tecnologías dentales exclusivas en un composite universal.

Tecnología de monómeros de bajo estrés

Aplicadas de forma pionera en nuestros composites de obturación en bloque, ayudan a proteger las restauraciones contra los problemas causados por la contracción y el estrés de contracción.

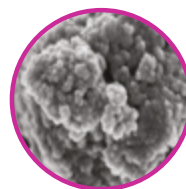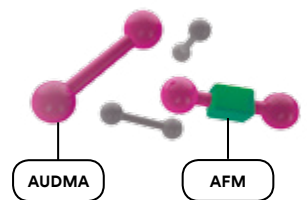

La tecnología de AUTÉNTICO nanorrelleno patentada de 3M

Confiere a las restauraciones un pulido excelente y duradero, así como una gran dureza y una extraordinaria resistencia al desgaste.

Nanoclúster a 100 000 aumentos. Foto MEB cortesía del Dr. J. Perdigão, Universidad de Minnesota.

* Datos internos de 3M

Características

- **Selección del color simplificada:** solo 8 tonos de diseño para cubrir la mayoría de casos.
- **Opacidad universal** para una integración más natural.
- **Extrablancos (XW)** para casos de pacientes con dientes blanqueados.
- **Pigmentos fluorescentes** que logran restauraciones con un aspecto natural.
- **Pink Opaquer (Rosa Opaco)** para enmascarar fácilmente áreas oscuras.
- **Nanotecnología de 3M** para un pulido fácil y duradero.
- **Exclusivos monómeros de bajo estrés** para una elevada resistencia a la fractura.
- **Mayor radiopacidad** para facilitar su identificación en el seguimiento.
- **Calentamiento de la cápsula:** las cápsulas de Filtek™ Universal Restorative se pueden calentar de forma segura.*

*Véanse las instrucciones de uso.

Indicaciones

- Restauraciones anteriores y posteriores directas (incluidas las superficies oclusales).
- Reconstrucción de muñones.
- Ferulizaciones.
- Restauraciones indirectas, incluidos inlays, onlays y carillas.




Información para pedidos

Composite 3M™ Filtek™ Universal Restorative

Ref.	Información de producto
6550CK	Essential Kit Filtek™ Universal restorative, cápsulas El kit incluye: 90 cápsulas de 0,2 g: 20 de cada de A1, A2, A3, A3.5; 10 cápsulas de 0,2 g de OP; Guía técnica; Instrucciones de uso.
6555SK	Essential Kit Filtek™ Universal restorative, jeringas El kit incluye: 5 jeringas de 4 g: 1 de cada de A1, A2, A3, A3.5 y OP; Guía técnica; Instrucciones de uso.

Reposición	Ref.	Ref.
COLORES	JERINGA	CÁPSULA
A1	6555A1	6550A1
A2	6555A2	6550A2
A3	6555A3	6550A3
A3.5	6555A3.5	6550A3.5
A4	6555A4	6550A4
B1	6555B1	6550B1
B2	6555B2	6550B2
D3	6555D3	6550D3
XW—Extrablancos	6555XW	6550XW
PO—Opaquer rosa	6555PO	6550PO

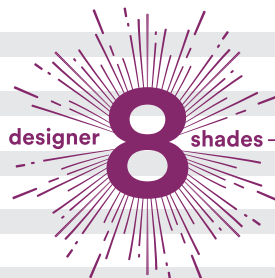

REPOSICIÓN DE COLOR	CÁPSULAS: contiene 20 cápsulas de 0,2 g	JERINGAS: contiene 1 jeringa de 4 g
REPOSICIÓN DE PINK OPAQUER (PO)	CÁPSULAS: contiene 10 cápsulas de 0,2 g	JERINGAS: contiene 1 jeringa de 4 g

Todas las reposiciones incluyen una guía técnica e instrucciones de uso.

www.3M.com/FiltekUniversal

3M

3M Oral Care
3M España, S.L.
Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25
28027 Madrid
www.3m.com.es/dental

www.3m.com.es/dental



3MESPEIberia @3MESPEIB 3MESPEDental

3M y Filtek son marcas registradas de 3M o 3M Deutschland GmbH. Utilizado bajo licencia en Canadá. Impreso en EE.UU. © 3M 2019. Reservados todos los derechos.