

3M Science.
Applied to Life.™



3M™ クリアティ™ ウルトラ
セルフ ライゲーティング ブラケット

3M™ Clarity™ Ultra Self-Ligating Brackets


**Practice confidently.
Smile beautifully.**

3Mの新コンセプト

“機能性”と“審美性”の融合。

効果的かつ効率的な治療を可能にする

新たなパッシブセルフライゲーティングブラケットです。

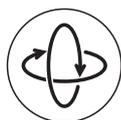

より良い歯牙のコントロール

必要時には、結紮をしてアクティブに

3M独自の深いTie ウィングにより、簡単に結紮をすることができます。



ローテーションコントロールが容易

近遠心の幅が広いドアにより、ローテーションコントロールが効きやすいデザインです。



ストレスなく適切なポジショニング

リファレンスマーカーによるアシスト

リファレンスマーカーが、ポジショニングのアシストをします。



APC™ Flash-Free テクノロジーを採用

APC™ Flash-Free テクノロジーにより、余剰接着材の除去が不要。簡単、正確なポジショニングにより、ストレスなく適切なブラケットボンディングが可能です。



- 接着材の塗布が不要
- 余剰接着材の除去も不要
- 硬化タイミングのコントロールが容易な光重合タイプ。
チェアタイムを減らし、作業効率のアップが期待できます。
- ブラケットポジショニング後の位置の微調整も可能。



3M独自のTieウイング

必要な時、簡便に結紮をすることができます。

粒子が細かいセラミック素材


半透明で汚れにくい素材です。審美的で、強度もあります。

幅広いセラミックドア

近遠心の幅が広いドアのため、歯牙のローテーションコントロールをサポート。クリック音が鳴るため、“ドアが閉じたこと”を確認しやすい設計です。

Injection Moldedで成型


丸みを帯びたスムーズな表面で、口腔内の違和感を軽減。

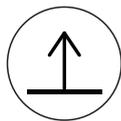

ディボンディングも簡便

専用のプライヤーを使用

専用のプライヤーで、簡単にディボンディング。
Clarity™ シリーズの特徴であるディボンディングの容易さも引き継いでいます。

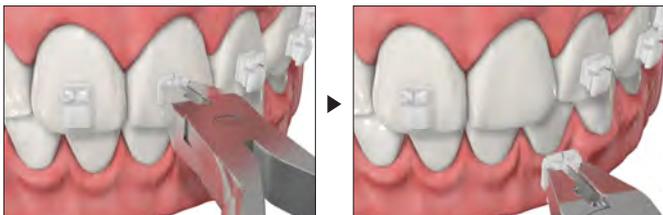



ホームページでは、ディボンディングのイメージを動画で分かりやすくご紹介しています。
<http://go.3M.com/ClarityUltra>



ディボンディングが簡便な理由

ストレス コンセントレーター

ブラケットの近遠心を専用のプライヤーで圧縮することでディボンディングを容易に行うことができます。

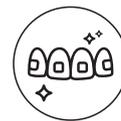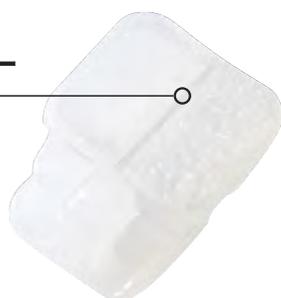

患者様も満足


審美性が高い

多結晶セラミックを使用。
メタル素材が透けないため、高い審美性を有します。



着色しにくい

細かい粒子のセラミックで製造されているため、着色しにくく、美しさが治療中も保たれます。

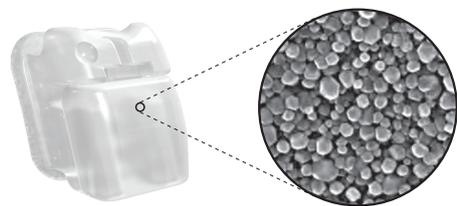

快適な装着感

ロープロファイルなブラケットデザインにより、装着時の不快感を軽減します。



3M™ クリアティ™ ウルトラ セルフ ライゲーティング ブラケット



3M™ MBT™ システム仕様

	部位	Torq.	Ang.	In/Out (mm)	Hook	接着材なし .022 in.		APC™ Flash-Free 接着材つき .022 in.	
						L	R	L	R
上顎	中切歯	+17°	4°	0.66		003-301	003-302	4003-301	4003-302
	側切歯	+10°	8°	0.89		003-303	003-304	4003-303	4003-304
	犬歯	0°	8°	0.53	D	003-307	003-308	4003-307	4003-308
	小白歯	-7°	0°	0.74	D	003-310	003-311	4003-310	4003-311
下顎	前歯	-6°	0°	1.14		003-350		4003-350	
	犬歯	0°	3°	0.51	D	003-353	003-354	4003-353	4003-354
	第1小白歯	-12°	2°	0.76	D	003-357	003-358	4003-357	4003-358
	第2小白歯	-17°	2°	0.86	D	003-361	003-362	4003-361	4003-362
包装単位						5個/パック		5個/パック	
希望医院価格 (消費税別)						16,000円/パック		16,900円/パック	

販売名: クリアティ セラミック ブラケット 認証番号: 219AKBZX00120000

専用プライヤー

	製品番号	包装単位	希望医院価格 (消費税別)
3M™ ユニテック™ ディボンディング用 インストゥルメント	804-175	1本	28,000円
3M™ ユニテック™ 開閉用インストゥルメント	804-155	1本	25,000円

販売名: 3M ユニテック ディボンディング用 インストゥルメント 届出番号: 13B1X10109000269
販売名: 3M ユニテック 開閉用 インストゥルメント 届出番号: 13B1X10109000270



REF 804-175



REF 804-155

※本カタログは2019年4月現在の製品、認証番号、届出番号、希望医院価格を掲載しております(価格に消費税は含まれていません)。

※製品内容、価格等は、予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

- 商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「添付文書」をお読みください。
- 本カタログの3M、Clarity、APC、MBT、ユニテック、クリアティは、3M社または、その関連会社の商標です。

スリーエム ジャパン株式会社
ヘルスケアカンパニー

ユニテック製品部

<http://go.3M.com/orthodontics>

Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2019. All Rights Reserved.
UTK-249-A (041901) e.

当製品部取扱製品のお問い合わせは
製品のお問い合わせはナビダイヤルで

0120-296-303

※受付時間 / 9:00~17:30 月~金 (土日祝を除く)