

# Universalmente más simple.

**3M™ Filtek™**  
Universal Restaurador



## 8 tonos. 1 opacidad universal. No puede ser más sencillo.

La eficiencia es clave para cumplir un horario apretado. Este es uno de los motivos por los que los dentistas realizan restauraciones de un solo tono en aproximadamente el 80 % de los casos. 3M™ Filtek™ Universal Restaurador ha sido creado para lograr de forma sencilla restauraciones estéticas y de gran durabilidad.\*

### El primer paso es simplificar la elección del tono

Solo 8 tonos más un extrablancos (XW) cubren los 19 tonos VITA® classical y los de aclaramiento dental.\* Además, su opacidad universal satisface la mayoría de requisitos clínicos.

- **La tecnología NaturalMatch** (basada en nanorrellenos, exclusivos monómeros de bajo estrés y pigmentos) mejora la integración de la estética monocolor en el diente.
- **Los pigmentos fluorescentes** intensifican la apariencia natural.
- **La tecnología de relleno 3M** aumenta la radiopacidad.

Los tonos especiales extrablancos (XW) y Pink Opaquer (opacador rosa) le permiten lograr una estética excelente en situaciones especiales.

Cree restauraciones extrablancas para satisfacer las expectativas de pacientes con aclaramiento dental.



XW


Evite que las áreas oscuras disminuyan la posibilidad de un resultado estético. Un opacador rosa enmascara eficazmente el metal y los dientes con manchas.

Pink Opaquer



Tono A1

Sus 8 tonos de diseño:

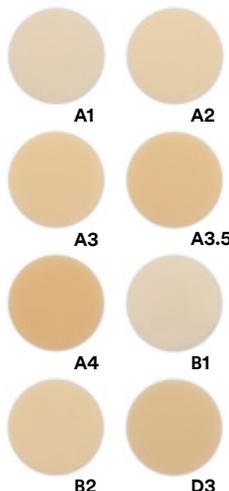


### Una nueva categoría de resina universal

Desde el momento de la polimerización, las restauraciones deben soportar la masticación, el cepillado y la trituration. Hemos elevado el estándar de la durabilidad, combinando por primera vez dos acreditadas tecnologías dentales exclusivas en una resina universal.


#### Tecnología de monómeros de bajo estrés

Aplicadas de forma pionera en nuestras resinas de relleno en bloque, ayudan a proteger las restauraciones contra los problemas causados por la contracción y el estrés de contracción.

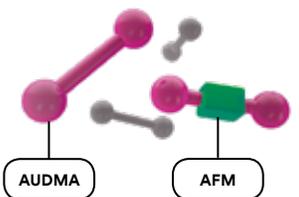

#### La AUTÉNTICA tecnología de nanorrelleno de 3M

Confiere a las restauraciones un pulido excelente y duradero, así como una gran dureza y una extraordinaria resistencia al desgaste.

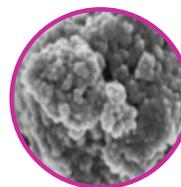

Nanoclúster a 100,000 aumentos. Foto MEB cortesía del Dr. J. Perdigão, Universidad de Minnesota.

\*Datos internos de 3M

## Características

- **Selección del color simplificada:** sólo 8 tonos de diseño para cubrir la mayoría de casos.
- **Opacidad universal** para una apariencia más natural.
- **Extrablancos (XW)** para casos de pacientes con aclaramiento dental.
- **Pigmentos fluorescentes** que logran restauraciones con un aspecto natural.
- **Pink Opaquer (opacador rosa)** para enmascarar fácilmente áreas oscuras.
- **Nanotecnología de 3M** para una elevada resistencia a la fractura.
- **Exclusivos monómeros de bajo estrés** para resistencia a la fractura
- **Mayor radiopacidad** para facilitar su identificación en el seguimiento.

## Indicaciones

- Restauraciones anteriores y posteriores directas (incluidas las superficies oclusales)
- Reconstrucción de muñones
- Ferulizaciones
- Restauraciones indirectas, incluidos inlays, onlays y carillas



## Información de pedidos

### 3M™ Filtek™ Universal Restaurador

Repuesto	Número
<b>TONOS</b>	<b>JERINGA</b>
A1	6555A1
A2	6555A2
A3	6555A3
A3.5	6555A3.5
A4	6555A4
B1	6555B1
B2	6555B2
D3	6555D3
XW—Extrablancos	6555XW
PO—Opacador rosa	6555PO

tonos de 8 diseño

REPUESTOS DE TONOS JERINGAS: contiene 1 jeringa de 4 g

PINK OPAQUER (PO) JERINGAS: contiene 1 jeringa de 4 g

Todos los repuestos incluyen una guía técnica e instrucciones de uso.



3M Cuidado Oral  
2510 Conway Avenue  
St. Paul, MN 55144-1000 USA

Teléfono 1-800-634-2249  
Web 3M.com/dental

[www.3M.com/FiltekUniversal](http://www.3M.com/FiltekUniversal)

3M y Filtek son marcas registradas de 3M o 3M Deutschland GmbH. Vita es una marca registrada de Vita Zahnfabrik.  
© 3M 2019. Todos los derechos reservados.