

3M**Filtek^{MR}**

Restauradores Odontológicos

Suas restaurações.
Sua resina composta.
Seu dia.

Universalmente mais simples.

3M^{MR} Filtek^{MR}
Universal Restorative



8 cores. 1 opacidade universal. Não tem como ser mais simples!

Eficiência é o segredo para manter a agenda no horário. Este é um dos motivos pelos quais a maioria dos dentistas utiliza uma única opacidade em quase 80% dos casos clínicos*. Simplificar o procedimento restaurador foi o objetivo do desenvolvimento da 3M^{MR} Filtek^{MR} Universal Restorative.

Tudo começa com a simplificação da seleção de cor.

Apenas 8 cores mais a Extra White (XW) correspondem às 19 cores da escala VITA*. Além disso, as cores têm uma opacidade universal, que atende à necessidade da maioria dos casos clínicos.

- **Tecnologia NaturalMatch** mimetiza a restauração com o substrato dental remanescente.
- **Pigmentos fluorescentes** melhoram o aspecto natural da restauração.
- **Nanotecnologia:** 100% de nanopartículas de até 100 nm, para a elevada resistência ao desgaste e excelente manuseio.

As cores Extra White (XW) e Pink Opaquer (PO) possibilitam excelentes resultados estéticos em situações desafiadoras.

Utilize a Extra White (XW) para casos desafiadores em dentes clareados.



XW

Utilize a Pink Opaquer (PO) para mascarar substratos escurecidos, melhorando o resultado estético.


Pink Opaquer (PO)



Cor A1

*Dados internos 3M

8 cores


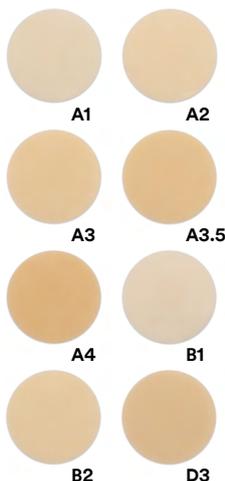


Uma nova classe de resina universal.

Logo após a polimerização, as restaurações são submetidas aos desafios da mastigação, escovação e trituração. A Filtek^{MR} Universal combina as tecnologias de exclusivos monômeros de baixa tensão de contração de polimerização (stress) com nanopartículas para obter elevadas propriedades mecânicas e físicas numa resina composta universal.

Tecnologia para alívio de tensões.

Pioneiros na Filtek^{MR} Bulk Fill, esses monômeros atuam no alívio de tensões de contração de polimerização (stress).

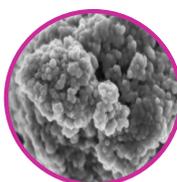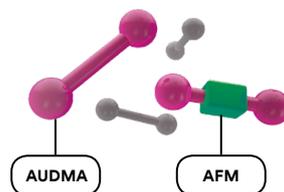

Patenteada Nanotecnologia 3M.

Permite a obtenção de polimento e brilho de forma rápida e fácil, além de contribuir para a elevada resistência ao desgaste e excelente manuseio.

100 x de aumento de um nanoaglomerado. MEV gentilmente cedida pelo Dr. J. Perdigão, Universidade de Minnesota.

Características

- **Seleção de cores simplificada** – apenas 8 cores para a maioria dos casos clínicos.
- **Opacidade universal** para mimetização com naturalidade da restauração.
- **Extra White (XW)** para dentes clareados.
- **Pigmentos fluorescentes** para melhorar o aspecto natural da restauração.
- **Pink Opaquer** para mascarar substratos escurecidos.
- **Nanotecnologia 3M:** Polimento obtido de forma rápida e fácil.
- **Exclusivos monômeros AFM e AUDMA,** para alívio de tensões, sem comprometer a resistência mecânica.
- **Radiopacidade.**
- **Aquecimento da cápsula** – Filtek^{MR} Universal na apresentação em cápsula pode ser aquecida com segurança*.

*Observe as Instruções de Uso.

Indicações


- Restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores (incluindo superfícies oclusais).
- Confecção de núcleos de preenchimento.
- Esplintagem.
- Restaurações indiretas, incluindo *inlays, onlays* e facetas.



Informação de Compra

3M^{MR} Filtek^{MR} Universal Restorative

Reposição	Item #	Item #	Apresentação Comercial	
CORES	SERINGA	CÁPSULA	SERINGA	CÁPSULA
A1	6585A1	6550A1	1 seringa de 4 g	20 cápsulas de 0,2 g cada
A2	6585A2	6550A2	1 seringa de 4 g	20 cápsulas de 0,2 g cada
A3	6585A3	6550A3	1 seringa de 4 g	20 cápsulas de 0,2 g cada
A3.5	6585A3.5	6550A3.5	1 seringa de 4 g	20 cápsulas de 0,2 g cada
A4	6585A4	6550A4	1 seringa de 4 g	20 cápsulas de 0,2 g cada
B1	6585B1	6550B1	1 seringa de 4 g	20 cápsulas de 0,2 g cada
B2	6585B2	6550B2	1 seringa de 4 g	20 cápsulas de 0,2 g cada
D3	6585D3	6550D3	1 seringa de 4 g	20 cápsulas de 0,2 g cada
XW – Extra White	6585XW	6550XW	1 seringa de 4 g	20 cápsulas de 0,2 g cada
PO – Pink Opaquer	6585PO	6550PO	1 seringa de 4 g	10 cápsulas de 0,2 g cada

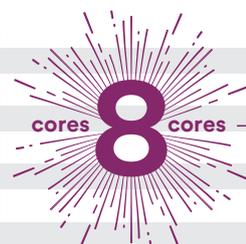

Conheça mais sobre este lançamento 3M Oral Care.



3M.com.br/odontologia
3M do Brasil, Rod. Anhanguera, km 110,
Sumaré, SP

0800-0132333

falecoma3M@mmm.com



www.3m.com.br/filtek-universal



Acompanhe-nos

3M.OralCareBrasil