

3M**Filtek™****One
Bulk Fill Restoratif****3M™ Filtek™
One Bulk Fill Restoratif**

- Hızlı ve kolay, tek adımda yerleştirme
- Gelişmiş estetik özellikler için arttırılmış opasite
- 5mm polimerizasyon derinliğine izin veren stres dağıtma
- Mükemmel adaptasyon
- Tabakalamaya veya pahalı cihazlara ihtiyaç yok
- Mükemmel uygulama ve şekillendirilebilirlik
- 3M gerçek nanoteknolojisiyle üstün aşınma direnci ve mükemmel cila retansiyonu
- Yüksek radyoopasite
- Derin kavitelere kolay ulaşmak için özel kapsül ucu tasarımı
- 5 renk seçeneği

5 mm'ye kadar

Yalnızca hızlı değil, aynı zamanda artık daha estetik.

Posterior restorasyonlar zorlayıcı olabilir, bu sebeple işlemi kolaylaştıran ve hızlandıran bulk fill kompozit materyaller popülerlik kazandı. Ancak şimdiye kadar bulk fill materyaller ile kolay restorasyon yapmak estetikten fedakarlık yapmak demektir. Estetik ve restoratif teknolojilerin global lideri olarak uzmanlarımız bu probleme çok seveceğiniz bir çözüm buldu: 3M™ Filtek™ One Bulk Fill Restoratif.

Posterior için dizayn edilen bu kompozit, benzersiz optik özellikleri ve geliştirilmiş opasitesiyle 5 mm'ye kadar tek adımda yerleştirme kolaylığını sunuyor, hem de estetik sonuçlardan ödün vermeden.


Akıllı kontrast oranı yönetimi polimerizasyon derinliğinden ödün vermeden opasiteyi artırıyor.

3M nanoteknolojilerdeki son gelişmeler, opasite ve polimerizasyon derinliğini akıllı bir yolla yönetmeye izin verdi. Benzersiz "Akıllı Kontrast Oran Yönetimi Teknolojisi" ile polimerizasyon derinliğini azaltmadan opasiteyi arttırdık.

Polimerize olmuş haliyle Filtek One Bulk Fill Restoratif, 3M™ Filtek™ Bulk Fill Posterior Restoratif'ten daha yüksek opasiteye ve böylece daha gelişmiş estetiğe sahiptir.

Biliyor musunuz?

Kontrast oranı
materyalin opasitesi veya
translansensinin ölçümüdür.

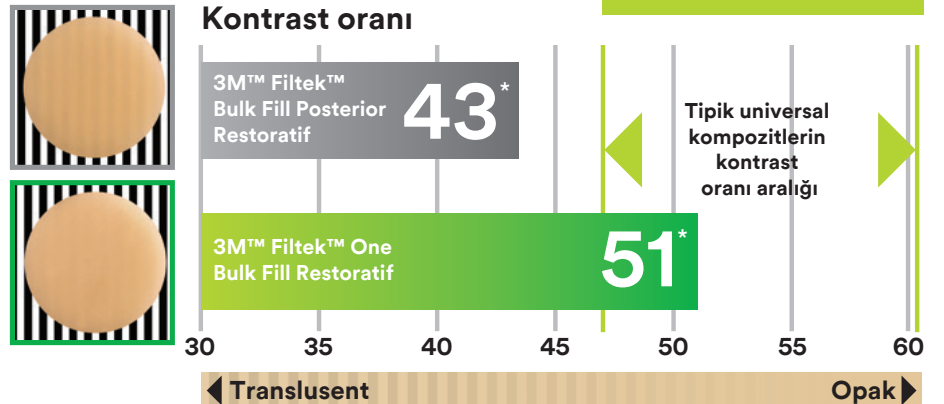


*Tüm renklerin ortalamasının kontrast oranı

Kolaylığına ek olarak estetiğini de çok seveceksiniz.


3M™ Filtek™ One Bulk Fill Restoratif'in arkasındaki inovatif teknoloji

İnovatif AUDMA ve AFM monomerleri

5 mm'ye kadar bulk olarak yerleştirmeye izin vermek için büzülmeyi azaltır ve stresi dağıtır.

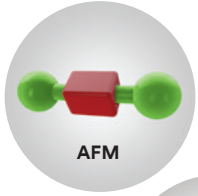

Ekleme - fragmentasyon monomer (addition- fragmentation monomer / AFM) polimerizasyon esnasında stresi dağıtır.

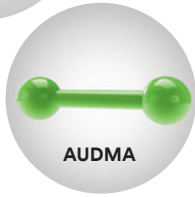


Aromatik üretan dimetakrilat (AUDMA) polimerizasyon sırasında oluşan büzülme ve stres miktarını azaltmaya yardımcı olur.


3M'in gerçek nanodoldurucu teknolojisi

Üstün aşınma direnci ve mükemmel cila retansiyonu sağlar.

Nanokümlerin 5bin büyütmedeki görüntüsü

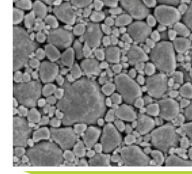

Nanokümlerin 50bin büyütmedeki görüntüsü

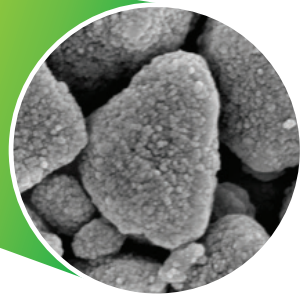

Sipariş Bilgileri



3M™ Filtek™ One Bulk Fill Restoratif

Renk	Şırınga	Kapsül
A1	4870A1	4871A1
A2	4870A2	4871A2
A3	4870A3	4871A3
B1	4870B1	4871B1
C2	4870C2	4871C2

Şırınga Tek Tüp (4 gr.), Teknik Bilgi, Kullanım Klavuzu.

Kapsül Yedeği (20 X 0.2 gr.), Teknik Bilgi, Kullanım Klavuzu.

www.3M.com



3M Türkiye
Ağız ve Diş Sağlığı Çözümleri
Barbaros Mah. Mor Sümbül Sok.
No:7/3F 27-51 Nidakule Ataşehir Güney
34746 Ataşehir/İstanbul Türkiye
Tel.: +90 216 538 07 77
Faks: +90 216 538 07 99

3M ve Filtek 3M Şirketi'nin ticari markalarıdır.
Diğer tüm ticari markalar diğer şirketlere aittir.
© 3M 2019. Tüm hakları saklıdır.