

3M

Curoso™

Protector de Puerto
Desinfectante

3M® Curoso™

Tapón Desinfectante para Conectores Libres de Aguja

De acuerdo con los estándares de práctica de la Sociedad de Enfermeras de Infusión (INS), los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Atlanta (CDC) y las recomendaciones de la Joint Commission de Estados Unidos, el uso de tapones de desinfección pasiva que contienen agentes de desinfección, reducen la contaminación intraluminal y las tasas de CLABSI y parecen ser efectivos para prevenir la entrada de microorganismos al torrente sanguíneo.^{1,2,3}

Desinfecte y proteja los conectores libres de aguja. Para cumplir con los estándares de alta eficacia de la línea 3M® Curoso™ Protector de Puerto Desinfectante, los tapones 3M® Curoso™ Tapón Desinfectante para Conectores Libres de Aguja utilizan alcohol isopropílico (IPA) al 70% para desinfectar las superficies críticas de los conectores libres de aguja antes del acceso a la línea. Estos tapones brindan una barrera contra la contaminación hasta por 7 días, si no son removidos.

Simplemente desprenda el tapón de la tira o retire el sello de aluminio. Empuje y gire en el sentido de las agujas del reloj, hasta que esté firme en su lugar.



Utiliza IPA al 70% para desinfectar superficies críticas



Desinfecta en
1 minuto. Protege
conectores libres
de aguja hasta por
7 días.

Diseño inteligente

3M® Curoso™ Tapón Desinfectante para Conectores Libres de Aguja posee un diseño de rosca atornillable tipo Luer-Lock, que contiene una esponja de poliuretano al interior, impregnada en alcohol isopropílico al 70%. Están indicadas para la desinfección pasiva de conectores libres de aguja, antes del acceso a la línea de administración intravascular.

Práctica presentación

3M® Curoso™ Tapón Desinfectante para Conectores Libres de Aguja está disponible en tiras de diez unidades. Las tiras permiten que los tapones estén visibles en el entorno del paciente, facilitando el acceso y proporcionando un recordatorio visual para el cumplimiento.

Color brillante, para una desinfección correcta

3M® Curoso™ Tapón Desinfectante para Conectores Libres de Aguja tiene un color brillante, lo que permite que los profesionales de salud verifiquen rápidamente que los puertos estén cubiertos.

El cumplimiento de los protocolos de desinfección se puede medir de manera fácil y confiable.

3M® Curoso™ Protector de Puerto Desinfectante redujo 6 microorganismos que suelen asociarse a las CLABSI (Infecciones del Torrente Sanguíneo Asociadas a la Línea Central) hasta en un 99.99%.^{4,5}


La eficiencia de los productos 3M® Curoso™ se sometió a pruebas *in Vitro* contra:⁵



CONCLUSIÓN DEL ESTUDIO:

Todas las muestras de las pruebas excedieron la reducción mínima de 4 log después de un minuto.

Los estudios se llevaron a cabo en laboratorios independientes. Datos de 3M en archivo.

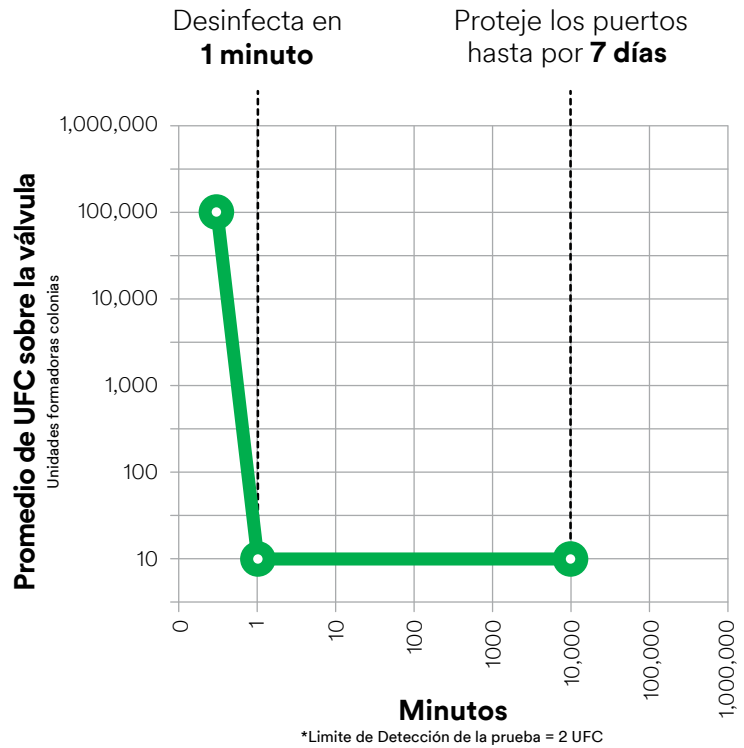

- O'Grady NP, Alexander M, Burns LA, et al. Guidelines for the prevention of intravascular catheter-related infections. Clin Infect Dis. 2011; 52(9): e162-e193.
- The Joint Commission. Preventing central line-associated bloodstream infections: A global challenge, a global perspective. Oak Brook, IL: Joint Commission Resources; mayo de 2012. https://www.jointcommission.org/assets/1/18/CLABSI_Monograph.pdf
- Gorski L, Hadaway L, Hagle ME, McGoldrick M, Orr M, Doellman D. Infusion Therapy Standards of Practice. J Infus Nurs. 2016; 39(suppl 1): S1-S59.
- Para obtener más información sobre los organismos asociados con las infecciones del torrente sanguíneo asociadas a la línea central, consulte: Sievert, D. M., Ricks, P., Edwards, J. R., Schneider, A., Patel, J., Srinivasan, A., ... Fridkin, S. (2013). Antimicrobial-Resistant Pathogens Associated with Healthcare-Associated Infections: Summary of Data Reported to the National Healthcare Safety Network at the Centers for Disease Control and Prevention, 2009-2010. Infection Control & Hospital Epidemiology, 34(01), 1-14. doi:10.1086/668770.
- Los datos reflejan los hallazgos *in vitro* de 3M® Curoso™ Protector de Puerto Desinfectante.

Producto	Presentación	Información para pedidos	Cajas por paquete	Unidades por caja	Total de tapones por paquete
3M® Curoso™ Tapón Desinfectante para Conectores Libres de Aguja	Tiras (10 tapones), color verde	CFF10-250R	10	25 tiras	2,500



3M Cono Sur
División de Soluciones Médicas

3M Chile
Santa Isabel 1001, 7501412 - Providencia
Santiago. Tel.: 600 300 3636
go.3m.com/3msalud-chile

