


3M Science.
Applied to Life.™

クリアティ™ アドバンス セラミック ブラケット

Clarity™ ADVANCED Ceramic Brackets

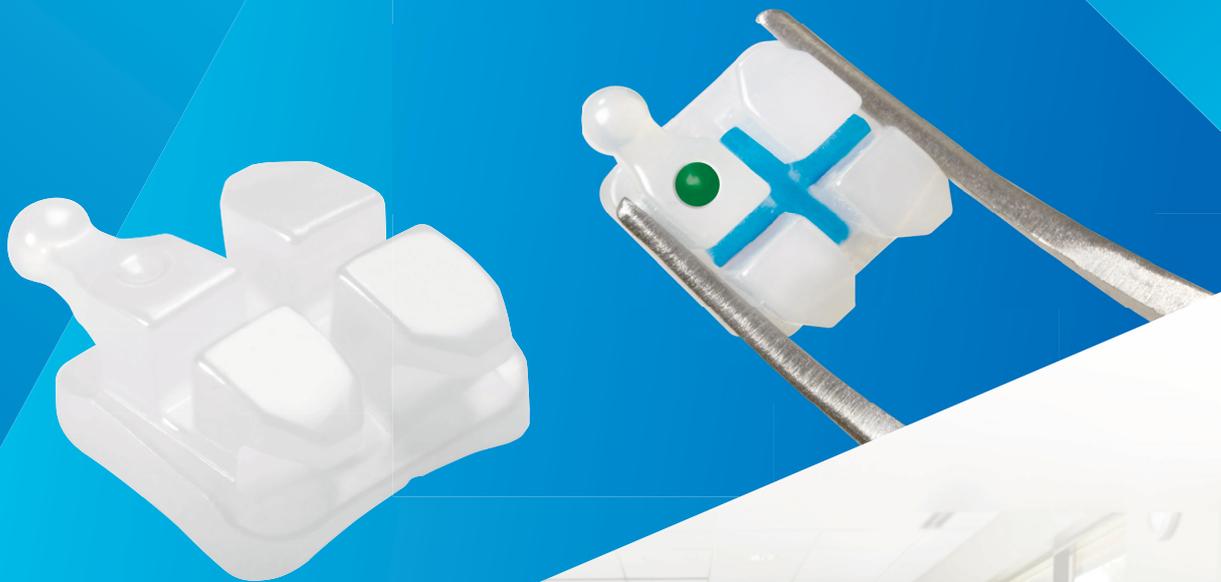

“パフォーマンス”と“美しさ”の融合

CLARITY™ | ADVANCED
advanced ceramic brackets

矯正歯科医と患者の快適性を求めて開発された、クリアティ™ アドバンス セラミック ブラケット。優れた審美性だけでなく、ブラケットに求められる高いパフォーマンスを追求したセラミック ブラケットです。




審美性が向上

粒子の細かいセラミック素材

クリアティ™ アドバンス セラミック ブラケットは従来のクリアティ™ セラミック ブラケットに比べ細かい粒子で構成されています。強度が増すだけでなく、デザインのフレキシビリティが向上しました。

着色しにくいセラミック

細かい粒子で製作されたクリアティ™ アドバンス セラミック ブラケットは着色しにくく、美しさが治療中も保持されます。

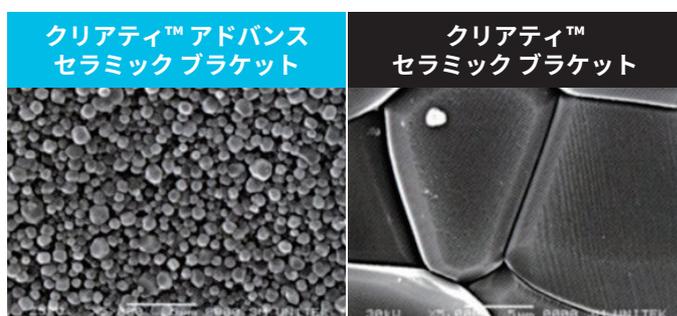


快適な口腔内のために

ロープロファイル設計

クリアティ™ アドバンス セラミック ブラケットはロープロファイル設計。口腔内での咬合干渉の軽減が期待できます。

ドーム型デザイン
丸みを帯びたデザインは、口腔内の刺激の軽減が期待できます。

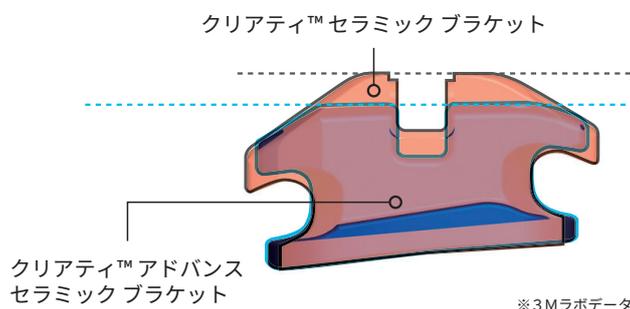

ロープロファイル ブラケットとの併用

小白歯などにメタルブラケットを併用される場合は、ビクトリーシリーズ™ メタル ブラケット ロープロファイルをご利用ください。IN-OUTのコンビネーションがなめらかなアーチフォームを提供します。



ビクトリーシリーズ™
メタル ブラケット




ビクトリーシリーズ™
メタル ブラケット
ロープロファイル



操作性も向上

ポジショニングをサポート

ブルーの水溶性インクが、パーティカル・水平方向の方向に施されています。審美ブラケットでもポジショニングが簡単にできます。ボンディング後のブラッシングでほとんど流れ落ちるので、審美ブラケットとしての機能をすぐに発揮します。

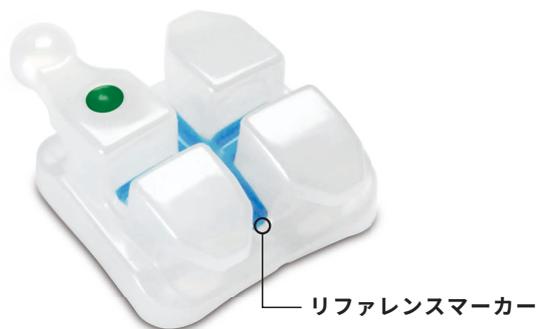

ディボンディング

ストレス コンセントレーターによるディボンディング

ボンディングベース面に施されたストレス コンセントレーター。ブラケットの近遠心を圧縮することでディボンディングが容易に行えます。



ワイヤーを装着したままディボンディング

クリアティ™ アドバンス セラミック ブラケットは、ユニテック™ セルフライゲータリング ブラケット ディボンディング インストルメントを使用することにより、ワイヤーを装着したままディボンディングができます。




APC™ 光重合接着材つき アプライアンス システム

光重合接着材を事前に塗布し、個別のプリスターケースに入っています。ボンディングの際の操作性、部位識別、在庫管理などトータルで治療の効率化、マネージメントに役立つシステムです。

APC™ Flash-Free Adhesive Coated Appliance System



クリアティ™ アドバンス セラミック ブラケット 関連製品

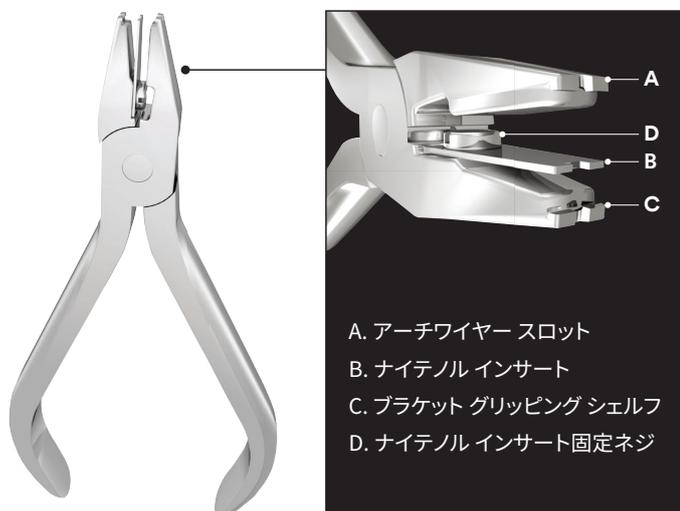

ユニテック™ セルフライゲーティング ブラケット ディボンディング インスツルメント

製品番号：804-170

内容：1本

希望医院価格：28,000円



ワイヤーを装着したまま
ディボンディングが可能



患者説明用 ブラケット付きタイポドント

製品番号：600-236

希望医院価格：56,000円

クリアティ™ アドバンス セラミック ブラケット

製品番号リスト

MBT™ システム仕様

上顎	部位	Torq.	Ang.	In/Out (mm)	Hook	L/R	接着材なし		APC™ Flash-Free 接着材つき	
							.018	.022	.018	.022
							中切歯	+17°	4°	.66
	+17°	4°	.66		UR	006-202	006-302	4006-202	4006-302	
側切歯	+10°	8°	.89		UL	006-205	006-305	4006-205	4006-305	
	+10°	8°	.89		UR	006-206	006-306	4006-206	4006-306	
犬歯	0°	8°	.53		UL	006-207	006-307	4006-207	4006-307	
	0°	8°	.53		UR	006-208	006-308	4006-208	4006-308	
	0°	8°	.53	D	UL	006-209	006-309	4006-209	4006-309	
	0°	8°	.53	D	UR	006-210	006-310	4006-210	4006-310	
小白歯	-7°	0°	.74		UL/UR	006-211	006-311	4006-211	4006-311	
	-7°	0°	.74	D	UL	006-213	006-313	4006-213	4006-313	
	-7°	0°	.74	D	UR	006-212	006-312	4006-212	4006-312	
包装単位 希望医院価格 (消費税別)							5個/パック 12,500円/パック		5個/パック 13,400円/パック	

下顎	部位	Torq.	Ang.	In/Out (mm)	Hook	L/R	接着材なし		APC™ Flash-Free 接着材つき	
							.018	.022	.018	.022
							前歯	-6°	0°	1.14
犬歯	0°	3°	.51		LL	006-251	006-351	4006-251	4006-351	
	0°	3°	.51		LR	006-252	006-352	4006-252	4006-352	
	0°	3°	.51	D	LL	006-253	006-353	4006-253	4006-353	
	0°	3°	.51	D	LR	006-254	006-354	4006-254	4006-354	
第1 小白歯	-12°	2°	.76		LL	006-255	006-355	4006-255	4006-355	
	-12°	2°	.76		LR	006-256	006-356	4006-256	4006-356	
	-12°	2°	.76	D	LL	006-257	006-357	4006-257	4006-357	
	-12°	2°	.76	D	LR	006-258	006-358	4006-258	4006-358	
第2 小白歯	-17°	2°	.86		LL	006-259	006-359	4006-259	4006-359	
	-17°	2°	.86		LR	006-260	006-360	4006-260	4006-360	
	-17°	2°	.86	D	LL	006-261	006-361	4006-261	4006-361	
	-17°	2°	.86	D	LR	006-262	006-362	4006-262	4006-362	
包装単位 希望医院価格 (消費税別)							5個/パック 12,500円/パック		5個/パック 13,400円/パック	

クリアティ™ アドバンス セラミック ブラケット

小白歯 ビクトリー シリーズ™ メタル ブラケット
ロープロファイル使用

MBT™ システム仕様

上顎	製品	部位	Torq.	Ang.	In/Out (mm)	Hook	L/R	接着材なし		APC™ Flash-Free 接着材つき	
								.018	.022	.018	.022
								クリアティ™ アドバンス セラミック ブラケット	中切歯	+17°	4°
+17°	4°	.66		UR	006-202	006-302	4006-202			4006-301	
側切歯	+10°	8°	.89		UL	006-205	006-305		4006-205	4006-301	
	+10°	8°	.89		UR	006-206	006-306		4006-206	4006-301	
犬歯	0°	8°	.53		UL	006-207	006-307		4006-207	4006-301	
	0°	8°	.53		UR	006-208	006-308		4006-208	4006-301	
	0°	8°	.53	D	UL	006-209	006-309		4006-209	4006-301	
	0°	8°	.53	D	UR	006-210	006-310		4006-210	4006-301	
								接着材なし		APC™ PLUS 接着材つき	
ビクトリー シリーズ™ メタル ブラケット ロープロファイル	小白歯	-7°	0°	.74		UL/UR	024-790	024-890	5024-790	5024-890	
		-7°	0°	.74	D	UL	024-585	024-685	5024-585	5024-685	
		-7°	0°	.74	D	UR	024-584	024-684	5024-584	5024-684	
	第2小白歯 Thick Base	-7°	0°	1.30		UL/UR	024-791	024-891	5024-791	5024-891	
		-7°	0°	1.30	D	UL	024-813	024-913	5024-813	5024-913	
		-7°	0°	1.30	D	UR	024-812	024-912	5024-812	5024-912	
包装単位 希望医院価格 (消費税別)						クリアティ™ アドバンス セラミック ブラケット	5個/パック 12,500円/パック	5個/パック 13,400円/パック			
						ビクトリー シリーズ™ メタル ブラケット ロープロファイル	10個/パック 7,000円/パック 8,000円/(フック付き)パック	5個/パック 4,100円/パック 4,600円/(フック付き)パック			

下顎	製品	部位	Torq.	Ang.	In/Out (mm)	Hook	L/R	接着材なし		APC™ Flash-Free 接着材つき	
								.018	.022	.018	.022
								クリアティ™ アドバンス セラミック ブラケット	前歯	-6°	0°
0°	3°	.51		LL	006-251	006-351	4006-251			4006-351	
犬歯	0°	3°	.51		LR	006-252	006-352		4006-252	4006-352	
	0°	3°	.51	D	LL	006-253	006-353		4006-253	4006-353	
	0°	3°	.51	D	LR	006-254	006-354		4006-254	4006-354	
								接着材なし		APC™ PLUS 接着材つき	
ビクトリー シリーズ™ メタル ブラケット ロープロファイル	第1小白歯	-12°	2°	.76		LL	024-795	024-895	5024-795	5024-895	
		-12°	2°	.76		LR	024-796	024-896	5024-796	5024-896	
		-12°	2°	.76	D	LL	024-809	024-909	5024-809	5024-909	
		-12°	2°	.76	D	LR	024-808	024-908	5024-808	5024-908	
	第2小白歯	-17°	2°	.86		LL	024-797	024-897	5024-797	5024-897	
		-17°	2°	.86		LR	024-798	024-898	5024-798	5024-898	
		-17°	2°	.86	D	LL	024-811	024-911	5024-811	5024-911	
		-17°	2°	.86	D	LR	024-810	024-910	5024-810	5024-910	
包装単位 希望医院価格 (消費税別)						クリアティ™ アドバンス セラミック ブラケット	5個/パック 12,500円/パック	5個/パック 13,400円/パック			
						ビクトリー シリーズ™ メタル ブラケット ロープロファイル	10個/パック 7,000円/パック 8,000円/(フック付き)パック	5個/パック 4,100円/パック 4,600円/(フック付き)パック			

クリアティ™ アドバンス セラミック ブラケット

製品番号リスト

Roth* 仕様

	部位	Torq.	Ang.	In/Out (mm)	Hook	L/R	接着材なし		APC™ Flash-Free 接着材つき	
							.018	.022	.018	.022
上顎	中切歯	+12°	5°	.66		UL	006-215	006-315	4006-215	4006-315
		+12°	5°	.66		UR	006-216	006-316	4006-216	4006-316
	側切歯	+8°	9°	.89		UL	006-217	006-317	4006-217	4006-317
		+8°	9°	.89		UR	006-218	006-318	4006-218	4006-318
	犬歯	0°	11°	.53	D	UL	006-221	006-321	4006-221	4006-321
		0°	11°	.53	D	UR	006-222	006-322	4006-222	4006-322
	小白歯	-7°	0°	.74		UL/UR	006-211	006-311	4006-211	4006-311
		-7°	0°	.74	D	UL	006-213	006-313	4006-213	4006-313
		-7°	0°	.74	D	UR	006-212	006-312	4006-212	4006-312
包装単位 希望医院価格 (消費税別)							5個/パック 12,500円/パック		5個/パック 13,400円/パック	

	部位	Torq.	Ang.	In/Out (mm)	Hook	L/R	接着材なし		APC™ Flash-Free 接着材つき	
							.018	.022	.018	.022
下顎	前歯	-1°	0°	1.14		LL/LR	006-264	006-364	4006-264	4006-364
	犬歯	-11°	7°	.51	D	LL	006-267	006-367	4006-267	4006-367
		-11°	7°	.51	D	LR	006-268	006-368	4006-268	4006-368
	第1 小白歯	-17°	0°	.76	D	LL	006-271	006-371	4006-271	4006-371
		-17°	0°	.76	D	LR	006-272	006-372	4006-272	4006-372
	第2 小白歯	-22°	0°	.86	D	LL	006-275	006-375	4006-275	4006-375
		-22°	0°	.86	D	LR	006-276	006-376	4006-276	4006-376
	包装単位 希望医院価格 (消費税別)							5個/パック 12,500円/パック		5個/パック 13,400円/パック

*この仕様は 3M Unitek 社が決定しているもので、ドクターの承認を得ているものではありません。

クリアティ™ アドバンス セラミック ブラケット

小白歯 ビクトリー シリーズ™ メタル ブラケット
ロープロファイル使用

Roth* 仕様

上顎	製品	部位	Torq.	Ang.	In/Out (mm)	Hook	L/R	接着材なし		APC™ Flash-Free 接着材つき	
								.018	.022	.018	.022
クリアティ™ アドバンス セラミック ブラケット	中切歯		+12°	5°	.66		UL	006-215	006-315	4006-215	4006-315
			+12°	5°	.66		UR	006-216	006-316	4006-216	4006-316
	側切歯		+8°	9°	.89		UL	006-217	006-317	4006-217	4006-317
			+8°	9°	.89		UR	006-218	006-318	4006-218	4006-318
	犬歯		0°	11°	.53	D	UL	006-221	006-321	4006-221	4006-321
			0°	11°	.53	D	UR	006-222	006-322	4006-222	4006-322
								接着材なし		APC™ PLUS 接着材つき	
ビクトリー シリーズ™ メタル ブラケット ロープロファイル	小白歯		-7°	0°	.74		UL/UR	024-790	024-890	5024-790	5024-890
			-7°	0°	.74	D	UL	024-585	024-685	5024-585	5024-685
			-7°	0°	.74	D	UR	024-584	024-684	5024-584	5024-684
包装単位 希望医院価格 (消費税別)						クリアティ™ アドバンス セラミック ブラケット		5個/パック 12,500円/パック		5個/パック 13,400円/パック	
						ビクトリー シリーズ™ メタル ブラケット ロープロファイル		10個/パック 7,000円/パック 8,000円/(フック付き)パック		5個/パック 4,100円/パック 4,600円/(フック付き)パック	

下顎	製品	部位	Torq.	Ang.	In/Out (mm)	Hook	L/R	接着材なし		APC™ Flash-Free 接着材つき	
								.018	.022	.018	.022
クリアティ™ アドバンス セラミック ブラケット	前歯		-1°	0°	1.14		LL/LR	006-264	006-364	4006-264	4006-364
			-11°	7°	.51	D	LL	006-267	006-367	4006-267	4006-367
	犬歯		-11°	7°	.51	D	LR	006-268	006-368	4006-268	4006-368
								接着材なし		APC™ PLUS 接着材つき	
ビクトリー シリーズ™ メタル ブラケット ロープロファイル	第1小白歯		-17°	0°	.86		LL/LR	024-517	024-617	5024-517	5024-617
			-17°	0°	.86	D	LL	024-519	024-619	5024-519	5024-619
			-17°	0°	.86	D	LR	024-518	024-618	5024-518	5024-618
	第2小白歯		-22°	0°	.86		LL/LR	024-520	024-620	5024-520	5024-620
			-22°	0°	.86	D	LL	024-521	024-621	5024-521	5024-621
			-22°	0°	.86	D	LR	024-522	024-622	5024-522	5024-622
包装単位 希望医院価格 (消費税別)						クリアティ™ アドバンス セラミック ブラケット		5個/パック 12,500円/パック		5個/パック 13,400円/パック	
						ビクトリー シリーズ™ メタル ブラケット ロープロファイル		10個/パック 7,000円/パック 8,000円/(フック付き)パック		5個/パック 4,100円/パック 4,600円/(フック付き)パック	

※この仕様は 3M Unitek 社が決定しているもので、ドクターの承認を得ているものではありません。
※ビクトリー シリーズ™ メタル ブラケット ロープロファイルの仕様はIn/Outも含めて、クリアティ™ アドバンス セラミック ブラケットと同じです。

販売名:クリアティ™ セラミック ブラケット 認証番号:219AKBZX00120000
販売名:ビクトリー シリーズ™ メタル ブラケット 認証番号:219AKBZX00142000
販売名:ユニテック™ セルフライゲージング ブラケット ディボンディング インストルメント 届出番号:13B1X10109000163

※本カタログは2021年5月現在の製品、認証番号、届出番号、希望医院価格を掲載しております(価格に消費税は含まれていません)。

- ※製品内容、価格等は、予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。
- 商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「添付文書」をお読みください。
- 本カタログの3M、Clarity、APC、ユニテック、クリアティ、MBT、ビクトリー シリーズは、3M社の商標です。

スリーエム ジャパン株式会社

ユニテック製品部

http://go.3M.com/orthodontics

Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2021. All Rights Reserved.
UTK-078-J(0521)e.

当製品部取扱製品のお問い合わせは

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

 0120-296-303

※受付時間/9:00~17:30月~金(土日祝を除く)