



Solutions d'orthodontie esthétique

Clarity^{MC}

Boîtiers en céramique améliorée Clarity^{MC} 3M^{MC}

Sourires scintillants. Rendement exceptionnel.



Un rendement et des esthétiques qui dépassent les attentes.

Les Boîtiers en céramique améliorée Clarity^{MC} 3M^{MC} représentent un saut en avant révolutionnaire dans le domaine des boîtiers en céramique orthodontiques. Grâce à la combinaison d'une technologie progressive et d'une conception de pointe, les Boîtiers en céramique améliorée Clarity^{MC} 3M^{MC} assurent une esthétique éclatante, une conception discrète, un retrait prévisible et un confort amélioré. De plus, ils sont disponibles avec l'Adhésif sans bavures APC^{MC} Flash-Free 3M^{MC} unique, afin rendre l'expérience de liaison plus rapide et plus efficace que jamais. Ces fonctionnalités avancées vous permettent d'offrir à vos patients la combinaison parfaite d'esthétiques et de rendement.

Apparence attirante. Conception distincte.

Esthétiques remarquables.

Laissez le sourire de vos patients radier à chaque occasion avec les Boîtiers en céramique améliorée Clarity^{MC} 3M^{MC}. Ces boîtiers très-petits et translucides sont conçus pour s'harmoniser avec la couleur naturelle des dents, tout en résistant aux taches et à la décoloration durant le traitement. Vous pouvez également choisir nos attaches de ligature de couleur pour les dents pour qu'elles se fondent encore davantage.




Une résistance fiable et une petite taille de boîtier.

Présentant un matériau en céramique à grain fin et créé par un processus de moulage par injection, les Boîtiers en céramique améliorée Clarity^{MC} 3M^{MC} offrent une résistance fiable dans une petite taille et l'un des profils les plus bas de l'industrie. Aussi, les Boîtiers en céramique améliorée Clarity^{MC} 3M^{MC} offrent un grand espace sous les ailettes, ce qui permet un traitement et des options de ligature flexibles.


La petite taille des grains offre une résistance fiable dans un boîtier plus petit.

Grossissement équivalent.

Source : Laboratoire 3M

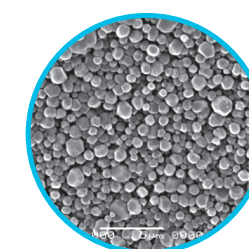



Matériau en céramique polycristalline à grains fins - Boîtiers en céramique améliorée Clarity^{MC} 3M^{MC}

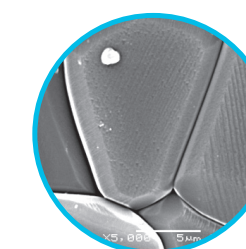

Matériau en céramique monocristalline grossier - Boîtiers renforcés en métal 3M


Comparaison du profil antérieur plus bas.

Source : Données internes de 3M.

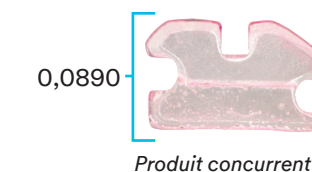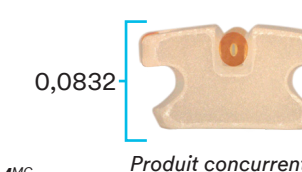

Boîtiers en céramique améliorée Clarity^{MC} 3M^{MC} : Une révolution dans la technologie des boîtiers en céramique.

Profil bas pour améliorer le confort des patients et réduire les interférences occlusales.

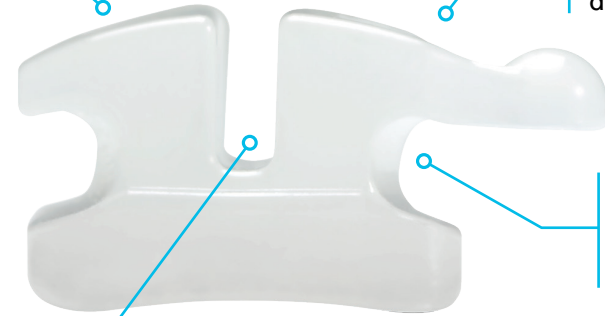


Coins arrondis et profil en forme de dôme pour s'ajuster de manière confortable à l'intérieur de la bouche.

Grand espace sous l'ailette pour permettre une ligature facile et une double ligature.

Coins arrondis dans la fente pour minimiser l'accrochage et l'encoche.


Surface de liaison microcristalline à verrouillage mécanique pour une résistance de liaison optimale.

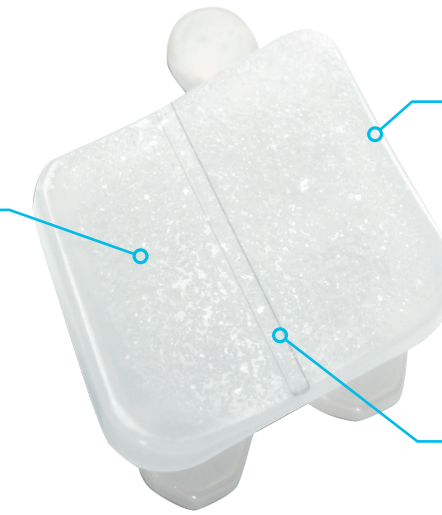

Géométrie de base spécifique à la dent et conception de base à contour composé pour un ajustement précis de la dent.

Concentrateur de contraintes breveté pour un décollement prévisible par pression.

Crochet à bille bidirectionnel arrondi et incliné pour le confort du patient.

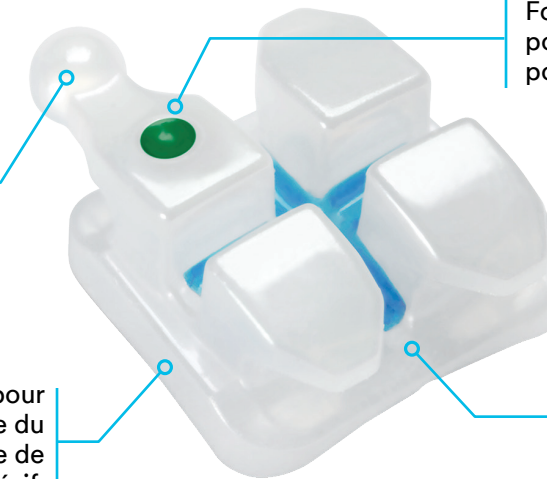


Fossette d'identification avec points d'encre de couleur pour l'identification du boîtier.

Bride de base pour faciliter la pose du boîtier et le nettoyage de l'excédent d'adhésif.

Marqueurs horizontaux et verticaux pour une référence visuelle lors de la pose du boîtier.

Traitez esthétiquement sans compromis.

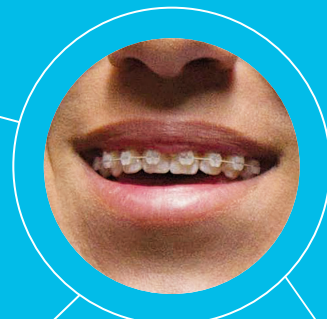

Boîtiers en céramique améliorée Clarity^{MC} 3M^{MC}

Appareils de correction de classe II Forsus^{MC} 3M^{MC}



Ligatures ayant la même couleur que les dents

Disponible dans le Système d'appareil d'orthodontie MBT^{MC} 3M^{MC}, ordonnances Roth* et High Torque.

* Version 3M de cette ordonnance. Aucun endossement par le dentiste n'est sous-entendu.

Un processus de liaison simple et efficace.

Grâce à la technologie, le Système de boîtiers pré-encollés APC^{MC} Flash-Free 3M^{MC} est le système de liaison le plus efficace en orthodontie. Notre conception innovante crée un substrat de liaison adhésif unique à la base du boîtier qui fait gagner du temps et a un effet positif sur la satisfaction du patient.

Le taux moyen d'échec de liaison des boîtiers est inférieur à 2 %.



Disponibles pré-encollés avec l'Adhésif sans bavures APC^{MC} Flash-Free 3M^{MC} pour une liaison de confiance supérieure.

Conçu pour des patients heureux et des cabinets efficaces.

Décollage prévisible et constant grâce à un concentrateur de contrainte exclusif.

Réduit l'incertitude du décollement des boîtiers en céramique avec notre concentrateur de contrainte unique en son genre, une particularité importante de la marque Clarity^{MC} 3M^{MC}. Cette caractéristique de conception innovante permet le décollement médial distal avec une simple pression, afin que vous puissiez le détacher en toute confiance et aider à assurer que les visites de décollement des patients soient un élément positif de l'expérience de traitement.



Économise du temps et de l'argent.

- ✓ Liaison plus rapide et plus efficace que les boîtiers non pré-encollés
- ✓ Élimine l'étape de retrait de l'excédent d'adhésif de la liaison
- ✓ Un nettoyage simple et facile au moment du décollement



Efficacité de liaison supérieure.

- ✓ Le temps de collage connaît une réduction pouvant atteindre 40 % par boîtier
- ✓ L'absence d'excédent réduit les mouvements accidentels du boîtier après le positionnement, ce qui réduit la nécessité de le repositionner
- ✓ Protège l'émail des dents sous l'adhésif

Un confort accru pour le patient avec des couleurs pour toutes les occasions.

Un petit boîtier à profil bas, avec une surface lisse et des coins arrondis, améliore le confort du patient. Les patients peuvent « se fondre dans la masse ou être remarquables » en choisissant parmi plus de 20 couleurs transparentes ou vives de Ligatures faciles à attacher AlastiK^{MC} 3M^{MC}.





Solutions d'orthodontie esthétique

Clarity^{MC}

Exercer avec clarté.

Notre gamme complète de traitements esthétiques naturels est éclairée par la Science de 3M et alimentée par la créativité. L'innovation est le moteur de notre technologie de pointe et offre le choix et le contrôle que vous recherchez.

Nous nous engageons à collaborer avec des orthodontistes afin d'offrir des solutions de traitement à la fois personnalisées, flexibles et esthétiques, qui mettent en valeur votre expertise et assurent des résultats précis. Ensemble, nous pouvons transformer des vies en créant de sains et jolis sourires.



Solutions d'orthodontie esthétique Clarity^{MC} 3M^{MC}



Boîtiers autoligaturants Clarity^{MC}

Ultra 3M^{MC}

Les boîtiers en céramique innovants et parfaitement esthétiques sont conçus pour le confort du patient tout en garantissant des résultats fiables tout au long du traitement.



Aligneurs Clarity^{MC} 3M^{MC}

3M propose désormais un système d'aligneurs amovibles, presque invisibles et transparents qui offrent aux orthodontistes contrôle, flexibilité et choix.



Boîtiers en céramique améliorée

Clarity^{MC} 3M^{MC}

Des boîtiers à l'apparence éclatante, au format compact, au retrait prévisible et au confort accru pour les patients.

Produits offerts au Canada par :

3M Canada
Soin Oral 3M
300, rue Tartan
London (Ontario) N5V 4M9
Canada
1 800 443-1661
3M.ca/Orthodontiques

Unitek 3M
Produits orthodontiques
2724 South Peck Road
Monrovia, CA 91016
États-Unis
1 800 423-4588

3M, Clarity, APC, Forsus, MBT et AlastiK sont des marques de commerce de 3M, utilisées sous licence au Canada. © 3M, 2021 Tous droits réservés. 2012-19241 F