



Unterdruck- Wundtherapie Portfolio

Inklusive Begleitlösungen



SEITE AN SEITE FÜR LÖSUNGEN, DIE DEN HEILUNGSERFOLG FÖRDERN

Hinter jedem Patienten steht eine Geschichte. Nach einer Verletzung sind das Wohlergehen des Patienten und eine schnelle Wundheilung am wichtigsten.

Weil auch 3M und KCI das so sehen, arbeiten wir nun gemeinsam an evidenzbasierten Wundversorgungsprodukten, die bessere Heilungsvoraussetzungen schaffen.

INHALT

Unterdruck-Wundtherapie-Lösungen für alle Anforderungen der Wundversorgung6-7

Unterdruck-Wundtherapiesysteme

V.A.C.ULTA™ Therapy System	8
V.A.C.ULTA™ 4 Therapy System	9
ACTIV.A.C.™ Therapy System	10
V.A.C.® SIMPLICITY™ Therapy System	11
V.A.C.RX4™ Therapy System	12
V.A.C.VIA™ Therapy System	13

V.A.C.® Therapy – Dressing Kits und Zubehör

V.A.C.® GRANUFOAM™ Dressing Kit	14
V.A.C.® GRANUFOAM SILVER™ Dressing Kits	16
V.A.C.® WHITEFOAM™ Dressing Kits	17
V.A.C.® SIMPLACE™ EX Dressing Kits	18
V.A.C.® Therapy Zubehör	19

V.A.C.VIA™ Therapy – Dressing Kits und Zubehör

V.A.C.VIA™ GRANUFOAM™ Spiral Dressing Kits	21
--	----

V.A.C.® VERAFLOR™ Therapy – Dressing Kits und Zubehör

V.A.C.® VERAFLOR™ Dressing Kits	22
V.A.C.® VERAFLOR CLEANSE™ Dressing Kit	23
V.A.C.® VERAFLOR CLEANSE CHOICE™ Dressing Kits	24
V.A.C. VERAFLOR™ Therapiezubehör	24

Unterdruck-Therapiesysteme für den Einmalgebrauch

SNAP™ Therapy System	25
SNAP™ Therapy Dressing Kits	26
SNAP™ Therapiezubehör	27
SNAP™ Therapy Wundkriterien/Klinische Überlegungen	27
NANOVA™ Therapy System	28
NANOVA™ Therapy Dressing Kits	28

PREVENA™ Inzisionsmanagementsystem

PREVENA PEEL & PLACE™ Therapy System	29
PREVENA PLUS™ Therapy System	31
PREVENA DUO™ Therapy System	33

ABTHERA™ Therapy zur Versorgung des offenen Abdomen

ABTHERA™ Dressing	34
ABTHERA ADVANCE™ Dressing	35


Schutz der Wundumgebung

3M™ Cavilon™ Advanced Hautschutz	36
3M™ Cavilon™ Reizfreier Hautschutz	37

Hinweis: Einige Produkte aus diesem Katalog sind möglicherweise nicht in allen Ländern erhältlich. Die Artikelnummer kann je nach Land unterschiedlich sein. Ihr Medizinprodukteberater erteilt Auskunft zur Artikelnummer für Ihr Land.

HINWEIS: Für die hier genannten Produkte und Therapien liegen spezifische Indikationen, Kontraindikationen, Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsinformationen vor. Bitte kontaktieren Sie vor der Anwendung medizinisches Fachpersonal und lesen Sie die Bedienungsanleitung zum Produkt. Die vorliegenden Materialien richten sich an medizinisches Fachpersonal.

Art der Wunde

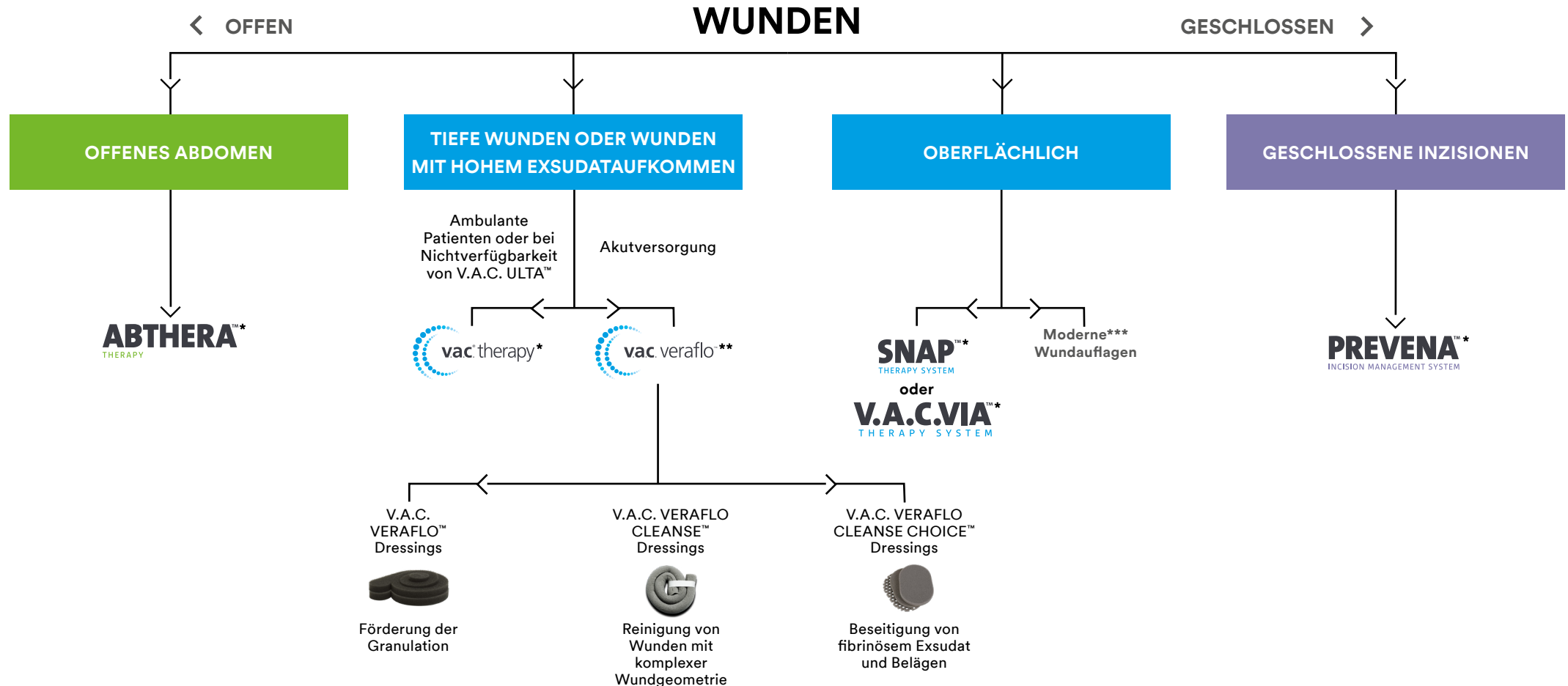

* Damit die Wundumgebung bei der Applikation des Dressings geschützt wird, sollte der Einsatz von 3M™ Cavilon™ Reizfreier Hautschutz in Betracht gezogen werden.

** Falls die Wundumgebungshaut erodiert ist (z. B. feucht oder nassend), sollte der Einsatz von 3M™ Cavilon™ als Hautschutzprodukt in Betracht gezogen werden.

*** Weitere Informationen zu unserem Portfolio moderner Wundauflagen erteilt Ihr Medizinprodukteberater.

HINWEIS: Zu den hier genannten Produkten und Therapien können spezifische Indikationen, Kontraindikationen, Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsinformationen vorliegen. Bitte kontaktieren Sie vor der Anwendung medizinisches Fachpersonal und lesen Sie die Bedienungsanleitung zum Produkt. Die vorliegenden Materialien richten sich an medizinisches Fachpersonal.

Produktprofil V.A.C. ULTA™ Therapy System

Das V.A.C. ULTA™ Therapy System ist ein integriertes Wundversorgungssystem für die Akutbehandlung, das die Unterdruck-Wundtherapie (V.A.C.® Therapy) mit einer optionalen Instillation (V.A.C. VERAFLU™ Therapy) kombiniert.



Unterdruck-Wundtherapie (V.A.C.® Therapy) schafft Voraussetzungen für eine schnelle sekundäre oder tertiäre (verspätete primäre) Wundheilung. Dies geschieht durch:

- Vorbereitung des Wundbetts auf den Wundverschluss
- Ödemreduzierung
- Aufbau des Granulationsgewebes und verbesserte Perfusion

- Beseitigung von Exsudat und infektiösem Material

Die Instillationsoption (V.A.C. VERAFLU™ Therapy) kommt für Patienten in Frage, die von einer Unterdruck-Wundtherapie und der kontrollierten Einbringung topischer Wundbehandlungslösungen und Suspensionen in das Wundbett profitieren.

V.A.C.ULTA™ Therapy System – alles Wichtige auf einen Blick:

- **V.A.C.® Therapy** – Betriebsart für die Unterdruck-Wundtherapie
- **V.A.C. VERAFLU™ Therapy** – Betriebsart für die Unterdruck-Wundtherapie mit Instillation
- **SENSAT.R.A.C.™ Technology** – reguliert den vorgeschriebenen Unterdruck, damit die Wunde optimal heilen kann
- **SEALCHECK™ Leakedetektor** – erleichtert medizinischem Fachpersonal und Patienten die Identifizierung und Behebung von Undichtigkeiten im Verband
- **EASYCLEAR PURGE™ Technology** pumpt in regelmäßigen Abständen Luft durch das äußere Lumen des Schlauchs, damit Blockaden beseitigt werden bzw. erst gar nicht entstehen können
- **Füllhilfe** – ermöglicht die Ermittlung des Instillationsvolumens für die Instillationsphase
- **Großer Bedienbildschirm** – intuitive Bedienung für einfachere Therapieprogrammierung
- **Verlaufsberichte** – Zugriff auf den Therapieverlauf auf dem ULTA-Gerät
- **DPC (Dynamische Druckkontrolle)** – gewährleistet zwischen den Zyklen an der Wundstelle einen leichten Unterdruck

Artikelnummer

Produktbeschreibung

Auf Anfrage

V.A.C.ULTA™ Therapy System

* Ihr Medizinprodukteberater erteilt Auskunft zur Artikelnummer für Ihr Land.



Produktprofil V.A.C. ULTA™ 4 Therapy System

Das V.A.C. ULTA™ 4 Therapy System ist ein integriertes Wundtherapiesystem für die Akutversorgung. Mit dieser Therapieeinheit können vier unterschiedliche Arten der Unterdruck-Wundtherapie durchgeführt werden: V.A.C.® Therapy, V.A.C. VERAFLU™ Therapy, ABTHERA™ Therapy und PREVENA™ Therapy.



Die vier Therapien:



V.A.C.® Therapy: Unterdruck-Wundtherapie, die die Wundheilung unterstützt durch die V.A.C.® Therapy mit patentierter SENSAT.R.A.C.™ Technologie kombiniert. Dressings und Zubehör: siehe Seiten 14–20.



V.A.C. VERAFLU™ Therapy: Verbindet die Vorteile der V.A.C.® Therapy mit einer automatisierten, kontrollierten Zufuhr und Drainage von topischen Wundlösungen. Dressings und Zubehör: siehe Seiten 22–24.



PREVENA™ Therapy: Unterdruck-Wundtherapie speziell für geschlossene chirurgische Inzisionen. Dressings und Zubehör: siehe Seiten 30–44.



ABTHERA™ Therapy: Unterdruck-Wundtherapie für das offene Abdomen und zur Förderung des primären fasziellen Wundverschlusses. Dressings und Zubehör: siehe Seiten 35–36.

Vorteile der V.A.C.ULTA™ 4 Therapy

Das V.A.C.ULTA™ 4 Therapy System vereint vier Unterdruck-Wundtherapien in einem einzigen, einfach zu bedienenden Gerät.

Da für das V.A.C.ULTA™ 4 Therapy System weniger Vorbereitungsschritte erforderlich sind, können die V.A.C.® Therapy und V.A.C.VERAFLU™ Therapy leichter eingeleitet werden.

Artikelnummer

Produktbeschreibung

Auf Anfrage

V.A.C. ULTA™ 4 Therapy System

* Ihr Medizinprodukteberater erteilt Auskunft zur Artikelnummer für Ihr Land.

Produktprofil ACTIV.A.C.™ Therapy System

Das ACTIV.A.C.™ Therapy System ist ein tragbares Unterdruck-Wundtherapiegerät für mobile Patienten. Es kommen hier die V.A.C.® Dressings (Seiten 14–20) zum Einsatz. Die Therapieeinheit ist mit folgenden Funktionen ausgestattet:



- **SENSAT.R.A.C.™ Technology** hält den programmierten Unterdruck an der Wunde aufrecht
- **SEALCHECK™ Leakedetektor** – erleichtert medizinischem Fachpersonal die Identifizierung und Behebung undichter Verbände
- Einfach in der Anwendung dank vorprogrammierter Einstellungen für mehr Patientencompliance
- Vereinfachter Touchscreen

Vorteile der ACTIV.A.C.™ Therapy

ACTIV.A.C.™ Therapy System ist ideal für Patienten, die nach Hause entlassen werden:

- Leicht – nur 1,08 kg
- Kleine Größe, flaches Format; kann nah am Körper getragen werden
- Einfach in der Anwendung, Therapie mit nur einer Taste an- und ausschaltbar
- Alarmbenachrichtigungen, die leicht zu erkennen und zu korrigieren sind
- Leichter, einfach abzunehmender Kanister (300 ml)
- 14 Stunden Akkulaufzeit, die es dem Patienten ermöglicht, ungehindert seinen alltäglichen Aktivitäten nachzugehen

Produktprofil V.A.C. SIMPLICITY™ Therapy System

Das V.A.C. SIMPLICITY™ Therapy System ist ein voreingestelltes System. Es ermöglicht die Durchführung der am häufigsten verschriebenen Therapie. Weil weniger Vorbereitungsschritte erforderlich sind, ist der Umgang mit dem Gerät für Patienten und medizinisches Fachpersonal einfach.



- Für mobile Patienten und Patienten, die aus dem stationären in den häuslichen Bereich übergeleitet werden
- Einfach zu bedienen, einfache Benutzeroberfläche
- Erleichtert die Patientenmobilität
- Minimaler Lernaufwand für medizinisches Fachpersonal und Patienten
- SENSAT.R.A.C.™ Technologie
- Akustischer Alarm
- 8 Stunden Akkulaufzeit
- Kontinuierliche Therapie mit Voreinstellung -125 mmHg

Vorteile der V.A.C. SIMPLICITY™ Therapy

Die V.A.C. SIMPLICITY™ Therapy ist äußerst einfach zu erlernen und ermöglicht eine nahtlose Überleitung.

Einfach: Einfache und intuitive Benutzeroberfläche

Kompatibel: V.A.C.® Dressings sind für das V.A.C. SIMPLICITY™ System geeignet.

Artikelnummer

Produktbeschreibung

Auf Anfrage

ACTIV.A.C.™ Therapy System

* Ihr Medizinprodukteberater erteilt Auskunft zur Artikelnummer für Ihr Land.

Artikelnummer

Produktbeschreibung

Auf Anfrage

V.A.C. SIMPLICITY™ Therapy System

* Ihr Medizinprodukteberater erteilt Auskunft zur Artikelnummer für Ihr Land.

Produktprofil V.A.C. RX4TM Therapy System

Das V.A.C.RX4TM Therapy System ermöglicht mit seinen vier einzeln gesteuerten Kanälen die Behandlung von zwei und mehr Wunden.

- Mit SENSAT.R.A.C.TM Technology
- Entwickelt, um unterschiedlichste Wunden zu behandeln
- Für den Einsatz in der Klinik
- Leichte Benutzeroberfläche für komplexe Lazarett- und Traumaversorgung

Vorteile des V.A.C.RX4TM Therapy System

Das V.A.C.RX4TM Therapy System mit einfach zu bedienender Benutzeroberfläche ermöglicht die gleichzeitige Behandlung von bis zu vier Wunden.

Ihr Krankenhaus profitiert von den wirtschaftlichen Vorteilen:

- Niedrigere Anschaffungs-/Mietkosten
- Effektive Behandlung, weil mehrere Wunden mit nur einem Gerät behandelt werden können
- Kürzerer Aufenthalt
- Weniger Pflegeaufwand für Personal
- Weniger Lagerplatzbedarf

Kompatibel mit vielen Ihrer bevorzugten Dressings und Kanister.



Artikelnummer

Produktbeschreibung

Auf Anfrage

V.A.C.RX4TM Therapy System

* Ihr Medizinprodukteberater erteilt Auskunft zur Artikelnummer für Ihr Land.

Produktprofil V.A.C.VIATM Therapy System

Das V.A.C.VIATM Therapy System ist ein kleines, leichtes und tragbares Gerät, das in der Anwendung besonders einfach ist. Produkthighlights:

- SENSAT.R.A.C.TM Technology für zuverlässige Unterdruck-Wundtherapie
- Einwegsystem für die Verwendung bei einem einzelnen Patienten
- Für die ambulante und stationäre Versorgung
- Dynamische Druckkontrolle oder kontinuierlicher Unterdruck (-75 mmHg oder -125 mmHg)
- Schwach exsudierende (<80 ml/Tag), kleine bis mittelgroße Wunden, die gleich groß oder kleiner sind als das V.A.C.VIATM GRANUFOAMTM Dressing, Größe medium



Das V.A.C.VIATM 7-Tage-Set ist eine auf sieben Tage ausgelegte Therapielösung. Ideal für die ambulante Unterdruck-Wundtherapie.

Artikelnummer	Produktbeschreibung	Kit-Inhalt
VIAKIT077D01/*	V.A.C.VIA TM Therapy System, 7-Tage-Set	1 V.A.C.VIA TM Therapy System mit Netzkabel/Ladegerät 3 V.A.C.VIA TM GRANUFOAM TM Spiral Dressing, medium 2 V.A.C.VIA TM Kanister (250 ml) mit Isolyser [®] Gel 1 Wundlineal 1 Transporttasche 1 Bedienungsanleitung
VIAKIT07S05/*	V.A.C.VIA TM Therapie, Starterset	1 V.A.C.VIA TM Therapy System mit Netzkabel/Ladegerät 1 V.A.C.VIA TM GRANUFOAM TM Spiral Dressing, medium 1 V.A.C.VIA TM Kanister (250 ml) mit Isolyser [®] Gel 1 Wundlineal 1 Transporttasche 1 Bedienungsanleitung

* Ihr Medizinprodukteberater erteilt Auskunft zur Artikelnummer für Ihr Land.

Produktprofil V.A.C.® GRANUFOAM™ Dressing

Ein offenporiges, hydrophobes, neuartiges Dressing für den Einsatz in Verbindung mit den V.A.C.® Therapieeinheiten, fördert die Bildung von Granulationsgewebe und führt Exsudat ab. V.A.C.® GRANUFOAM™ Dressings sind für viele unterschiedliche Wundarten geeignet.



V.A.C.® GRANUFOAM™ Dressings und V.A.C.® Therapiesysteme

Ein V.A.C.® GRANUFOAM™ Dressing, das in Verbindung mit der V.A.C.® Therapy angelegt wird, fördert die Bildung von Granulationsgewebe und schafft ein geschlossenes, feuchtes Wundmilieu.

Richtig zugeschnitten passt sich das V.A.C.® GRANUFOAM™ Dressing an die Konturen tiefer oder unregelmäßig geformter Wunden an. Die verschiedenen Größen und Formen sind u.a. auch für verschiedene Überbrückungstechniken und für die Wundentlastung bei Behandlung mehrerer Wunden geeignet.

Artikelnummer	Produktbeschreibung	Kit-Inhalt
M8275051/5	V.A.C.® GRANUFOAM™ Dressing Kit Small, 5er-Pack	1 GRANUFOAM™ Dressing (10 x 7,5 x 3,2 cm), 1 V.A.C.® Folie, 1 SENSAT.R.A.C.™ Pad mit Konnektor, 1 Einweglineal
M8275051/10	V.A.C.® GRANUFOAM™ Dressing Kit Small, 10er-Pack	
M8275052/5	V.A.C.® GRANUFOAM™ Dressing Kit Medium, 5er-Pack	1 GRANUFOAM™ Dressing (18 x 12,5 x 3,2 cm), 2 V.A.C.® Folien, 1 SENSAT.R.A.C.™ Pad mit Konnektor, 1 Einweglineal
M8275052/10	V.A.C.® GRANUFOAM™ Dressing Kit Medium, 10er-Pack	
M8275053/5	V.A.C.® GRANUFOAM™ Dressing Kit Large, 5er-Pack	1 GRANUFOAM™ Dressing (26 x 15 x 3,2 cm), 2 V.A.C.® Folien, 1 SENSAT.R.A.C.™ Pad mit Konnektor, 1 Einweglineal
M8275053/10	V.A.C.® GRANUFOAM™ Dressing Kit Large, 10er-Pack	
M8275065/5	V.A.C.® GRANUFOAM™ Dressing Kit X-Large, 5er-Pack	1 GRANUFOAM™ Dressing (60 x 30 x 1,5 cm), 5 V.A.C.® Folien, 1 SENSAT.R.A.C.™ Pad mit Konnektor, 1 Einweglineal
M8275075/5	V.A.C.® GRANUFOAM™ Round Dressing Kit, 5er-Pack	1 perforiertes GRANUFOAM™ Dressing (Ø 12,7 cm), 1 V.A.C.® Folie, 1 SENSAT.R.A.C.™ Pad mit Konnektor, 1 Einweglineal
M8275075/10	V.A.C.® GRANUFOAM™ Round Dressing Kit, 10er-Pack	
M8275081/5	V.A.C.® GRANUFOAM™ Thin Dressing Kit, 5er-Pack	1 perforiertes GRANUFOAM™ Dressing (26 x 15 x 1,6 cm), 2 V.A.C.® Folien, 1 SENSAT.R.A.C.™ Pad mit Konnektor, 1 Einweglineal
M8275081/10	V.A.C.® GRANUFOAM™ Thin Dressing Kit, 10er-Pack	
M8275064/5	V.A.C.® GRANUFOAM™ Hand Dressing Kit, 5er-Pack	1 handförmiges GRANUFOAM™ Dressing mit Polyurethan-Schaumstoffeinlagen zwischen den Fingern, 1 Versiegelungsbeutel, 1 SENSAT.R.A.C.™ Pad mit Konnektor, 1 Einweglineal
M8275042/5	V.A.C.® GRANUFOAM™ Bridge Dressing Kit, 5er-Pack	1 GRANUFOAM™ Dressing (6 x 17 x 1,9 cm), 1 GRANUFOAM™ Bridge Dressing (67 cm) mit integriertem SENSAT.R.A.C.™ Pad, 1 perforierte V.A.C.® Folie mit vorgestanzten Loch, 1 Einweglineal
M8275042/10	V.A.C.® GRANUFOAM™ Bridge Dressing Kit, 10er-Pack	

* Ihr Medizinprodukteberater erteilt Auskunft zur Artikelnummer für Ihr Land.



Produktprofil V.A.C.® GRANUFOAM SILVER™ Dressing

Offenporiger Schaumstoff aus vernetztem Polyurethan, der in einem eigens entwickelten Metallisierungsprozess mikromechanisch mit metallischem Silber versetzt wurde und das Eindringen von Bakterien unterbindet.

Gründe für die Kombination V.A.C.® Therapy und V.A.C.® GRANUFOAM SILVER™ Dressing bei chronischen, kritisch kolonisierten oder infizierten* Wunden

- Es ist das einzige silberhaltige Dressing, das direkten Kontakt durch die Poren des V.A.C.® GRANUFOAM™ in der Wunde ermöglicht. Dadurch werden zusätzliche Silberauflagen, die den Unterdruck und die Granulation erschweren können, überflüssig.
- Weil das mikrobebundene metallische Silber gleichmäßig im Dressing verteilt ist, steht auch nach dem Zuschneiden des Dressings Silber zur Verfügung.
- Einfache Anwendung: V.A.C.® GRANUFOAM SILVER™ Dressings machen zusätzliche Silberverbände überflüssig.
- Wirksamer Schutz: Eine mikrobiologisch getestete, zuverlässige antibakterielle Barriere. Die Silberionen reduzieren aerobe, gram-negative Bakterien.
- Leichter, einfach abzunehmender Kanister (300 ml)

* Bei Anwendung gemäß klinischem Protokoll sowie in Verbindung mit chirurgischem Débridement und/oder Antibiotika

Artikelnummer	Produktbeschreibung	Kit-Inhalt
M8275098/5	V.A.C.® GRANUFOAM SILVER™ Dressing Kit Small, 5er-Pack	1 GRANUFOAM SILVER™ Dressing (10 x 7,5 x 3,2 cm), 1 V.A.C.® Folie, 1 SENSAT.R.A.C.™ Pad mit Konnektor, 1 Einweglineal
M8275098/10	V.A.C.® GRANUFOAM SILVER™ Dressing Kit Small, 10er-Pack	
M8275096/5	V.A.C.® GRANUFOAM SILVER™ Dressing Kit Medium, 5er-Pack	1 GRANUFOAM SILVER™ Dressing (18 x 12,5 x 3,2 cm), 2 V.A.C.® Folien, 1 SENSAT.R.A.C.™ Pad mit Konnektor, 1 Einweglineal
M8275096/10	V.A.C.® GRANUFOAM SILVER™ Dressing Kit Medium, 10er-Pack	
M8275099/5	V.A.C.® GRANUFOAM SILVER™ Dressing Kit Large, 5er-Pack	1 GRANUFOAM™ Dressing (26 x 15 x 3,2 cm), 2 V.A.C.® Folien, 1 SENSAT.R.A.C.™ Pad mit Konnektor, 1 Einweglineal
M8275099/10	V.A.C.® GRANUFOAM SILVER™ Dressing Kit Large, 10er-Pack	



Produktprofil V.A.C. WHITEFOAM™ Dressing

V.A.C. WHITEFOAM™ ist ein feinporiger Schaumstoff aus hydrophilem Polyvinylalkohol für die Verwendung mit V.A.C.® Therapieeinheiten.

Die Verwendung ist insbesondere dann empfehlenswert, wenn die Granulation unter Kontrolle gehalten werden muss, damit Unannehmlichkeiten beim Verbandswechsel vermieden werden. Empfohlene Anwendungen:

- Fälle, bei denen mit Hypergranulation zu rechnen ist
- Tunnel und Unterminierungen
- Polsterung von Spalthauttransplantaten zur Minimierung von Beschwerden

Gründe für die Kombination V.A.C.® Therapy und V.A.C. WHITEFOAM™ Dressings

- Einfache Entfernung aus Tunneln und Unterminierungen dank höherer Zugfestigkeit
- Offenporiges, nicht retikuliertes Dressing vermindert das Einwachsen von Granulationsgewebe, dadurch weniger Unannehmlichkeiten beim Verbandswechsel
- Als Polster für Hauttransplantate geeignet, weil weniger Haftneigung als beim V.A.C.® GRANUFOAM™ Dressing besteht
- Mit sterilem Wasser befeuchtet

Artikelnummer	Produktbeschreibung	Kit-Inhalt
M6275033/10	V.A.C. WHITEFOAM™ Dressing Small – nur Schaumstoff, 10er-Pack	1 Polyvinylalkohol Dressing (10 x 7,5 x 1 cm)
M6275034/10	V.A.C. WHITEFOAM™ Dressing Large – nur Schaumstoff, 10er-Pack	1 Polyvinylalkohol-Dressing (10 x 15 x 1 cm)
M8275068/5	V.A.C. WHITEFOAM™ Dressing Kit Small, 5er-Pack	1 Polyvinylalkohol-Dressing (10 x 7,5 x 1 cm), 1 V.A.C.® Folie, 1 SENSAT.R.A.C.™ Pad mit Konnektor, 1 Einweglineal
M8275068/10	V.A.C. WHITEFOAM™ Dressing Kit Small, 10er-Pack	
M8275067/5	V.A.C. WHITEFOAM™ Dressing Kit Large, 5er-Pack	1 Polyvinylalkohol-Dressing (10 x 15 x 1 cm), 1 V.A.C.® Folie, 1 SENSAT.R.A.C.™ Pad mit Konnektor, 1 Einweglineal
M8275067/10	V.A.C. WHITEFOAM™ Dressing Kit Large, 10er-Pack	



Produktprofil V.A.C.® SIMPLACE™ EX Dressing Kits

V.A.C.® SIMPLACE™ EX Dressings vereinfachen die Verbandsanlage in Verbindung mit der V.A.C.® Therapy. V.A.C.® SIMPLACE™ EX Dressing ist ein offenporiger, hydrophober Polyurethanschäum für den Einsatz in Verbindung mit V.A.C.® Therapieeinheiten, welcher die Bildung von Granulationsgewebe fördert und Exsudat abtransportiert.

Gründe für die Kombination V.A.C.® Therapy und V.A.C.® SIMPLACE™ EX Dressings

V.A.C.® SIMPLACE™ Dressings wurden entwickelt, um Anwendern die Verbandsanlage zu erleichtern. Der spiralförmig geschnittene Schaumstoff lässt sich ohne Schere unkompliziert anpassen. Weil weniger Arbeitsschritte anfallen, kann der Verband schneller angelegt werden.

Artikelnummer	Produktbeschreibung	Kit-Inhalt
M8275046/5	V.A.C.® SIMPLACE™ EX Dressing Kit Small, 5er-Pack	2 spiralförmige GRANUFOAM™ Dressings (7,7 x 11,2 x 1,75 cm), 2 Streifen V.A.C.® Folie, 1 SENSAT.R.A.C.™ Pad mit Konnektor, 1 Einweglineal
M8275045/5	V.A.C.® SIMPLACE™ EX Dressing Kit Medium, 5er-Pack	2 spiralförmige GRANUFOAM™ Dressings (14,7 x 17,4 x 1,75 cm), 2 Klebestreifen und 1 V.A.C.® Folie, 1 SENSAT.R.A.C.™ Pad mit Konnektor, 1 Einweglineal

Artikelnummer	Produktbeschreibung	Kit-Inhalt	
M8275063/5	INFOV.A.C.™ /V.A.C.ULTA™ 500 ml Kanister mit Gel, 5er-Pack	1 500-ml-Kanister (steril) mit SENSAT.R.A.C.™ Schläuchen, Klemme und Konnektor	
M8275063/10	INFOV.A.C.™ /V.A.C.ULTA™ 500 ml Kanister mit Gel, 10er-Pack	In Verbindung mit V.A.C.ULTA™ / INFOV.A.C.™ Unterdruck-Wundtherapiesystem	
M8275093/5	INFOV.A.C.™ /V.A.C.ULTA™ 1000 ml Kanister mit Gel, 5er-Pack	1 1000-ml-Kanister (steril) mit SENSAT.R.A.C.™ Schläuchen, Klemme und Konnektor In Verbindung mit V.A.C.ULTA™ / INFOV.A.C.™ Unterdruck-Wundtherapiesystem	
M8275058/5	300 ml ACTIV.A.C.® Kanister mit Gel, 5er-Pack	1 Kanister (steriler Flüssigkeitsweg) mit SENSAT.R.A.C.™ Schläuchen, Klemme und Konnektor	
M8275058/10	300 ml ACTIV.A.C.® Kanister mit Gel, 10er-Pack	Geeignet für ACTIV.A.C.™ und V.A.C. SIMPLICITY™ Therapiesysteme	
M8275057/10	SENSAT.R.A.C.™, nur Pad, 10er-Pack	1 SENSAT.R.A.C.™ Pad, geeignet für alle V.A.C. Dressings und Therapiegeräte Nicht geeignet für V.A.C. VERAFO™ Therapy	
M6275009/10	V.A.C.® Folie, 10er-Pack	1 Folie klebend (30,5 x 26 cm) Geeignet für alle V.A.C. Therapy Dressings und Therapiegeräte. Nicht geeignet für V.A.C. VERAFO™ Therapy	

Artikelnummer	Produktbeschreibung	Kit-Inhalt	
M6275066/5	V.A.C.® Y-Konnektor, 5er-Pack	1 V.A.C.® Y-Konnektor	
M6275066/10	V.A.C.® Y-Konnektor, 10er-Pack	Für alle V.A.C.® Therapiesysteme geeignet	
M6275069/5	V.A.C.® Schlauchkappe, 5er-Pack	1 V.A.C.® Schlauchkappe	
M6275069/10	V.A.C.® Schlauchkappe, 10er-Pack	Für alle V.A.C.® Therapiesysteme geeignet	
M6275026/10	V.A.C.® Gel Hydrogelstreifen, 10er-Pack	10 beidseitig klebende Hydrogelstreifen (14 x 3 cm) Für alle V.A.C.® Therapiesysteme geeignet	
416030	ACTIV.A.C.™ Tasche	1 ACTIV.A.C.™ Tasche In Verbindung mit dem ACTIV.A.C.™ Unterdruck-Wundtherapiesystem	

V.A.C.VIA™ GRANUFOAM™ Spiral-Dressing Kits und Zubehör

Ein offenporiger, hydrophober, neuartiger Wundverband für den Einsatz in Verbindung mit der V.A.C. VIA™ Therapy System, fördert die Bildung von Granulationsgewebe und führt Exsudat ab.



Artikelnummer	Produktbeschreibung	Kit-Inhalt
VIAGFS05	V.A.C.VIA™ GRANUFOAM™ Spiral-Dressing Kit Small, 5er-Pack	2 GRANUFOAM™ Small Spiral Dressings, 2 V.A.C.® Advanced Folien, 1 SENSAT.R.A.C.™ Pad, 1 Packung 3M™ Cavilon™ Reizfreier Hautschutz, 1 Lineal
VIAGFS05/NSP	V.A.C.VIA™ GRANUFOAM™ Spiral-Dressing Kit Small, 5er-Pack	2 GRANUFOAM™ Small Spiral Dressings, 2 V.A.C.® Advanced Folien, 1 SENSAT.R.A.C.™ Pad, 1 Lineal
VIAGFM05	V.A.C.VIA™ GRANUFOAM™ Spiral-Dressing Kit Medium, 5er-Pack	2 GRANUFOAM™ Medium Spiral Dressings, 3 V.A.C.® Advanced Folien, 1 SENSAT.R.A.C.™ Pad, 1 Packung 3M™ Cavilon™ Reizfreier Hautschutz, 1 Lineal
VIAGFM05/NSP	V.A.C.VIA™ GRANUFOAM™ Spiral-Dressing Kit Medium, 5er-Pack	2 GRANUFOAM™ Medium Spiral Dressings, 3 V.A.C.® Advanced Folien, 1 SENSAT.R.A.C.™ Pad, 1 Lineal
VIACAN05	V.A.C.VIA™ Kanister, 5er-Pack	250 ml Fassungsvermögen, mit Isolyser®



V.A.C. VERAFL0™ Dressing Kits



Produktprofil V.A.C. VERAFL0™ Therapy

V.A.C. VERAFL0™ Therapy verbindet die Vorteile einer Unterdruck-Wundtherapie (V.A.C.® Therapie) mit automatisierter, kontrollierter Instillation und Ableitung topischer Wundspüllösungen zum und vom Wundgrund. Die Therapie erfolgt in automatischen Instillationszyklen. Dabei wird die Wunde wiederholt gereinigt, ohne dass dafür das Dressing entfernt werden muss.

Gründe für die Kombination V.A.C. VERAFL0™ Dressings und V.A.C. VERAFL0™ Therapy

- Abtransport von infektiösem Material und anderer Keimbelastung
- Alternative, wenn Granulation und Reinigung wichtig sind
- Verwenden Sie V.A.C. VERAFL0™ Dressings für offene Wunden, wenn neben effektiver Wundreinigung die Granulation Hauptziel der Therapie ist.

Artikelnummer	Produktbeschreibung	Kit-Inhalt
ULTVFL05SM	V.A.C. VERAFL0™ Dressing Small, 5er-Pack	2 Schaumverbände (11 x 8 x 1,8 cm), 2 V.A.C.® Advanced Folien, 1 Packung 3M™ Cavilon™ Reizfreier Hautschutz, 1 V.A.C. VERAT.R.A.C.™ Pad, 1 Einweglineal/Schaumstoff-Mengenetikett
ULTVFL05MD	V.A.C. VERAFL0™ Dressing Medium, 5er-Pack	2 Schaumverbände (17 x 15 x 1,8 cm), 3 V.A.C.® Advanced Folien, 2 Packungen 3M™ Cavilon™ Reizfreier Hautschutz, 1 V.A.C. VERAT.R.A.C.™ Pad, 1 Einweglineal/Schaumstoff-Mengenetikett
ULTVFL05LG	V.A.C. VERAFL0™ Dressing Large, 5er-Pack	2 Schaumverbände (25 x 15 x 1,6 cm), 5 V.A.C.® Advanced Folien, 4 Packungen 3M™ Cavilon™ Reizfreier Hautschutz, 1 V.A.C. VERAT.R.A.C. DUO™ Tube Set, 1 Einweglineal/Schaumstoff-Mengenetikett



V.A.C. VERAFL0 CLEANSE™ Dressing Kits



Produktprofil V.A.C. VERAFL0 CLEANSE™ Dressing

Dieses für die V.A.C. VERAFL0™ Therapy entwickelte Dressing sorgt für eine gleichmäßige Verteilung und Ableitung topischer Wundspüllösungen aus dem Wundbett.

Dieses Dressing wird für Patienten empfohlen, bei denen in der aktuellen Wundheilungsphase nicht die Granulation, sondern eine effektive Wundreinigung – vor allem in Wundhöhlen oder Wunden mit komplexen Geometrien – gewünscht ist.

Gründe für die Kombination V.A.C. VERAFL0 CLEANSE™ Dressings und V.A.C. VERAFL0™ Therapy

- Leitet die Wundreinigung durch die Abführung von infektiösem Material und anderer Keimbelastungen ein
- Einfache Anwendung in Tunneln und Unterminierungen
- Verwenden Sie V.A.C. VERAFL0 CLEANSE™ Dressings, wenn Sie Wunden mit komplexen Geometrien behandeln, z. B. explorierte Tunnel oder Unterminierungen, in denen die distale Seite nicht sichtbar ist.

Artikelnummer	Produktbeschreibung	Kit-Inhalt
ULTVCL05MD	V.A.C. VERAFL0 CLEANSE™ Dressing Medium, 5er-Pack	1 Schaumverband (Ø 61 x 3,2 cm), 3 V.A.C.® Advanced Folien, 2 Packungen 3M™ Cavilon™ Reizfreier Hautschutz, 1 V.A.C. VERAT.R.A.C.™ Pad, 1 Einweglineal/Schaumstoff-Mengenetikett

Ihre Ausstattung für den Therapiestart!



V.A.C. ULTA™ Therapy System



V.A.C. ULTA™ Kanister 1000 ml



V.A.C. VERALINK™ KASSETTE




Topische Wundlösung, Kochsalzlösung



V.A.C. VERAFL0™ Dressing **oder** V.A.C. VERAFL0 CLEANSE™ Dressing **oder** V.A.C. VERAFL0 CLEANSE CHOICE™ Dressing



V.A.C. VERAFO CLEANSE CHOICE™ Dressing Kits

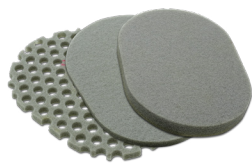

Produktprofil V.A.C. VERAFO CLEANSE CHOICE™ Dressing

Das V.A.C. VERAFO CLEANSE CHOICE™ Dressing in Kombination mit V.A.C. VERAFO™ Therapy dient zur Wundreinigung, fördert die Wundheilung und führt infektiöses Material ab.

Vorteile des V.A.C. VERAFO CLEANSE CHOICE™ Dressings und der V.A.C. VERAFO™ Therapy

- Führt mechanische Bewegungen auf der Wundoberfläche aus und ermöglicht die Verabreichung und Einwirkung topischer Lösungen zur Unterstützung des Abtransports von viskösem Wundexsudat, z. B. Fibrin, Schorf und anderen infektiösen Materialien
- Bietet Anwendern eine Alternative zur Reinigung von komplexen Wunden, wenn ein chirurgisches Débridement nicht möglich oder sinnvoll ist

Artikelnummer Produktbeschreibung Kit-Inhalt

ULTVCC05MD	V.A.C. VERAFO CLEANSE CHOICE™ Dressing Medium, 5er-Pack	V.A.C. VERAFO CLEANSE CHOICE™ Dressing (3-lagig) 18 x 12,5 cm x unterschiedliche Dicke (0,8–1,6 cm), 4 V.A.C.® Advanced Folien, 4 Packungen 3M™ CAVILON™ Reizfreier Hautschutz, 1 V.A.C. VERAT.R.A.C.™ Pad, 1 Einweglineal/Schaumstoff-Mengenetikett
ULTVCC05LG	V.A.C. VERAFO CLEANSE CHOICE™ Dressing Large, 5er-Pack	V.A.C. VERAFO CLEANSE CHOICE™ Dressing (3-lagig) 25,6 x 15,0 cm x unterschiedliche Dicke (0,8–1,6 cm), 6 V.A.C.® Advanced Folien, 5 Packungen 3M™ CAVILON™ Reizfreier Hautschutz, 1 V.A.C. VERAT.R.A.C. DUO™ Tube Set, 1 Einweglineal/Schaumstoff-Mengenetikett

V.A.C. VERAFO™ Therapiezubehör

ULTLNK0500	V.A.C. VERALINK™ Kassette, 5er-Pack Die V.A.C. VERALINK™ Instillationskassette verbindet den Lösungsbeutel/die Lösungsflasche und den Verbandsschlauch mit der V.A.C. ULTA™ Therapieeinheit. Die Kassette steuert die Abgabe der Instillationslösung und fördert diese zum Wundgrund.	1 Kassette mit Instillationsschlauch 
ULTDUO0500	V.A.C. VERAT.R.A.C. DUO™ Schlauchset, 5er-Pack Das V.A.C. VERAT.R.A.C. DUO™ Schlauchset enthält zwei Pads: das Instillationspad für die Flüssigkeitsinstillation und das SENSAT.R.A.C.™ Pad für die Entfernung des Exsudats und Druckmessung an der Wunde. Dieses Set verfügt auch über die SENSAT.R.A.C.™ Technologie, die den Druck an der Wundstelle überwacht und entsprechend anpasst.	1 Schlauchset mit zwei Pads, speziell für V.A.C. VERAFO™ Therapy 

* Ihr Medizinprodukteberater erteilt Auskunft zur Artikelnummer für Ihr Land.



Produktprofil SNAP™ Therapy System

Das SNAP™ Therapy System ist ein kleines, leichtes Unterdruck-Wundtherapie-Einmalgerät für die Anwendung über sieben Tage.

Das SNAP™ Therapy System ist zur Behandlung von Patienten indiziert, die von einer Wundbehandlung mit Unterdruck, insbesondere von der Unterstützung der Wundheilung durch die Entfernung kleiner Exsudatmengen, profitieren. Produktmerkmale:

- Proprietärer Sprungfedermechanismus, der gleich bleibenden Unterdruck erzeugt
- Therapieeinheiten mit unterschiedlich starkem Unterdruck
- Mechanisch betriebene Therapie mit Kanister
- Einweggerät, schnelle und einfache Anwendung
- Weniger als 10 Minuten Verbandsanlage
- Klein, lautlos, diskret und leicht



Vorteile des SNAP™ Therapy Systems

Mechanisch betrieben und tragbar – Patientenmobilität bleibt erhalten
Diskret und minimalinvasiv – Lebensqualität des Patienten bleibt erhalten
Kontinuierlich – ermöglicht eine kontinuierliche Therapie
Nur für einen Patienten – sofort für medizinisches Fachpersonal verfügbar
Geräuschlos – Schlaf- und Lebensqualität des Patienten bleiben erhalten

Bestellhinweise SNAP™ Therapy System

Für Erstanwendung:



Zusätzlich können Sie auch folgendes Zubehör bestellen:



* Ihr Medizinprodukteberater erteilt Auskunft zur Artikelnummer für Ihr Land.

SNAP™ Therapiekartusche und SNAP PLUS™ Therapiekartusche

Artikelnummer	Produktbeschreibung
SNPA125	SNAP™ Therapiekartusche 125 mmHg, 60 ml
SNPA100	SNAP™ Therapiekartusche 100 mmHg, 60 ml
SNPA075	SNAP™ Therapiekartusche 75 mmHg, 60 ml
SNPA125P	SNAP PLUS™ Therapiekartusche 125 mmHg, 150 ml



SNAP™ Therapie Advanced Dressing Kits

Artikelnummer	Produktbeschreibung	Kit-Inhalt
SKTF10X10	SNAP™ Advanced Dressing Kit (Schaumstoff) – 10 x 10 cm	SNAP™ Advanced Hydrokolloidverband 10 x 10 cm, mit Schaumstoff-Wundfüller (8 x 8 cm)
SKTF15X15	SNAP™ Advanced Dressing Kit (Schaumstoff) – 15 x 15 cm	SNAP™ Advanced Hydrokolloidverband 15 x 15 cm, mit Schaumstoff-Wundfüller (13 x 13 cm)
SKTF20X20	SNAP™ Advanced Dressing Kit (Schaumstoff) – 20 x 20 cm	SNAP™ Advanced Hydrokolloidverband 20 x 20 cm, mit Schaumstoff-Wundfüller (18 x 18 cm)



SNAP™ Bridge Dressing Kit

Artikelnummer	Produktbeschreibung	Kit-Inhalt
BKTF14X11	SNAP™ Bridge Dressing Kit	SNAP™ Advanced Hydrocolloid Bridge Dressing (14 x 11 cm) und Schaumstoff-Wundfüller (8 x 8 cm)
BKTF14X11S	SNAP™ Bridge Dressing Kit und SNAP™ SecurRing™ aus Hydrokolloid	SNAP™ Advanced Hydrocolloid Bridge Dressing (14 x 11 cm), Schaumstoff-Wundfüller (8 x 8 cm) und 1 SNAP™ SecurRing™ aus Hydrokolloid



SNAP™ SecurRing™ aus Hydrokolloid

Artikelnummer	Produktbeschreibung	Kit-Inhalt
SRNG10	SNAP™ SecurRing™ aus Hydrokolloid, 10er-Pack	Hydrokolloid-Ring, Ø 10 x 5 cm




* Ihr Medizinprodukteberater erteilt Auskunft zur Artikelnummer für Ihr Land.

SNAP™ Therapie Halterungen

Artikelnummer	Produktbeschreibung	Kit-Inhalt
STPAS	SNAP™ Therapie Halterung – klein	Befestigungsriemen für 65-ml-Kartusche, 46 cm – klein
STPAM	SNAP™ Therapie Halterung – medium	Befestigungsriemen für 65-ml-Kartusche, 53 cm – medium
STPAL	SNAP™ Therapie Halterung – groß	Befestigungsriemen für 65-ml-Kartusche, 61 cm – groß
STPASP	SNAP PLUS™ Therapie Halterung – klein	Befestigungsriemen für 150-ml-Kartusche, 46 cm – klein
STPAMP	SNAP PLUS™ Therapie Halterung – medium	Befestigungsriemen für 150-ml-Kartusche, 53 cm – medium
STPALP	SNAP PLUS™ Therapie Halterung – groß	Befestigungsriemen für 150-ml-Kartusche, 61 cm – groß

WUNDKRITERIEN/KLINISCHE ÜBERLEGUNGEN

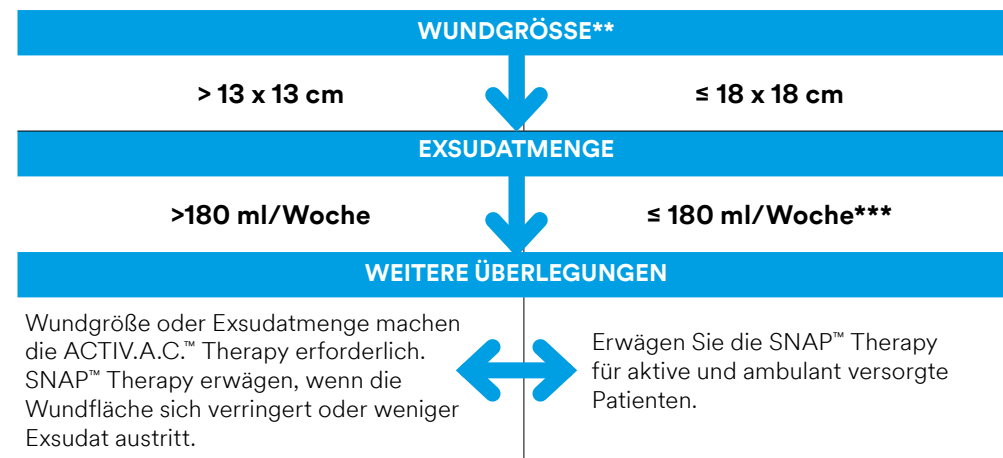

Diese Wundkriterien/klinischen Überlegungen sollen bei der Entscheidung unterstützen, wann SNAP™ Therapy oder ACTIV.A.C.™ Therapy zum Einsatz kommen soll. Letztendlich hängt die Entscheidung aber von der Einschätzung und der Erfahrung des behandelnden Arztes ab.

* Ihr Medizinprodukteberater erteilt Auskunft zur Artikelnummer für Ihr Land.

** Falls Wundgröße > 13 x 13 cm und zugleich ≤ 18 x 18 cm, ist die Exsudatmenge ausschlaggebend

*** Dressinggröße 20 x 20 cm

Produktprofil NANOVA™ Therapy System

Ein moderner Wundverband mit -125 mmHg
Unterdruck-Unterstützung

Das NANOVA™ Therapy System ist ein einfaches
Unterdrucktherapiesystem zur Behandlung kleiner bis
mittelgroßer Wunden mit geringen Exsudatmengen.



Vorteile des NANOVA™ Therapy System

Patientenfreundlich: Die DERMATAC™ Folie in der NANOVA™ Wundauflage lässt sich leicht neu positionieren und entfernen. Dadurch entstehen in der Wundumgebung nur minimale Traumata.

Anwenderfreundlich: Die Anlage der NANOVA™ Therapy System ist einfach und intuitiv. Die Einheit kann ohne aufwendige Schulung eingesetzt werden, Einwegkomponenten können leicht nachbestückt werden.

Kosteneffektiver Einmalgebrauch: Das NANOVA™ Therapy System ist mit 30 Tagen Betriebsdauer und separat erhältlichen Wundauflagen eine kosteneffektive Lösung.

Artikelnummer	Produktbeschreibung	Kit-Inhalt
NANTU	NANOVA™ Therapy System	1 mechanisch betriebene Unterdruck-Therapieeinheit
NANGFS	NANOVA™ Wundauflage 18 x 14 cm – klein, 3er-Pack	3 x saugfähige Wundauflage mit Silikon und Acrylhaftstoff, klein, 3 x GRANUFOAM Wundfüller
NANGFM	NANOVA™ Wundauflage 18 x 18 cm – medium, 3er-Pack	3 x saugfähige Wundauflage mit Silikon und Acrylhaftstoff, klein, 3 x GRANUFOAM Wundfüller
NANGFL	NANOVA™ Wundauflage 18 x 28 cm – groß, 3er-Pack	3 x saugfähige Wundauflage mit Silikon und Acrylhaftstoff, klein, 3 x GRANUFOAM Wundfüller



Produktprofil PREVENA™ Incision Management System

Das PREVENA™ Incision Management System für geschlossene chirurgische Inzisionen ist eine Lösung zur Prävention von Komplikationen an der Eingriffsstelle:

- Hält Inzisionsränder zusammen
- Abführung von Flüssigkeiten und infektiösem Material
- Reduktion von Gewebespannungen und Ödemen
- Schutz gegen Kontamination
- Bis zu sieben Tage kontinuierlicher Unterdruck von -125 mmHg



PREVENA PEEL & PLACE™ System Kits

Artikelnummer	Produktbeschreibung	Komponenten
PRE1101	PREVENA PEEL & PLACE™ System Kit – 13 cm (für lineare Inzisionen bis 13 cm)	PREVENA PEEL & PLACE™ Dressing – 13 cm, PREVENA™ 125 Therapieeinheit, PREVENA™ Kanister 45 ml, PREVENA™ Tasche, V.A.C.® Therapy Konnektor, Wundlineal
PRE1001	PREVENA PEEL & PLACE™ System Kit – 20 cm (für lineare Inzisionen bis 20 cm)	PREVENA PEEL & PLACE™ Dressing – 20 cm, PREVENA™ 125 Therapieeinheit, PREVENA™ Kanister 45 ml, PREVENA™ Transporttasche, V.A.C.® Therapy Konnektor, Wundlineal
PRE3201	PREVENA PLUS™ PEEL & PLACE™ System Kit – 35 cm (für lineare Inzisionen bis 35 cm)	PREVENA PEEL & PLACE™ Dressing – 35 cm, PREVENA PLUS™ Therapieeinheit, PREVENA PLUS™ Kanister 150 ml mit PREVENA PLUS™ Konnektor, PREVENA PLUS™ Tasche, PREVENA PLUS™ Netzkabel und Adapter, Konnektor für V.A.C.® Therapieeinheit, Wundlineal

Vorteile des PREVENA™ Incision Management System

Klinisch effektiv:

Zu keinem anderen Incision Management System gibt es so viel klinische Evidenz wie zur PREVENA™ Therapy.

Optimierte Ergebnisse:

Der austauschbare Kanister sammelt infektiöses Material/Exsudat von der Inzisionsstelle. Ein Anteil von 0,019 % ionischem Silber auf der hautfreundlichen Wundkontaktschicht hemmt die bakterielle Kolonisation. Der Unterdruck (-125 mmHg) und der offenporige Schaumstoff verringert Spannungen und hält die Inzisionsränder zusammen.

Anwenderfreundlich:

PREVENA PEEL & PLACE™ – einfach Folie abziehen, auf die Inzision platzieren und andrücken. Um mit der Therapie zu beginnen, muss nur eine Taste gedrückt werden.

Postoperative Patientenbetreuung:

Setzen Sie bei Patienten, bei denen mit Komplikationen an der Eingriffsstelle zu rechnen ist, die Therapie außerhalb des OPs fort.

Patientenfreundlich:

Weil das leichte tragbare Gerät in häuslicher Umgebung bis zu sieben Tage lang ohne Verbandwechsel getragen werden kann, werden im Krankenhaus wertvolle Ressourcen freigesetzt.

PREVENA PEEL & PLACE™ Dressing Kits und Zubehör

Artikelnummer	Produktbeschreibung	
PRE1155	PEEL & PLACE™ Dressing – 13 cm, 5er-Pack Geeignet für PREVENA™ Therapy System, ACTIV.A.C.™ Therapy System oder V.A.C. ULTA™ 4 Therapy System	
PRE1055	PEEL & PLACE™ Dressing – 20 cm, 5er-Pack Geeignet für PREVENA™ Therapy System, ACTIV.A.C.™ Therapy System oder V.A.C. ULTA™ 4 Therapy System	
PRE3255	PEEL & PLACE™ Dressing – 35 cm, 5er-Pack Geeignet für PREVENA PLUS™ Therapy System, ACTIV.A.C.™ Therapy System oder V.A.C. ULTA™ 4 Therapy System	
PRE1095	PREVENA™ Kanister 45 ml, 5er-Pack	
PRE9090	PREVENA™ Therapy V.A.C.® Konnektor, 10er-Pack, zum Anschließen von PREVENA PEEL & PLACE™ an zugelassene V.A.C. Therapieeinheiten V.A.C.™, V.A.C.ULTA™ 4 Therapy	

Produktprofil PREVENA PLUS™

Incision Management System

Das PREVENA PLUS™ Incision Management System bietet alle Vorteile des PREVENA™ Incision Management System und ist darüber hinaus für lineare, nicht-lineare und sich kreuzende chirurgische Inzisionen mit bis zu 90 cm Länge geeignet.



Artikelnummer	Produktbeschreibung	Komponenten
PRE4001	PREVENA PLUS CUSTOMIZABLE™ System Kit Für nicht-lineare Inzisionen und lineare Inzisionen bis 90 cm	PREVENA CUSTOMIZABLE™ Dressing mit Hydrokolloid, SENSAT.R.A.C.™ Pad, V.A.C.® Folie, Wundlineal, Hydrokolloid-Streifen, PREVENA PLUS™ Kanister 150 ml mit PREVENA PLUS™ Konnektor, PREVENA PLUS™ 125 Therapieeinheit, PREVENA PLUS™ Tasche, PREVENA PLUS™ Therapieeinheit mit Netzkabel und Adapter
PRE4055	PREVENA PLUS CUSTOMIZABLE™ Dressing Kit, 5er-Pack Für nicht-lineare Inzisionen und lineare Inzisionen bis 90 cm	PREVENA CUSTOMIZABLE™ Dressing mit Hydrokolloid, SENSAT.R.A.C.™ Pad, 4 V.A.C.® Folien, Wundlineal, Hydrokolloid-Streifen
PRE4095	PREVENA PLUS™ Kanister 150 ml mit PREVENA PLUS™ Konnektor, 5er-Pack	Kanister 150 ml mit PREVENA PLUS™ Konnektor

* Ihr Medizinprodukteberater erteilt Auskunft zur Artikelnummer für Ihr Land.

Produktprofil PREVENA DUO™

Incision Management System

Das PREVENA DUO™ Incision Management System ermöglicht das Management von zwei geschlossenen chirurgischen Inzisionen (mit bis zu 13 cm Länge) mit nur einer Therapieeinheit. Ideal für Brustchirurgie und Gefäßchirurgie.



Artikelnummer	Produktbeschreibung	Komponenten
PRE1121	PREVENA DUO™ System mit PEEL & PLACE™ Dressings – 13 cm	PREVENA™ 125 Therapieeinheit, 2 x PEEL & PLACE™ Dressings – 13 cm, PREVENA™ Y-Konnektor, PREVENA™ Klebestreifen, PREVENA™ Kanister 45 ml, PREVENA™ Tasche für 125 Therapieeinheit, PREVENA™ Therapy V.A.C.® Konnektor, Wundlineal

* Ihr Medizinprodukteberater erteilt Auskunft zur Artikelnummer für Ihr Land.

Produktprofil ABTHERA™ Therapy System zur Versorgung des offenen Abdomens

Das ABTHERA™ Dressing für das offene Abdomen bildet, wenn es mit einer kompatiblen V.A.C.® Therapieeinheit verwendet wird, ein effektives System für den temporären Bauchdeckenverschluss. Die Chirurgen können so frühzeitig die Behandlung von schwierigen offenen Abdomen kontrollieren und so einen primären Faszienverschluss durchführen.



Vorteile des ABTHERA™ Therapy Systems zur Versorgung des offenen Abdomens

- Aktive Entfernung von Flüssigkeiten und Ödemreduzierung^{1,2}
- Unterstützt eine mediale Tension und verringert eine Faszienretraktion und den Schwund des Faszienbereichs³
- Isoliert die inneren Organe und den Abdomeninhalt von der äußeren Umgebung
- Unterstützt eine Separation der Abdomenwand von den inneren Organen
- Ermöglicht einen schnellen Zugang bei erneutem Eingriff und kommt ohne Fixierungsnähte aus

Artikelnummer	Produktbeschreibung	Komponenten
M8275026/5	ABTHERA™ Dressing Kit mit SENSAT.R.A.C.™ Technologie, 5er-Pack	ABTHERA™ Viszeralschutz, ABTHERA™ perforierter PU-Schaumstoff, V.A.C.® Folien, SENSAT.R.A.C.™ Pad und Schlauch

Produktprofil ABTHERA ADVANCE™ Dressing für das OFFENE ABDOMEN

ABTHERA ADVANCE™ ist ein perforierter Schaumstoff, der aufgrund seiner einzigartigen Konfiguration unter Unterdruck medial kollabiert, ohne dabei vertikale Steifigkeit einzubüßen. Das Dressing zieht aktiv die Wundränder zusammen.



Präklinische Evidenz

In einer Vergleichsstudie wurden vier gesunde Schweine mit offener abdominaler Wunde mit ABTHERA™ SENSAT.R.A.C.™ OA Dressing oder ABTHERA ADVANCE™ Dressing behandelt. Der Unterdruck betrug -125 mmHg, die Behandlungsdauer 5 Minuten. Das ABTHERA ADVANCE™ Dressing bewirkte folgende Veränderungen:

31 % mehr Gewebebewegung⁴ ($N= 82, p < 0,05$)

39 % mehr Hautbewegung⁴ ($N= 42, p < 0,05$)

20 % mehr Faszienbewegung⁴ ($N= 40, p < 0,05$)

UNVERÄNDERTER intra-abdominaler Druck bei Unterdruckbehandlung im Rahmen der Studie⁴

Artikelnummer	Produktbeschreibung	Komponenten
ABT1055	ABTHERA ADVANCE™ Dressing für das offene Abdomen, 5er-Pack für die Unterdrucktherapie mit der V.A.C.ULTA™ 4 Therapieeinheit	ABTHERA™ Viszeralschutz, ABTHERA ADVANCE™ perforierter PU-Schaumstoff, V.A.C.® Folien, SENSAT.R.A.C.™ Pad und Schlauch

Produktprofil 3M™ Cavilon Advanced Skin Protectant™ – Hochleistungsfähiger Hautschutz

3M™ Cavilon™ Advanced Skin Protectant bildet einen hochbeständigen, extrem dünnen, durchsichtigen Schutzfilm, der verhindert, dass die Haut durch Körperflüssigkeiten beschädigt wird. Der Schutzfilm haftet auf feuchter Haut und bildet ein schützendes Milieu, das die Wundheilung unterstützt und Schmerzen lindert, die im Zusammenhang mit Hautschäden durch Urin und/oder Stuhl auftreten.⁵ Das Produkt eignet sich auch zur Abdeckung teilweise verhärteter Läsionen.



Vorteile des 3M™ Cavilon™ Advanced Skin Protectant

- Muss nur zweimal pro Woche aufgetragen werden⁵
- Haftet auf feuchter, nässender Haut⁵
- Einwegapplikator senkt das Risiko einer Kreuzkontamination
- Lindert Schmerzen bei der Versorgung von IAD⁵
- Atmungsaktiv und wasserdampfdurchlässig, sodass die Haut angenehm trocken bleibt
- Bildet ein Milieu, das die Heilung fördert⁶

Artikelnummer	Produktname	Größe	Stk./Pkg.	Kartons/Ver-sandeinheiten
5050G	3M™ Cavilon™ Advanced Hautschutz	2,7 ml	20	1
	Applikator (steril)			

Produktprofil 3M™ Cavilon™ Reizfreier Hautschutz

Cavilon Reizfreier Hautschutz ist ein lang anhaltender, alkoholfreier Hautschutzfilm, der einen hauchdünnen, atmungsaktiven Acrylat-Terpolymerfilm auf der Haut bildet, um diese vor Reibung sowie vor Verletzungen durch medizinische Klebstoffe und Körperflüssigkeiten (wie Urin und/oder Stuhl oder Wundexsudat) zu schützen.



Vorteile von 3M™ Cavilon™ Reizfreier Hautschutz

- Brennt nicht, selbst auf geschädigter oder gereizter Haut⁷
- Verstopft nicht die Poren von schützenden Inkontinenzeinlagen⁸
- Kosteneffektiv – bis zu 72 Stunden Schutz⁹
- Transparent – ermöglicht ein ungestörtes Beobachten der Haut
- Kompatibel mit Produkten zur Hautvorbereitung (z. B. Chlorhexidingluconat und Povidon-Iod)¹⁰
- Ist eine gute Grundlage für klebende Materialien wie Pflaster, Verbände oder medizinische Geräte¹⁰
- Wasserdampfdurchlässig
- Muss zwischen den Applikationen nicht entfernt werden

Bestellangaben für Krankenhäuser

Bestellcode 3M*	Produktname	Größe	Stk./Pkg.	Kartons/Ver- sandeinheiten
3343E	3M™ Cavilon™ Reizfreier Hautschutz, Schaumstoffapplikator (steril)	1 ml	25	4
3344E	3M™ Cavilon™ Reizfreier Hautschutz, Tuch (steril)	1 ml	30	6
3345E	3M™ Cavilon™ Reizfreier Hautschutz, Schaumstoffapplikator (steril)	3 ml	25	4
3346E	3M™ Cavilon™ Reizfreier Hautschutz, Sprühflasche (Pumpbetätigung)	28 ml	12	1

Bestellinformationen

Artikelnummer	Produktname	Größe	Stk./Pkg.	Kartons/Ver- sandeinheiten
3343P	3M™ Cavilon™ Reizfreier Hautschutz, Schaumstoffapplikator (steril)	1 ml	5	20
3344E	3M™ Cavilon™ Reizfreier Hautschutz, Tuch (steril)	1 ml	30	6
3345P	3M™ Cavilon™ Reizfreier Hautschutz, Schaumstoffapplikator (steril)	3 ml	5	20
3346P	3M™ Cavilon™ Reizfreier Hautschutz, Sprühflasche (Pumpbetätigung)	28 ml	1	12

**Indikationen 3M™ Cavilon™
Advanced Skin Protectant**

Anwendungsbereiche: Das Hautschutzprodukt Cavilon Advanced bildet auf intakter und geschädigter Haut einen Schutzfilm. Das Produkt ist besonders wirksam, wenn die Haut häufig oder dauerhaft Feuchtigkeit und ätzenden Reizstoffen wie Fäkalien, Verdauungsflüssigkeiten, Wundexsudation und Urin ausgesetzt ist. Das Hautschutzprodukt Cavilon Advanced eignet sich auch für Hautpartien, auf denen Bettzeug, Kleidung, Schuhe und andere Materialien Reibung und Scherbelastung verursachen.

**Kontraindikationen 3M™
Hautschutzprodukt Cavilon™
Advanced**

Das Cavilon Advanced Skin Protectant darf bei folgenden Indikationen NICHT eingesetzt werden:

- Als Wundverband für tiefe Wunden
- Auf/am Auge

**Indikationen 3M™ Cavilon™
Reizfreier Hautschutz**

Cavilon Reizfreier Hautschutz ist eine Flüssigkeit, die nach dem Auftragen

auf intakter oder geschädigter Haut einen lang anhaltenden, atmungsaktiven, wasserundurchlässigen Schutzfilm bildet, der die Haut vor Flüssigkeiten und Reizstoffen schützt. Der Hautschutz ist die Primärbarriere gegen reizverursachende Körperflüssigkeiten.

- Hautschutz in der Wundumgebung
- Peristomaler Hautschutz
- Peritubaler Hautschutz
- Schutz vor Klebstoff
- Inkontinenzschutz

Das Produkt eignet sich für Erwachsene, Kinder und Säuglinge im Alter von über einem Monat.

**Kontraindikationen 3M™
Cavilon™ Reizfreier Hautschutz**

Cavilon Reizfreier Hautschutz darf bei folgenden Indikationen NICHT eingesetzt werden:

- Als alleinige Wundabdeckung bei bakterieller Kontamination/ Eindringen von Bakterien, z. B. Kathetereinstichstellen für intravenöse Therapien und für tiefe oder weniger tiefe Wunden
- Infizierte Hautpartien

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem 3M Medizinprodukteberater oder auf 3M.com.

Literatur

1. Cheatham ML, Demetriades D, Fabian TC, et al. Prospective study examining clinical outcomes associated with a negative pressure wound Therapy System and Barker's vacuum packing technique. *World J Surg.* 2013;37:2018-2030.
2. Frazee RC, Abernathy SW, Jupiter DC, et al. Are commercial negative pressure systems worth the cost in open abdomen management? *J Am Coll Surg.* 2013;216:730-733.
3. Atema JJ, Gans SL, Boermeester MA. Systematic review and meta-analysis of the open abdomen and temporary abdominal closure techniques in non-trauma patients. *World Journal of Surgery.* April 2015; 39(4):912-925.
4. Schmidt M, Hall C, Mercer D, Kieswetter K. Novel Foam Design Actively Draws Wound Edges Together Under Negative Pressure: Benchtop and Pre-clinical Assessment. Präsentiert bei: Society of Advanced Wound Care / Wound Healing Society; 3. November 2018; Las Vegas, Nevada.
5. Brennan, Mary R.; Milne, Catherine T.; Agrell-Kann, Marie; Ekholm, Bruce P. Clinical Evaluation of a Skin Protectant for the Management of Incontinence Associated Dermatitis: An Open-Label, Nonrandomized, Prospective Study. *J of Wound, Ostomy & Continence Nursing.* 2017. 44(2):172–180.
6. 3M. Study to Assess the Durability of Film-Forming Barriers using the Activated Carbon Retention Method. 2017. EM-05-01 3924.
7. Arrowsmith M, Schuren J, Laboratory Studies and general characteristics of Cavilon™ Skin Care Products. 3M Germany Laboratory, 2005. Neuss, Deutschland.
8. Zehrer C., Newman D., Grove G. Assessment of Diaper - Clogging Potential of Petrolatum Moisture Barriers. *Ostomy Wound Management*;2005.51(12):54-58.
9. Issberner K., Schuren J., A Comparative study of the Skin Protectant performance of five Barrier Films. 3M Germany Laboratory, 2004. Neuss, Deutschland.
10. 3M. Modified Human Cumulative Irritation Patch Test (HCIPT) with 3M™ Cavilon™ No Sting Barrier Film Applied over Various Skin Preps. 2009. EM-05-011230.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Weitere Informationen zu unseren Produkten, zur landesspezifischen Verfügbarkeit sowie zu landesspezifischen Bestellangaben erhalten Sie von Ihrem Medizinprodukteberater.

Hinweis: Einige Produkte aus diesem Katalog sind möglicherweise nicht in allen Ländern erhältlich. Die Artikelnummer kann je nach Land unterschiedlich sein. Ihr Medizinprodukteberater erteilt Auskunft zur Artikelnummer für Ihr Land.

HINWEIS: Für die hier genannten Produkte und Therapien liegen spezifische Indikationen, Kontraindikationen, Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsinformationen vor. Bitte kontaktieren Sie vor der Anwendung medizinisches Fachpersonal und lesen Sie die Bedienungsanleitung zum Produkt. Die vorliegenden Materialien richten sich an medizinisches Fachpersonal.

© 2021 3M. Alle Rechte vorbehalten. 3M und andere gezeigte Marken sind Marken und/oder eingetragene Markenzeichen. Die unberechtigte Verwendung ist untersagt. PRA-PM-DE-00241 (01/21)