


# Beschermers van sterilisatiezekerheid

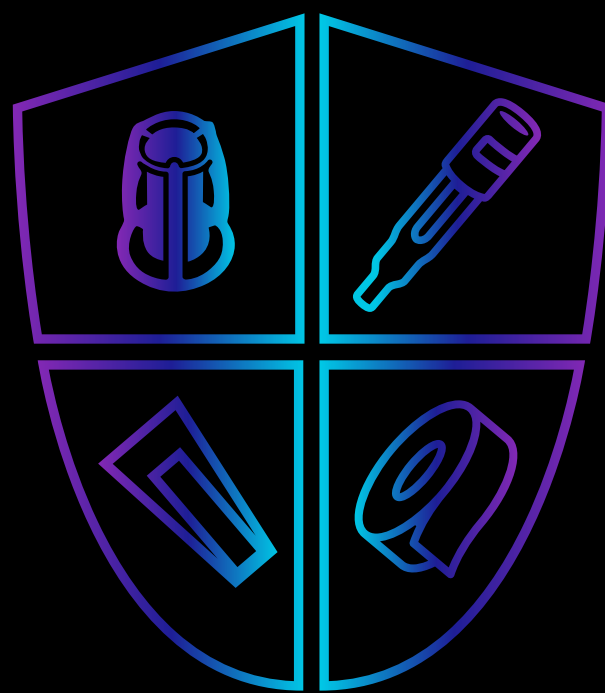

3M™ Sterilisatieoplossingen

## All 4 one and one 4 all

De vier beschermers van de sterilisatiezekerheid komen samen voor één doel: **voor het beschermen van uw patiënten.**

Door alle vier de niveaus van sterilisatiecontrole te gebruiken, kunt u erop vertrouwen dat uw beschermerschild tegen fouten in elke fase van uw sterilisatieproces aanwezig is.

Verwaarlozing van een van deze elementen kan uw verdediging aantasten.

### De vier elementen van bescherming zijn:

#### Apparatuurcontrole

Apparatuurcontrole betekent regelmatig controleren of uw sterilisator goed werkt. Dit kan gebeuren met een Bowie-Dick-test, die restlucht in de sterilisatorkamer detecteert, of met het Elektronisch Teststelsel (ETS), dat temperatuur, druk en tijd meet en registreert en een bepalend resultaat biedt.

#### Ladingscontrole

Ladingscontrole is het proces waarbij de afzonderlijke lading wordt gemonitord en vrijgegeven. De meest gebruikte methode, biologische indicatoren, helpt potentiële sterilisatiefouten op te sporen binnen enkele minuten nadat ze uit de kamer zijn gehaald. Een negatief resultaat geeft de zekerheid dat de sterilisatievoorwaarden werden bereikt. 3M™ Attest™ Supersnelle indicatoren geven snel en betrouwbare resultaten voor een consistente bewaking.

#### Interne verpakingscontrole

Interne verpakingsbewaking is een cruciale stap in elk stoomsterilisatieproces of elke sterilisatie bij lage temperatuur. Chemische indicatoren (CI's) geven informatie over de blootstellingsomstandigheden binnen een verpakking, bakje, container of beschermingszakje. 3M™ Attest™ Chemische integrators bieden een onmiddellijk, nauwkeurig en gemakkelijk af te lezen resultaat van de binnenkant van elke verpakking en geven het OK-team de zekerheid dat de inhoud van de verpakking op de juiste wijze is blootgesteld aan de sterilisatieomstandigheden.

#### Externe verpakingscontrole

Voor een effectieve externe verpakingscontrole hebt u een blootstellingsmonitor nodig die de verpakkingen veilig afsluit en een visuele garantie biedt dat de verpakking aan het sterilisatieproces is blootgesteld. 3M™ Comply™ Indicator tapes sluiten de verpakkingen goed af en stellen het CSSD- en OK-personeel in staat om in één oogopslag te zien dat de verpakkingen aan het sterilisatieproces zijn blootgesteld.

Uw systeem is ten slotte zo goed als de zwakste schakel. Deze vier beschermeslementen vormen samen de best mogelijke bescherming - een inefficiënte of ontbrekende oplossing voor een van deze elementen kan het schild doorbreken en u kwetsbaar maken.

**Vertrouw op uw bewakers om elke dag elke lading, elke verpakking, elke patiënt te beschermen.**

### Praat met een expert van 3M

Ga voor meer informatie of om uw wensen verder te bespreken naar [3M.co.uk/sterilization](http://3M.co.uk/sterilization). U kunt uw gegevens bij ons achterlaten en een 3M-expert zal zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.