


# Guardianes de la garantía de esterilización

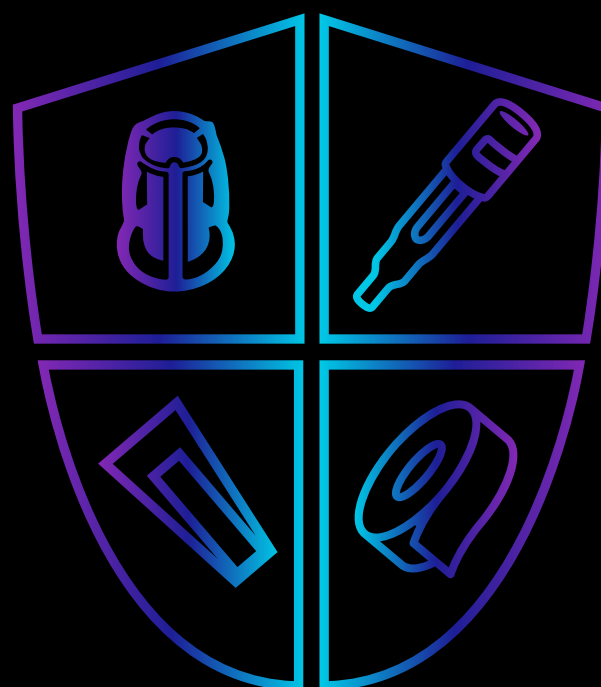

3M™ Soluciones para la esterilización

## Todos para uno y uno para todos

Los cuatro guardianes de la esterilización se han unido con un objetivo: **proteger a sus pacientes.**

Al utilizar los cuatro niveles de control de la esterilización, puede estar seguro de que cuenta con un escudo protector contra los fallos en todas las etapas del proceso de esterilización.

Descuidar cualquiera de estos elementos puede reducir sus defensas.

### Los cuatro elementos del escudo son:

#### Control del equipo

La monitorización de los equipos significa comprobar de forma regular si su esterilizador funciona correctamente. Esto puede realizarse mediante una prueba de Bowie-Dick, que detecta el aire residual en la cámara del esterilizador, o el sistema de prueba electrónico (ETS), que mide y registra la temperatura, la presión y el tiempo y proporciona un resultado decisivo.

#### Control de la carga

La monitorización de la carga es el proceso mediante el cual se monitoriza y autoriza una carga individual. Es el método más habitual, los indicadores biológicos ayudan a detectar fallos potenciales de la esterilización en minutos tras ser recuperados de la cámara. Un resultado negativo garantiza que se han alcanzado las condiciones de esterilización. Los indicadores superrápidos 3M™ Attest™ proporcionan resultados rápidos y fiables para realizar una monitorización continua.

#### Control interno de paquete

La monitorización interna de los paquetes es un paso crucial de cualquier proceso de esterilización con vapor o a baja temperatura. Los indicadores químicos (IQ) proporcionan información sobre las condiciones de exposición alcanzadas dentro de un paquete, bandeja, envase o bolsa. Los integradores químicos 3M™ Attest™ son un método inmediato, preciso y de fácil lectura para supervisar las condiciones del proceso de esterilización dentro de cada paquete y garantizan al equipo de quirófano que el contenido del paquete se ha expuesto correctamente a las condiciones de esterilización.

#### Control externo de los paquetes

Para conseguir un control externo eficaz de los paquetes, es necesario contar con una supervisión de la exposición que selle el paquete perfectamente y que ofrezca una garantía visual de que el paquete ha estado expuesto al proceso de esterilización. Las cintas adhesivas indicadoras 3M™ Comply™ sellan los paquetes con seguridad y permiten al personal encargado de la esterilización y de quirófano saber a simple vista qué paquetes se han expuesto al proceso de esterilización.

Su sistema será tan fuerte como lo sea su eslabón más débil. Estos cuatro elementos guardianes se combinan para ofrecerle la mejor protección posible, una solución ineficaz o inexistente en cualquiera de ellos puede quebrar el escudo y hacerlo vulnerable.

**Confíe en sus guardianes para proteger todos los días, todas las cargas, todos los paquetes y a todos los pacientes.**

### Hable con un experto de 3M

Si desea más información o comentar sus requisitos, visite [3M.co.uk/sterilization](http://3M.co.uk/sterilization) donde puede dejar sus datos de contacto y un experto de 3M se pondrá en contacto con usted lo antes posible.