

Express™ Materiales de Impresión La Mejor Opción en Sistemas de Impresión Masilla/Ligero



Comentarios de los expertos

- “La masilla es excelente, fácil de mezclar, ¡me encanta!”.
- “Excelente sistema. El material de viscosidad baja se mantiene en su lugar sin escurrir, no obstante fluye fácilmente dentro del surco gingival, resultando en excelentes impresiones”.
- “Excelente humectabilidad”.
- “Un buen sistema para pacientes con un fuerte reflejo faucial (del vómito), la masilla se mantiene en su lugar”.

Express le ofrece la confiabilidad comprobada por millones de impresiones tomadas alrededor del mundo

Resultados precisos y confiables

- Su excelente resistencia al desgarre ofrece una mejor integridad de los márgenes.
- Alto índice de recuperación elástica para impresiones libres de distorsiones.
- Su elevada estabilidad dimensional brinda flexibilidad para el vaciado de las impresiones.
- Excelente tolerancia a la humedad que acentúa la reproducción de detalles.


Fácil de usar

- Flexibilidad en la técnica de impresión – técnica de dos pasos o técnica simultánea de masilla/ligero.
- Express masilla se mezcla fácilmente y la mezcla es homogénea.
- Material ligero tixotrópico, fluye libremente sin escurrirse.

¡Ahora, mejor que nunca!

- Nuevo dispensador Garant, para un mezclado más rápido y fácil.
- El cartucho con puerto dual minimiza los riesgos de contaminación cruzada y de obstrucción de los cartuchos.
- Cartuchos, tapas y puntas mezcladoras codificadas por colores para facilitar su identificación.
- Nuevas puntas intraorales delgadas que permiten un acceso más preciso y una aplicación más controlada del material ligero.
- El Dispensador Garant funciona con todos los Materiales de Impresión de VPS de 3M ESPE.

El cartucho con puerto dual minimiza el riesgo de contaminación cruzada y de obstrucción de la salida del producto.

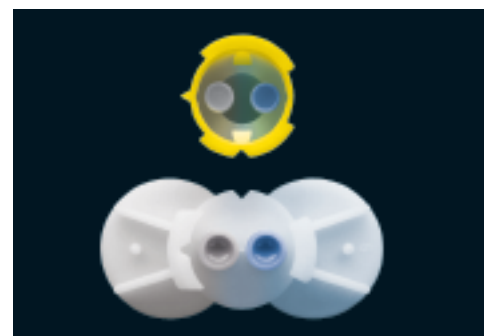

Express™ Materiales de Impresión

La Mejor Opción en Sistemas de Impresión

Masilla/Ligero



Elija el material que mejor se adapte a su técnica:

| | | |
|--|---|--|
| Polimerización Rápida – Viscosidad Ligera Técnica de Dos Pasos | Aplicación en boca con jeringa ≤ 60 seg. | Tiempo de polimerización en boca 3.5 min. |
| | | 4 min. |
| Polimerización Normal – Viscosidad Ligera Técnica Simultánea | Aplicación en boca con jeringa ≤ 60 seg. | Tiempo de polimerización en boca 5.0 min. |
| | | 6 min. |
| Polimerización Normal – Viscosidad Media Técnica Simultánea | Aplicación en boca con jeringa ≤ 60 seg. | Tiempo de polimerización en boca 5.0 min. |
| | | 6 min. |
| Masilla: Técnica Simultánea o de Dos Pasos | Aplicación en boca con jeringa ≤ 60 seg. | Tiempo de polimerización en boca 5.0 min. |
| | | 6 min. |

Información para pedidos

| | Número de Catálogo | Información del Producto | |
|--|--------------------|---|--|
| | 7300 H | Kit Introductorio · 2 x Tarros de Masilla a 305 ml. (550 g) · 2 x Cartuchos LB Polimerización Normal de 50 ml. · 1 x Dispensador Garant · 10 x Puntas mezcladoras Garant (amarillas) | · 10 x Puntas intraorales Garant (amarillas) · 1 x Adhesivo de VPS para Portaimpresiones · 2 x Cucharas para Masilla |
| | 7301 | Consistencia Ligera, Polimerización Rápida, Repuesto (Azul) · 2 x Cartuchos de 50 ml. · 10 x Puntas mezcladoras Garant | |
| | 7302/7322 | Consistencia Ligera, Polimerización Normal, Repuesto (Verde) · 2 x 50 ml. Cartuchos · 10 x Puntas mezcladoras Garant | Consistencia Media, Polimerización Normal, Repuesto (Morado) · 2 x Cartuchos de 50 ml. · 10 x Puntas mezcladoras Garant |
| | 7312 | Masilla, Repuesto · 2 x Tarros de Masilla, Polimerización Normal, de 305 ml./550 gr cada uno | |
| | 6160J | Masilla para Registro de Mordida, Repuesto · 2 x Tarros de Masilla, polimerización rápida, de 305 ml./550 gr. cada uno | |
| | 77580 | Dispensador Garant · 1 x Dispensador Garant | |
| | 71452 | Puntas mezcladoras · 50 x Puntas mezcladoras (amarillas) | 71462 Puntas intraorales · 50 x puntas intraorales (amarillas) |
| | 7307 | Adhesivo de VPS para Portaimpresiones/Cucharillas · 1 x Adhesivo para Portaimpresiones de 17 ml. | |