

3M™ ESPE™ Filtek™ Bulk Fill fließfähiges Komposit

# Ein Bulk Fill, das den Namen Filtek™ verdient.



## Vorteile:

- Hervorragend als Unterfüllung mit geringem Schrumpfstress
- Bis zu 4 mm Inkrementstärke
- Geringerer Schrumpfstress als höher gefüllte modellierbare Komposite<sup>2</sup>
- Hervorragende Abrasionsbeständigkeit
- Flow-on-Demand Verhalten
- Gleichmäßige Kavitätenadaption
- Hohe Röntgenopazität
- Erhältlich in 4 Farben

Eine schnelle, einfache aber vor allem verlässliche Anwendung ist im Praxisalltag von großer Bedeutung.

## Hervorragend als Unterfüllung.

Fließfähige Komposite passen sich an die Gegebenheiten in der Kavität an, verringern die Gefahr Luftblasen einzubringen, bewirken eine gute Randdichtigkeit und reduzieren das Risiko von postoperativen Sensitivitäten. Aus diesen Gründen bevorzugen 75 % aller befragten Zahnärzte<sup>1</sup> ein fließfähiges Kompositmaterial als Unterfüllung.

## Hervorragend als Bulk-Fill bei tiefen Kavitäten.

Die Formulierung von Filtek Bulk Fill fließfähiges Komposit stellt niedrigen Schrumpfstress bei erhöhter Aushärtetiefe sicher. Aus diesem Grund kann es in Inkrementstärken von bis zu 4 mm verarbeitet werden.



Gleichmäßige  
Kavitätenadaption



Bis zu 4 mm  
Inkrementstärke für  
kleine und große  
Unterfüllungen




# Weitere gute Argumente für Filtek™ Bulk Fill fließfähiges Komposit:



Exzellente Handhabung.



Höhere Druckfestigkeit als andere führende Bulk Fill Materialien.<sup>3</sup>

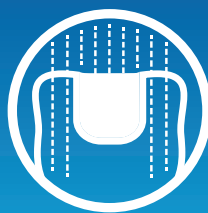

Hohe Röntgenopazität im Vergleich zu anderen fließfähigen Kompositen.<sup>4</sup>



Geringerer Schrumpfungsstress als höher gefüllte modellierbare Komposite.<sup>2</sup>

3. Quelle: 3M interne Daten. Daten auf Anfrage bei 3M erhältlich. Kontaktinformationen siehe unten.

4. Quelle: 3M interne Daten. Daten auf Anfrage bei 3M erhältlich. Kontaktinformationen siehe unten. Im Vergleich zu Surefill SDR Flow.

## Seitenzahnfüllung leicht gemacht.



Zahn vorbereiten und ein Adhäsiv, z. B. 3M™ ESPE™ Scotchbond™ Universal, applizieren.



Bis zu 4 mm Filtek™ Bulk Fill fließfähiges Komposit in die präparierte Kavität einbringen und lichthärten, z. B. mit einem 3M™ ESPE™ Elipar™ LED Polymerisationsgerät.



Eine 2 mm dicke Deckschicht eines ästhetischen Composites, z. B. Filtek™ Universal Composite, auftragen und lichthärten.

Die klinischen Fotos mit freundlicher Genehmigung von Dr. G. Reich.

## Bestellinformationen



Filtek™ Bulk Fill fließfähiges Komposit Refill Spritzen



Filtek™ Bulk Fill fließfähiges Komposit Refill Kapseln

### Filtek™ Bulk Fill fließfähiges Komposit – Refills

| Farben    | Spritzen                                      | Kapseln |
|-----------|-----------------------------------------------|---------|
| A1        | 4862A1                                        | 4861A1  |
| A2        | 4862A2                                        | 4861A2  |
| A3        | 4862A3                                        | 4861A3  |
| Universal | 4862U                                         | 4861U   |
| Art.-Nr.  | Produktinformationen                          |         |
| 3740T     | Applikationskanülen<br>20 Applikationskanülen |         |

**Refill Spritzen** 2 Spritzen à 2 g, 20 Applikationskanülen, Technische Anleitung, Gebrauchsanleitungen.

**Refill Kapseln** 15 Kapseln à 0,2 g, Technische Anleitung, Gebrauchsanleitungen.



**3M Deutschland GmbH**  
ESPE Platz · 82229 Seefeld  
FreeCall: 0800-275 3773  
FreeFax: 0800-329 3773  
info3mespe@mmm.com  
www.3MESPE.de

**3M (Schweiz) GmbH**  
3M ESPE Dental Products  
Eggstr. 93 · CH-8803 Rüschlikon  
Telefon: (044) 724 93 31  
Telefax: (044) 724 92 38  
3mespech@mmm.com  
www.3MESPE.ch

**3M Österreich GmbH**  
Kranichberggasse 4  
A-1120 Wien  
Telefon: (01) 86 686 434  
Telefax: (01) 86 686 330  
dental-at@mmm.com  
www.3MESPE.at

[www.3MESPE.de/FiltekBulkFill](http://www.3MESPE.de/FiltekBulkFill)