

Aftryksløsninger

Pentamix™ Lite

Automatisk blandemaskine



En god start
på et perfekt aftryk

3M ESPE

Gør arbejdsprocessen nemmere: Automatisk blanding af aftryksmaterialer

Udviklingen indenfor aftryksprocessen fortsætter

20
ÅR MED
PENTAMIX

Siden introduktionen af de første aftryksmaterialer for årtier siden, har 3M ESPE konstant forbedret og udvidet produktsortimentet indenfor aftryksmaterialer.

I dag har vi flere forskellige A-silikone og polyæter aftryksmaterialer, blandemaskiner og aftrykstilbehør. Med andre ord har 3M ESPE en aftryksløsning, der i enhver klinisk situation passer til din teknik eller fremgangsmåde, og samtidig sikrer perfekt præcision og detaljegengivelse.

Pentamix™ Lite - den nyeste model indenfor automatiske blandemaskiner

Med det unikke drejelige design er Pentamix™ Lite lidt af et vidunder:

Den opretstående standby position kræver et minimum af plads, og den kan derfor nemt gemmes væk.

Når blandemaskinen skal bruges, drejes den nemt i arbejdsposition.

Takket være den lave vægt (6,7 kg) og det ergonomiske håndtag er Pentamix Lite nem at flytte fra et klinikrum til et andet - hvis det er nødvendigt.

HOMOGEN BLANDING UDEN LUFTBLÆRER giver ensartet kvalitet

HURTIG, TIDSBESPARENDE arbejdsgang

ØKONOMISK OG PRÆCIS DOSERING af materialet. Systemet doserer kun det materiale, der skal anvendes, dvs. minimalt spild


HYGIEJNISK OG RENLIGT. Ske og sprøjte fyldes direkte fra maskinen

MERE EFFEKTIV OG FLYDENDE ARBEJDSGANG giver højere produktivitet

Sæt ledningen i stikket, drej maskinen og start dosering


KOMPAKT design

Opretstående standby position
kræver et minimum af plads.

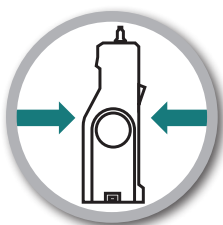


NEM at klargøre

Nem og intuitiv opstart -
drejes hurtigt i arbejdsposition.

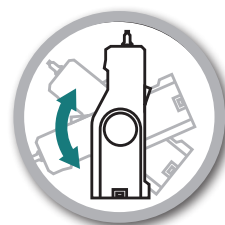


HYGIEJNISK dosering

Tryk på den grønne startknap og start
med at fylde skeen eller sprøjten
direkte fra maskinen.

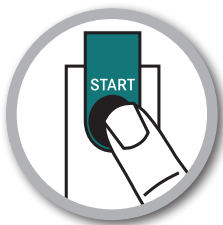

FLYTBART design

Lav vægt og ergonomisk håndtag gør
det nemt at flytte maskinen fra et
klinikum til et andet.

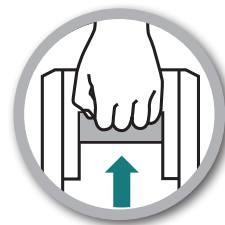

Sæt Penta™ folieposerne med det ønskede 3M ESPE aftryksmateriale i materialebeholderen. Beholderen placeres i Pentamix™ Lite blandemaskinen og en rød Penta™ blandespids sættes på. Blanding og dosering startes ved at trykke på den grønne knap, og ske eller sprøjte fyldes direkte med homogent blandet aftryksmateriale.

START!

Få fuld kontrol over din aftrykstaging

... med Pentamix™ Lite og 3M ESPE aftryksmaterialer.



Imprint™ 4 A-silikone aftryksmaterialer

Utrolig hurtig* A-silikone takket være aktiv selvopvarmning.

Den innovative teknologi giver en mærkbar tidsbesparende aftryksproces – en fordel både for dig og dine patienter.

- **Utrolig kort intraoral afbindingstid** sparer tid
- **Tilstrækkelig arbejdstid** giver en stressfri arbejdsproces
- **Superhydrofile egenskaber** allerede i uafunden tilstand giver gode flydeegenskaber og utrolig god detaljereproduktion

Impregum™ polyæteraftryksmaterialer

Ideelt aftryksmateriale til implantataftryk

og udfordrende cases. Med Impregum aftryksmaterialer opnås en utrolig god detaljereproduktion og dermed optimal præcision og perfekte restaureringer.

- **Præcise aftryk uden luftblærer** som følge af den initiale hydrofile egenskab på fugtige overflader
- **Utrolig god detaljereproduktion** takket være særdeles gode flydeegenskaber
- **Ensartet flydeevne under hele arbejdstiden og mindre risiko for deformationer** på grund af en unik "Snap-Set" afbinding

IMPRINT™ 4

Vores anbefaling til aftryk til kroner, broer, indlæg og onlay, samt ortodontiske aftryk.

IMPREGUM™

Vores anbefaling til aftryk til kroner, broer, indlæg og onlay. Specielt velegnet til implantataftryk og udfordrende cases.

*Imprint™ 4 har den korteste intraorale afbindingstid på markedet.

PENTAMIX™ LITE



NEM KRAFTFULD
LILLE BLANDEMASKINE

Pentamix™ familien – dit sikre valg

Pentamix™ 3 maskinen doserer meget hurtigt og er vores topmodel.



Pentamix™ Lite maskinen doserer lidt langsommere, men vejer mindre og er nemmere at flytte rundt med.



Bestillingsinformation

Varenr.	Beskrivelse
PENTAMIX™ LITE BLANDEMASKINE OG TILBEHØR	
77903	Pentamix™ Lite blandemaskine inkl. 1 stk. Penta™ materialebeholder til Pentamix™ Lite
77944	1 stk. Penta™ materialebeholder til Pentamix™ Lite
77949	50 stk. røde Penta™ blandespidser
71210	1 stk. Penta™ Elastomer sprøjte 1 stk. sprøjte, 4 stk. sprøjtespidser, 4 stk. cylindere, 1 stk. børste
IMPRINT™ 4 REFILLER – SKE- OG SPRØJTEMATERIALER	
71486	Imprint™ 4 Penta™ Putty (skemateriale) 2 stk. 300 ml base, 2 stk. 60 ml katalysator
71484	Imprint™ 4 Penta™ Heavy (skemateriale) 2 stk. 300 ml base, 2 stk. 60 ml katalysator
71485	Imprint™ 4 Penta™ Super Quick Heavy (skemateriale) 2 stk. 300 ml base, 2 stk. 60 ml katalysator
71491	Imprint™ 4 Super Quick Ultra-Light (sprøjtemateriale) 4 stk. Imprint™ 4 Super Quick Ultra-Light magasiner a 50 ml, 5 stk. gule Garant™ blandespidser, 5 stk. grønne 3M™ ESPE™ intraorale blandesprøjter
71488	Imprint™ 4 Light (sprøjtemateriale) 4 stk. Imprint™ 4 Light magasiner a 50 ml, 5 stk. gule Garant™ blandespidser, 5 stk. grønne 3M™ ESPE™ intraorale blandesprøjter
71490	Imprint™ 4 Super Quick Light (sprøjtemateriale) 4 stk. Imprint™ 4 Super Quick Light magasiner a 50 ml, 5 stk. gule Garant™ blandespidser, 5 stk. grønne 3M™ ESPE™ intraorale blandesprøjter

Varenr.	Beskrivelse
71487	Imprint™ 4 Regular (sprøjtemateriale) 4 stk. Imprint™ 4 Regular magasiner a 50 ml 5 stk. gule Garant™ blandespidser, 5 stk. grønne 3M™ ESPE™ intraorale blandesprøjter
71489	Imprint™ 4 Super Quick Regular (sprøjtemateriale) 4 stk. Imprint™ 4 Super Quick Regular magasiner a 50 ml, 5 stk. gule Garant™ blandespidser, 5 stk. grønne 3M™ ESPE™ intraorale blandesprøjter
IMPREGUM™ REFILLER – SKE- OG SPRØJTEMATERIALER	
31644	Impregum™ Penta™ (skemateriale) 2 stk. 300 ml base, 2 stk. 60 ml katalysator
31730	Impregum™ Penta™ Soft (skemateriale) 2 stk. 300 ml base, 2 stk. 60 ml katalysator
31764	Impregum™ Penta™ Soft Quick (skemateriale) 2 stk. 300 ml base, 2 stk. 60 ml katalysator
31740	Impregum™ Penta™ H DuoSoft™ (skemateriale) 2 stk. 300 ml base, 2 stk. 60 ml katalysator
31768	Impregum™ Penta™ H DuoSoft™ Quick (skemateriale) 2 stk. 300 ml base, 2 stk. 60 ml katalysator
31745	Impregum™ Penta™ L DuoSoft™ (sprøjtemateriale) 1 stk. 300 ml base, 1 stk. 60 ml katalysator
31751	Impregum™ L DuoSoft™ (sprøjtemateriale) 4 stk. Garant™ magasiner a 50 ml, 20 stk. hvide Garant™ blandespidser
31766	Impregum™ L DuoSoft™ Quick (sprøjtemateriale) 4 stk. Garant™ magasiner a 50 ml, 20 stk. hvide Garant™ blandespidser



3M ESPE

3M ESPE Dentalprodukter
3M a/s
Hannemanns Allé 53
2300 København S
Tel: 43 48 01 00
Fax: 43 20 15 65
e-mail: dkdental@mmm.com
www.3MESPE.dk

3M, ESPE, DuoSoft, Garant, Impregum, Imprint, Penta og Pentamix er varemærker hos 3M Company eller 3M Deutschland GmbH. Anvendes under licens i Canada.

Alle andre varemærker ejes af andre firmaer

© 2013, 3M. Alle rettigheder forbeholdes.

R61/000199-1