

Sementin valintaopas



Jokaiseen indikaatioon –
ideaali sementti

3M ESPE

RelyX™ Ultimate

Sidostettava
muovisementti



- Erittäin korkeat sidoslujuuDET
- Vain kaksi komponenttia-materiaalia on helppo ja nopea käyttää
- Tuotetta voi käyttää itse-etsaavasti tai etsaushapon kanssa
- Luonnollisen esteettinen fluoresenssin ansiosta



Erittäin korkeat sidoslujuuDET yhdistettynä yksinkertaiseen työskentelymenetelmään

Vain kaksi
komponenttia

RelyX™ Ultimate



Scotchbond™
Universal
Sidosaine

=2

Multilink® Automix




=4

Panavia™ F 2.0



=6

Variolink® II
Syntacin kanssa

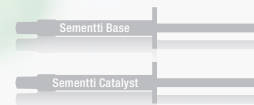

=6

NX3 OptiBondin kanssa®
Solo Plus™/All-In-One



tai

=3

CAD/CAM-TÖIDEN SEMENTOINTIIN

*“Komponenttien vähäinen määrä tekee sementistä
turvallisen, nopean ja helpon käyttää”*


Dr. M. Buff, Saksa

RelyX™ Unicem

RelyX™ Unicem 2

Itsekiinnittyvä muovisementti

- Kliinisesti luotettavin itsekiinnittyvä muovisementti
- Yksivaiheinen ja tehokas ratkaisu- ei erillistä etsausta, esikäsitteilyä tai sidostamista
- Jälkisenäitiivisyyttä esiintyy erittäin harvoin
- Erinomainen kemiallinen ja fysikaalinen stabilisuus
- Endo-kärjet tekevät juurikanavanastojen sementoinnista helppoa ja nopeaa

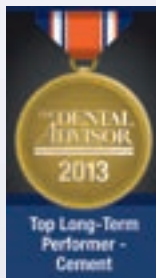

YLEISSEMENTTI

“Markkinoiden paras sementti”

Dr. A. Ungermann, Saksa



Varma ja vakaa sementti
mikä takaa nopean,
helpon ja luotettavan
sementoinnin

RelyX™ Fiber Post

Lasikuituvahvisteiset
juurikanavanastat

- RelyX™ nastojen elastisuus muistuttaa enemmän ihmisen omaa dentiiniä kuin metalli- ja keraamisten nastojen elastisuus. Siksi kiilautumisesta aiheutuvat juurikanavamurtumat ovat epätodennäköisiä
- Erinomainen väsymiskestävyys verrattuna kilpaileviin nastoihin
- Johtaa hyvin valoa, parannettu röntgenkontrasti
- RelyX™ Unicem sementtiä käytettäessä ei tarvita etsausta, esikäsitteilyä tai sidostamista

Ketac™ Cem Plus

Muovivahvisteinen
lasi-ionomeerisementti



- Ylimäärien kovetus valolla helpottaa niiden poistamista
- Helppo annostelu automix-ruiskusta
- Pitkäaikainen fluoridin vapautus
- Jälkisensitiivisyyttä esiintyy erittäin harvoin



METALLIKRUUNUJEN SEMENTOINTIIN

“Paras tuote, jota olen käyttänyt teräskruunuihin”

Dr. G. Psaltis, Seattle, U.S.A.



Toimii luotettavasti
ja vapauttaa fluoridia



Ketac™ Cem

Lasi-ionomeerisementti

- Ei esikäsittelyvaiheita
- Hyvä bio-yhteensopivuus
- Korkea fluoridin vapautus
- Hyvä saumatiiveys

RelyX™ Veneer

Laminaattien kiinnityssementti

- Käyttäjäturvallinen annostelu- ja värinvalintajärjestelmä.
- Erinomainen värin säilyvyys suun oloissa
- Väreihin sopivat kokeilupastat
- Valokovetteinen
- Helppo käsitellä ja poistaa ylimäärät

LAMINAATTIEN SEMENTTOINTIIN

“RelyX™ Veneer on auttanut minua saamaan hyviä lopputuloksia kiireisellä, esteettiseen hoitoon erikoistuneella vastaanotollani”

Jeff T. Blank, DMD, PA, U.S.A.

Valokovetteista estetiikkaa



RelyX™ Temp NE/E

Väliaikainen sementti

- Luotettava väliaikainen kiinnitys
- Nopea ja helppo ylimäärien poisto
- Väliaikainen työ on helppo poistaa
- Saatavilla eugenolipohjisena (RelyX™ Temp E) tai eugenolittomana (RelyX™ Temp NE)

VÄLIAIKAINEN SEMENTTI

Kiinnittyy luotettavasti
ja on helppo poistaa



JOKAISEEN INDIKAATIOON IDEAALI SEMENTTI

	RelyX™ Ultimate Sidostettava muovisementti	RelyX™ Unicem RelyX™ Unicem 2 Itsekiinnittyvä muovisementti	Ketac™ Cem Plus Muovivahvisteinen lasi-ionomeerisementti	RelyX™ Veneer Laminaattisementti
Metalli / Metallipohjainen				
Inlayt/Onlayt	+	++	+	-
Kruunut / Sillat	+	++	++	-
Juurikanavanastat	+	++	++	-
Kevytsillat	++	+	-	-
Sementointi implanttijatkeiden päälle	+	++	++	-
Lasikeramia (myös Li. disilikaatti) (esim. eMax CAD, Empress, Mark II)				
Inlayt/Onlayt	++	+	-	-
Kruunut / Sillat	++	++	-	-
Kevytsillat	++	+	-	-
Laminaatit	+	-	-	++
Oksidi-keramia (esim. Lava™ Zirconia, Brux Zir)				
Kruunut / Sillat	+	++	+	-
Juurikanavanastat	+	++	+	-
Kevytsillat	++	+	-	-
Sementointi implanttijatkeiden päälle	+	++	++	-
Nanokeraminen komposiitti (e.g. Lava™ Ultimate CAD/CAM -täyttemateriaali)				
Inlayt/Onlayt	++	-	-	-
Kruunut	++	-	-	-
Laminaatit	+	-	-	++
Yhdistelmämuovit				
Inlayt/Onlayt	++	+	-	-
Kruunut	++	++	-	-
Juurikanavanastat	+	++	-	-
Laminaatit	+	-	-	++

++

 Paras valinta*

+

 Suositus

-

 Ei indikoitu

* Parempi sidosluku kyseiseen indikaatioon tai vähemmän työvaiheita ja yhtä hyvä sidosluku





3M ESPE

Hammashoitotuotteet
Keilaranta 6, PL 600
02151 Espoo
puh. 09 52521
www.3MESPE.fi

3M, ESPE, Ketac, Lava, RelyX ja
Scotchbond ovat 3M:n tai 3M Espe
AG:n rekisteröimiä tavaramerkkejä

© 3M 2013
Kaikki oikeudet pidätetään.